

# — 心椅

Uni - Chair

產品使用說明書

MAX-77A155BR



  
maxcare®



## 企業介紹

**maxcare** 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了**maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

**maxcare** 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

**maxcare** 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

# — 心椅

## Uni - Chair


感謝您選購MAXCARE產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

### 目錄

---

安全注意事項 .....	P.01 - P.02
機件名稱及功能 .....	P.03 - P.04
使用方法 .....	P.05 - P.09
產品的清潔、保養 .....	P.10
常見問題及處理方法 .....	P.11
產品技術參數 .....	P.12

 安全注意事項

## 1. 重要安全警告

- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此產品。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再開始使用。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此產品散熱孔時使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。




## 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。



## 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患者者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。

 安全注意事項

## 4. 安全事項

- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果產品損壞，為了避免危險，必須由本公司的專業人員更換。



## 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。




## 6. 常見現象處理


- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

 警告


椅子較輕，嚴禁兒童攀爬或踩跳等高危動作，否則會導致產品側翻摔倒風險，以避免造成產品損壞或人身傷害。

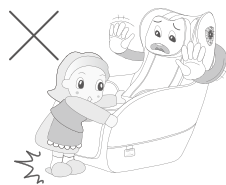

機件名稱及功能

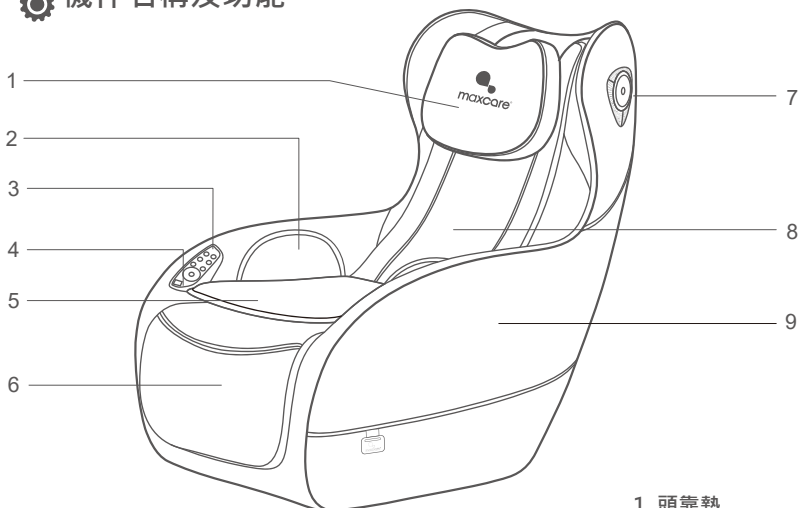

1. 頭靠墊
2. 臀部氣囊
3. 控制面板
4. USB充電插孔
5. 座墊
6. 前檔封板
7. 藍牙音響
8. 靠背墊
9. 扶手

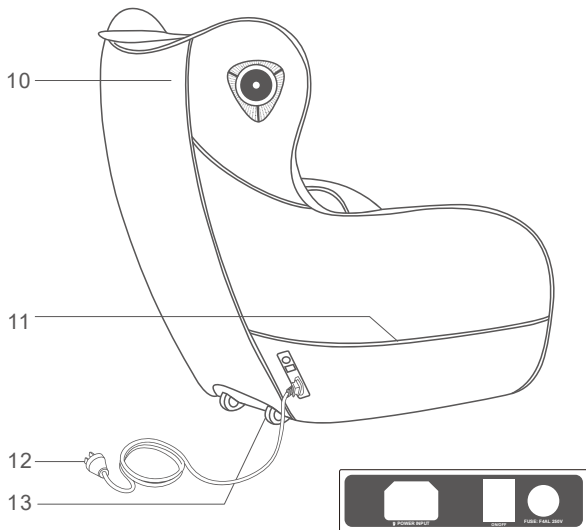

14 15 16




## 機件名稱及功能



### 功能特點：

- 本產品設計了兩組按摩機械手，一組專為頸部設置的一個按摩機械手，另一組能上下行走、四輪驅動、靜音設計的按摩機械手。
- 設定揉捏、敲擊、揉捏敲擊同步三種仿真按摩手法。
- 設有自動按摩功能：自動I、自動II、自動III和體驗四種自動模式。
- 設有可手動調節按摩機械手定位功能，根據自己需要按摩的部位進行定位按摩。手法有揉捏和敲擊三檔速度可調節。
- 獨立設有頸肩揉捏按摩：有雙向揉捏、單向揉捏兩種手法選擇；可手動調節整頸肩按摩機械手的位置。
- 設定氣壓按摩功能：對臀部進行氣壓按摩，三檔強度可選擇。
- 頸部熱療功能；採用碳纖維為遠紅外熱源。
- 設有USB手機充電接口。
- 可利用智能設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 音樂播放系統，按摩椅肩部位置左右各設一個3D音響。
- SL型超長曲線軌道貼合人體，從肩部至大腿都能享受貼身按摩。
- 關機後機械手自動復位功能。
- 臀部設有獨立附加坐墊，可減少臀部按摩的力度，可以根據用戶需要決定是否使用。如果不需要也可以拿掉附加坐墊。

⚙️ 使用方法

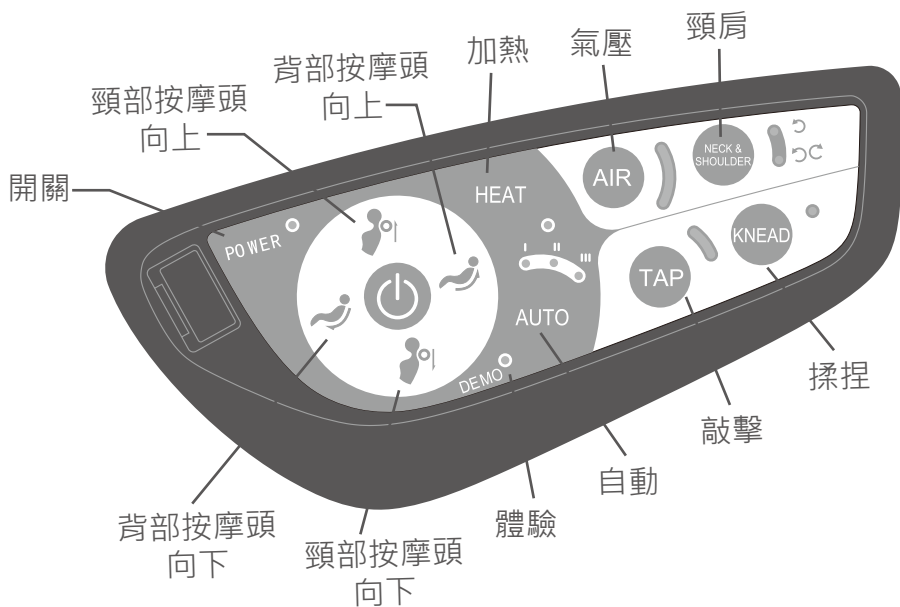

注：具體顯示以實物為準!



## 使用方式

### 一. 接通電源



接通方法示意圖



產品電源開關位置示意圖

### 二. 開始按摩

1. 按下開關鍵，啟動按摩。
2. 默認進入自動模式，也可選擇其它按摩模式，進行按摩。

#### A)、自動按摩：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
自動按摩		自動I：全身按摩，鬆弛酸痛部位	以按鍵燈為準
		自動II：以頸部、背部為重點進行按摩。	
		自動III：以腰部、臀部、大腿為重點進行按摩。	
		體驗：快速體驗按摩功能，時間定時為5分鐘。	

#### B)、背部按摩


名稱	按鍵	描述	顯示狀態
手法		按此鍵開啟或關閉揉捏功能。	以按鍵燈為準
		按此鍵開啟或關閉敲擊功能，速度分弱、中、強三檔可調節。	
按摩位置調整		機械手向上行走。	
		機械手向下行走。	

## 使用方式

### C)、頸肩按摩：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
手法		按此鍵開啟雙向揉捏、單向揉捏或關閉揉捏按摩。	以按鍵燈為準
頸肩加熱		按此鍵開啟或關閉加熱功能。	
按摩位置調整		頸肩部機械手向下行走。	
		頸肩部機械手向上行走。	

### D)、臀部氣壓按摩：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
氣壓		以臀部進行氣壓按摩，強中弱三檔強度可調整。	以按鍵燈為準

## 三、藍牙音響播放操作說明

- 1、進入智能設備主菜單，打開“設置”——選擇“藍牙”——選項——打開“藍牙”——藍牙自動”搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- 2、智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如IMCM—0066)，並詢問是否與該設備連接，選擇“是”或“確認”。
- 3、輸入配對密碼“0000或者1234”，然後“確認”即可完成配對。
- 4、打開智能設備的音響播放器，選擇歌曲進行播放。



每個產品的藍牙型號請以實際搜索到藍牙型號為準如“IMCM-0066、IMCM-0061、IMCM-0088等等”，每個產品的藍牙型號是唯一的。

## 四、關閉電源，結束按摩

- 1、在按摩過程中，按下紅色開關鍵，或按摩定時時間到，則立即關閉所有按摩功能，按摩機械手復位。
- 2、復位完成後，切斷整機電源。



· 整機電源開關位置示意圖




· 切斷方法示意圖

## ⚙️ 使用方法


### 五、附加坐墊的使用

使用附加坐墊，可減少臀部按摩的力度，可以根據您的需要決定是否使用，如果不需要，可以拆掉。

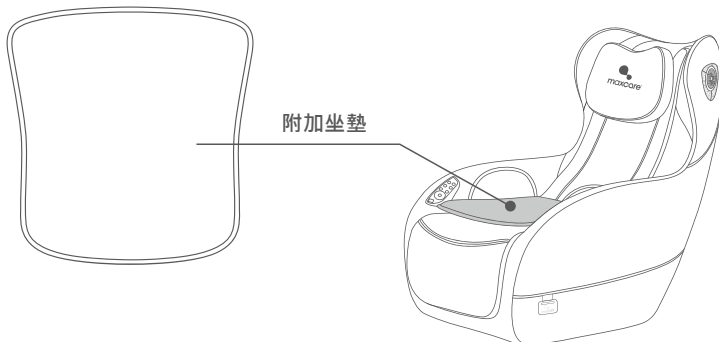

### 六、地板保護

由於經過按摩椅長時間的重壓，可能會對地板造成傷害，所以建議通過在按摩椅擺放處墊一張地毯或其它緩衝物料，避免這種情況發生。

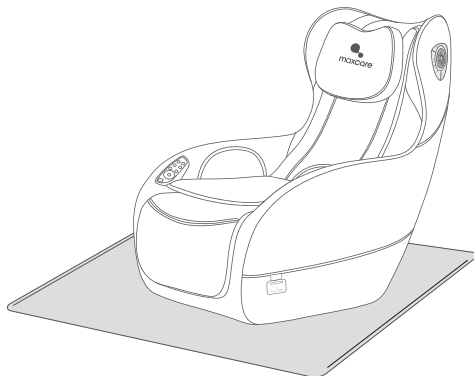


注意

在凹凸不平的地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動，必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以扶手左右兩側為著力點。

 使用方法

## 七、移動方法

在移動按摩椅之前，先確定電源線遠離地面後，將椅子靠背向下壓一角度，重心落在後滑輪上時(下壓角度大約25度)，即可將按摩椅向前推動，移動到合適位置之後將按摩椅放回正常角度。

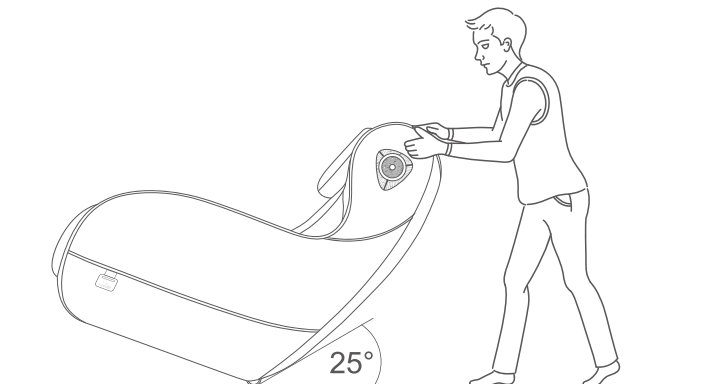

在移動時務必先關閉電源開關，再拔掉電源線及遙控器連接線。

## 產品的清潔、保養

### 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

### 保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩 (請自行購買) 套住產品，防止落入灰塵。



注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

### 溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
- 有焦糊氣味。
- 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- 電源線發熱。
- 電源線是否破損。
- 其它異常。




注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

## 常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現『咻咻』、 『嗒嗒』的聲音	產品正常工作時發出的聲音或 按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	適配器接頭未連接好	連接好接頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		電源插頭沒有插好	插好插頭
3	突然停止操作	斷電	檢查電源介面 是否接好
		按摩時間超過20分鐘， 自動關機	重新開啟 開/關按鈕
		連續使用時間過長，產品 過熱保護	產品冷卻後重新 開啟開/關按鈕
		施力過大，按摩球堵轉	放鬆，減輕 機器負荷

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。

 產品技術與參數

產品名稱：一心椅

產品型號：MAX-77A155BR

額定電壓：220-240V ~50/60Hz

額定功率：60W

額定時間：20分鐘

噪音：55dB

安全結構：Class I

執行標準：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008