

6In1 **加強版** 脈衝按摩儀

6 In 1 Function Pulse Massager 2.0

MAX-M01MC0283
產品說明書



maxcare®



注意

- 只有在主機已啟動，四片貼片已貼於皮膚上，才可調整模式和強度級數。若貼片無貼於皮膚上，30秒之後，主機將自動關機。
- 每片貼片可使用約一百次。若不使用時，請勿隨意貼於皮膚上。
- 若貼片無正確貼於皮膚上、皮膚太油、太濕或貼片已磨損不堪使用，會有不舒服的輕微刺痛感。


保養須知

- 請勿將主機存放於潮濕或炎熱處。
- 請勿將主機或傳導線浸入水中。
- 若傳導貼片髒了或失去黏性，可用濕布輕輕擦拭或放在水龍頭下沖洗。切勿使用刺激性肥皂洗滌。待傳導貼片完全乾透才使用。

建議使用方法

- 每個部位建議每次使用10-15分鐘。
- 每天使用一至兩次為宜；每次不宜超過30分鐘。

主要構件及功能

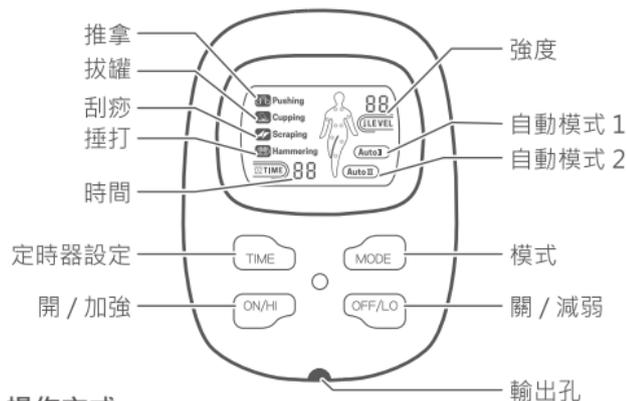

操作方式

- 輕輕向下滑開主機電池蓋。
- 裝入兩枚 3A 電池，並蓋回蓋子。
- 將鈕扣型傳導線接至主機的輸出孔。
- 將傳導貼片與鈕扣型傳導線連接。
- 撕下貼片上的保護膜，並將貼片貼於目標部位。
- 按下“ON/HI”鍵以啟動主機。
- 按模式“MODE”鍵選擇按摩模式。有 6 種模式供選擇。
- 持續按“ON/HI”鍵以增加強度，或按“OFF/LO”鍵以減低強度。所按選的強度級數將出現在 LCD 螢幕上。
- 按定時器“TIME”以設定自動關機定時器。
- 關機時，重複按“OFF/LO”鍵，直至關機即可。
- 使用後切記將保護膜重新黏貼於貼片上。若長時間不使用，請取出主機電池。

故障檢修指南

故障現象	故障原因	解決方法
螢幕無法顯示	<ul style="list-style-type: none">• 電池未裝入• 電池安裝方法錯誤• 電池電力耗盡	<ul style="list-style-type: none">• 裝上電池• 檢查電池正負極性方向• 替換電池
螢幕有顯示，但無法運作	<ul style="list-style-type: none">• 傳導貼片沒有接觸到皮膚• 強度級數為 0• 微處理器停頓了• 電池低電量	<ul style="list-style-type: none">• 將傳導貼片正確黏貼• 按“ON/HI”鍵以增加強度• 取出電池，稍等一分鐘再重新裝入電池• 替換電池
LCD 顯示屏顯示正常， 但沒有出現搏動	<ul style="list-style-type: none">• 強度級數設得太低• 傳導貼片已磨損，貼片上的 導電凝膠不足• 傳導貼片黏貼位置不當	<ul style="list-style-type: none">• 按“ON/HI”鍵多次以逐漸增加強度• 清潔傳導貼片，或換用新的傳導貼片• 先關機，把貼片移至其他位置以確定目標 穴位



產品規格

產品名稱：	6 In 1 脈衝按摩儀 (加強版)
產品型號：	MAX-M01MC0283
電源：	3A 電池 x 2枚
脈衝頻率：	4-33Hz
按摩模式：	6種模式 · 10種強度級數
定時器：	5/10/15/20/25/30分鐘
電流功率：	2.5mA
主機尺寸：	10 x 7 x 2.5 公分
重量：	55公克

產品配件：

- 6 in 1脈衝按摩儀主機
- 四片傳導貼片 (可重複使用)
- 鈕扣型傳導線
- 產品說明書

產品說明書

- 使用 6 in 1 脈衝按摩儀前，請詳閱此產品說明書。
- 6 in 1 脈衝按摩儀並非醫療儀器，其功能原意只供一般身體調理之用。使用此產品並不暗示或保證可取得任何有醫學憑證的效果。

注意事項：

1. 請勿用於按摩臉部、頭部、喉嚨、胸部或生殖器部位。
2. 請勿置於任何傷口、紅腫、受感染或發炎部位。
3. 請勿用於敏感皮膚部位或是有皮膚問題或神經受損部位。
4. 孕婦不宜使用；月事期間，流量多時亦不可用於腹部；分娩後亦不可馬上使用。
5. 手術後者（包括剖腹生產者）都不可使用。
6. 睡眠中、駕駛中或操作重型機器時一概不可使用。
7. 兒童不宜使用。
8. 在急性外傷或骨折後容易有出血問題的情況下不可使用。
9. 凡有嚴重靜脈曲張部份不可使用。
10. 若懷疑自己患有或經診斷證實患有癲癇症、心臟病或多發性硬化症，或有栓塞風險者，一概不可使用。
11. 使用心臟起搏器者不可使用。