

MAX Roller



产品使用说明书

MAX-M01MC0313M



企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 maxcare 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，maxcare 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。



感谢您选购MAXCARE产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目錄

安全注意事项	P.01 - P.03
机件名称及功能	P.04
使用方法	P.05
产品的清洁、保养	P.06
产品技术参数	P.07

 安全注意事项

1. 重要安全警告

- 只供成人使用。
- 请勿把产品放进水中或让产品进水。
- 请勿掉下或误用产品。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 当产品处于工作状态中或充电时，请勿放置不顾。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分
- 在使用过程中，请务必确认周围没有人或宠物，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为15分钟。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 机身破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 请勿在驾驶时使用此产品。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



2. 使用环境

- 请勿使用有快速充电功能的电源充电，避免产品进入电路保护状态。
- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。

 **安全注意事项**

- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

**3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用**

- 皮肤肿胀，晒伤或者其他皮肤病者请勿使用。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、中风、严重高、低血压等患者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液回圈障碍或各种皮肤感染等症者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢回圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。

**4. 安全事项**

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品15分钟内为宜。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。

 安全注意事项

- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感官或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。
- 当产品处于工作状态中请勿放置不顾。
- 充电时请不要开机使用。

 5. 产品保养和维护


- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。

 6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音

机件名称及功能

产品结构

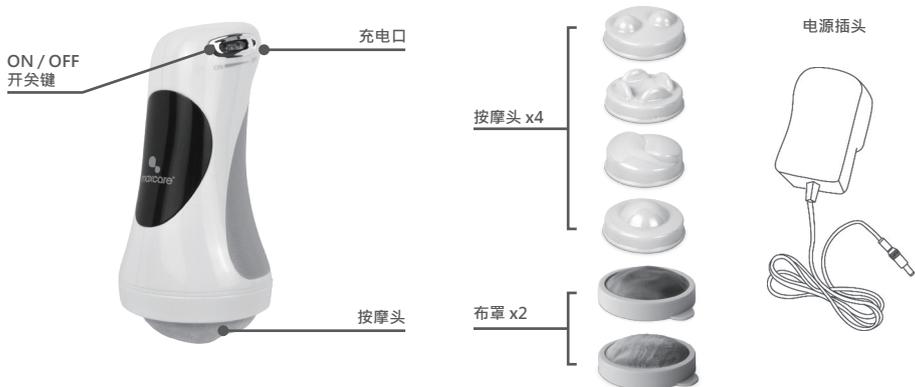

	<p>双点按摩头：穴位和深层按摩。</p>
	<p>旋风按摩头：以改善血液循环。</p>
	<p>太极型按摩头：建议用于精油按摩，可使皮肤有效吸收精油。</p>
	<p>滚珠型按摩头：建议按摩颈部以减轻压力。</p>
	<p>防护布罩：避免将头发拉入机器。</p>
	<p>绒毛布罩：避免将头发拉入机器。质地柔软，可使用于敏感肌肤或较幼嫩的肌肤上，避免肌肤过分拉扯。</p>

产品特点

1. 此按摩器符合人体工程学设计，易于使用。
2. 无线设计和便携式按摩器，您可以随时随地享受按摩。
3. 高速旋转及深层按摩。
4. 不同的速度选择。
5. 随附4个按摩头，适合您的需要和不同的身体部位。

 使用方法**注意**

在将插头插入充电器之前，请务必确保将设备设置为“OFF”。

1. 确保开关处于“OFF”位置。然后将电源插头连接到设备的充电口。
2. 当设备电量不足时，ON / Off开关上的LED指示灯将闪烁红灯。设备充满电后，LED指示灯将长亮红色。充满电后，移除电源插头。设备需要充电3-4个小时，并且可持续使用大约1个小时。
3. 然后选择合适的按摩头，然后可以取下防护布罩并安装按摩头，然后再将防护布罩安装回去。
4. 转动ON / OFF开关开机并调整速度。
5. 请勿连续使用本产品超过30分钟。如果产品使用超过30分钟，则可能会触发过热保护功能并自动停止。
6. 在重新使用之前，请等待至少30分钟，以使产品冷却。

 产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。
- 请用轻微湿润的布进行擦拭，再用抹干。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

保养

- 确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩(请自行购买)套住产品，防止落入灰尘。



注意

- 切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味。
 - * 触动导线后有时通电，有时断电。
 - * 电源线发热。
 - * 电源线是否破损。
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用此产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

 产品技术与参数

产品名称	: MAX Roller
产品型号	: MAX-M01MC0313M
电 池	: 7.4V 2600 mAH
充电电压 (输入)	: 100-240V/50-60Hz
充电电压 (输出)	: 5V 1A
额定电流	: 4000mA
额定功率	: 30 W
最大速度	: 3400RPM
充电时间	: 3-4 小时
产品净重	: 815 g
产品重量	: 1460 g
产品尺寸	: 100 x 100 x 194 mm
包装尺寸	: 247 x 212 x 122 mm



商標持有: 美斯凱實業有限公司
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcare.net
www.maxcareonlineshop.com