



MT Alpha

Physiotherapy Device

每天使用15-20分钟 · 打造健康生活！
临床便利样本结果表明 · 使用后可以显著改善肌骨关节症状*

产品使用说明书

MAX-M01MC0552



*临床便利样本测试结果由MTcure联合香港中文大学医学院进行



企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了**maxcare**品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。**maxcare** 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品。**maxcare** 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。**maxcare** 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。**maxcare** 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

MT Alpha

Physiotherapy Device



MTcure 是一家专注于生物医学科技的创新企业。公司主要业务包含医学治疗相关的产品及服务，具体涉及到家用的康复治疗系统及个性化的临床及医美解决方案。我们的技术主要应用于退行性病变、关节炎、病理康复及人体组织修复。镁天健康是由一群来自香港中文大学（CUHK）的专家团队创办于2018年，理念是将专业的医学治疗技术带入家庭及社区。

美天复康宝





感谢您选购由 maxcare 联合香港中文大学医工结合孵化公司 MTcure 共同研发的产品 MT Alpha。使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。




本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目录

安全注意事项.....	P.01 - P.03
产品简介.....	P.04
机件名称及功能.....	P.05
使用方法.....	P.06
产品的清洁、保养.....	P.07
常见问题及处理方法.....	P.08
产品技术参数.....	P.09

 **安全注意事项** **1. 重要安全警告**

- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 产品破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 请勿将水或其它液体弄到产品内部。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。

 **2. 使用环境**

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气不流通的环境使用此产品。
- 使用完后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于50°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于-20°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



安全注意事项



3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 患有肿瘤、急性疾病、严重高血压、骨质疏松、动静脉血栓等患者。
- 急性伤引起的浮肿、细菌感染、炎症、骨折、扭伤和肌肉拉伤的患者。
- 皮肤有问题或者患有皮肤疾病，比如传染性皮肤病、皮肤对热不敏感、急性化脓性炎症、皮肤表面有明显创伤等。
- 正在接受物理治疗，特别是身体感到异常者。
- 有出血倾向的人。
- 发高烧者。
- 身体状况严重不适的老年人。
- 孕妇、刚生产和经期妇女。
- 无人监管时十岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本公司拥有最终解释权，如未按照建议使用造成的风险，本公司概不承担。



4. 安全事项

- 因手术而体内植入金属或者其他物质的位置，还有创伤位置如有发炎情况，不可使用“深层组织刺激”和“FDA规格热疗”，但可使用“光生物调节”，保持按摩头和皮肤约3-5mm 距离即可。
- 请勿在伤口、脓疮、暗疮或者化脓性疾病相关部位上使用“深层组织刺激”和“FDA规格热疗”。伤口停止出血后或者扭伤，建议只使用“光生物调节”加速愈合过程。受伤后72小时和伤口愈合后，可安心使用本产品。
- 请勿在心脏附近、头部、眼睛和阴部等部位使用。
- 孕妇和产妇请勿在腹部位置使用本产品。
- 严禁直视光源(包括佩戴墨镜或护目产品)
- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于“治疗”目的，本产品只用作“缓解”和“改善”目的。
- 建议每次使用本产品15-20分钟内为宜。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿湿手使用本产品或者拔掉电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉扯电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路及任意更改产品的构造或零件。



安全注意事项

- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 不要将电源线靠近热的或移动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。
- 本产品使用锂离子充电电池。
- 不要用力猛压或全身施压在产品上。
- 切勿放置接近火源或易燃的地方，以免发生故障或意外，产品亦有机会变形、变色或损坏。



5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起，并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁机身。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 每次使用本产品后，用湿了水或酒精的柔软抹布擦拭按摩头表面。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。
- 本产品含有不可更换的电池。



6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。

产品简介

产品功能特点：

美天复康宝是MTcure联合香港中文大学医学院共同研发的康复科技产品，Maxcare提供独家技术及生产支持。其核心康复系统是基于生物联动康复技术，可提供三种医学信号：深层组织刺激、医用光生物调节及FDA规格热疗。其激励信号和能量参考医学标准设计，具有FDA认证的康复科技产品。

临床便利样本测试表明，使用后可以显著改善肌骨关节症状*

功能和改善效果：

深层组织刺激	透过振动激励信号，刺激骨肌肉组织，达到缓解疼痛、促进血液和淋巴循环和增加骨肌肉强度
光生物调节	采用特定波长与安全有效的能量强度作激励信号，刺激细胞，达到组织修复、缓解疼痛和消灭炎症
FDA规格热疗	FDA规格的发热温度，可以缓解疼痛和加速血液流动

有效缓解以下适用症状：



运动损伤修复
(建議24-36小時後使用本產品)



肌肉劳损酸痛



关节炎/退化性疾病

临床便利样本测试结果由  联合香港中文大学医学院进行


🔧 机件名称及功能



理疗仪



充电电源线

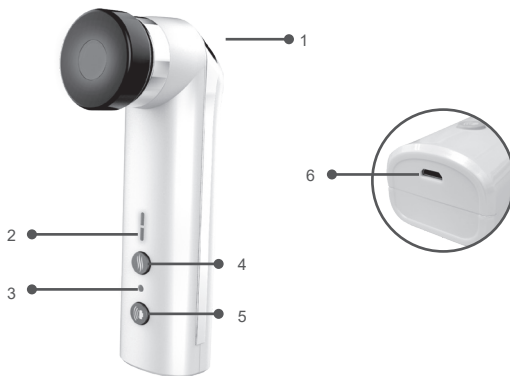





1. 按摩头：深层组织刺激、FDA规格热疗和光生物调节
2. 热疗等级指示灯：1格代表第一档，2格代表第二档
3. 充电指示灯：红光代表充电中，蓝光代表充满电
4. 热疗和光生物调节开关按钮
5. 深层组织刺激和光生物调节开关按钮
6. Micro USB 充电插孔

⚙️ 使用方法

使用前须知：

- 为达到改善效果，建议每天使用1-2次，每次15-20分钟。
- 使用前配合10-15分钟伸展运动，可以加强缓解效果。
- 建议先咨询医生疼痛的部位是否合适使用本产品。

使用方法：

1. 使用前，将电源连接本产品并充满电后拔出（拔掉电源才可使用，否则不开机）
2. 按摩头朝下，并先用力按着按钮H  约2-3秒，然后再用力按着按钮D  约2-3秒。
3. 水平地轻压在疼痛部位上，打圈来回移动，不能长时间停留在同一位置振动。
4. 能量强度模式选择
按钮H ：开启后，默认是中档，按一下是强档
按钮D ：开启后，默认是中档，按一下是强档，再次按下是低档
5. 建议使用完康复宝后，涂抹膏药，在温热效应帮助下，药物更能有效渗透皮肤，其复康效果更佳。
6. 使用后，用湿了水或酒精的抹布擦拭按摩头表面。

*备注：

- 建议连续开机时间超过20分钟后，关机让机身散热冷却，提高使用寿命。
- 建议按摩头接触皮肤表面使用，如果隔着衣服使用，复康效果大大降低。
- 当电力快要耗尽时，充电指示灯会闪烁提示使用者需要充电。
- 当按摩头按压在皮肤力度过大时，它会自动停止振动以防止肌肉组织损伤。



 产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请用干净柔软的棉布擦拭清洁产品。可使用肥皂水浸湿的布棉擦去污垢。在擦拭之前，请先将布拧干。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

保养

- 不使用时，请确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持此产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。
- 放入收纳袋，并存放在干燥、通风、清洁的地方，防止落入灰尘。



注意

切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味。
 - * 触动导线后有时通电，有时断电。
 - * 电源线发热。
 - * 电源线是否破损。
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

❓ 常见问题及处理方法

故障和危害	原因	处理方案
即使按下开关，本产品也不能运作	锂电池电量耗尽	充满电后使用
	锂电池寿命用尽	联系 maxcare® 授权的维修中心更换锂电池
	开关没有牢牢地按下	牢牢地按下，直到按动到位
运作过程中突然停止	电量耗尽	充满电后使用
	压在皮肤的力度超过负荷	重启并使用时减少按压的力度
刚充满电，但只能使用几分钟	锂电池寿命用尽	联系 maxcare® 授权的维修中心更换锂电池
充电时，显示灯没有反应	USB充电器头没有正确插入电源座	把USB充电器头正确插入插座
	Micro USB 充电线没有牢牢地插入本产品充电插口	把USB充电线牢牢地插入本产品插口
速度慢而没力	电量耗尽	充满电后使用
皮肤变红，而且有刺痛的感觉	使用时间过长	议每次15-20分钟
	皮肤对发热或者按摩头物料过敏	检查皮肤有没有过敏史，建议咨询医生是否合适使用本产品
皮肤异常发烫	按摩头长时间停留在同一个地方	打圈来回移动，不能长时间停在同一点振动
肌肉异常刺痛	振动力度太大	把震动力度调小
眼睛刺痛	按摩头发红光的地方正对着眼睛	避免按摩头发红光的那一面对着眼睛
按下振动功能开关，按摩头没有振动	锂电池电量低，令按摩头启动后卡住	充满电后使用
		用手轻按一下按摩头

如果进行了上述处理还有异常现象，请与本公司联络。



产品技术与参数

产品名称	: 美天 复康宝
产品型号	: MAX-M01MC0552
规格	: 深层组织刺激 光生物调节 FDA规格热疗
额定功率	: 5.5-6.5W
锂电池容量	: 3.7V/ 2600mAh
充电时间	: 2.8小时
自动断电时间	: 10分钟
产品尺寸	: 16x4x6.8cm
净重	: 195g

美斯凯實業有限公司

MAXCARE INDUSTRIAL LIMITED

客戶服務熱線 Customer Service Hotline : (852) 2950-9383

www.maxcare.net

www.maxcareonlineshop.com

Maxcare united MTCure, an innovative biotechnology start-up incubated by
The Chinese University of Hong Kong

鎂天健康生物科技有限公司

MTCURE BIOTECH LIMITED