



# MT Alpha

## Physiotherapy Device

每天使用15-20分鐘 · 打造健康生活！  
臨床便利樣本結果表明 · 使用後可以  
顯著改善肌骨關節症狀\*

產品使用說明書

**MAX-M01MC0552**



\*臨床便利樣本測試結果由MTcure 聯合香港中文大學醫學院進行



## 企业介绍

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了maxcare 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。maxcare 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，maxcare 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。maxcare 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。maxcare 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

# MT Alpha

## Physiotherapy Device



MTcure 是一家專注於生物醫學科技的創新企業。公司主要業務包含醫學治療相關的產品及服務，具體涉及到家用的康復治療系統及個性化的臨床及醫美解決方案。我們的技術主要應用於退行性病變、關節炎、病理康復及人體組織修復。鎂天健康是由一群來自香港中文大學 (CUHK) 的專家團隊創辦於2018年，理念是將專業的醫學治療技術帶入家庭及社區。

美天復康寶



感謝您選購由 maxcare 聯合香港中文大學醫工結合孵化公司 MTcure 共同研發的產品 MT Alpha。使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。




本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。


## 目錄

---

安全注意事項.....	P.01 - P.03
產品簡介.....	P.04
機件名稱及功能.....	P.05
使用方法.....	P.06
產品的清潔、保養.....	P.07
常見問題及處理方法.....	P.08
產品技術參數.....	P.09

 安全注意事項 1. 重要安全警告

- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 產品破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 請勿將水或其它液體弄到產品內部。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。

 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣不流通的環境使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於50°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於-20°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



## 安全注意事項



### 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 患有腫瘤、急性疾病、嚴重高血壓、骨質疏鬆、動靜脈血栓等患者。
- 急性傷引起的浮腫、細菌感染、炎症、骨折、扭傷和肌肉拉傷的患者。
- 皮膚有問題或者患有皮膚疾病，比如傳染性皮膚病、皮膚對熱不敏感、急性化膿性炎症、皮膚表面有明顯創傷等。
- 正在接受物理治療，特別是身體感到異常者。
- 有出血傾向的人。
- 發高燒者。
- 身體狀況嚴重不適的老年人。
- 孕婦、剛生產和經期婦女。
- 無人監管時十歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本公司擁有最終解釋權，如未按照建議使用造成的風險，本公司概不承擔。



### 4. 安全事項

- 因手術而體內植入金屬或者其他物質的位置，還有創傷位置如有發炎情況，不可使用“深層組織刺激”和“FDA規格熱療”，但可使用“光生物調節”，保持按摩頭和皮膚約3-5mm 距離即可。
- 請勿在傷口、膿瘡、暗瘡或者化膿性疾病相關部位上使用“深層組織刺激”和“FDA規格熱療”。傷口停止出血後或者扭傷，建議只使用“光生物調節”加速癒合過程。受傷後72小時和傷口癒合後，可安心使用本產品。
- 請勿在心臟附近、頭部、眼睛和陰部等部位使用。
- 孕婦和產婦請勿在腹部位置使用本產品。
- 嚴禁直視光源(包括佩戴墨鏡或護目產品)
- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於“治療”目的，本產品只用作“緩解”和“改善”目的。
- 建議每次使用本產品15-20分鐘內為宜。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿濕手使用本產品或者拔掉電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路及任意更改產品的構造或零件。



## 安全注意事項

- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 不要將電源線靠近熱的或移動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。
- 本產品使用鋰離子充電電池。
- 不要用力猛壓或全身施壓在產品上。
- 切勿放置接近火源或易燃的地方，以免發生故障或意外，產品亦有機會變形、變色或損壞。



## 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔機身。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 每次使用本產品後，用溼了水或酒精的柔軟抹布擦拭按摩頭表面。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。
- 本產品含有不可更換的電池。



## 6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。

## 產品簡介

### 產品功能特點：

美天復康寶是MTcure聯合香港中文大學醫學院共同研發的復康科技產品，Maxcare提供獨家技術及生產支持。其核心復康系統是基於生物聯動復康技術，可提供三種醫學信號：深層組織刺激、醫用光生物調節及FDA規格熱療。其激勵信號和能量參考醫學標準設計，具有FDA 認證的復康科技產品。

臨床便利樣本測試表明，使用後可以顯著改善肌骨關節症狀\*

### 功能和改善效果：

深層組織刺激	透過振動激勵信號，刺激骨肌肉組織，達到緩解疼痛、促進血液和淋巴循環和增加骨肌肉強度
光生物調節	採用特定波長與安全有效的能量強度作激勵信號，刺激細胞，達到組織修復、緩解疼痛和消去炎症
FDA規格熱療	FDA規格的發熱溫度，可以緩解疼痛和加速血液流動

### 有效緩解以下適用症狀：



運動損傷修復  
(建議24-36小時後使用本產品)



肌肉勞損酸痛



關節炎/退化性疾病

\*臨床便利樣本測試結果由MTcure 聯合香港中文大學醫學院進行


## 機件名稱及功能



理療儀



充電電源線

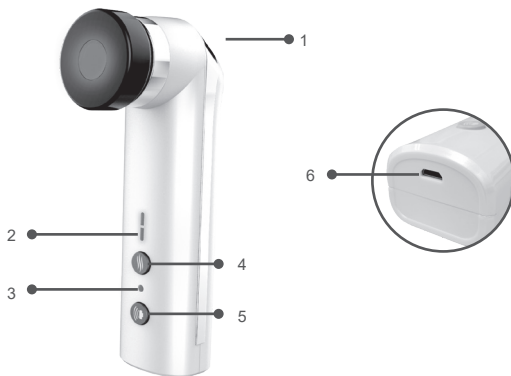

1. 按摩頭：深層組織刺激、FDA規格熱療和光生物調節
2. 熱療等級指示燈：1格代表第一檔，2格代表第二檔
3. 充電指示燈：紅光代表充電中，藍光代表充滿電
4. 熱療和光生物調節開關按鈕
5. 深層組織刺激和光生物調節開關按鈕
6. Micro USB 充電插孔







## ⚙️ 使用方法

### 使用前須知：

- 為達到改善效果，建議每天使用1-2次，每次15-20分鐘。
- 使用前配合10-15分鐘伸展運動，可以加強緩解效果。
- 建議先諮詢醫生疼痛的部位是否合適使用本產品。

### 使用方法：

1. 使用前，將電源連接本產品並充滿電後拔出（拔掉電源才可使用，否則不開機）
2. 按摩頭朝下，並先用力按着按鈕H  約2-3秒，然後再用力按着按鈕D  約2-3秒。
3. 水平地輕壓在疼痛部位上，打圈來回移動，不能長時間停留在同一位置振動。
4. 能量強度模式選擇  
    按鈕H ：開啓後，默認是中檔，按一下是強檔  
    按鈕D ：開啓後，默認是中檔，按一下是強檔，再次按下是低檔
5. 建議使用完復康寶後，塗抹膏藥，在溫熱效應幫助下，藥物更能有效滲透皮膚，其復康效果更佳。
6. 使用後，用濕了水或酒精的抹布擦拭按摩頭表面。

### \*備註：

- 建議連續開機時間超過20分鐘後，關機讓機身散熱冷卻，提高使用壽命。
- 建議按摩頭接觸皮膚表面使用，如果隔著衣服使用，復康效果大大降低。
- 當電力快要耗盡時，充電指示燈會閃爍提示使用者需要充電。
- 當按摩頭按壓在皮膚力度過大時，它會自動停止振動以防止肌肉組織振傷。





## 產品的清潔、保養

### 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請用乾淨柔軟的棉布擦拭清潔產品。可使用肥皂水浸濕的布棉擦去污垢。在擦拭之前，請先將布擰乾。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

### 保養

- 不使用時，請確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持此產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所，以及有揮發性氣體的環境。
- 放入收納袋，並存放在乾燥、通風、清潔的地方，防止落入灰塵。



注意

切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

### 溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
  - \* 有焦糊氣味。
  - \* 觸動導線後有時通電，有時斷電。
  - \* 電源線發熱。
  - \* 電源線是否破損。
  - \* 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

## 常見問題及處理方法

故障和危害	原因	處理方案
即使按下開關，本產品也不能運作	鋰電池電量耗盡	充滿電後使用
	鋰電池壽命用盡	聯繫 maxcare® 授權的維修中心更換鋰電池
	開關沒有牢牢地按下	牢牢地按下，直到按動到位
運作過程中突然停止	電量耗盡	充滿電後使用
	壓在皮膚的力度超過負荷	重啓並使用時減少按壓的力度
剛充滿電，但只能使用幾分鐘	鋰電池壽命用盡	聯繫 maxcare® 授權的維修中心更換鋰電池
充電時，顯示燈沒有反應	USB 充電器頭沒有正確插入電源座	把 USB 充電器頭正確插入插座
	Micro USB 充電線沒有牢牢地插入本產品充電插口	把 USB 充電線牢牢地插入本產品插口
速度慢而沒力	電量耗盡	充滿電後使用
皮膚變紅，而且有刺痛的感覺	使用時間過長	議每次15-20分鐘
	皮膚對發熱或者按摩頭物料過敏	檢查皮膚有沒有過敏史，建議諮詢醫生是否合適使用本產品
皮膚異常發燙	按摩頭長時間停留在同一個地方	打圈來回移動，不能長時間停在同一點振動
肌肉異常刺痛	振動力度太大	把震動力度調小
眼睛刺痛	按摩頭發紅光的地方正對着眼睛	避免按摩頭發紅光的那一面對着眼睛
按下振動功能開關，按摩頭沒有振動	鋰電池電量低，令按摩頭啓動後卡住	充滿電後使用
		用手輕按一下按摩頭

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。



## 產品技術與參數

產品名稱	: 美天 復康寶
產品型號	: MAX-M01MC0552
規格	: 深層組織刺激 光生物調節 FDA規格熱療
額定功率	: 5.5-6.5W
鋰電池容量	: 3.7V/ 2600mAh
充電時間	: 2.8小時
自動斷電時間	: 10分鐘
產品尺寸	: 16x4x6.8cm
淨重	: 195g

美斯凱實業有限公司

**MAXCARE INDUSTRIAL LIMITED**

客戶服務熱線 Customer Service Hotline : (852) 2950-9383

[www.maxcare.net](http://www.maxcare.net)

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)

Maxcare united MTCure, an innovative biotechnology start-up incubated by  
The Chinese University of Hong Kong

鎂天健康生物科技有限公司

**MTCURE BIOTECH LIMITED**