


Mini Foot Pad

產品使用說明書

MAX-M01MC0512

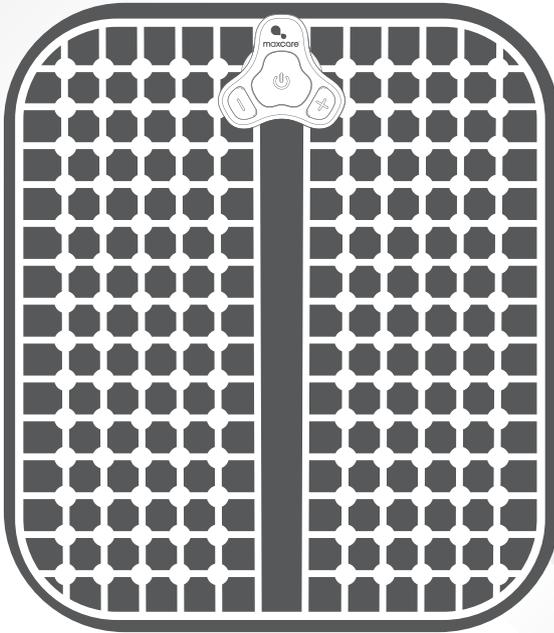


maxcare®



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了**maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

Mini Foot Pad

感謝您選購MAXCARE產品。使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

| | |
|-----------------|-------------|
| 安全注意事項 | P.01 - P.03 |
| 機件名稱及功能 | P.04 |
| 使用方法 | P.05 |
| 產品的清潔、保養 | P.06 |
| 常見問題及處理方法 | P.06 |
| 產品技術參數 | P.07 |

 安全注意事項

1. 重要安全警告

- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分。
- 在使用過程中，請務必確認周圍沒有人或寵物，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 請勿在駕駛時使用此產品。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



2. 使用環境

- 請勿使用有快速充電功能的電源充電，避免產品進入電路保護狀態。
- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。

 安全注意事項 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 皮膚腫脹，曬傷或者其他皮膚病者請勿使用。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、中風、嚴重高、低血壓等患者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。

 4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。
- 當產品處於工作狀態中請勿放置不顧；
- 充電時請不要開機使用；

 安全注意事項

5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。





6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

機件名稱及功能

- 1) Tri-Gear 電子控制器X1
- 2) 腳墊X1
- 3) USB充電線X1
- 4) 遙控器X1
- 5) CR2025鈕扣電池X1
- 6) 索袋X1

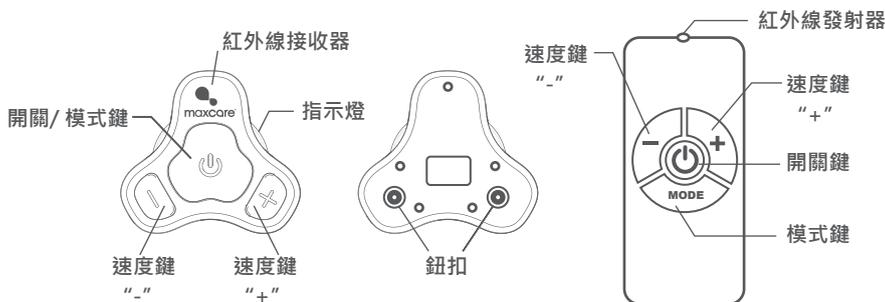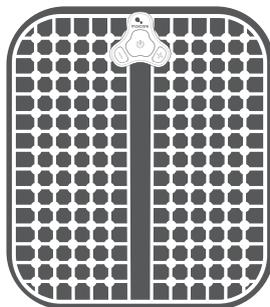

| | |
|---|--|
|  | <p>開關鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> > 長按開關鍵約3秒啟動電子控制器。 > 長按開關鍵約3秒關閉電子控制器。 > 每按開關鍵一次轉換模式，一共5個程式（只限主機）。 <p>按遙控器的模式鍵轉換不同模式。</p> |
|  | <p>速度鍵 “+”：按一下 “+” 按鈕，以增加1級強度。共10個強度。</p> |
|  | <p>速度鍵 “-”：按一下 “-” 按鈕，以降低1級強度。共10個強度。</p> |

⚙️ 使用方法

充電:

- 把USB充電線的micro USB頭連接機身下方的USB插口。
- 把USB充電線的另一邊連接一個5V USB插頭。請確保輸入電流不超過2A，太強的電流有機會破壞主機的處理器及電路。
- 當充電時，指示燈會亮起紅色；當充電完畢，指示燈會亮起藍色。
- 完全充電需要大約1小時，之後可連續使用1小時。若機器無法回應任何指示，可能是因為電量太低，請充電。

使用方法:

1. 先用乾布清潔腳墊的PU面。
2. 使用前請清潔雙腳，並確保雙腳都緊貼住著腳墊。
貼土：如想提升電導率，可輕輕濕潤雙腳或在雙腳塗上水基凝膠。
3. 用鈕扣把腳墊連接到已充電的電子控制器。
4. 長按開關鍵約2秒啟動電子控制器，指示燈會亮起綠色。
5. 如想使用遙控器，請把紅外線發射器對準主機上的紅外線接收器（1米範圍以內），按下相應的按鍵控制按摩程式。（使用遙控器前，請確保已裝好鈕扣電池）
6. 每個按摩程式一共設有10個EMS強度（由1到10）。按“+”或“-”鍵調節強度。
7. 每個按摩程式有20分鐘自動停機功能。當設定好強度好，就會開始20分鐘的計時。
8. 當按摩程式結束後，請確保主機已經關閉。
9. 用後請卸下主機。

提醒:

1. Tri-Gear 電子控制器帶保護功能的設備，如果在2秒內未觸及皮膚的情況下打開設備，電子控制器將自動關閉。
2. 當電壓低過2.4V，紅色指示燈會閃5秒，然後會自動關閉，以表示需要充電。

| 程式 | LED燈顯示顏色 | 操作模式 |  |
|----|----------|------|---|
| 1 | 綠色 | 放鬆 | |
| 2 | 紫色 | 刮痧 | |
| 3 | 黃色 | 舒緩 | |
| 4 | 藍色 | 揉捏 | |
| 5 | 白色 | 指壓 | |

3. 建議由最低強度開始按摩，再慢慢增加強度以便找到最適合的按摩力度。

🔧 產品的清潔、保養

Tri-Gear 電子控制器 及 矽膠腳墊

- 時常使用乾的軟布清潔主機表面，以保持清潔。
- 請勿將液體濺到本產品上或把其放入水中。
- 存放於涼爽的地方。
- 請勿用化學劑清潔產品。
- 存放於小孩及寵物接觸不到的地方。

? 常見問題及處理方法

| 序號 | 現象 | 可能原因 | 處理方法 |
|----|----------------|---|--|
| 1 | 沒有反應 | 電池電量不足 | 給電池充電 |
| 2 | LED燈閃爍 | 電池電量不足 | 給電池充電 |
| 3 | 電子控制器開啟後沒有感覺 | - 皮膚傳導性較差 - 強度太低 | - 在導電區域使用水基凝膠或沾水滴，並將腳墊直接接觸皮膚 - 逐漸增加強度等級 |
| 4 | 使用2秒後LED燈熄滅 | - 沒有接觸皮膚 - 皮膚接觸不良 | - 在導電區域檢查腳墊是否直接接觸皮膚 - 檢查電子控制器是否與腳墊上兩個連接鈕牢固連接 - 在導電區域使用水基凝膠或沾水滴，並將墊直接接觸皮膚 |
| 5 | LED燈指示正常，但沒有反應 | - 強度設置為低水平 - 皮膚傳導性較差 - 使用的不是原裝腳墊 - 腳墊的位置不正確 - 腳墊已磨損或有油污 - 電池電量不足 | - 逐漸增加強度等級 - 在導電區域使用水基凝膠或沾水滴，並將墊直接接觸皮膚 - 使用原裝腳墊 - 把腳墊貼到正確的位置 - 用濕布/紙巾清潔腳墊 - 更換新的腳墊 - 給電池充電 |
| 6 | 所有按鈕都不能正常工作 | - 微處理器停止服務 - 電池電量不足 | - 關機後1分鐘重新啟動電子控制器。 - 給電池充電 |
| 7 | 對遙控器沒有反應 | 電池電量不足 | 給電池充電 |

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。

 產品技術與參數

| | |
|-----------|---|
| 產品名稱 | : Mini Foot Pad |
| 產品型號 | : MAX-M01MC0512 |
| 額定頻率 | : 1Hz—33.3Hz |
| 額定電壓 (輸出) | : 86 V (1K load resistance) |
| 額定功率 | : 105mW |
| 最大電流 | : 35 mA (1K load resistance) |
| 額定時間 | : 20分鐘 |
| 電池 | : 主機 : 3.7V 充電式鋰電池 遙控器 : CR2025鈕扣電池 |
| 產品尺寸 | : 主機 : 65 x 62 x 17 mm 腳墊 : 310 x 280 x 2 mm |