




**Dynamic Squeeze  
Massager**

**動 · 能頸背墊**

復  
刻  
版  
Reissue

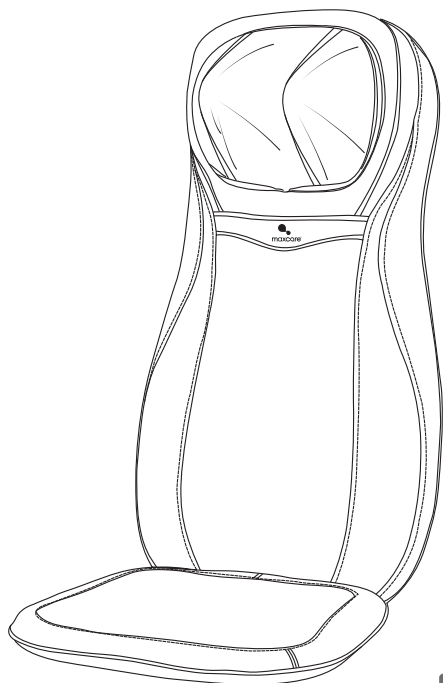

MAX-S03C52CG

**Instruction**  
產品使用說明書



## 企業介紹

**maxcare** 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了**maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

**maxcare** 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

**maxcare** 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

# Dynamic Squeeze Massager

## 動。能頸背墊




感謝您選購MAXCARE產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

### 目錄

---

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 安全注意事項 .....    | P.01 - P.02 |
| 機件名稱及功能 .....   | P.03 - P.04 |
| 使用方法 .....      | P.05        |
| 產品的清潔、保養 .....  | P.06 - P.07 |
| 常見問題及處理方法 ..... | P.07        |
| 產品技術參數 .....    | P.08        |

 安全注意事項

## 1. 重要安全警告

- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為15分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司安排修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



## 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



## 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。

## 安全注意事項

- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。



### 4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品15分鐘內為宜。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果產品損壞，為了避免危險，必須由本公司的專業人員更換。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。



### 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 請問歇使用，不應使此產品長期連續運轉。




### 6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

機件名稱及功能

- A: 頸部按摩球
- B: 背部按摩球
- C: 手控器袋
- D: 變壓器
- E: 座墊
- F: 手控器

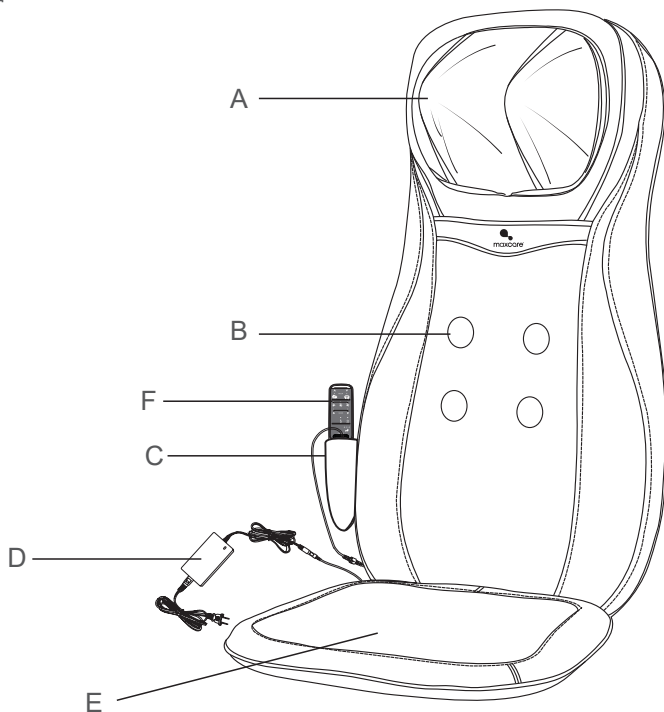

## 機件名稱及功能

### 遙控器使用說明

#### 頸部


- 1、頸部高度調節：可根據不同人群自由調節頸部按摩球高度。
- 2-3、頸部揉捏調節：調節頸部按摩頭方向。

#### 背部

- 4、背部按摩區域：上背、全背、下背三種按摩位置按摩。
- 5、背部按摩頭：向上”或“向下”進行調節按摩位置。
- 6、加熱：開啟/關閉加熱功能。
- 7、定點：將按摩球定位在指定位置按摩。

#### 座墊

- 8、震動：開啓座墊震動功能，三檔力度可調。
- 9、電源：開啓/關閉按摩背墊，按此鍵按摩背墊進入待機狀態。

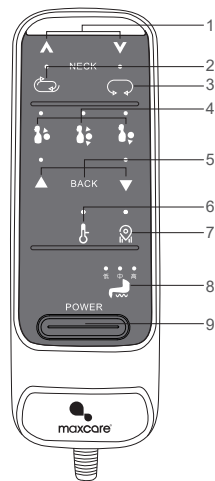

### 產品使用操作流程:







- ①將產品直立放置於平穩的沙發或者椅子上。(可利用按摩座墊背後的鬆緊帶把產品固定在椅子上)
- ②將電源綫與適配器相連,把DC綫的圓頭插入按摩座墊的DC接頭中,再把AC插頭插入電源插座中。舒服的坐在按摩座墊上,讓後背及頸部依靠著產品。
- ③啓動手控器即可享受全身心的按摩。

注：具體顯示以實物為準！

## 使用方法

### 開始按摩

#### A、按摩區域調節：

| 名稱   | 按鍵  | 描述                            |       |
|------|---|-------------------------------|-------|
| 按摩區域 |  | 定點：固定位置定點按摩                   |       |
|      |  | 上背：上背部按摩                      |       |
|      |  | 下背：下背部按摩                      |       |
|      |  | 全身：全程往返按摩                     |       |
| 向上鍵  |  | 按摩位置調整（在定點模式下，可使用上、下按鍵調整按摩位置） | 按摩頭上行 |
| 向下鍵  |  |                               | 按摩頭下行 |

#### B、震動按摩：

| 名稱 | 按鍵  | 描述                  | 顯示狀態           |
|----|---|---------------------|----------------|
| 震動 |  | 按此鍵選擇震動功能：低檔、中檔、高檔。 | ● ● ●<br>低 中 高 |

#### C、加熱按摩：

| 名稱 | 按鍵  | 描述           |
|----|---|--------------|
| 加熱 |  | 按此鍵開啟/關閉熱療功能 |



## 🔧 產品的清潔、保養

### 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

### 保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩 (請自行購買) 套住產品，防止落入灰塵。



注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

### 溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
  - \* 有焦糊氣味。
  - \* 觸動導線後有時通電，有時斷電。
  - \* 電源線發熱。
  - \* 電源線是否破損。
  - \* 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

## 保養及清潔

### 清潔方法：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精，松節油，天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面。
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋。
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面。
4. 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清潔試污垢，避免用刷子清潔。

### 保養方法：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化。
2. **按摩背墊**不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色。
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭。
4. 在擦拭時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皸裂。

## 常見問題及處理方法

| 序號 | 現象                    | 可能原因                       | 處理方法           |
|----|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | 動作中出現『咻咻』、<br>『嗒嗒』的聲音 | 產品正常工作時發出的聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音 | 無需任何處理         |
| 2  | 無法開機                  | 適配器接頭未連接好                  | 連接好接頭          |
|    |                       | 電源開/關未開                    | 開啟電源開/關        |
|    |                       | 電源插頭沒有插好                   | 插好插頭           |
| 3  | 突然停止操作                | 斷電                         | 檢查電源介面是否接好     |
|    |                       | 按摩時間超過15分鐘，自動關機            | 重新開啟開/關按鈕      |
|    |                       | 連續使用時間過長，產品過熱保護            | 產品冷卻後重新開啟開/關按鈕 |
|    |                       | 施力過大，按摩球堵轉                 | 放鬆，減輕機器負荷      |

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。

## 產品技術參數

- 產品名稱 : 動能頸背墊復刻版  
產品型號 : MAX-S03C52CG  
變壓器輸入 : 100-240V 50/60Hz  
變壓器輸出 : 12V --- 4A  
額定功率 : 48 W  
工作時間 : 15分鐘  
產品執行標準 : GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



商標持有：美斯凱實業有限公司  
公司地址：香港北角健康東街39號柯達大廈二期1601室

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcare.net](http://www.maxcare.net)  
[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)