



Multi Warm massager

多方位暖暖按摩器



產品使用說明書

MAX-M01MC0578B

安全注意事項

1. 該產品不是醫療設備。
2. 使用產品前，請仔細閱讀說明書，特別是注意事項。
3. 每次使用完後請拔下電源適配器並放置於乾燥的地方。
4. 此產品具有發熱功能，對熱不敏感的人使用時請注意，如果發熱部分直接接觸皮膚，則可能造成低溫灼傷的風險。因此，請務必穿著襪子或在關閉加熱功能的情況下使用。
5. 身體潮濕時禁止使用此產品。
6. 請使用本產品配置的適配器（使用其他適配器可能導致故障）。
7. 本產品具有自動定時功能，達到設定操作時間15分鐘後會自動關機。如果長時間連續使用，可能會對您的身體造成不適，初次使用建議使用15分鐘，以免肌肉超負荷，並隨著使用習慣逐漸延長按摩時間。
8. 請勿用力拉扯與產品連接的適配器連接端子。
9. 如果發生停電，應及時斷開電源，以免電力突然恢復時導致傷害。
10. 如果產品線有損壞，請勿使用該產品。
11. 如果在使用過程中感到身體疼痛或不適，請立即停止使用。
12. 建議一開始不要使用最高強度按摩，從低強度慢慢提升，使用前要穿襪子。
13. 請勿在陽光直射或高溫處存放/使用本產品。
14. 如果您患有慢性病、惡性腫瘤、高燒、皮膚病、糖尿病等，以及老年人，請在使用前諮詢醫生。
15. 切勿在飲酒後或睡覺時使用。
16. 請勿在浴室等潮濕的地方使用，否則可能會導致觸電。
17. 請勿在產品附近放置有火災危險的化學品。
18. 如果在使用過程中出現故障或無法正常工作，請停止使用並聯繫客服中心。
19. 請將電源插在符合安全規範的插座上。
20. 請勿用濕手插拔電源插頭。
21. 請勿自行拆解產品，以免觸電。
22. 請勿將產品放於不穩固的桌面，以免產品掉落損壞。
23. 請勿將產品放於高溫或者高濕的環境。
24. 產品受潮時請勿使用。
25. 請勿站立在按摩器上！！！！

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用


- 腳部腫痛或發炎人士。
- 身體有銷釘、螺絲或人工關節人士。
- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑落症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。

機件名稱及功能

1. 機件
2. DC適配器
3. 腳套



①

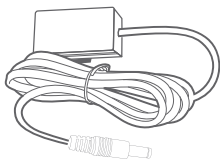

②



關於控制面板



電源 (開/關) 按鍵	方向按鍵	速度調節按鍵	發熱按鍵
啟動或關機，按摩器的方向（順時針/逆時針）自動切換。內置自動定時器，運行15分鐘後自動關閉	使用時按下按鍵可以改變按摩的方向。	3個速度可以調節（低/中/高），默認為中檔。	關機狀態下，長按發熱按鍵3秒可以啟動/關閉發熱功能。

使用方法

1. 連接電源適配器插入插座，按一下“”按鍵啟動產品，再按一下即關機。
2. 按“”可以選擇按摩方向，可以順時針/逆時針方向切換。
3. 按“”可以選擇按摩速度，默認是中檔，按一下切換至高檔，再按一下切換至低檔，以此循環。
4. 按“”按鍵可以啟動/關閉發熱功能，啟動默認發熱功能工作，按一下即可關閉。
5. 產品設有15分鐘自動關機功能。
6. 如不想使用按摩功能，需要單獨使用發熱功能，關機狀態下請長按發熱按鍵3秒鐘可以開啟發熱功能，此時只有發熱工作，長按3秒可以關機。
7. 如只想使用按摩功能，開機後按一次發熱按鍵即可。
8. 腳套拆卸後可按摩身體其他不同部位。
9. 腳套可以拆卸沖洗。
10. 請注意：只有在打開電源開關的情況下才可以開啟按摩方向/速度選擇功能，關閉電源按鍵的時候，所有功能都同時停止工作。

維護和保養

1. 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。只有腳套可以水洗。
2. 請勿使用漂白劑清洗。
3. 洗滌後，在通風良好的陰涼處晾乾。
4. 請勿在產品附近放置有火災危險的化學品。
5. 用乾布擦拭按摩器，保持清潔和乾燥。

故障排除

問題	原因	處理方法
動作中出現『咻咻』、『嗒嗒』的聲音	產品正常工作時發出的聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
無法開機	適配器未連接好	檢查電源是否接好
	電源開/關未開	開啟電源開/關
突然停止操作	斷電	檢查電源是否接好
	按摩時間超過15分鐘，自動關機	重新開啟開/關按鈕
	連續使用時間過長，產品過熱保護	產品冷卻後重新開啟開/關按鈕
	施力過大，按摩球堵轉	放鬆，減輕機器負荷

產品參數

產品名稱	: 多方位暖暖按摩器
型號	: MAX-M01MC0578B
輸入電壓	: 100-240V 50/60Hz
額定電壓	: DC 12V 2.5A
額定功率	: 30W
定時	: 15 mins
產品尺寸	: ≈ 32*24*17(cm)