

脉冲V面贴


V-SHAPED EMS PATCH

maxcare®

产品说明书

MAX-M01MC0569

使用脉冲V面贴前，
请详阅此产品说明书。

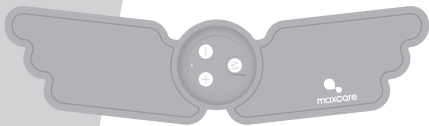

脉冲V面贴并非医疗仪器，其功能原意只供一般身体调理之用。使用此产品并不暗示或保证可取得任何有医学凭证的效果。

注意事项


1. 请勿用于按摩头部、喉咙、胸部或生殖器部位。
2. 请勿置于任何伤口、红肿、受感染或发炎部位。
3. 请勿用于敏感皮肤部位或是有皮肤问题或神经受损部位。
4. 孕妇不宜使用；月事期间，流量多时亦不可用于腹部；分娩后亦不可马上使用。
5. 手术后者（包括剖腹生产者）都不可使用。
6. 睡眠中、驾驶中或操作重型机器时一概不可使用。
7. 儿童不宜使用。
8. 在急性外伤或骨折后容易有出血问题的情况下不可使用。
9. 凡有严重静脉曲张部份不可使用。
10. 若怀疑自己患有或经诊断证实患有癫痫症、心脏病或多发性硬化症，或有栓塞风险者，一概不可使用。
11. 使用心脏起搏器者不可使用。

产品规格

产品名称：脉冲V面贴
产品型号：MAX-M01MC0569
额定电压：3.7V
工作电流：20mA
额定功率：74mW
产品净重：45g
产品尺寸：EMS控制器：45 x 45 x 10 mm
传导贴片：250 x 59 x 2 mm
包装尺寸：280 x 113 x 35 mm

产品配件

- EMS控制器
- 传导贴片（可重复使用）
- USB充电线
- 产品说明书

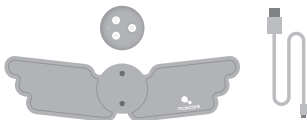

操作方式

充电

1. 把USB充电线的micro USB头连接EMS控制器机身的USB插口。把USB充电线的另一边连接一个5V USB插头。
2. 当充电时，指示灯会亮起红色；当充电完毕，指示灯会灭灯。
3. 完全充电需要大约1小时，之后可连续使用200分钟。
4. 若机器无法回应任何指示，可能是因为电量太低，请充电。

使用方法

1. 将传导贴片与电子控制器连接。
2. 撕下传导贴片上的保护膜，并将传导贴片贴于皮肤上。
3. 长按M键2秒以启动按摩，蓝灯点亮。
4. 有10级力度选择，按+键增强力度，按-键减弱力度。开机默认为一级。
5. 按M键以切换模式，有5种循环模式，分别是：蓝灯闪1下为自动循环模式、蓝灯闪2下为捶击模式、蓝灯闪3下为揉捏模式、蓝灯闪4下为推拿模式及蓝灯闪5下为按摩模式。工作30分钟后自动停止，长按M键2秒以再开始运作。
6. 于开机模式下长按M键2秒以关机，蓝灯熄灭。
7. 使用后切记将保护膜重新黏贴于传导贴片上。

注意

- 只有在控制器已启动，传导贴片已贴于皮肤上，才可调整强度级数。
- 传导贴片可使用约三十次。若不使用传导贴片时，请勿随意贴于皮肤上。
- 若传导贴片没有正确贴于皮肤上、皮肤太油、太湿或贴片已磨损不堪使用，会有轻微的刺痛感。

保养须知

- 请勿将控制器存放于潮湿或炎热处。
- 请勿将控制器及充电线浸入水中。
- 若传导贴片脏了或失去黏性，可用湿布轻轻擦拭或放在水龙头下冲洗。切勿使用刺激性肥皂洗涤。待传导贴片完全干透才使用。

建议使用方法

- 每天使用一至两次为宜；每次不宜超过30分钟。

常见问题及处理方法

常见问题	原因	处理方法
指示灯无亮灯	• 指示灯无亮灯	• 请为控制器充电
无法运作	• 未按下M键 • 传导贴片没有接触到皮肤上 • 强度级数设得太低 • 传导贴片已磨损，贴片上的导电凝胶不足 • 传导贴片黏贴位置不当	• 请按下M键以启动按摩 • 将传导贴片正确黏贴于皮肤上 • 请按+键以逐渐增加强度 • 清洁传导贴片，或换用新的传导贴片 • 先关机，把传导贴片移至其他目标位置