

# 脈衝V面貼


V-SHAPED EMS PATCH



## 產品說明書

MAX-M01MC0569

使用脈衝V面貼前，  
請詳閱此產品說明書。

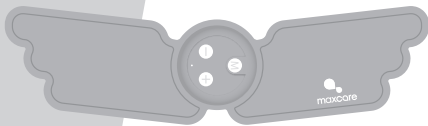

脈衝V面貼並非醫療儀器，其功能原意只供一般身體調理之用。使用此產品並不暗示或保證可取得任何有醫學憑證的效果。

### 注意事項


1. 請勿用於按摩頭部、喉嚨、胸部或生殖器部位。
2. 請勿置於任何傷口、紅腫、受感染或發炎部位。
3. 請勿用於敏感皮膚部位或是有皮膚問題或神經受損部位。
4. 孕婦不宜使用；月事期間，流量多時亦不可用於腹部；分娩後亦不可馬上使用。
5. 手術後者（包括剖腹生產者）都不可使用。
6. 睡眠中、駕駛中或操作重型機器時一概不可使用。
7. 兒童不宜使用。
8. 在急性外傷或骨折後容易有出血問題的情況下不可使用。
9. 凡有嚴重靜脈曲張部份不可使用。
10. 若懷疑自己患有或經診斷證實患有癲癇症、心臟病或多發性硬化症，或有栓塞風險者，一概不可使用。
11. 使用心臟起搏器者不可使用。

### 產品規格

產品名稱：脈衝V面貼  
產品型號：MAX-M01MC0569  
額定電壓：3.7V  
工作電流：20mA  
額定功率：74mW  
產品淨重：45g  
產品尺寸：EMS控制器：45 x 45 x 10 mm  
傳導貼片：250 x 59 x 2 mm  
包裝尺寸：280 x 113 x 35 mm

### 產品配件

- EMS控制器
- 傳導貼片（可重複使用）
- USB充電線
- 產品說明書

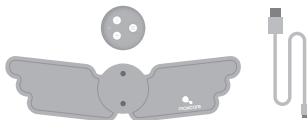

## 操作方式

### 充電

1. 把USB充電線的micro USB頭連接EMS控制器機身的USB插口。把USB充電線的另一邊連接一個5V USB插頭。
2. 當充電時，指示燈會亮起紅色；當充電完畢，指示燈會滅燈。
3. 完全充電需要大約1小時，之後可連續使用200分鐘。
4. 若機器無法回應任何指示，可能是因為電量太低，請充電。

### 使用方法

1. 將傳導貼片與電子控制器連接。
2. 撕下傳導貼片上的保護膜，並將傳導貼片貼於皮膚上。
3. 長按M鍵2秒以啟動按摩，藍燈點亮。
4. 有10級力度選擇，按+鍵增強力度，按-鍵減弱力度。開機默認為一級。
5. 按M鍵以切換模式，有5種循環模式，分別是：藍燈閃1下為自動循環模式、藍燈閃2下為捶擊模式、藍燈閃3下為揉捏模式、藍燈閃4下為推拿模式及藍燈閃5下為按摩模式。工作30分鐘後自動停止，長按M鍵2秒以再開始運作。
6. 於開機模式下長按M鍵2秒以關機，藍燈熄滅。
7. 使用後切記將保護膜重新黏貼於傳導貼片上。

### 注意

- 只有在控制器已啟動，傳導貼片已貼於皮膚上，才可調整強度級數。
- 傳導貼片可使用約三十次。若不使用傳導貼片時，請勿隨意貼於皮膚上。
- 若傳導貼片沒有正確貼於皮膚上、皮膚太油、太濕或貼片已磨損不堪使用，會有輕微的刺痛感。

### 保養須知

- 請勿將控制器存放於潮濕或炎熱處。
- 請勿將控制器及充電線浸入水中。
- 若傳導貼片髒了或失去黏性，可用濕布輕輕擦拭或放在水龍頭下沖洗。切勿使用刺激性肥皂洗滌。待傳導貼片完全乾透才使用。

### 建議使用方法

- 每天使用一至兩次為宜；每次不宜超過30分鐘。

### 常見問題及處理方法

常見問題	原因	處理方法
指示燈無亮燈	• 指示燈無亮燈	• 請為控制器充電
無法運作	• 未按下M鍵 • 傳導貼片沒有接觸到皮膚上 • 強度級數設得太低 • 傳導貼片已磨損，貼片上的導電凝膠不足 • 傳導貼片黏貼位置不當	• 請按下M鍵以啟動按摩 • 將傳導貼片正確黏貼於皮膚上 • 請按+鍵以逐漸增加強度 • 清潔傳導貼片，或換用新的傳導貼片 • 先關機，把傳導貼片移至其他目標位置