


3D AIR

**MASSAGING &
STRETCHING MAT**

氣壓舒筋按摩墊

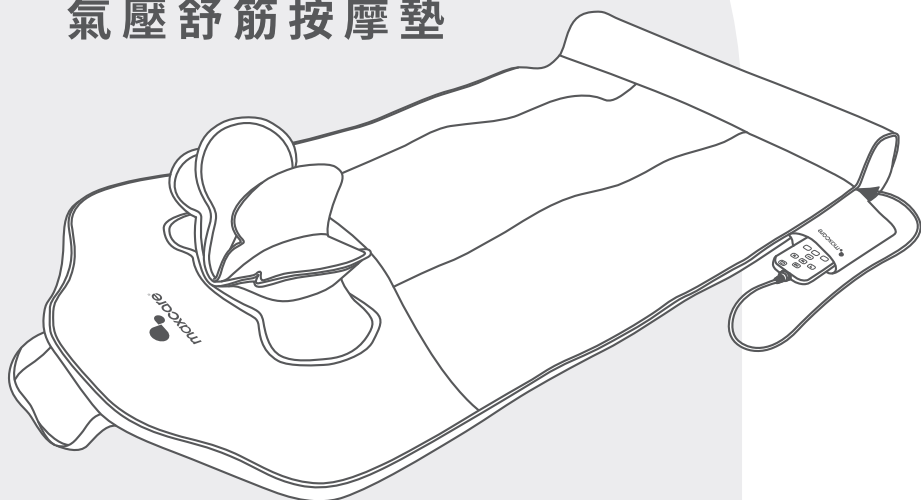

产品使用说明书

MAX-X02SM615



企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 **maxcare** 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。**maxcare** 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，**maxcare** 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。**maxcare** 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。**maxcare** 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。



MASSAGING & STRETCHING MAT



气压舒筋按摩垫

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目錄

安全注意事项	P.01 - P.02
机件名称及功能	P.03
使用方法	P.04
产品的清洁、保养	P.05
故障排除	P.06
产品技术与参数	P.07

 **安全注意事项** **1. 重要安全警告**


- 请仔细阅读本使用说明书，并按照说明书指示使用产品。
- 请确保产品远离水源，避免进水引起短路。
- 请使用符合产品规格的插头。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请勿在室外使用。
- 请务必谨慎使用温热功能，以避免可能会导致严重灼伤。
- 连续使用此产品时间请勿超过30分钟。
- 使用前，请检查机件、电源线或插头是否破损或损坏，如有破损请立即停止使用，请勿擅自拆卸修理，应联络本公司来修理。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用本产品。
- 请不要在按摩开始时调到最大强度以免受伤。
- 禁止用水清洗本产品。

 **2. 使用环境**

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体的环境下使用此产品。
- 请勿在空气不流通的环境下使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请勿将产品放置在靠近火源或阳光直射的地方。
- 如产品由低温处移到较温暖的环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。

 **3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用**

- 皮肤有创伤或有传染性皮肤病患者。
- 患有糖尿病、感觉障碍、恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高、低血压等患者。
- 有出血倾向、血栓症、严重的动脉瘤或急性静脉瘤等血液重复障碍等症状者。
- 身体有肿痛或发炎人士。
- 静脉炎、血栓形成、关节功能障碍、炎症、骨骼脆弱或骨质疏松症患者。
- 有心脏问题以及佩戴电子医疗器械如心脏起搏器者。
- 身体有销钉或螺丝人士。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热敏感的人使用时必须注意。

 安全注意事项 4. 安全事项


- 请勿在产品上放置重物。
- 请将产品放置在平坦的地面上。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 折叠时不要使用。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头或操作遥控器。
- 防止液体进入此产品，避免触电，导致故障或损坏机器。
- 插拔电源插头时请勿拉扯电源线，不可过于粗暴。
- 请勿使电线受损或更改此产品电路。
- 请勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等带电部位；应用干布清洁，不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 如果发生停电应该拔掉电源，停止使用产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不适合提供给身体有残障、感官或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，应先咨询医生意见，及必须在监护人的看护下谨慎使用。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 移动产品时，请勿直接拉扯电源线或拖拉本产品，以免造成损坏。
- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸、修理、任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源、高温及易燃的地方，避免发生故障和危险，易造成变形、变色或损坏。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 本产品为个人按摩产品，不能代替药品和医疗器；请勿用于治疗目的。
- 请正确使用本产品，否则可能会发生事故或引起身体不适。

 5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 切勿将产品置放于阳光照射或高温的场所，以免造成产品褪色。

 机件名称及功能


机件名称

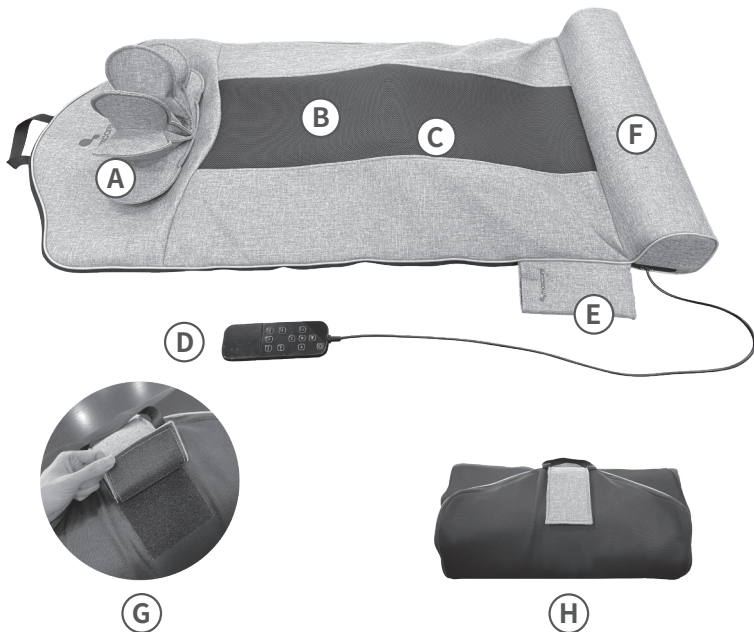


- A: 颈椎气压按摩区
- B: 肩/背/腰部气压按摩区
- C: 透气网布
- D: 遥控器

- E: 遥控器收纳袋
- F: 舒适加厚海棉
- G: 魔术贴
- H: 卷式收纳设计

内含配件

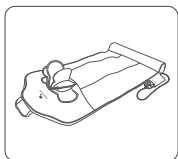

按摩垫

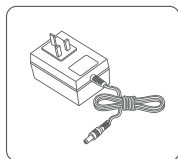


充电插头







说明书

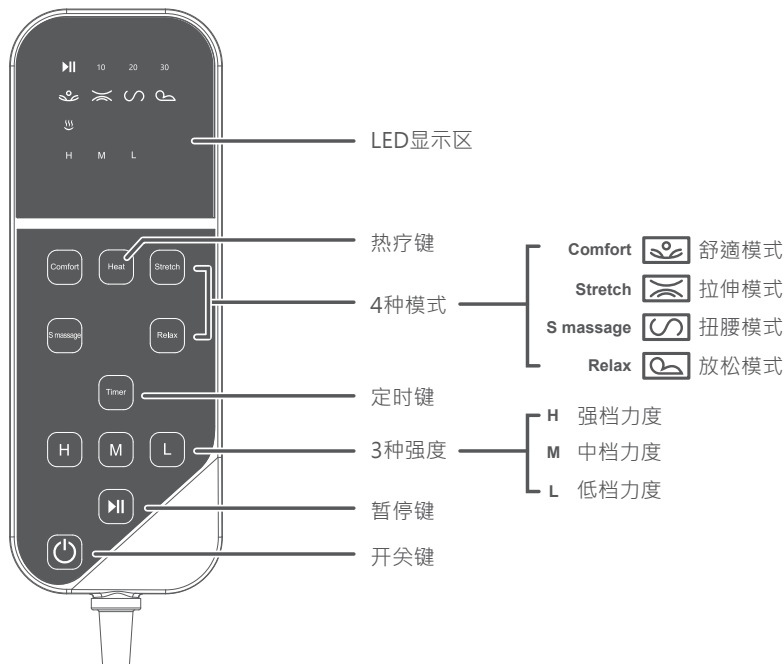 使用方法

遥控器使用说明



使用说明

- 使用前，请检查产品是否有破损。
- 将产品放置在平坦的位置(例如梳化、床上)，然后将产品摆放固定好。
- 将电源线插入220V~50Hz的插座，此时产品进入待机状态。
- 轻按遥控器上的“开关键”开机，进入预设舒适模式。
- 4种按摩模式可选：
 -  Comfort：舒适模式，中档力度，工作时间20分钟
 -  Stretch：拉伸模式，中档力度，预设时间20分钟
 -  S message：扭腰模式，中档力度，预设时间20分钟
 -  Relax：放松模式，中档力度，预设时间20分钟
- 按“热疗键”启动或关闭热疗功能。
- 按“定时键”选择不同的工作时间：20分钟、10分钟、30分钟。
- 按“强度键”选择气压按摩强度：L档、M档、H档。
- 按“暂停键”暂停所有功能，再按一次恢复正常使用。
- 在工作状态下，按开关键或定时时间结束，产品将停止工作，LED显示区关闭，并进入待机状态。

 产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确保关闭电源，电源插头已经从插座拔出。
- 请使用柔软的干布或轻微湿润的布擦拭产品表面。



注意

- 请勿湿手拔插电源插头。
- 请勿用水冲洗产品，或将任何液体溅到产品内部。
- 请勿使用苯或稀释剂等腐蚀性液体清洁产品，以免造成产品褪色或损坏。
- 产品潮湿时，请停止使用及请勿拆卸，让产品自然风干即可。

保养

- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用此产品，请用防尘罩(请自行购买)套住此产品，防止落入灰尘。



注意

- 请勿将此产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色。
- 请勿在产品上搁置重物。
- 不使用时，请确认关闭电源，并拔去电源插头。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味;
 - * 触动导线后有时通电，有时断电;
 - * 电源线发热;
 - * 电源线是否破损;
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头；请勿私自拆卸修理，请与本公司联络。


 故障排除

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及我们联络。

现象	可能原因	处理方法
无法开机	电源插头没有插好	连接好插头
	电源开/关未开	开启电源开/关
	工作时间过长，电机过热保护	待电机自然冷却后再使用
突然停止操作	断电	检查电源介面是否连接好
	按摩时间超过30分钟，自动关机	重新开启开/关按钮
	连续使用时间过长，产品过热保护	产品冷却后，重新开启开/关按钮

 产品技术与参数

产品名称 : 气压舒筋按摩垫
产品型号 : MAX-X02SM615
额定电压 : DC12V
额定功率 : 36W
额定时间 : 20分钟
加热温度 : 45-50°C
产品尺寸 : 120x58.5x9.5 cm
包装尺寸 : 61x18x39 cm
产品净重 : 3.7kg
产品重量 : 5.1kg
内含配件 : 按摩垫, 电源插头, 说明书