

3D AIR

MASSAGING &
STRETCHING MAT

氣壓舒筋按摩墊



產品使用說明書

MAX-X02SM615



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。



MASSAGING & STRETCHING MAT

氣壓舒筋按摩墊

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.02
機件名稱及功能	P.03
使用方法	P.04
產品的清潔、保養	P.05
故障排除	P.06
產品技術與參數	P.07

 **安全注意事項** **1. 重要安全警告**

- 請仔細參閱本使用說明書，並按照說明書指示使用產品。
- 請確保產品遠離水源，避免進水引起短路。
- 請使用符合產品規格的插頭。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請勿在室外使用。
- 請務必謹慎使用溫熱功能，以避免可能會導致嚴重灼傷。
- 連續使用此產品時間請勿超過30分鐘。
- 使用前，請檢查機件、電源線或插頭是否破損或損壞，如有破損請立即停止使用，請勿擅自拆卸修理，應聯絡本公司來修理。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用本產品。
- 請不要在按摩開始時調到最大強度以免受傷。
- 禁止用水清洗本產品。

 **2. 使用環境**

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體的環境下使用此產品。
- 請勿在空氣不流通的環境下使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請勿將產品放置在靠近火源或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫處移到較溫暖的環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。

 **3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用**

- 皮膚有創傷或有傳染性皮膚病患者。
- 患有糖尿病、感覺障礙、惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高、低血壓等患者。
- 有出血傾向、血栓症、嚴重的動脈瘤或急性靜脈瘤等血液重複障礙等症狀者。
- 身體有腫痛或發炎人士。
- 靜脈炎、血栓形成、關節功能障礙、炎症、骨骼脆弱或骨質疏鬆症患者。
- 有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 身體有銷釘或螺絲人士。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 無人監管時14歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱敏感的人使用時必須注意。

 安全注意事項 4. 安全事項


- 請勿在產品上放置重物。
- 請將產品放置在平坦的地面上。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 摺疊時不要使用。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭或操作遙控器。
- 防止液體進入此產品，避免觸電，導致故障或損壞機器。
- 插拔電源插頭時請勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 請勿使電線受損或更改此產品電路。
- 請用濕布清潔此產品電源開關、插頭等帶電部位；應用乾布清潔，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 如果發生停電應該拔掉電源，停止使用產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不適合提供給身體有殘障、感官或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，應先諮詢醫生意見，及必須在監護人的看護下謹慎使用。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 移動產品時，請勿直接拉扯電源線或拖拉本產品，以免造成損壞。
- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸、修理、任意改造機體結構或更換零件。
- 請勿放置在接近火源、高溫及易燃的地方，避免發生故障和危險，易造成變形、變色或損壞。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 本產品為個人按摩產品，不能代替藥品和醫療器；請勿用於治療目的。
- 請正確使用本產品，否則可能會發生事故或引起身體不適。

 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 切勿將產品置放於陽光照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

 機件名稱及功能


機件名稱

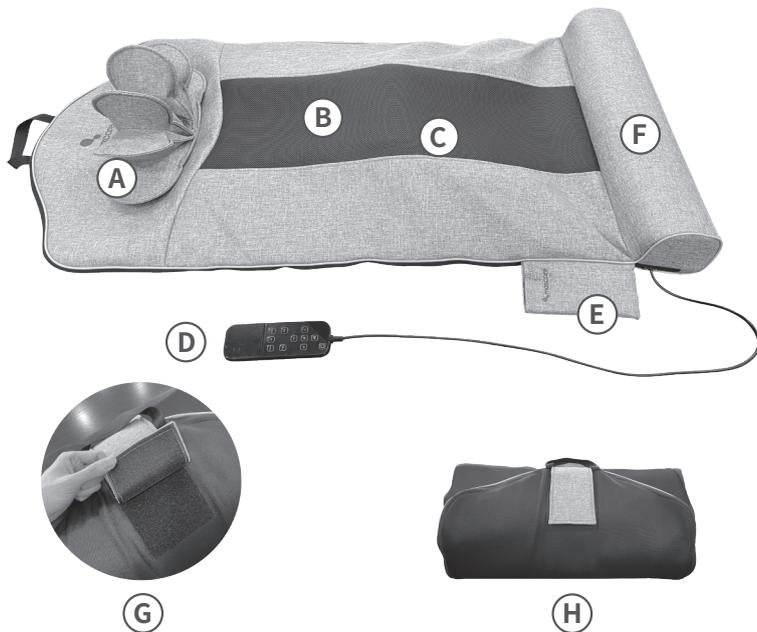


- A: 頸椎氣壓按摩區
- B: 肩/背/腰部氣壓按摩區
- C: 透氣網布
- D: 遙控器

- E: 遙控器收納袋
- F: 舒適加厚海棉
- G: 魔術貼
- H: 捲式收納設計


內含配件

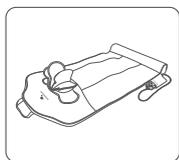

按摩墊

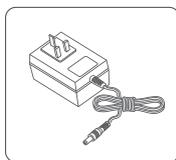


充電插頭

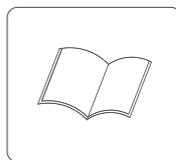

說明書

 使用方法

遙控器使用說明

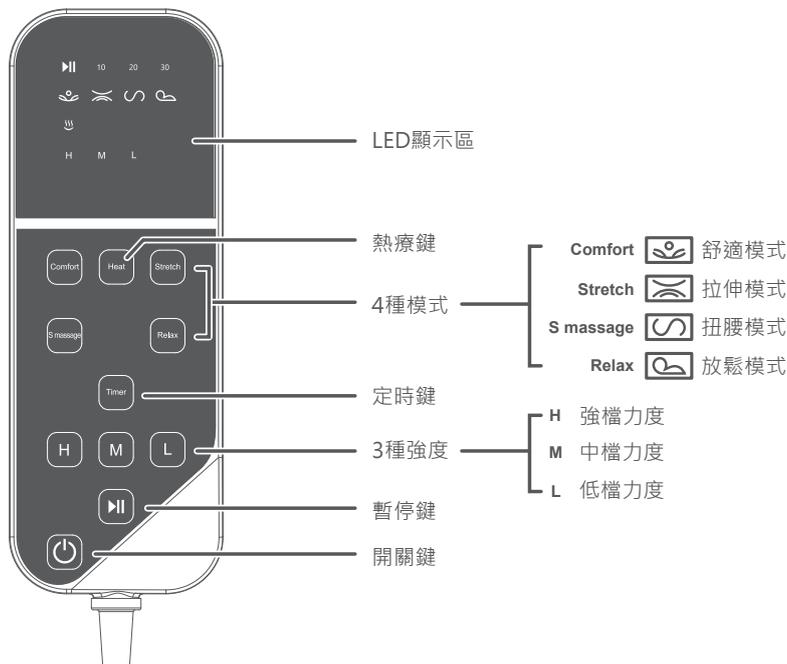

使用說明

1. 使用前，請檢查產品是否有破損。
2. 將產品放置在平坦的位置(例如梳化、床上)，然後將產品擺放固定好。
3. 將電源線插入220V~50Hz的插座，此時產品進入待機狀態。
4. 輕按遙控器上的 " 開關鍵 " 開機，進入預設舒適模式。
5. 4種按摩模式可選：
 -  **Comfort**：舒適模式，中檔力度，工作時間20分鐘
 -  **Stretch**：拉伸模式，中檔力度，預設時間20分鐘
 -  **S message**：扭腰模式，中檔力度，預設時間20分鐘
 -  **Relax**：放鬆模式，中檔力度，預設時間20分鐘
6. 按 " 熱療鍵 " 啟動或關閉熱療功能。
7. 按 " 定時鍵 " 選擇不同的工作時間：20分鐘、10分鐘、30分鐘。
8. 按 " 強度鍵 " 選擇氣壓按摩強度：L檔、M檔、H檔。
9. 按 " 暫停鍵 " 暫停所有功能，再按一次恢復正常使用。
10. 在工作狀態下，按開關鍵或定時時間結束，產品將停止工作，LED顯示區關閉，並進入待機狀態。

 產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確保關閉電源，電源插頭已經從插座拔出。
- 請使用柔軟的乾布或輕微濕潤的布擦拭產品表面。



注意

- 請勿濕手拔插電源插頭。
- 請勿用水沖洗產品，或將任何液體濺到產品內部。
- 請勿使用苯或稀釋劑等腐蝕性液體清潔產品，以免造成產品褪色或損壞。
- 產品潮濕時，請停止使用及請勿拆卸，讓產品自然風乾即可。

保養

- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所，以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用此產品，請用防塵罩(請自行購買)套住此產品，防止落入灰塵。



注意

- 請勿將此產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。
- 請勿在產品上擱置重物。
- 不使用時，請確認關閉電源，並拔去電源插頭。

溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
 - * 有焦糊氣味;
 - * 觸動導線後有時通電，有時斷電;
 - * 電源線發熱;
 - * 電源線是否破損;
 - * 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，請勿私自拆卸修理，請與本公司聯絡。

? 故障排除

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及我們聯絡。

現象	可能原因	處理方法
無法開機	電源插頭沒有插好	連接好插頭
	電源開/關未開	開啟電源開/關
	工作時間過長，電機過熱保護	待電機自然冷卻後再使用
突然停止操作	斷電	檢查電源介面是否連接好
	按摩時間超過30分鐘，自動關機	重新開啟開/關按鈕
	連續使用時間過長，產品過熱保護	產品冷卻後，重新開啟開/關按鈕

 **產品技術與參數**

產品名稱	: 氣壓舒筋按摩墊
產品型號	: MAX-X02SM615
額定電壓	: DC12V
額定功率	: 36W
額定時間	: 20分鐘
加熱溫度	: 45-50°C
產品尺寸	: 120x58.5x9.5 cm
包裝尺寸	: 61x18x39 cm
產品淨重	: 3.7kg
產品重量	: 5.1kg
內含配件	: 按摩墊, 電源插頭, 說明書