


# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*

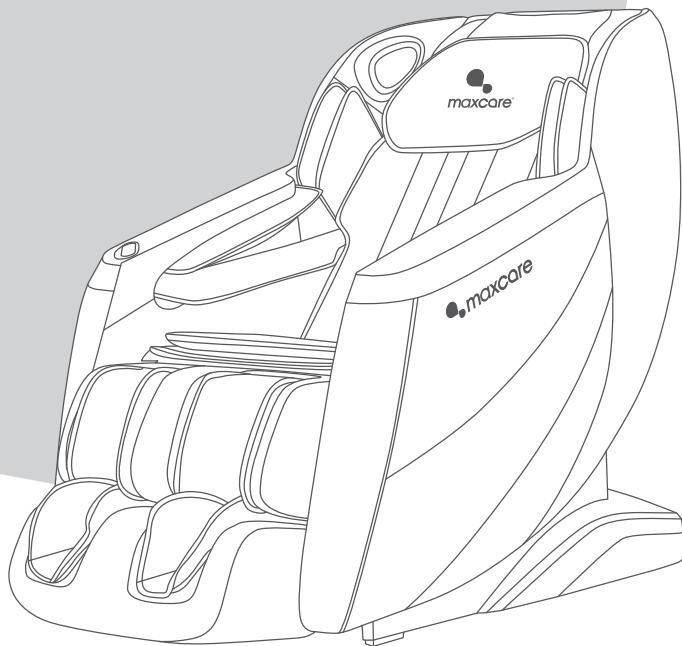

產品使用說明書

**MAX- Z05A20226**

  
**maxcare®**



## 企業介紹

**maxcare** 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

**maxcare** 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品 **maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

**maxcare** 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*


感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

## 目錄

---

安全注意事項 .....	P.01 - P.06
機件名稱及功能 .....	P.07 - P.10
使用方法 .....	P.11 - P.18
產品的清潔、保養 .....	P.19 - P.20
常見問題及處理方法 .....	P.21 - P.22
產品技術參數 .....	P.23



## 安全注意事項



### 1. 重要安全警告

- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其他用途。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分。
- 在使用過程中、使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



### 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



### 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或過去腿、腰、頸曾經受過傷者。（腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑脫症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液循環障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢循環障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。

- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。

## 安全注意事項

### 4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其他治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。

### 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請問歇使用，不應使此產品長期連續運轉。


### 6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。



注意



在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

 安全注意事項



## 安裝部件

## 小腿安裝說明

1. 將小腿和按摩椅上的氣管與線束相連後，再解開固定管線帶，將連接部分塞進座架內(圖1)。
2. 將小腿固定塊套在小腿的左右兩側圓管上(圖2)。

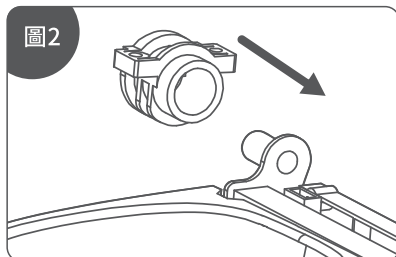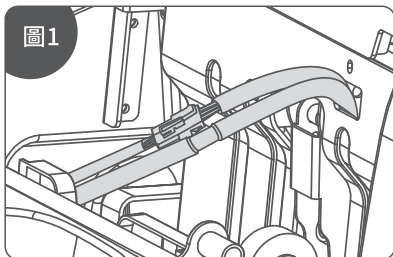

3. 將套上固定塊的小腿掛在按摩椅座架掛鉤上(圖3)。
4. 再用4顆(左右各兩顆)M4螺釘將小腿緊固在按摩椅上，檢查上下翻動有無異常，管線有無折住現象，小腿安裝完成(圖4)。

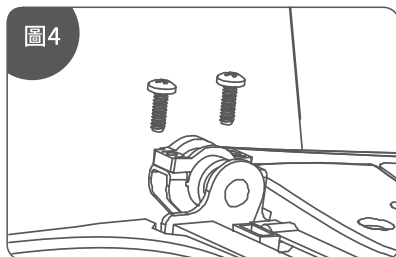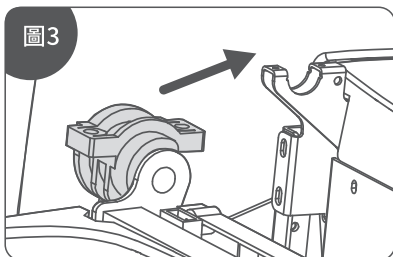


## 安全注意事項

### 安置按摩椅

#### ⚠ 安裝位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少8cm。


請勿將按摩椅暴露於陽光直射或高溫環境下(如：發熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本機接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。

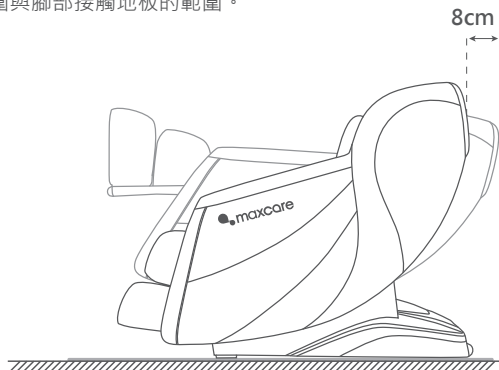


#### ⚠ 產品移動說明

托住座架底部兩側，然後抬起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本機必須由兩人或多人搬運)

1. 在木地板等易損的地面上請抬起按摩椅進行移動。
2. 在類似木質地板上移動時，建議抬起方式。避免腳輪損傷地板，抬起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本機，地板可能受損，因此，建議在地板上鋪上墊子等物品。

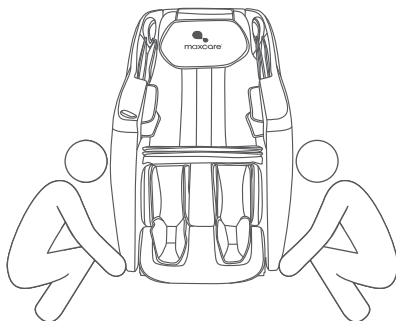



 安全注意事項

## 安置按摩椅


 移動方法


使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。  
注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。

1. 移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除產品供電。
2. 移動時產品上需空置，勿使人員、寵物或雜物停留在本產品上。
3. 使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
4. 使用腳輪移動本品時，不支持單次連續使移動，超過50米距離，請使本品緩慢勻速移動。

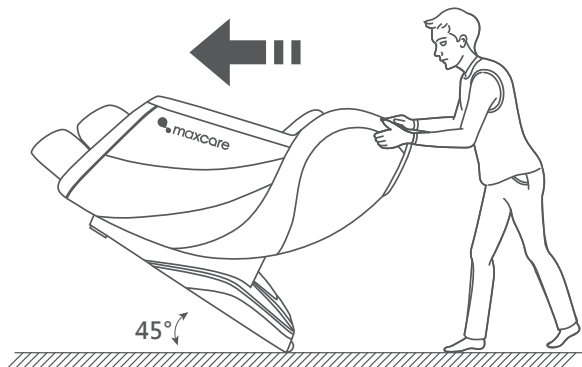


 頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊（推薦使用頭靠墊）。靠背墊與靠背通過拉鏈連接（1），頭靠墊與靠背墊通過拉鏈連接（2）。

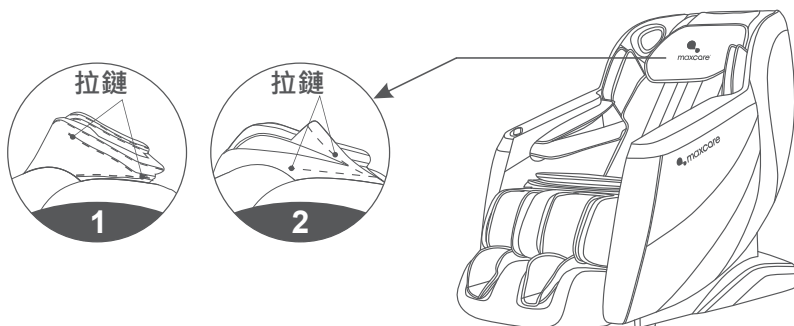



 安全注意事項


## 使用前

 警告


確保本機周圍沒有人、寵物及其他物體。

 確保本機縫隙間沒有異物


按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與太空艙之間區域。  
任何情況下勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

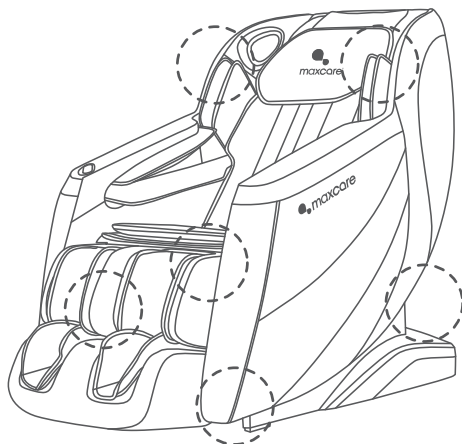

機件名稱及功能

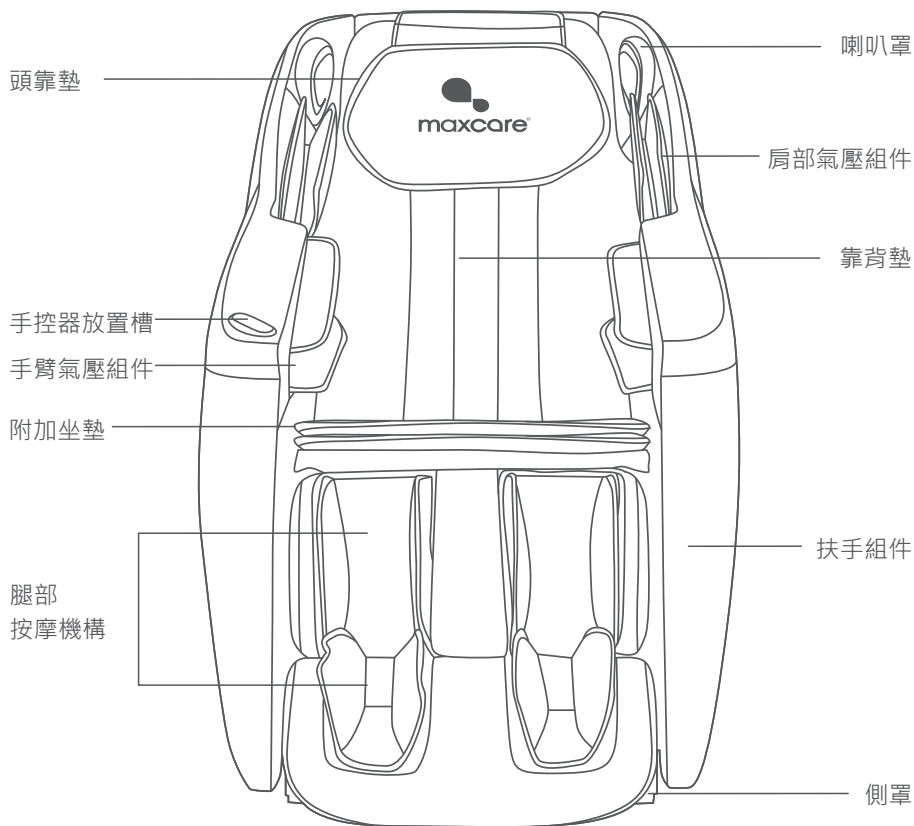


機件名稱及功能

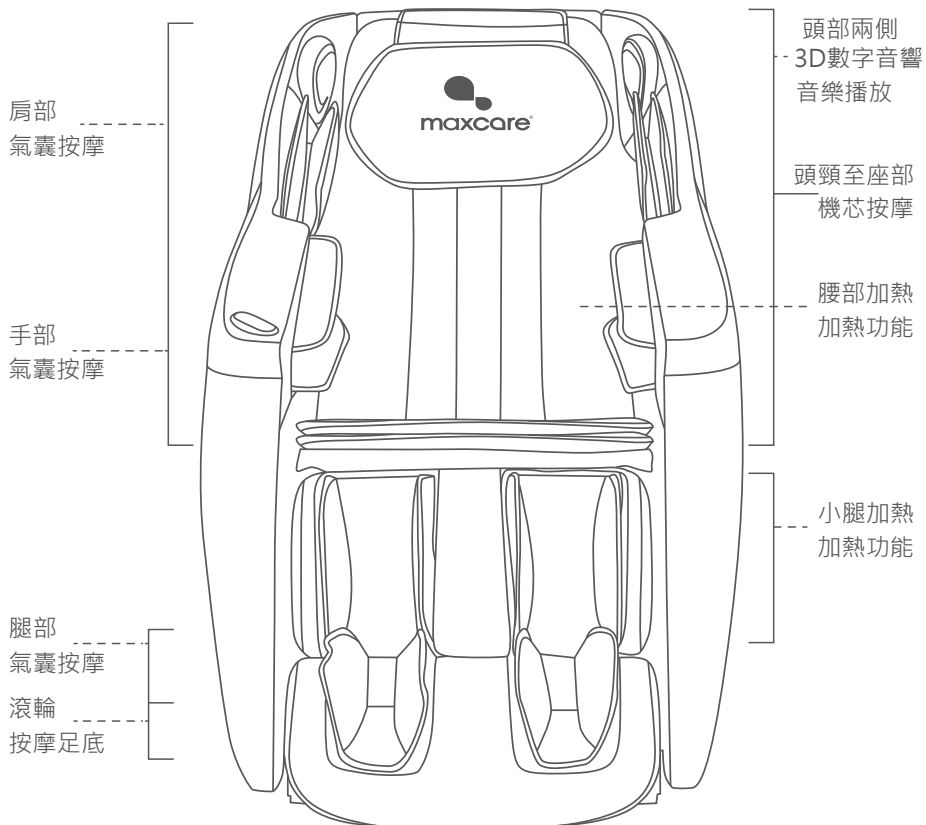


 機件名稱及功能


## 手控器按鍵說明

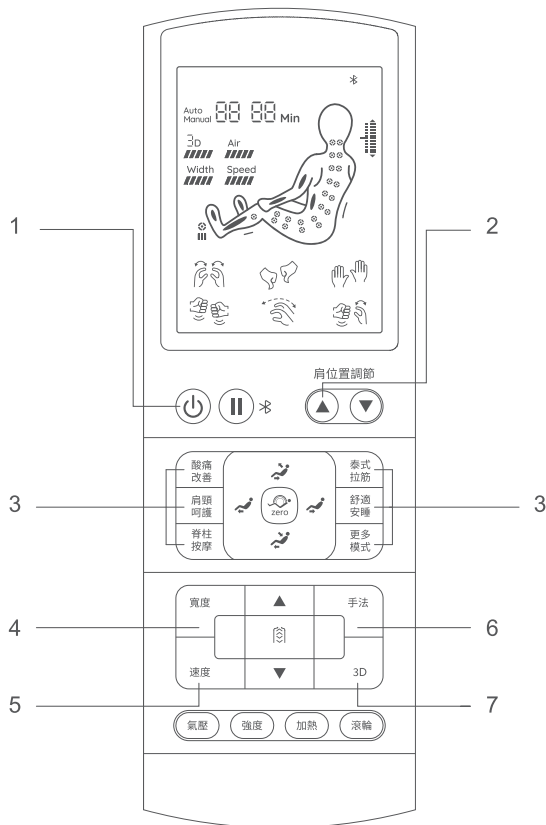

1. 待機鍵: 開啟或關閉按摩椅
2. 肩位置上 / 下鍵: 肩位置向上 / 向下調節
3. 自動模式: 自動按摩功能包括酸痛改善、肩頸呵護、脊柱按摩、泰式拉筋、舒適安睡及更多模式，循環調節更多自動模式
4. 寬度: 按摩寬度3檔可調
5. 速度: 按摩速度5檔可調
6. 手法: 開啟或關閉按摩手法，按摩手法7種可選
7. 3D: 按摩強度5檔可調


 機件名稱及功能

## 一. 手控器按鍵說明

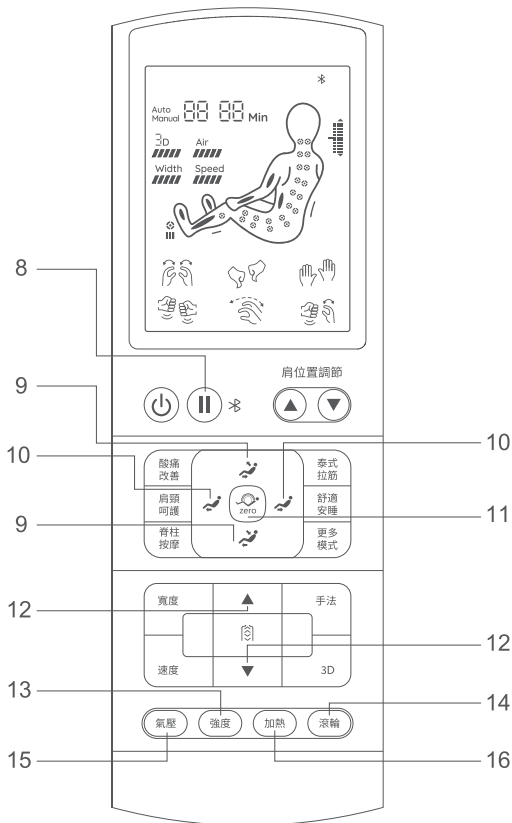


8. 暫停鍵/藍牙：短按開啟或暫停按摩功能。長按開啟或關閉藍牙
9. 坐姿上升 / 下降鍵：向上 / 向下調節按摩椅角度
10. 腿部機構上升 / 下降鍵：腿部機構向上 / 向下調節
11. 零重力鍵：零重力角度設置，零重力 I、零重力 II、零重力 III、零重力關閉循環調節
12. 按摩部位上 / 下鍵：按摩部位向上 / 各下調節
13. 氣壓強度：強度 5 檔可調
14. 腳板滾輪：開啟或關閉滾輪按摩
15. 氣壓：開啟或關閉氣壓，上半身、下半身、全身氣壓，全部關閉
16. 加熱：循環切換加熱部位，關閉加熱

## 使用方式


### 二. 開始按摩

- ① 按下待機鍵，啟動按摩，按摩椅自動躺臥。

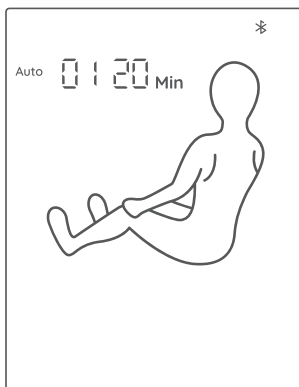


開機狀態示意圖

- ② 開機後按摩椅將自動調整角度，調整好後即開始人體肩位置檢測，此時請保持身體及坐姿與按摩椅貼合。
- ③ 肩部位置微調，體型檢測完成後手控器或聲音提示會提示用戶微調肩位置，如果按摩輪停在您的肩部位置，則不需要調整直接開始按摩，如果不在，請使用肩部位置上鍵、下鍵將按摩輪調整到您的肩部位置然後開始按摩。如果超過10秒未操作則直接默認當前的按摩輪位置為肩部位置並開始按摩。注意：在開機或檢測的過程中，按對應的按鍵可以切換預設的自動模式，再按一次可以跳過檢測，直接進入按摩。

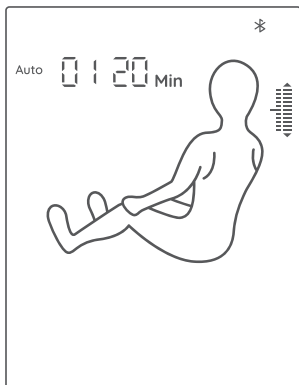

肩位置示意圖

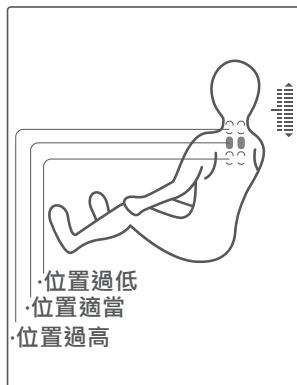


 使用方法

## 三. 自動模式

## 1. 自動模式選擇

- (1) 點擊手控器自動模式按鍵，選擇自動模式開始按摩。
- (2) 在自動模式選擇按鍵區域，共有17種自動程式可供選擇：酸痛改善、肩頸呵護、脊柱按摩、泰式拉筋、舒適安睡、更多模式（按更多模式按鍵循環調自動程式）。

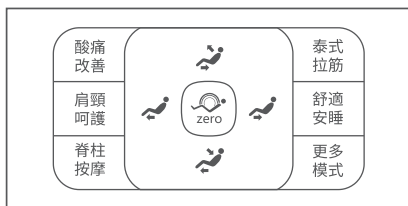

手控器自動程序區域示意圖


## 2. 自動模式介紹

功能	描述	顯示
酸痛改善	舒緩全身疲勞酸痛，四肢得到放鬆改善微循環，舒緩關節	01
肩頸呵護	針對肩部和頸部的獨特按摩手法，有助於促進血液循環，緩解頸肩酸痛，改善腦部供血。	02
脊柱按摩	呵護整脊健康，針對運動量不足進行改善。	03
泰式拉筋	使用泰式按摩手法，針對身體進行拉伸，全面緩解身體疲勞及酸痛	04
舒適安睡	以揉捏、指壓的按摩手法，對十二大養生腧穴的按摩幫助身體調理平衡；讓人更能快速入睡，快速改善睡眠，提升睡眠品質。	05
酸痛改善 2.0	3D強度在全程最凸出的狀態下，改善全身疲勞酸痛。	06

 使用方法








功能	描述	顯示
脊柱按摩 2.0	3D強度在全程最凸出的狀態下，呵護脊椎健康。	07
全身牽引	開啟肩部氣囊，靠背慢慢下滑，同時腿部氣囊和足底滾輪開啟，小腿架慢慢下降，機械手按摩至腰部(氣囊機械手充放氣)，慢慢的一充一放按摩腰部，開啟手臂氣囊，機械手以拍打手法從腰部到大腿，再從大腿按摩至肩頸。循環動作。	08
推拿熱療	配合氣囊進行揉捏按摩，背及腰部進行揉拍按摩、臀部進行揉捏、大牌進行揉拍按摩，同時開啟足底滾輪和腿部及手臂氣囊進行同步按摩。開啟背部和腿部熱療。	09
輕鬆活力	輕柔舒適的深度按摩，舒緩身體疲勞，放鬆身體。	10
輕鬆放鬆	最舒適的按摩體驗。	11
活力早晨	按摩機械手從肩頸部慢慢下滑至腰部，再用揉拍手法，從腰部按摩至肩頸部。再從肩頸部用拍打、敲擊按摩手法一直按摩至腰部，重複來回。	12
全身保健	針對經絡進行疏通，快速改善身體微循環，提升免疫力。	13
辦公養生	針對久坐辦公室的情況，通過按摩增加身體的運動量，改善機體功能。	14
午後充電	機械手、氣囊、滾輪各種按摩方式同時進行，配搭自選的藍牙音樂，放鬆身心壓力。	15
塑形美臀	針對臀部和大腿的有效按摩，使身體塑形，減少多餘脂肪的堆積。	16
運動復原	迅速恢復運動後的身體疲勞。	17



 使用方法

## 四. 手動程式

- 按摩手法：選擇手控器手法按鍵可以選擇按摩手法。
  - 按摩手法：停止、揉捏、指壓、拍打、敲擊、揉捏拍打、3D 1、3D 2等手法可選，手法按鍵循環調節。
  - 信息界面手法顯示。


功能		
停止	揉捏 	指壓 
拍打 	敲擊 	揉捏拍打 
3D1 	3D2 	

- 按摩速度：選擇手控器速度按鍵可以調整按摩速度。
  - 按摩速度有1~5檔可選，1檔最慢5檔最快，按摩手法停止時無法調節速度。
  - 資訊界面速度顯示。



速度				
1檔 	2檔 	3檔 	4檔 	5檔 

- 按摩寬度：選擇手控器寬度按鍵可以調整按摩寬度。
  - 按摩寬度有1~3檔可選，1檔最窄3檔最寬。
  - 信息界面寬度顯示。

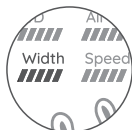

寬度		
1檔 	2檔 	3檔 

## 使用 方法

4. 按摩部位：選擇手控器部位按鍵可以選擇按摩部位。

- (1) 按摩部位一共有定點、局部、上背、下背、全背等5種可選。
- (2) 資訊界面部位顯示。


功能	描述	
定點 H0	定點位置定點按摩。	在選擇定點和局部按摩手法時，可以在資訊界面狀態下通過手控器部位按鍵旁“上鍵”和“下鍵”調整按摩區域。
局部 H1	小範圍局部往返按摩。	
上背 H2	上背往返按摩。	
下背 H3	下背往返按摩。	
全背 H4	全背往返按摩。	

5. 氣壓按摩：選擇手控器氣壓按鍵可以選擇氣壓模式。

- (1) 氣壓模式分別有上半身、下半身、全身氣壓，全部關閉則關閉氣壓功能。



- (2) 強度調節：氣壓功能打開後可以調節氣壓強度，總共5檔可調，1檔表示強度弱，5檔表示強度最強。

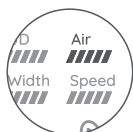



使用方法

五. 協助工具





1. 加熱功能 · 手控器加熱按鍵可以循環切換: 靠背+小腿加熱、靠背加熱、小腿加熱、關閉加熱。

(1) 信息界面加熱顯示。

加熱顯示			
<p>靠背+小腿</p> 	<p>靠背</p> 	<p>小腿</p> 	<p>關閉</p> 


2. 滾輪 · 手控器滾輪按鍵可以循環切換: 滾輪按摩強度 (3檔可調)、關閉足底滾輪功能。






(1) 信息界面滾輪顯示。

滾輪顯示			
<p>1檔</p> 	<p>2檔</p> 	<p>3檔</p> 	<p>關閉</p> 

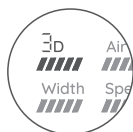3. 3D強度 · 手控器3D按鍵可以選擇按摩強度調節, 共5檔強度。

(1) 資訊界面3D強度顯示。




3D強度				
1檔	2檔	3檔	4檔	5檔
				

## 使用方法

### 六. 角度調整



#### 1. 零重力:

共3檔可調，對應3個設定好的按摩椅角度。按下手控器零重力按鍵  可以循環調節3個零重力檔位或關閉零重力。



#### 2. 全身角度：

按住手控器坐姿下降按鍵  開始向下調節按摩椅角度，靠背機構下降，腿部機構上升，鬆開按鍵則會停止調節；按住手控器坐姿上升按鍵  開始向上調節按摩椅角度，靠背機構上升，腿部機構下降，鬆開按鍵則會停止調節。調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。

#### 3. 腿部機構角度：

按住手控器腿部機構下降鍵  開始向下調節腿部機構角度，鬆開按鍵則會停止調節。按住手控器腿部機構上升鍵  開始向上調節腿部機構角度，鬆開按鍵則會停止調節。調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。

### 七. 藍牙音響播放操作說明

1. 長按“暫停”  開啟按摩椅藍牙，手控器界面顯示 。
2. 進入智慧設備主功能表，打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜新的藍牙設備”進行搜索。
3. 智慧設備將搜索到相應的藍牙型號(如MAX-Z05A20226-XXXX)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
4. 打開智慧設備的音樂播放機，選擇歌曲進行播放。

### 八. Maxcare Massage Chair APP作業系統說明（選配功能）注：請在開機後使用該功能。

#### 1. Maxcare Massage Chair 下載安裝：

- (1) 安卓系統、鴻蒙系統：掃描二維碼進行下載安裝，也可進入谷歌搜索“Maxcare Massage Chair”。
- (2) 蘋果系統：在AppStore(蘋果應用商城)中搜索Maxcare Massage Chair進行下載。



支持安卓系統、鴻蒙系統掃描下載  
(安卓系統、鴻蒙系統下載方式)



支持iOS系統掃描下載  
(蘋果系統下載方式)



iOS系統下載方式

## 使用方法

(3) 打開手機藍牙功能 ，點擊Maxcare Massage Chair打開APP。

### 2. APP操控按摩椅


- (1) 在APP界面中，選擇“藍牙設置”，搜索並添加設備；在設備清單界面中選擇對應藍牙。
- (2) 設備連接成功後自動進入APP界面，此時可以通過手機操控按摩椅。

## 九. 關閉電源·結束按摩


在按摩過程中，按下待機鍵關機。立即關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構復位，或按摩定時時間到，按摩自動關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構不復位。

切斷整機電源，附圖（整機電源切斷示意圖）。


關閉電源開關(“O”位置)

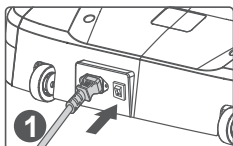

拔掉電源插頭示意圖

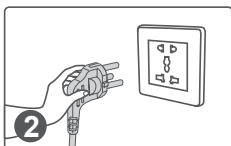

拔掉整機連接線示意圖

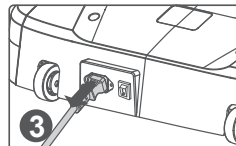

## 🔧 產品的清潔、保養

### 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

### 保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。



注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

### 溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
  - \* 有焦糊氣味。
  - \* 觸動導線後有時通電，有時斷電。
  - \* 電源線發熱。
  - \* 電源線是否破損。
  - \* 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

## PU合成皮革的保養及清潔

PU合成皮革是由聚氨酯樹脂塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的環境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。

### PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精、松節油、天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；

### PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
2. 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
4. 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皸裂。

## ❓ 常見問題及處理方法


以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及與我們聯絡。

<b>現象</b>	腿部或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嗒、嗒”音。
<b>可能原因及處理</b>	出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。
<b>現象</b>	本機開啟後功能未運行或部分功能未運行。
<b>可能原因及處理</b>	本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。
<b>現象</b>	本機在調整姿態時發出皮革摩擦聲。
<b>可能原因及處理</b>	本產品整機採用了符合環保要求的高級抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相對運動處摩擦會產生正常的輕微響聲，屬正常現象。注意：如本機在運行時聽到織物或皮革撕裂聲，請立即停止使用，並尋求指定專業人員檢修。
<b>現象</b>	按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。
<b>可能原因及處理</b>	如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。
<b>現象</b>	無法開機
<b>可能原因及處理</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 無法開機。請連接好接頭</li> <li>2. 電源開/關未開。請開啟電源開/關</li> <li>3. 電源插頭沒有插好。請插好插頭</li> </ol>



## ? 常見問題及處理方法


現象	突然停止操作
可能原因及處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 斷電。請連接好接頭</li><li>2. 按摩時間超過20分鐘，自動關機。請開啟電源開/關</li><li>3. 連續使用時間過長，產品過熱保護。請插好插頭</li><li>4. 施力過大，按摩球堵轉。請放鬆，減輕機器負荷</li></ol>
現象	本機已受損。電源線或電源插頭異常發熱。
可能原因及處理	為防止事故發生，請停止使用與我們聯繫。

 產品技術與參數

產品名稱	: 舒眠椅
產品型號	: MAX-Z05A20226
額定電壓	: 220-240V~ 50Hz/60Hz
額定功率	: 90W
額定時間	: 20分鐘
噪 音	: ≤60dB
產品毛重	: 88kg
產品淨重	: 70kg
產品尺寸 ( 豎立 )	: 137cm x 75cm x 108cm
產品尺寸 ( 伸展 )	: 163.5cm x 75cm x 83cm
靠背最大承重	: 90kg
小腿架最大承重	: 30kg
安全結構	: Class I
執行標準	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*

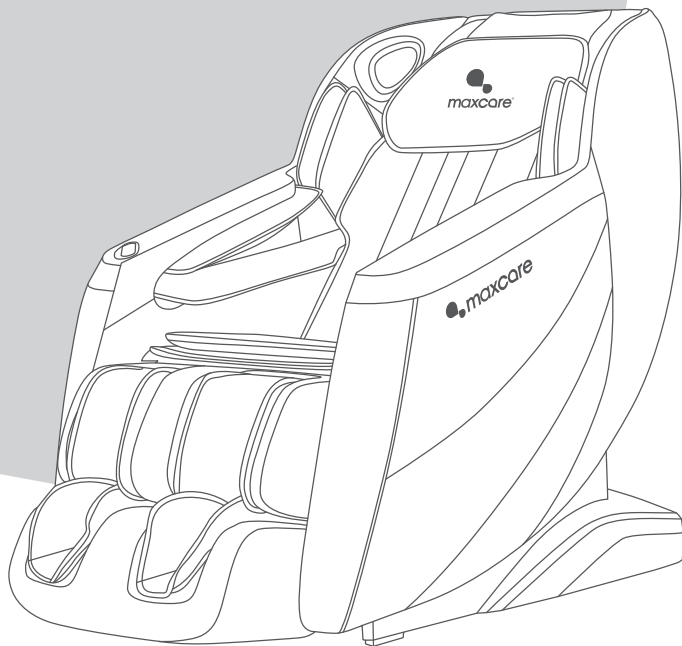

产品使用说明书

**MAX- Z05A20226**





## 企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了 maxcare 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品。maxcare 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare 将「无限关爱·源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

## 目录

---

安全注意事项 .....	P.01 - P.06
机件名称及功能 .....	P.07 - P.10
使用方法 .....	P.11 - P.18
产品的清洁、保养 .....	P.19 - P.20
常见问题及处理方法 .....	P.21 - P.22
产品技术参数 .....	P.23



## 安全注意事项



### 1. 重要安全警告

- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其他用途。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分。
- 在使用过程中、使其滑动时或机器移动时，请务必确认周围（产品的后、下部、前部及两旁）没有人或宠物，亦请确认无异物或宠物进入产品内，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 建议使用时间为20分钟。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



### 2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请将产品放置在平坦的地方使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



### 3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、颈椎脱落症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液循环障碍或各种皮肤感染等症者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢循环障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器械如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。

- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。

## 安全注意事项

### 4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其他治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品20分钟内为宜。
- 产品下可放置一张垫子以防地板或地毯受损。
- 为安全起见，使用时让产品和他人至少保持0.5米距离。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 请勿骑在产品扶手上，以免导致受伤或故障。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。

### 5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 在不平整地面上勿使此产品滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。


### 6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 遥控器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此产品休息半小时后再使用。



注意



在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

 安全注意事项



## 安装部件

## 小腿安装说明


1. 将小腿和按摩椅上的气管与线束相连后，再解开固定管线带，将连接部分塞进座架内(图1)。
2. 将小腿固定块套在小腿的左右两侧圆管上(图2)。

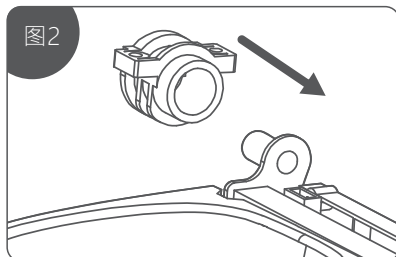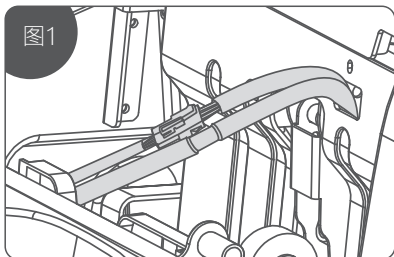

3. 将套上固定块的小腿挂在按摩椅座架挂钩上(图3)。
4. 再用4颗(左右各两颗)M4螺钉将小腿紧固在按摩椅上，检查上下翻动有无异常，管线有无折住现象，小腿安装完成(图4)。

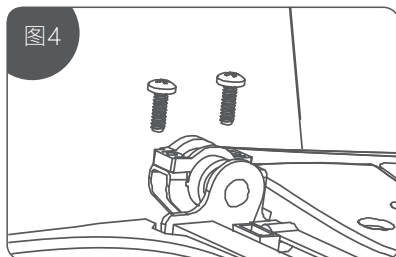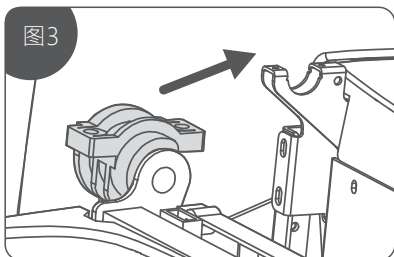




 安全注意事项

## 安置按摩椅

 安装位置


确保足够空间以便按摩椅可以倾斜至少8cm。


请勿将按摩椅暴露于阳光直射或高温环境下(如：发热设备前)，安放位置避免高温与阳光直射，长期在指定位置使用建议铺设软垫，平铺垫子时，垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与脚部接触地板的范围。

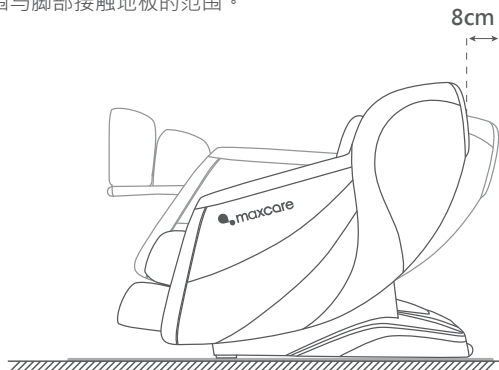 产品移动说明

托住座架底部两侧，然后抬起并移动。由于本机较重，因此搬运时请小心，以免造成背部拉伤。(本机必须由两人或多人搬运)

1. 在木地板等易损的地面上请抬起按摩椅进行移动。
2. 在类似木质地板上移动时，建议抬起方式。避免脚轮损伤地板，抬起移动到指定位置放下时，注意手中避让以免损伤，小心脚部被压伤。直到本机完全放平前，请勿放开本机，地板可能受损，因此，建议在地板上铺上垫子等物品。

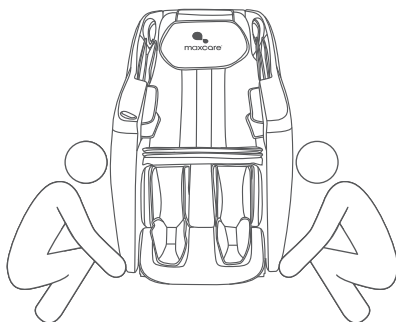



 安全注意事项

## 安置按摩椅


 移动方法


使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式，将椅子向下后方倾倒约45°进行移动。  
注意：下压幅度请勿太大，避免椅子完全倾倒导致产品损坏。


1. 移动前需正确关机，使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
2. 移动时产品上需空置，勿使人员、宠物或杂物停留在本产品上。
3. 使用脚轮移动切勿跨越高于2mm落差障碍或大于5mm间隙。
4. 使用脚轮移动本品时，不支持单次连续使移动，超过50米距离，请使本品缓慢匀速移动。

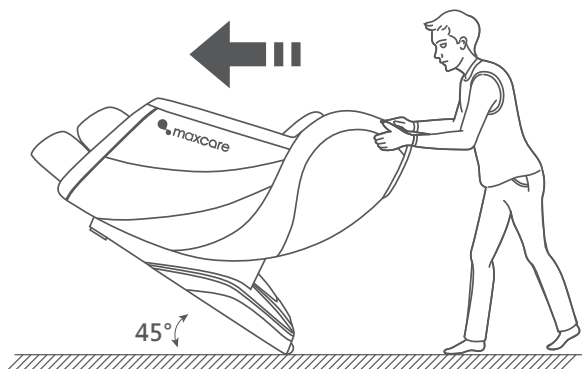

 头靠垫、靠背垫的拆装与使用方法

使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用头靠垫（推荐使用头靠垫）。靠背垫与靠背通过拉链连接（1），头靠垫与靠背垫通过拉链连接（2）。

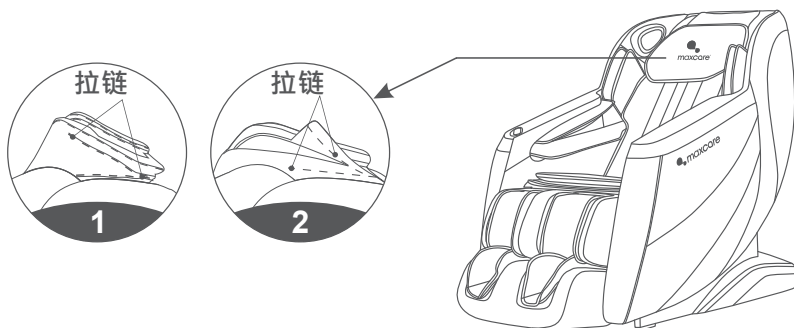

 安全注意事项


## 使用前

 警告


确保本机周围没有人、宠物及其他物体。

 确保本机缝隙间没有异物


按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。任何情况下勿使手、脚、头伸入小腿机构与机体之间区域，和扶手与太空舱之间区域。  
任何情况下勿使手、脚、头陷入按摩区织物或皮革覆盖面之后。

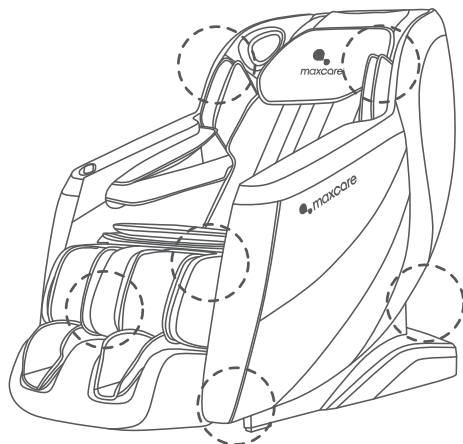

机件名称及功能

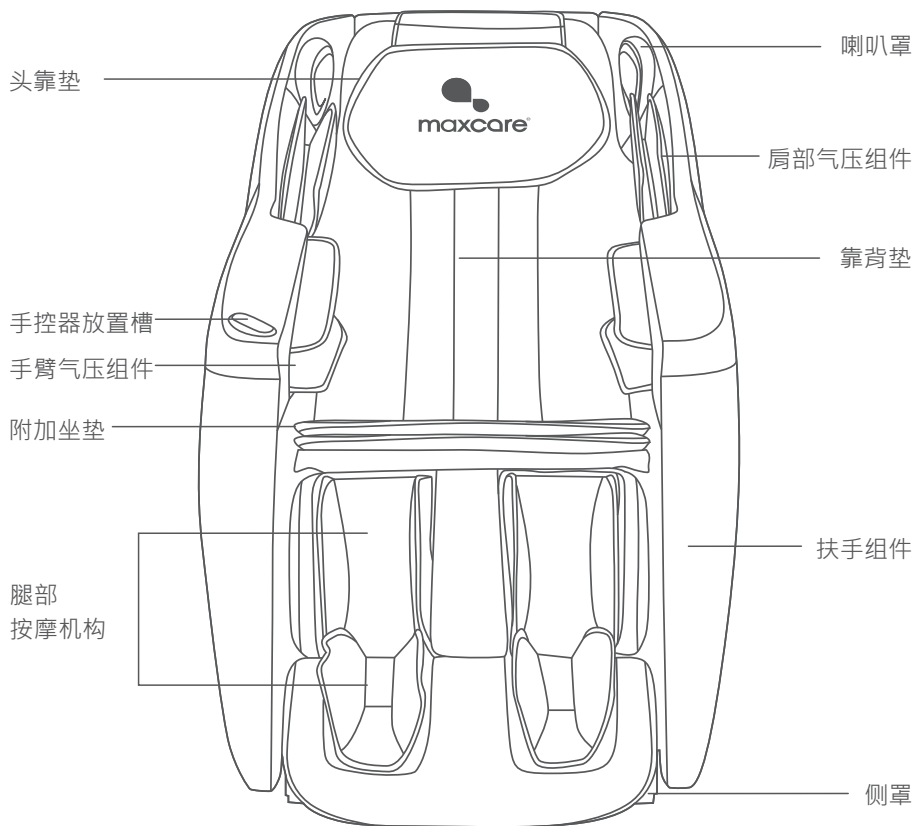


🔧 机件名称及功能

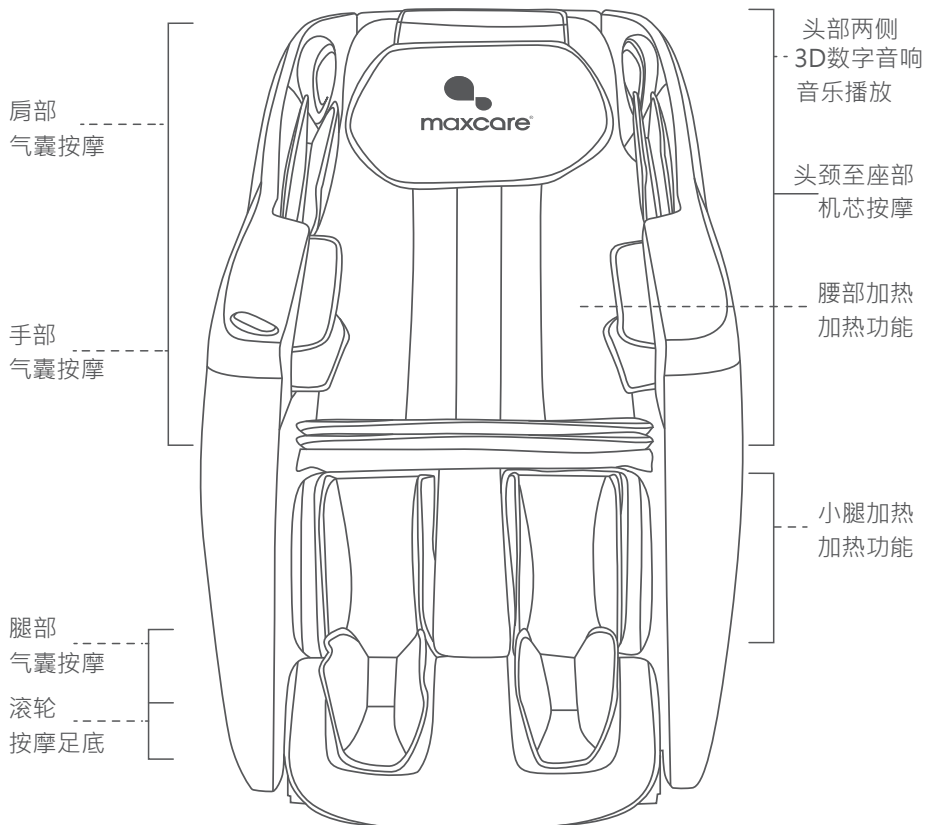


 机件名称及功能


## 一. 手控器按鍵說明

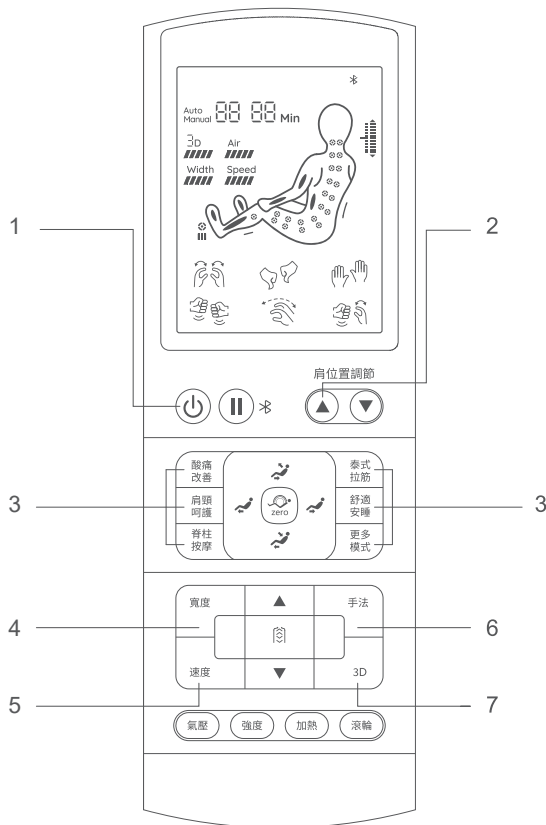

1. 待机键：开启或关闭按摩椅
2. 肩位置上 / 下键：肩位置向上 / 向下调节
3. 自动模式：自动按摩功能包括酸痛改善、肩颈呵护、脊柱按摩、泰式拉筋、舒适安睡及更多模式，循环调节更多自动模式
4. 宽度：按摩宽度3档可调
5. 速度：按摩速度5档可调
6. 手法：开启或关闭按摩手法，按摩手法7种可选
7. 3D：按摩强度5档可调

 机件名称及功能

## 一. 手控器按鍵說明

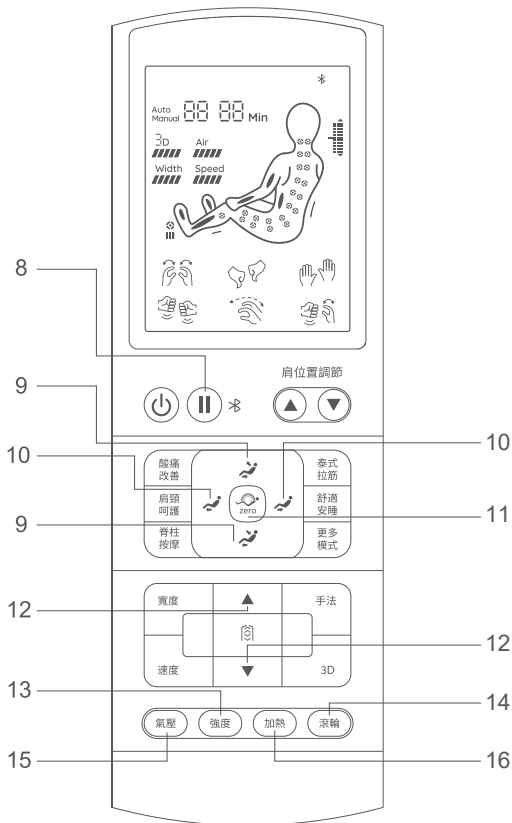


8. 暂停键/蓝牙：短按开启或暂停按摩功能。长按开启或关闭蓝牙
9. 坐姿上升/下降键：向上/向下调节按摩椅角度
10. 腿部机构上升/下降键：腿部机构向上/向下调节
11. 零重力键：零重力角度设置，零重力Ⅰ、零重力Ⅱ、零重力Ⅲ、零重力关闭循环调节
12. 按摩部位上/下键：按摩部位向上/各下调节
13. 气压强度：强度5档可调
14. 脚板滚轮：开启或关闭滚轮按摩
15. 气压：开启或关闭气压，上半身、下半身、全身气压，全部关闭
16. 加热：循环切换加热部位，关闭加热

 使用方法


## 二. 开始按摩

- ① 按下待机键，启动按摩，按摩椅自动躺卧。

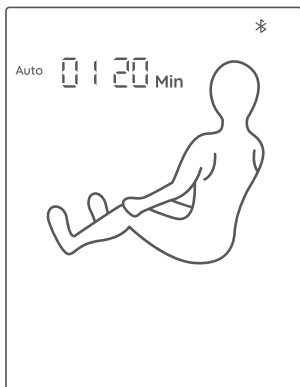


开机状态示意图

- ② 开机后按摩椅将自动调整角度，调整后即开始人体肩位置检测，此时请保持身体及坐姿与按摩椅贴合。
- ③ 肩部位置微调，体型检测完成后手控器或声音提示会提示用户微调肩位置，如果按摩停在您的肩部位置，则不需要调整直接开始按摩，如果不在，请使用肩部位置上键、下键将按摩轮调整到您的肩部位置然后开始按摩。如果超过10秒未操作则直接默认当前的按摩轮位置为肩部位置并开始按摩。注意：在开机或检测的过程中，按对应的按键可以切换预设的自动模式，再按一次可以跳过检测，直接进入按摩。

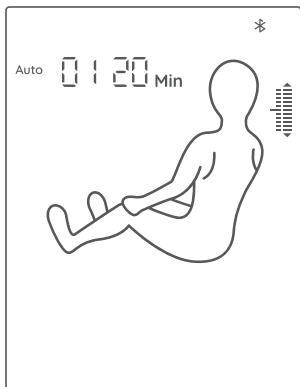

肩位置示意图

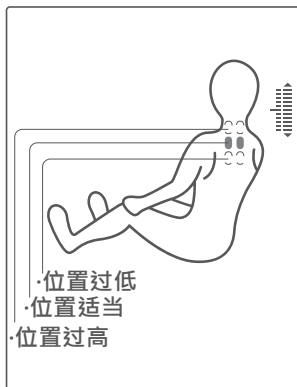




## 使用方法

### 三. 自动模式

#### 1. 自动模式选择


- (1) 点击手控器自动模式按键，选择自动模式开始按摩。
- (2) 在自动模式选择按键区域，共有17种自动程式可供选择：酸痛改善、肩颈呵护、脊柱按摩、泰式拉筋、舒适安睡、更多模式（按更多模式按键循环调自动程式）。

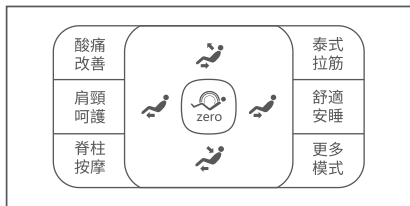


手控器自动程序区域示意图

#### 2. 自动模式介绍

功能	描述	显示
酸痛改善	舒缓全身疲劳酸痛，四肢得到放松改善微循环，舒缓关节	01
肩颈呵护	针对肩部和颈部的独特按摩手法，有助于促进血液循环，缓解颈肩酸痛，改善脑部供血。	02
脊柱按摩	呵护整脊健康，针对运动量不足进行改善。	03
泰式拉筋	使用泰式按摩手法，针对身体进行拉伸，全面缓解身体疲劳及酸痛	04
舒适安睡	以揉捏、指压的按摩手法，对十二大养生腧穴的按摩帮助身体调理平衡；让人更能快速入睡，快速改善睡眠，提升睡眠质量。	05
酸痛改善 2.0	3D强度在全程最凸出的状态下，改善全身疲劳酸痛。	06

 使用方法








功能	描述	显示
脊柱按摩 2.0	3D强度在全程最凸出的状态下，呵护脊椎健康。	07
全身牵引	开启肩部气囊，靠背慢慢下滑，同时腿部气囊和足底滚轮开启，小腿架慢慢下降，机械手按摩至腰部(气囊机械手充放气)，慢慢的一充一放按摩腰部，开启手臂气囊，机械手以拍打手法从腰部到大腿，再从大腿按摩至肩颈。循环动作。	08
推拿热疗	配合气囊进行揉捏按摩，背及腰部进行揉拍按摩、臀部进行揉捏、大牌进行揉拍按摩，同时开启足底滚轮和腿部及手臂气囊进行同步按摩。开启背部和腿部热疗。	09
轻松活力	轻柔舒适的深度按摩，舒缓身体疲劳，放松身体。	10
轻松放松	最舒适的按摩体验。	11
活力早晨	按摩机械手从肩颈部慢慢下滑至腰部，再用揉拍手法，从腰部按摩至肩颈部。再从肩颈部用拍打、敲击按摩手法一直按摩至腰部，重复来回。	12
全身保健	针对经络进行疏通，快速改善身体微循环，提升免疫力。	13
办公养生	针对久坐办公室的情况，通过按摩增加身体的运动量，改善机体功能。	14
午后充电	机械手、气囊、滚轮各种按摩方式同时进行，配搭自选的蓝牙音乐，放松身心压力。	15
塑形美臀	针对臀部和大腿的有效按摩，使身体塑形，减少多余脂肪的堆积。	16
运动复原	迅速恢复运动后的身体疲劳。	17

 使用方法

## 四. 手动程式

1. 按摩手法 · 选择手控器手法按键可以选择按摩手法。

- (1) 按摩手法: 停止、揉捏、指压、拍打、敲击、揉捏拍打、3D1、3D2等手法可选，手法按键循环调节。
- (2) 信息界面手法显示。

功能		
停止	揉捏 	指压 
拍打 	敲击 	揉捏拍打 
3D1 	3D2 	

2. 按摩速度 · 选择手控器速度按键可以调整按摩速度。


- (1) 按摩速度有1~5档可选，1档最慢5档最快，按摩手法停止时无法调节速度。
- (2) 资讯界面速度显示。



速度				
1档 	2档 	3档 	4档 	5档 

3. 按摩宽度 · 选择手控器宽度按键可以调整按摩宽度。

- (1) 按摩宽度有1~3档可选，1档最窄3档最宽。
- (2) 信息界面宽度显示。

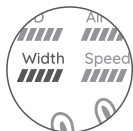

宽度		
1档 	2档 	3档 

## 使用方法

4. 按摩部位：选择手控器部位按键可以选择按摩部位。

- (1) 按摩部位一共有定点、局部、上背、下背、全背等5种可选。
- (2) 资讯界面部位显示。


功能	描述	
定点 H0	定点位置定点按摩。	在选择定点和局部按摩手法时，可以在资讯界面状态下通过手控器部位按键旁“上键”和“下键”调整按摩区域。
局部 H1	小范围局部往返按摩。	
上背 H2	上背往返按摩。	
下背 H3	下背往返按摩。	
全背 H4	全背往返按摩。	

5. 气压按摩：选择手控器气压按键可以选择气压模式。

- (1) 气压模式分别有上半身、下半身、全身气压，全部关闭则关闭气压功能。



- (2) 强度调节：气压功能打开后可以调节气压强度，总共5档可调，1档表示强度弱，5档表示强度最强。

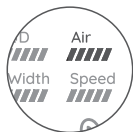





使用方法

五. 协助工具




1. 加热功能 · 手控器加热按键可以循环切换: 靠背+小腿加热、靠背加热、小腿加热、关闭加热。

(1) 信息界面加热显示。

加热显示			
<p>靠背+小腿</p> 	<p>靠背</p> 	<p>小腿</p> 	<p>关闭</p> 


2. 滚轮 · 手控器滚轮按键可以循环切换: 滚轮按摩强度 (3档可调)、关闭足底滚轮功能。

(1) 信息界面滚轮显示。

滚轮显示			
<p>1档</p> 	<p>2档</p> 	<p>3档</p> 	<p>关闭</p> 

3. 3D强度 · 手控器3D按键可以选择按摩强度调节, 共5档强度。

(1) 资讯界面3D强度显示。

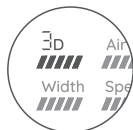


3D强度				
1档 ////	2档 ////	3档 ////	4档 ////	5档 ////


## 使用方法

### 六. 角度调整



#### 1. 零重力:

共3档可调，对应3个设定好的按摩椅角度。按下手控器零重力按键  可以循环调节3个零重力档位或关闭零重力。



#### 2. 全身角度:

按住手控器坐姿下降按键  开始向下调节按摩椅角度，靠背机构下降，腿部机构上升，松开按键则会停止调节；按住手控器坐姿上升按键  开始向上调节按摩椅角度，靠背机构上升，腿部机构下降，松开按键则会停止调节。调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。

#### 3. 腿部机构角度:

按住手控器腿部机构下降键  开始向下调节腿部机构角度，松开按键则会停止调节。按住手控器腿部机构上升键  开始向上调节腿部机构角度，松开按键则会停止调节。调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。

### 七. 蓝牙音响播放操作说明

1. 长按“暂停”  开启按摩椅蓝牙，手控器界面显示 .
2. 进入智慧设备主功能表，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
3. 智慧设备将搜索到相应的蓝牙型号(如MAX-Z05A20226-XXXX)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。
4. 打开智慧设备的音乐播放机，选择歌曲进行播放。

### 八. Maxcare Massage Chair APP作業系統說明 (選配功能) 注: 請在開機後使用該功能。

#### 1. Maxcare Massage Chair 下载安裝:

- (1) 安卓系统、鸿蒙系统: 扫描二维码进行下载安装，也可进入谷歌搜索“Maxcare Massage Chair”。
- (2) 苹果系统: 在AppStore(苹果应用商城)中搜索Maxcare Massage Chair进行下载。



支持安卓系统、鸿蒙系统扫码下载  
(安卓系统、鸿蒙系统下载方式)



支持iOS系统扫码下载  
(苹果系统下载方式)



iOS系统下载方式

## 使用方法

(3) 打开手机蓝牙功能  ，点击Maxcare Massage Chair打开APP。

### 2. APP操控按摩椅


- (1) 在APP界面中，选择“蓝牙设置”，搜索并添加设备；在设备清单界面中选择对应蓝牙。
- (2) 设备连接成功后自动进入APP界面，此时可以通过手机操控按摩椅。

## 九. 关闭电源 · 结束按摩


在按摩过程中，按下待机键关机。立即关闭所有按摩功能，靠背机构和腿部机构复位，或按摩定时时间到，按摩自动关闭所有按摩功能，靠背机构和腿部机构不复位。

切断整机电源，附图（整机电源切断示意图）。


关闭电源开关(“O”位置)

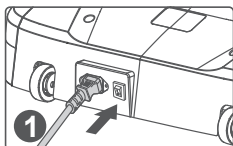

拔掉电源插头示意图

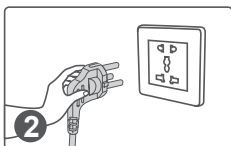

拔掉整机连接线示意图

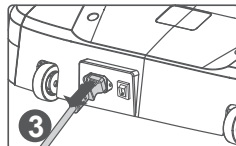

## 产品的清洁、保养

### 清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

### 保养

- 确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩(请自行购买)套住产品，防止落入灰尘。



注意

- 切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

### 温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
  - \* 有焦糊气味。
  - \* 触动导线后有时通电，有时断电。
  - \* 电源线发热。
  - \* 电源线是否破损。
  - \* 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。



## PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

### PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；

### PU合成皮革的保养方法与注意事项：

1. 要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皴裂。


## ❓ 常见问题及处理方法

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及与我们联系。

<b>现象</b>	腿部或靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。
<b>可能原因及处理</b>	出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。
<b>现象</b>	本机开启后功能未运行或部分功能未运行。
<b>可能原因及处理</b>	本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在20分钟后自动关机。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。
<b>现象</b>	本机在调整姿态时发出皮革摩擦声。
<b>可能原因及处理</b>	本产品整机采用了符合环保要求的高级抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相对运动处摩擦会产生正常的轻微响声，属正常现象。注意：如本机在运行时听到织物或皮革撕裂声，请立即停止使用，并寻求指定专业人员检修。
<b>现象</b>	按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。
<b>可能原因及处理</b>	如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。
<b>现象</b>	无法开机
<b>可能原因及处理</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无法开机。请连接好接头</li> <li>2. 电源开/关未开。请开启电源开/关</li> <li>3. 电源插头没有插好。请插好插头</li> </ol>

## ? 常见问题及处理方法


现象	突然停止操作
可能原因及处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 断电。请连接好接头</li><li>2. 按摩时间超过20分钟，自动关机。请开启电源开/关</li><li>3. 连续使用时间过长，产品过热保护。请插好插头</li><li>4. 施力过大，按摩球堵转。请放松，减轻机器负荷</li></ol>
现象	本机已受损。电源线或电源插头异常发热。
可能原因及处理	为防止事故发生，请停止使用与我们联系。

 产品技术与参数

产品名称	: 舒眠椅
产品型号	: MAX-Z05A20226
额定电压	: 220-240V~ 50Hz/60Hz
额定功率	: 90W
额定时间	: 20分钟
噪 音	: ≤60dB
产品毛重	: 88kg
产品净重	: 70kg
产品尺寸 ( 竖立 )	: 137cm x 75cm x 108cm
产品尺寸 ( 伸展 )	: 163.5cm x 75cm x 83cm
靠背最大承重	: 90kg
小腿架最大承重	: 30kg
安全结构	: Class I
执行标准	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*

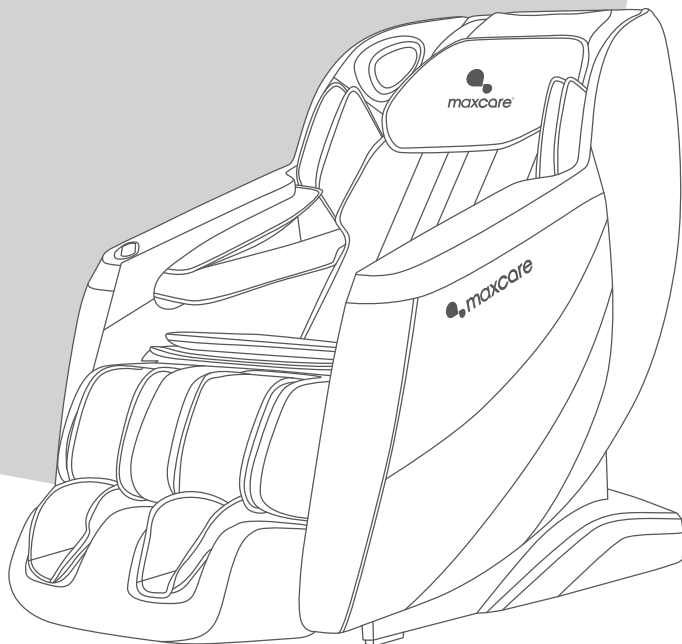

User Manual

MAX- Z05A20226





## COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare**. Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.

# 舒眠椅

*DreamComfort Chair*

Thank you for purchasing **maxcare**'s products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

## CONTENT

---

Safety Precautions .....	P.01 - P.06
Name and Function of Components .....	P.07 - P.10
How to Use .....	P.11 - P.18
Cleaning and Maintenance .....	P.19 - P.20
Troubleshooting .....	P.21 - P.22
Technical Specifications .....	P.23



## Safety Precautions



### 1. Important safety warning

- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- Keep children and pets away from the movable parts of this product.
- When in use, sliding or transporting, please ensure that there are no people or pets nearby (the back, bottom, front and sides of the product), and that no foreign objects or pets inside the product, to avoid accidents.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Do not use unauthorized accessories.
- Do not use this product outdoors.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- Please check if any part of this products is damaged before use. If so, please do not use it and contact us for repair.
- Please do not use it if the cover is broken or damaged.
- Please do not use it if the shell or surface is damaged.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use it if drunk or feeling unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Please do not adjust to the maximum intensity at the beginning of the massage to avoid possible injury.
- Please do not keep sharp objects in pockets when use.
- Keep the plug clean from needles, rubbish or water.
- If the power cord is damaged, do not attempt to change on your own. Please contact us for repair for safety reasons.



### 2. Environment for usage

- Please do not use it in a moist environment such as bathrooms.
- Please do not use it when there is a drastic change in temperature.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use it where there is not enough space or not good ventilation.
- Please switch off the power and unplug the machine after use.
- Please do not use it when surrounding temperature is up to 40°C.
- Please do not use it when surrounding temperature is below 5°C. The lubricant can thicken quickly and increase the friction between parts.
- Turn off and pull out the plug during thunderstorms.
- Place the product on a flat surface.
- Do not place it near fire or directly under sunlight.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. To prevent any potential damage, it is recommended to let the product rest at room temperature for approximately 1 hour before use.



### 3. People who have the below symptoms, please consult a doctor before use

- People who are suffering from osteoporosis.
- People who have cancers, acute illnesses, heart diseases, or severe high blood pressure, etc. are not suitable to use this product.
- People who have/ had back pain, or legs, waist, neck numbness/ injuries (disc herniation, spondylosis and cervical protrusion, etc. patients) are not suitable to use this product.
- People who have rheumatoid arthritis, rheumatism, gout are not suitable to use this product.
- People who have respiratory difficulties are not suitable to use this product.
- People who have blood circulation problems such as thrombosis, severe aneurysm, or acute venous tumor, or infectious skin diseases are not suitable to use this product.
- People who have perception disorders due to diabetes are not suitable to use this product.
- People who have spinal abnormalities or spine curvature disorders are not suitable to use this product.
- People whose health condition is poor are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker.
- People who have a fever.





## Safety Precautions

- Pregnant women or women that are in menses period.
- People who got injured or skin diseases.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised are not allowed to use this machine.
- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell.
- The appliance has heating function. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- People who are receiving medical treatment, especially those who are physically unfit.
- People who have open wounds.
- People who aim for recovery.



## 4. Safety

- Please do not place heavy objects on this product.
- Do not use other therapy devices while using this product.
- This product is not to be used for medical treatment purpose.
- Only one person at a time.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- It is possible to place a mat underneath the machine to avoid damage to the floor.
- For safety reason, maintain a minimum of 0.5m between the product and others when use.
- Check if the voltage is suitable to the specification of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not allow water to get into the product, to avoid electric shock or damage to this product.
- Do not pull or drag the power cord when unplugging. Please be gentle.
- Do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Do not use wet cloths to clean the electric parts such as the switch and plug.
- Be away from this product during power cut to prevent injury in case power resumes suddenly.
- Stop using this product if there appears any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using this product if it causes discomfort, and please consult a doctor.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by us in order to avoid a hazard.
- Do not ride on the handle to avoid injury or malfunction.
- Keep the power cord away from hot or moving objects.
- Please cut off the power and pull out the plug before moving.
- If the product is found damaged, broken, suffering from power leakage, or with exposed parts, please stop using it.



## 5. Maintenance

- This product should be maintained by us, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please always turn off the main power after use.
- Do not use this product if the socket is loose.
- If this product is to be left idle for long, please tie up the power cords and keep it in dry and dustless environment.
- Do not keep this product at a high temperature or near fire. Do not keep under direct sunlight.
- Please clean this product with dry cloths. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, no special maintenance required.
- Do not point sharp objects at this product.
- Do not roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; do not keep it continuously running for long.



## 6. Solution of ordinary malfunctions

- It is normal if the motor makes noises during operation.
- If the remote control can't work normally, please check the plug and socket if they are connected, and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the power will automatically go off. If this product works continuously for too long, the temperature control will automatically turn off the machine, if so, please allow a 30-minute break before resuming.



**CAUTION**



Please make sure all the power is cut off before moving.  
The power cord and all other cables should be disconnected.

 Safety Precautions



## Installation Instruction

## Calf installation instructions

1. After connecting the lower leg and the air tube on the massage chair with the wire harness, untie the fixed pipeline belt and insert the connecting part into the seat frame (Fig. 1).
2. Sleeve the lower leg fixing block onto the round tubes on the left and right sides of the lower leg (Fig. 2).

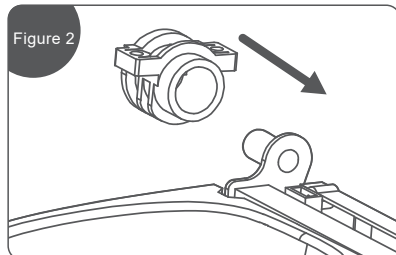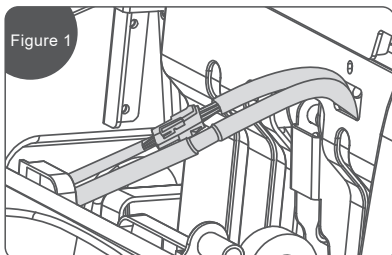

3. Hang the lower leg, sleeved with the fixing block, onto the hook of the massage chair seat frame (Fig. 3).
4. Fasten the lower leg onto the massage chair with four M4 screws (two on the left and two on the right). Check for any abnormalities in the up-and-down turning (Fig. 4).

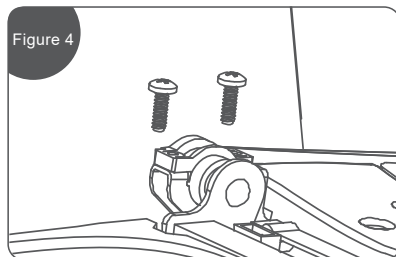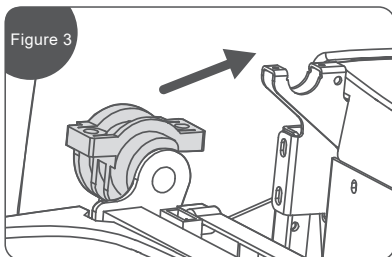



## Safety Precautions


### Place Massage Chair



#### Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair to be tilted at least 8 cm.


Do not expose the massage chair directly to a high-temperature environment, such as in front of heating equipment, and place it in a location where it can avoid high temperatures and direct sunlight. It is recommended to use a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, ensure that its size is sufficient to cover the area where the machine touches the floor and the area where your feet touch the floor.

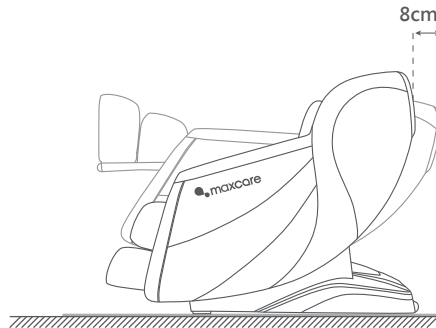

#### Product movement instruction

To move the massage chair, grasp the bottom sides of the frame and lift it. It must be handled by two or more people to lift and move the chair to avoid injury.

1. Please lift and move the massage chair on the damageable floor, such as the wood floor.
2. Lifting is recommended when moving on similar wooden floors. To prevent the casters from damaging the floor. When lifting and moving the massage chair to the designated position, while putting it down, pay attention to avoiding with your hands to avoid injury, and be careful that your feet are crushed. Do not let go of the machine until the machine is entirely flat. The floor may be damaged. It is recommended to place items such as mats on the floor.

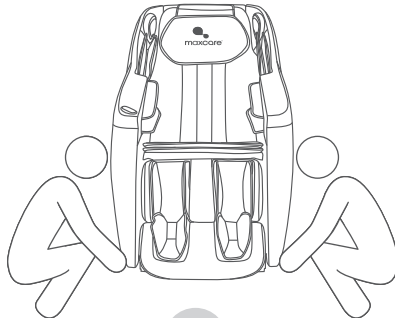



## Safety Precautions

### Place Massage Chair




#### Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it downward and backward about 45° as shown in the diagram.


Note: Excessive force will cause the chair to flip over and damage.

1. Press the “on / off” button to turn off all functions. Reset the backrest and leg rest of the machine to the original position.
2. Please keep the chair vacant when moving, and keep people, pets, or clutter away from the chair.
3. Do not use casters to move across obstacles higher than 2mm or gaps larger than 5mm.
4. When using casters to move this product, it does not support a single continuous movement. If the distance exceeds 50 meters, please move this product slowly.

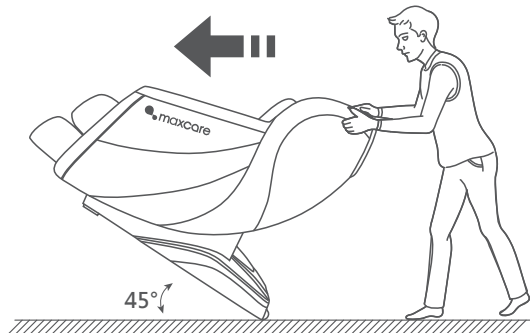


#### How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of the kneading massage on the neck and shoulders. You can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (it is recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion is connected to the backrest by a zipper (1), and the headrest cushion is connected to the backrest cushion by a zipper (2).

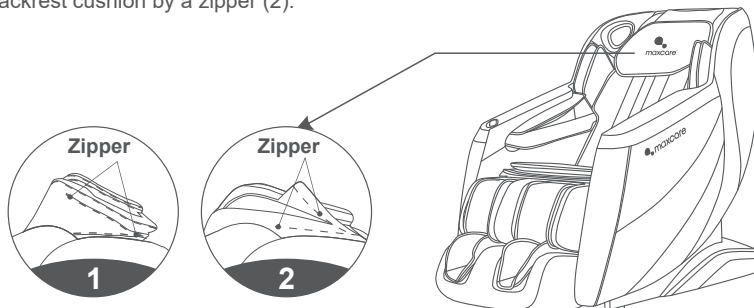



## Safety Precautions

### Before Use



#### Check around


Ensure that there are no people, pets, or other objects around the machine.




#### Make sure there is no foreign object in the gap of the machine.

Before starting the massage, please ensure that there are no foreign objects in the leg and foot areas, as well as other positions.


Do not insert your hands, fingers, feet, or head into the gaps between the legs and the seat, or between the legs and the armrest. Also, avoid inserting your hands, arms, or head into the gap between the backrest and the rear cover. Additionally, do not place your pets on the massage chair, including the seat, backrest, armrests, or leg rest.

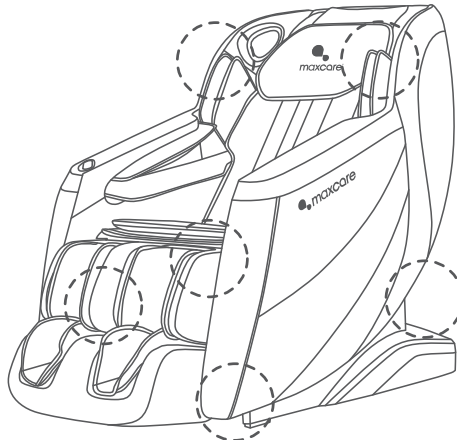

 Name and Function of Components

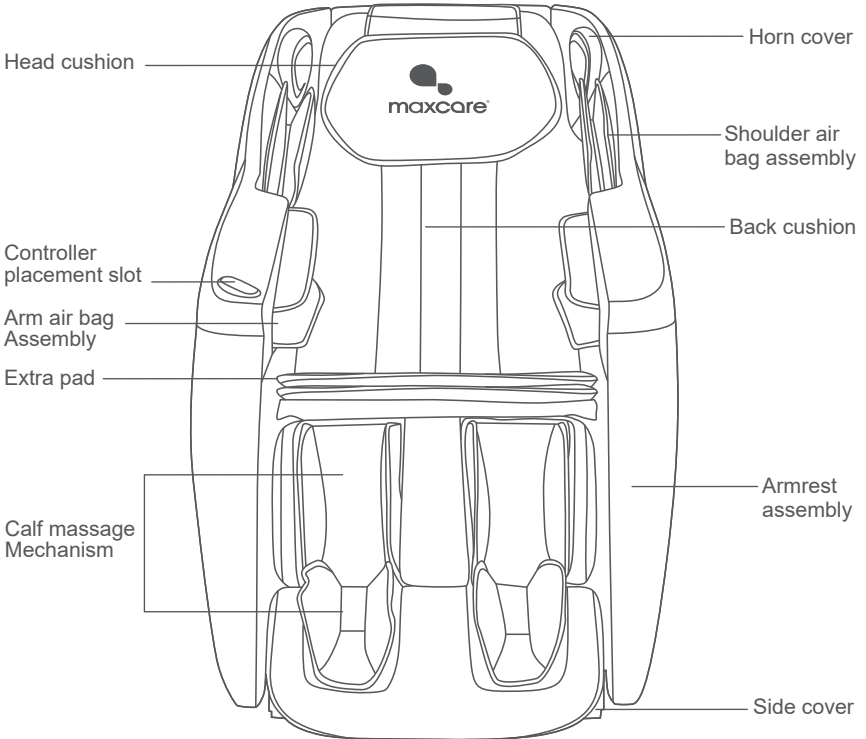


 Name and Function of Components

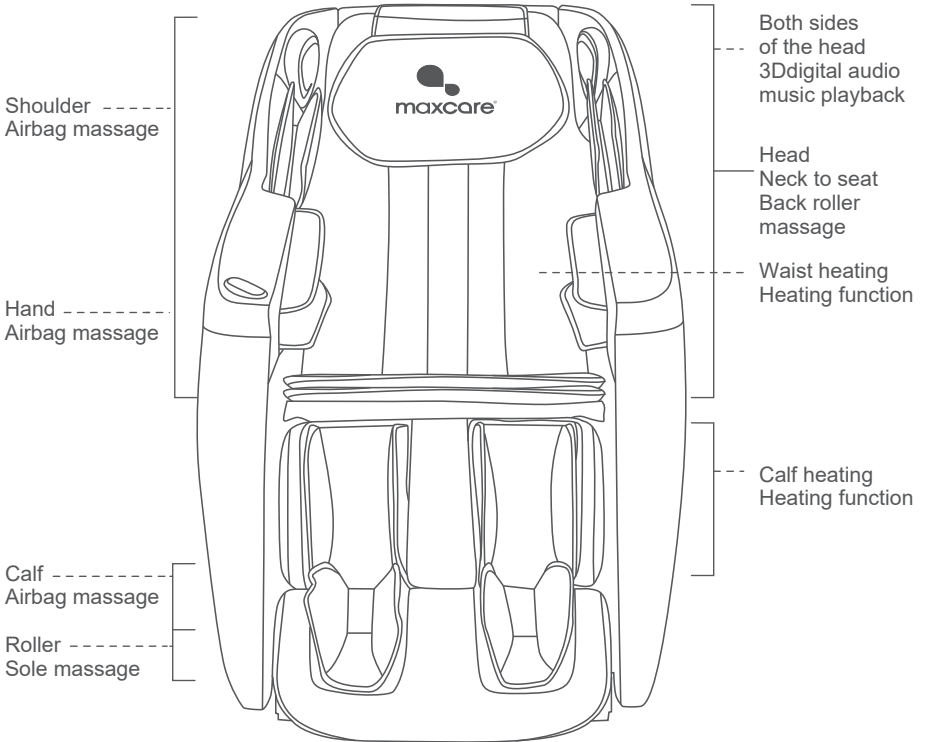

## Name and Function of Components

### I. Introduction to the remote controller

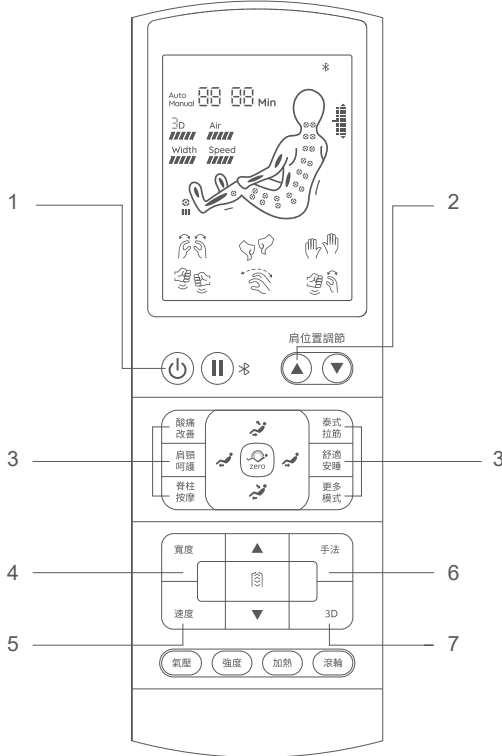


1. Power Button: Turn on or off the massage chair.
2. Shoulder Position Up/Down Button: Adjust the shoulder position up or down.
3. Auto Mode: The automatic massage functions include Relieve Soreness, Neck & shoulder Massage, Spine Care, Stretch Massage, Good-night Sleep, and more modes. It cycles through various automatic modes.
4. Width: Adjust the massage width with 3 levels.
5. Speed: Adjust the massage speed with 5 levels.
6. Technique: Turn on or off the massage technique. There are 7 selectable massage techniques.
7. 3D: Adjust the massage intensity with 5 levels.



## Name and Function of Components

### I. Introduction to the remote controller

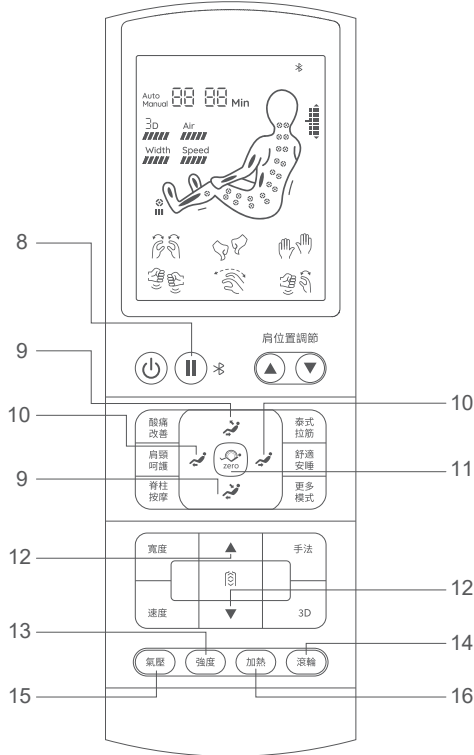


8. Pause Button/Bluetooth: Short press to start or pause the massage function. Long press to enable or disable Bluetooth.
9. Seat Position Up/Down Button: Adjust the reclining angle of the massage chair up or down.
10. Leg Mechanism Up/Down Button: Adjust the leg mechanism up or down.
11. Zero Gravity Button: Set the zero-gravity angle. It includes Zero Gravity I, Zero Gravity II, Zero Gravity III, and turn off zero gravity in a cycle.
12. Massage Area Up/Down Button: Adjust the massage area up or down.
13. Air Pressure Intensity: Adjust the air pressure intensity with 5 levels.
14. Roller: Turn on or off the roller massage function.
15. Air Pressure: Turn on or off the air pressure function. Upper body, lower body, full-body air pressure, or all off.
16. Heat: Cycle through the heat positions or turn off the heat function.




 How to Use

## II. Start massage

1. Press the Power Button to turn it on.

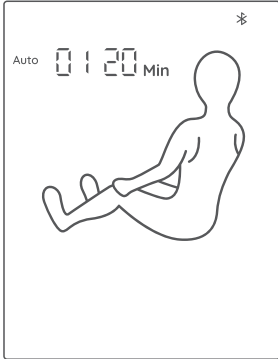


2. After the massage chair is turned on, the angle of the massage chair will be adjusted automatically, and the shoulder position detection will begin after the adjustment is completed. (Please keep your body in contact with the massage chair during the detection process to ensure accurate results.)
3. Shoulder position fine-tuning: The remote or smart voice will prompt the user to fine-tune the shoulder position after the body shape detection is complete. If the massage mechanism stops at your shoulder position, there is no need to adjust it, and you can start the massage directly. If not, please use the up and down keys to adjust the massage mechanism to fit your shoulder position before starting the massage. If there is no operation for more than 10 seconds, the current massage wheel position will be automatically set to the shoulder position, and the massage will begin. Note: Press the corresponding button during startup or detection to switch to the default automatic program mode and press it again to skip the detection and enter the massage directly.

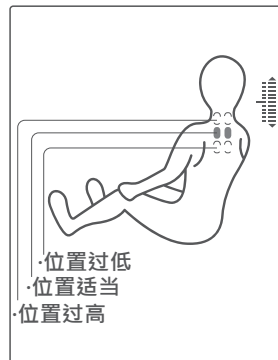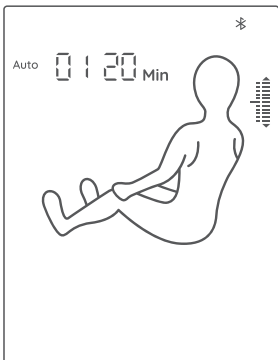

 How to Use

**III. Automatic program**

1. Automatic program selection:
  - (1) Press the automatic program button on the remote control to select and start the desired massage program.
  - (2) There are various automatic programs to choose from, including Fast Massage, Comfort Massage, Relax Massage, Full Body Massage, Neck & Shoulder Massage, and more (Back & Waist Massage, Stretch Massage, Sport Recovery). Press the "MORE" button to cycle through the available automatic programs.

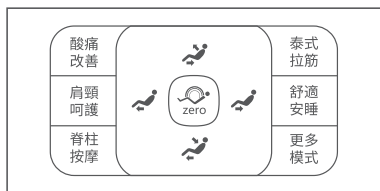

2. Automatic program introduction

Function	Description	Display
Relieve Soreness	Soothe fatigue and pain on the human body, relax the limbs and improve micro-circulation, relieve joint pain and restore vitality.	01
Neck& shoulder Massage	According to the unique neck and shoulder massage method, through effective massage of cervical spine and scapula, neck and shoulder pain can be relieved and neck and shoulder fatigue can be improved.	02
Spine Care	Protect the health of the whole spine, and improve the lack of exercise.	03
Stretch Massage	The lower leg frame and the backrest frame are lifted, effectively relieving tiredness, relieving joint soreness and restoring vitality.	04
Good-night Sleep	With kneading, shiatsu massage techniques, through the 12 health acupoints massage, help to regulate and balance on human body; so that people can fall asleep more quickly, improve sleep quality.	05
Relieve Soreness 2.0	3D intensity in the most strong state of the whole process, soothe fatigue and pain on the human body.	06



## How to Use








Function	Description	Display
Spine Care 2.0	3D intensity in the most strong state of the whole process, protect the health of the whole spine.	07
Full-body Stretch	Increase body flexibility by stretching body muscle.	08
Back Relief SPA	The massage manipulator slowly slides down from the shoulder and neck to the waist, then massage manipulator slowly slide from the waist to the neck and shoulder. Focus on knead & tap and knock massage method. Repeat the massage function by turn. With back and calf heat therapy.	09
Comfort Massage	Gentle and comfortable deep massage, which can relieve body fatigue and relax the body.	10
Relax Massage	The most comfortable massage experience.	11
Fresh Morning	Wake body muscle and other mechanism to start the day fresh after a night of sleep.	12
Full body Massage	Deep massage, which can revive body vitality.	13
Office Regimen	For sitting in the office for a long period of time, this function can increase physical exercise by massage and improve the body functions.	14
Lunch break nap	Massage the back and waist by means of kneading and patting techniques, and press the Shenyu acupoint, to improve the quality of lunch break, so that the user is more energetic in afternoon work. It is suitable for office workers, and the massage intensity is gentle.	15
Leg& hip Care	Massage effectively for buttocks and thighs to shape the body and reduce the accumulation of excess body fat.	16
Sport Recovery	Quick recovery of body fatigue after exercising.	17

 How to Use

**IV. Automatic program**

1. Massage technique, select the remote technique key to choose massage technique.






- (1) There are massage techniques including stop, knead, shiatsu, tapping, knock, kneading and tapping, 3D1, 3D 2, etc. The techniques are cyclically adjusted by the technique keys.
- (2) Information interface technique display.

Description		
Stop	Knead 	Shiatsu 
Tapping 	Knock 	Knead&tap 
3D 1 	3D 2 	

2. Massage speed, select the manual speed key to adjust the massage speed.


- (1) The massage speed can be selected from level 1-5. The level 1 is the slowest and the 5 is the fastest. The speed cannot be adjusted when the massage technique is stopped.
- (2) Information interface speed display.






Speed				
Level 1 	Level 2 	Level 3 	Level 4 	Level 5 

3. Massage width, select the remote width key to adjust the massage width.

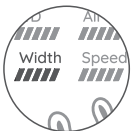- (1) The massage width can be selected from 1 to 3 grades, 1 is the narrowest and 3 is the widest.
- (2) Information interface width display.






Width		
Level 1 	Level 2 	Level 3 

 **How to Use**


4. Massage area, select the remote part key to select the massage area.  
 (1) There are massage areas, including (fixed , partial, upper back, lower back,  
 (2) Information interface area display.

Function	Description	
Spot H0	Massage at a fixed location	When choosing fixed-point and partial massage area, you can adjust the massage area by pressing the "up key" and "down key" on the remote in the information interface state.
Partial H1	Round-trip massage in a small area	
Upper H2	Round trip massage on the upper back.	
Lower H3	Round trip massage on the lower back.	
Full H4	Round trip massage on full back.	

5. Air pressure massage, select the air pressure key on the remote to select the air pressure mode.  
 (1) The air pressure modes include upper body, lower body, and whole body air pressure. If all are turned off, the air pressure function will be turned off.

Air pressure display		
Upper body air pressure 	Lower body air pressure 	Full body air pressure 

- (2) Air pressure intensity adjustment, after the air pressure function is turned on, the air pressure intensity can be adjusted at a total of 5 levels are adjustable. Level 1 is the weakest; level 5 is the strongest.

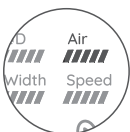





Air intensity				
Level 1 	Level 2 	Level 3 	Level 4 	Level 5 





 How to Use

**V. Other function**

1. Heating, press the heating key, Cycle to switch Backrest and calf heating, backrest heating, calf heating and off heating.  
(1) Information interface heating display.






Heating			
Backrest+calf 	Backrest 	calf 	off 

2. Roller, press the roller massage key, you can adjust the intensity of roller massage and turn off.  
(1) Information interface roller display.

Roller			
Level 1 	Level 2 	Level 3 	Off 

3. 3D intensity adjustment, press the 3D key, you can adjust the intensity of intensity and turn off.  
(1) Information interface 3D intensity display.



3D intensity				
Level 1 	Level 2 	Level 3 	Level 4 	Level 5 



## How to Use

### VI. Angle adjustment

#### 1. Zero gravity:

A total of 3 angles are adjustable, corresponding to 3 preset massage chair angles. Press the zero-gravity key on the remote to cycle through 3 zero-gravity angles or turn off zero-gravity.

#### 2. Full body angle:

Press and hold the seat-down key of the remote to start adjusting the angle of the massage chair downward, the backrest will descend, and the footrest will rise, and the adjustment will stop when the button is released; Press and hold the seat-up key on the remote to start adjusting the angle of the massage chair upward, the backrest rises, and the footrest descends, and the adjustment stops when the button is released. When the adjustment reaches the limit, the adjustment will stop, and a beeping sound will be issued.

#### 3. Footrest angle:

Press and hold the Footrest-down key of the remote to start adjusting the angle of the footrest downward and release the button to stop the adjustment. Footrest-up key of the remote to start adjusting the angle of the footrest upward and release the button to stop the adjustment.

### VII. Operation Instructions for Bluetooth Speaker Play

#### 1. Enter the smart device main menu.

2. Open "Settings" and select the "Bluetooth" option. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".

3. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. MAXZ05A20226-XXXX). Click the "Match" button. If you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.

4. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

### VIII. Maxcare Message Chair APP Operation (Note: Please use this function after power on)

#### 1. Maxcare Message Chair Download and install :

(1). Android and Harmony OS: Scan the QR code to download and install or download it from Google.

(2). Apple: Search for the Maxcare Message Chair in the AppStore to download.



Support Android, HarmonyOS  
scan code download Android OS,  
HarmonyOS download method



Support IOS scan code  
download Apple system  
download method



Apple system  
download method

(3). Open for Bluetooth function of mobile phone, click the Maxcare Message Chair to open the APP.





## How to Use

### 2. Massage chair controlled by APP


- (1). In the APP interface, select "Bluetooth Settings" to search for and add devices; Select Bluetooth in the device list.
- (2). After the device is successfully connected, it will automatically enter the APP interface. At this time, you can control the massage chair through your mobile phone.

### IX. Turn off power, stop massage


During the massage, press the power switch to turn off all the massage functions, the backrest and leg rest will reset. When the massage time is up, all the massage functions are immediately turned off, and the backrest and leg rest will not reset.

- Cut off the power supply, the figure shown below.


Turn off the power switch ("0" position)

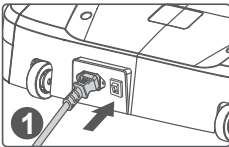

Schematic diagram of pulling out the power plug

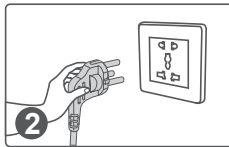

Remove the power cord

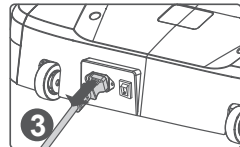

## Cleaning and Maintenance

### Cleaning

- Before cleaning, please ensure that the switch is turned off and the power plug is disconnected from the socket.
- Use soft cloths to clean the surface of product and control panel.



- Do not pull the plug from the socket with wet hands.
- Please refrain from rinsing the product and ensure that no water or liquids come into contact with it.
- Avoid using corrosive cleaning agents such as benzene or thinner to clean the product. These substances can cause the color of the product to fade and may corrode or damage the internal parts.
- Avoid disassembling the product when it is humid. Instead, allow it to dry naturally.

### Maintenance

- Ensure that the plug has been disconnected from the socket before performing any maintenance tasks.
- Keep the product clean and away from high-temperature or humid areas, as well as environments with volatile gases.
- If this product is to be left idle for long, properly cover it with a dust cover (self-purchase).



- Please keep the product away from direct sunlight or high temperatures to prevent fading or damage to the product.

### Kindly reminding

- If the product is used year-round, please check the following conditions:
  - \* Burnt smell.
  - \* Unstable power supply after contact with the power cord.
  - \* Power cord heating up.
  - \* Power cords damage.
  - \* Other abnormalities.



- If above mentioned happens, please stop using the product.
- Switch off the power supply, unplug the product, and contact us for further assistance.
- Do not attempt to disassemble the product yourself.



## Maintenance and Cleaning of PU Leather

PU leather is made by the coating and drying of polyurethane. Compared with genuine leather, PU leather is more resistant to tear, heat and sunlight. Depending on its nature and chemical substances, however, it should be kept away from any dusty, high/low-temperature, humid environment, under direct sunlight or places with corrosive substance. Otherwise, the leather could tear, quickening aging and hydrolysis.



### Cleaning

1. Please do not use organic reagent or grease solution, especially strong solvent, e.g. alcohol, turpentine and thinner, to clean the surface of the PU leather. Otherwise, it will corrode the surface.
2. Please do not use water or washing powder to clean the surface of PU leather as it may cause cracks to develop.
3. When cleaning the surface of PU leather, ensure that the cleaning agent you choose has a pH value between 5 and 7. Additionally, select a cleaning agent that is environmentally friendly and harmless.



### Maintenance

1. Keep a good ventilation indoor, overly dry or humid environment can accelerate the aging of leather.
2. Please keep the product away from direct sunlight or air vent, otherwise the leather will be hardened. Direct sunlight will also cause fading.
3. People are generally sweatier in summer. The holes on the surface of the leather will absorb sweat. While heat and high humidity prompt the chemical reaction between certain substances in sweat and the leather, and hence, causes smell. Please clean the surface more often with a piece of lightly wet cloth.
4. Please do not use alkaline cleaning agents on the leather. It will adversely affect the elasticity of the leather and lead to cracks as a result.

## Troubleshooting

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services department. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

<b>Fault</b>	When the leg rest or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
<b>Solution</b>	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a restricted protection design for the posture adjustment. There will be a reminder sound when the limit is reached.

<b>Fault</b>	The function does not work or some functions do not work after the massage chair is turned on.
<b>Solution</b>	After the massage chair is turned on, it is necessary to select an automatic massage program. If no operation is performed, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the unselected functions may be deactivated, and the working mode needs to be manually set.

<b>Fault</b>	The machine produces a leather friction sound when adjusting the posture.
<b>Solution</b>	This product is made of high-quality, environmentally friendly and corrosion-resistant leather that meets the requirements. Due to the inherent characteristics of the leather material, slight friction noise may occur at points of relative motion, which is considered normal. Note: If you hear any fabric or leather tearing sound during operation, please immediately stop using the machine and seek assistance from designated professionals for inspection and repair.

<b>Fault</b>	The massage head did not reach the shoulders or neck.
<b>Solution</b>	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Make sure to rest your back on the backrest and rest your head on the headrest. Then start again.

<b>Fault</b>	Unable to power on.
<b>Solution</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The adapter has not been well connected. Please connect the adapter properly.</li> <li>2. The power switch is off. Please switch on the power button.</li> <li>3. The power plug has not been well connected. Please connect the plug to the socket properly.</li> </ol>

## ? FAQs and Solutions

<b>Fault</b>	Abrupt stop during operation.
<b>Solution</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Power disconnected. Please check if the power cord is connected.</li><li>2. Rated working time (20 minutes) is up, and sleep mode is activated. Please press the power button to restart.</li><li>3. The machine has been in use for too long, triggering overheating protection. Please press the power button to restart the machine after it has cooled down.</li><li>4. The massage hands are stuck. Please reduce the pressure on the product.</li></ol>

<b>Fault</b>	The machine is damaged. The power cord or power plug is abnormally overheating.
<b>Solution</b>	To prevent accidents, please stop using the machine and contact us for assistance.

**Product Specifications**

Product Name	: DreamComfort Chair
Product Model	: MAX-Z05A20226
Rated Voltage	: 220-240V~ 50Hz/60Hz
Rated Power	: 90W
Rated Time	: 20 minutes
Noise	: ≤60dB
Product Gross Weight	: 88kg
Product Net Weight	: 70kg
Product Size (Erected)	: 137cm x 75cm x 108cm
Product Size (Stretched out)	: 163.5cm x 75cm x 83cm
Back Max. Loading Capacity	: 90kg
Leg rest Max. Loading Capacity	: 30kg
Safety structure	: Class I
Compliance	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008





商標持有：美斯凱實業有限公司  
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)