


# 型動椅

FLEXI CHAIR

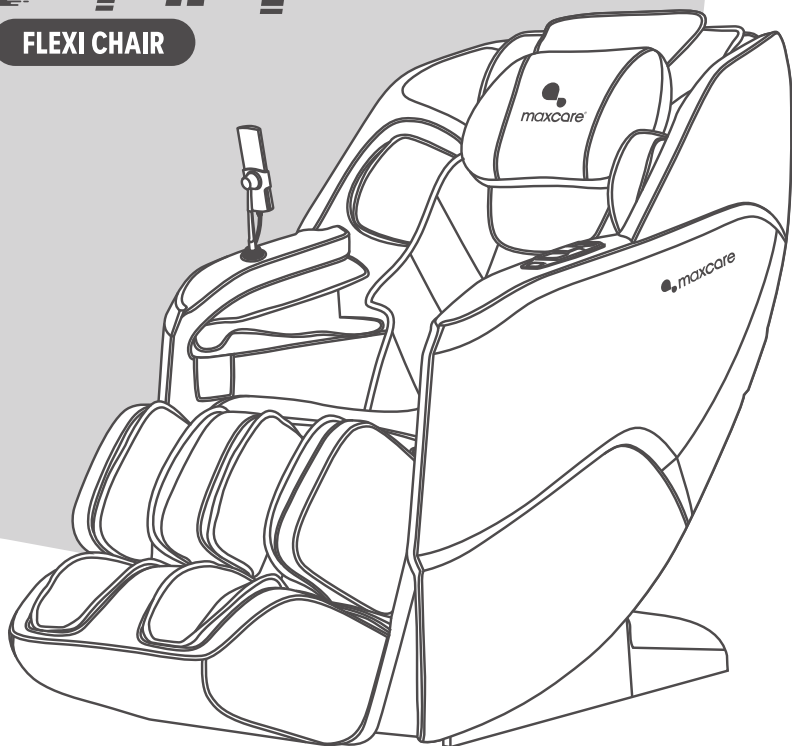

產品使用說明書

MAX-Z05A2801

  
maxcare®



## 企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 maxcare 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。maxcare 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。maxcare 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。maxcare 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。maxcare 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

# 型動椅

FLEXI CHAIR

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

## 目錄

---

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 安全注意事項 .....    | P.01 - P.06 |
| 機件名稱及功能 .....   | P.07 - P.11 |
| 使用方法 .....      | P.12 - P.52 |
| 產品的清潔、保養 .....  | P.53 - P.54 |
| 常見問題及處理方法 ..... | P.55        |
| 產品技術參數 .....    | P.56        |



## 安全注意事項



### 1. 重要安全警告

- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免小腿架及靠背升降時造成意外。
- 在使用過程中、使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



### 2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



### 3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑脫症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。



## 安全注意事項

- 無人監督時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。



### 4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。



### 5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請問歇使用，不應使此產品長期連續運轉。



### 6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。



注意



在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

## 安全注意事項


### 安裝部件

#### 小腿安裝說明

1. 將小腿的線和氣管分別對應插入鋼架組件前端插口上,帶有白色標識卡扣的氣管接入白色氣管插口,另一未帶有標識卡扣的氣管接入黑色氣管插口(圖1)。
2. 線對接完成後,將鋼架組件上的兩側小腿固定蓋打開(圖2)。

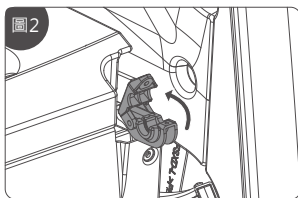
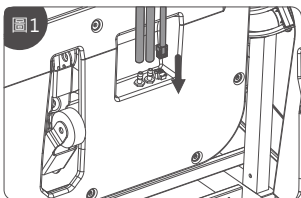


3. 將小腿抬起,放入槽口中,並蓋上固定蓋,最後用2顆M4螺絲固定到位(圖3)。

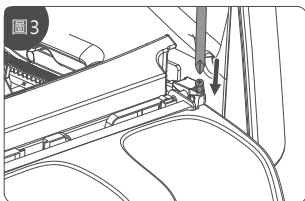



#### 手控器航空插安裝說明

1. 非固定式航空插安裝方式: 航空插(圖4)與航空插(圖5)的箭頭標記對準後插緊,再把螺母按順時針方向鎖緊。

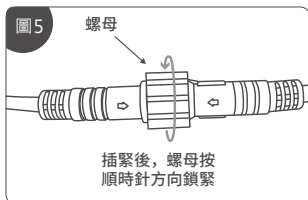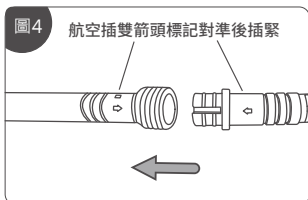

#### 手控器托架安裝說明

1. 將托架組件支座旋鈕上的螺紋與按摩椅扶手上的支座安裝座的螺紋位置對應後(圖1),再順時針旋轉托架組件,旋緊固定即可(圖2)。

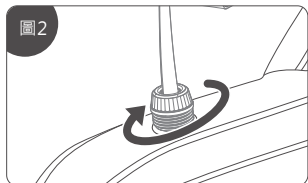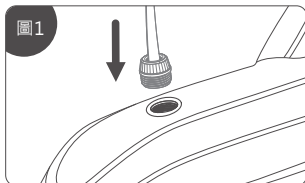



## 安全注意事項


### 安置按摩椅



#### 安裝位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少5.5cm。


勿將按摩椅放在陽光直射或高溫環境。建議在按摩椅放置位置鋪設軟墊，以免在地板上形成壓痕。

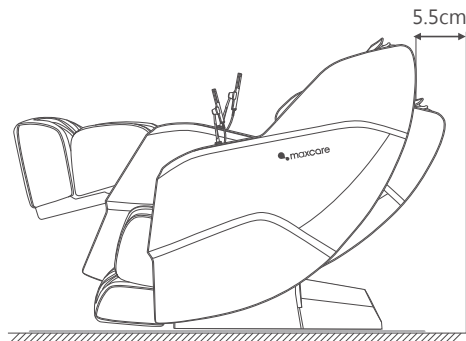

#### 產品移動說明

本機較重，移動時必須兩人或以上合力搬動。

1. 在地板或易受損地面移動時，請勿使用按摩椅腳輪，須抬起整機，以免破壞地面。
2. 抬起移動及放下過程中，請人員小心，避免造成手足壓傷或背腰損傷。

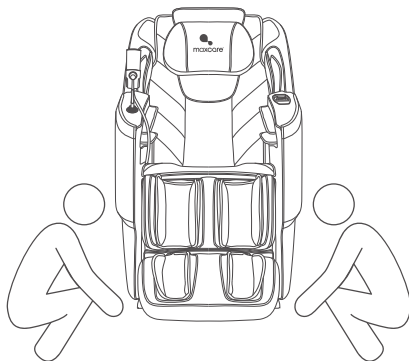



## 安全注意事項

### 安置按摩椅




#### 移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。

注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。


1. 移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除產品供電。
2. 移動時產品上需空置，勿使人員、寵物或雜物停留在本產品上。
3. 使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
4. 使用腳輪移動產品時，不支持單次連續移動超過50米距離。請使產品緩慢勻速移動。

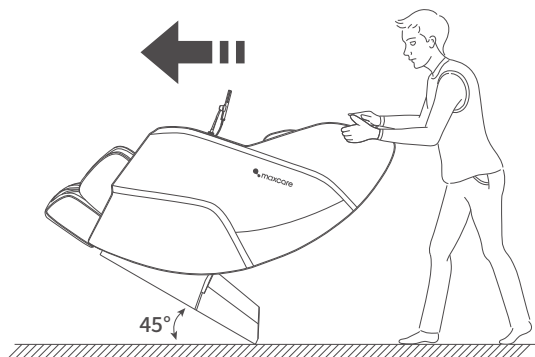

#### 頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可依您的需求決定是否使用頭靠墊（推薦讓用頭靠墊）。

靠背墊與靠背透過拉鍊連接（1），頭靠墊與靠背墊透過拉鍊連接（2）。

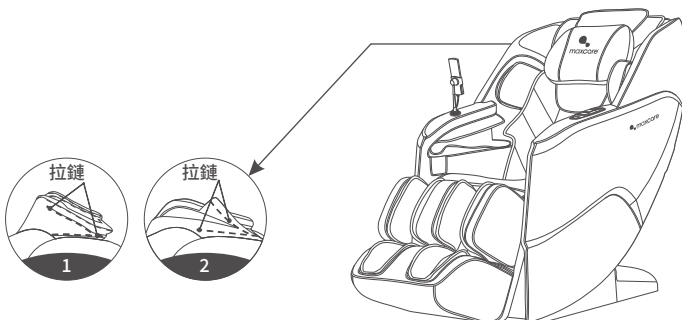




## 安全注意事項

### 使用前



#### 檢查周圍


確保本機周圍沒有人、寵物及其他物體。

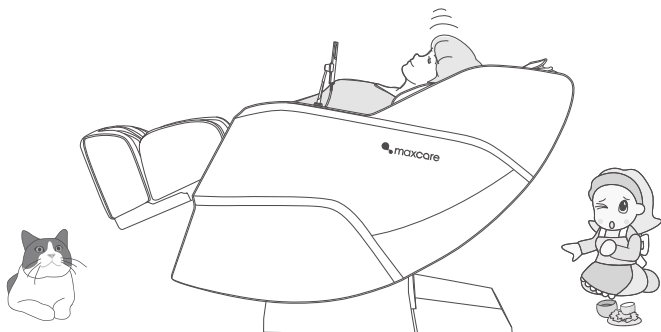


#### 確保本機縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，與扶手與太空艙之間區域。


任何情況下勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

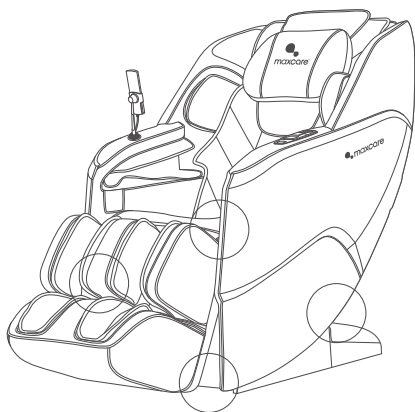

機件名稱及功能

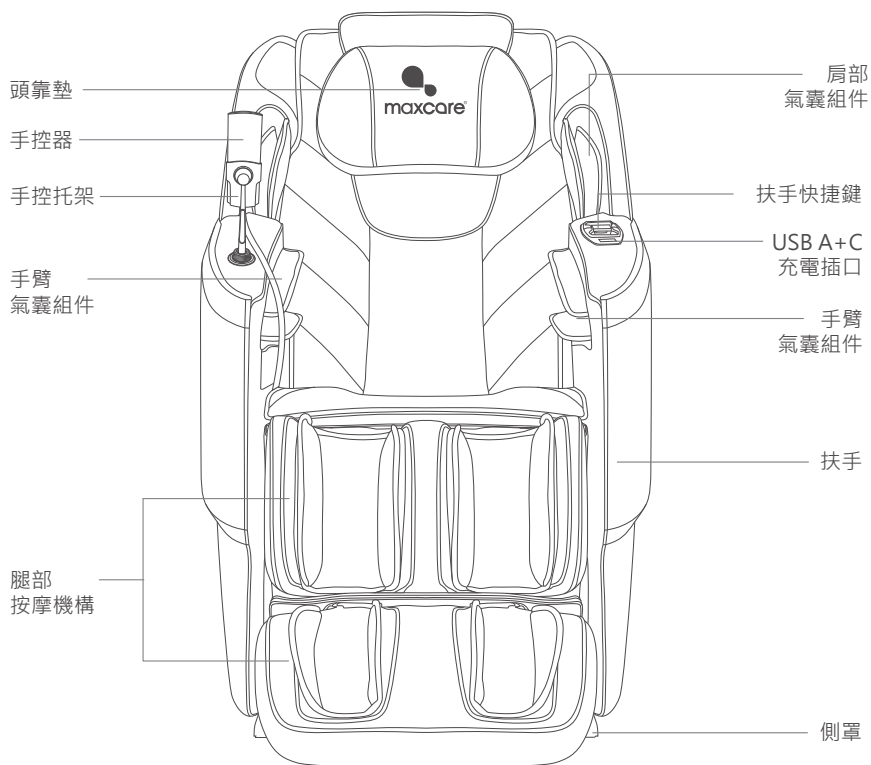


機件名稱及功能

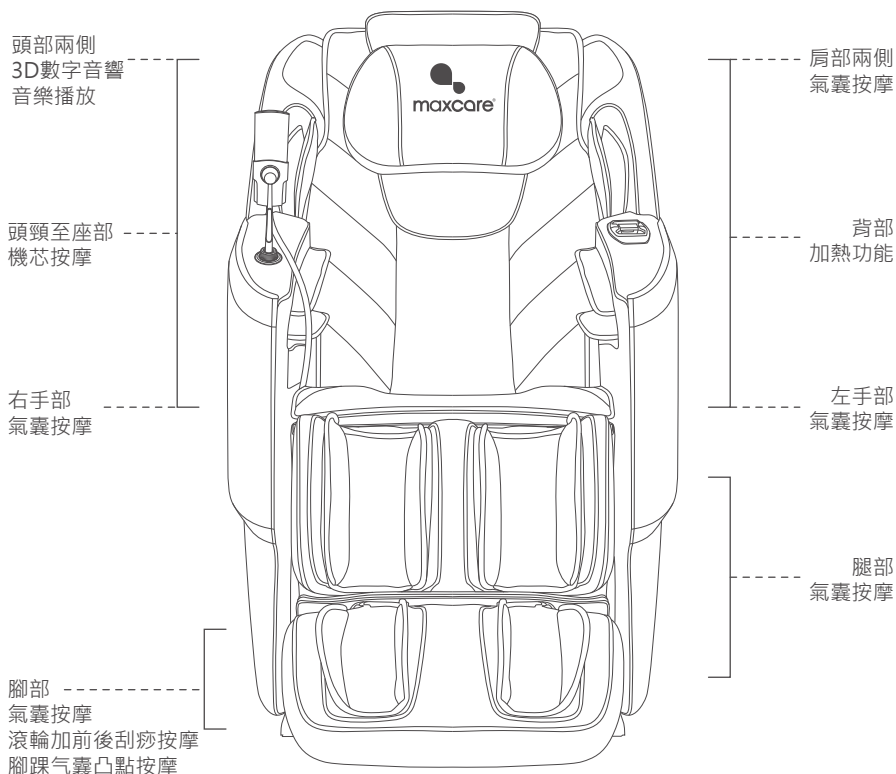


# 機件名稱及功能

## 手控器按鍵說明

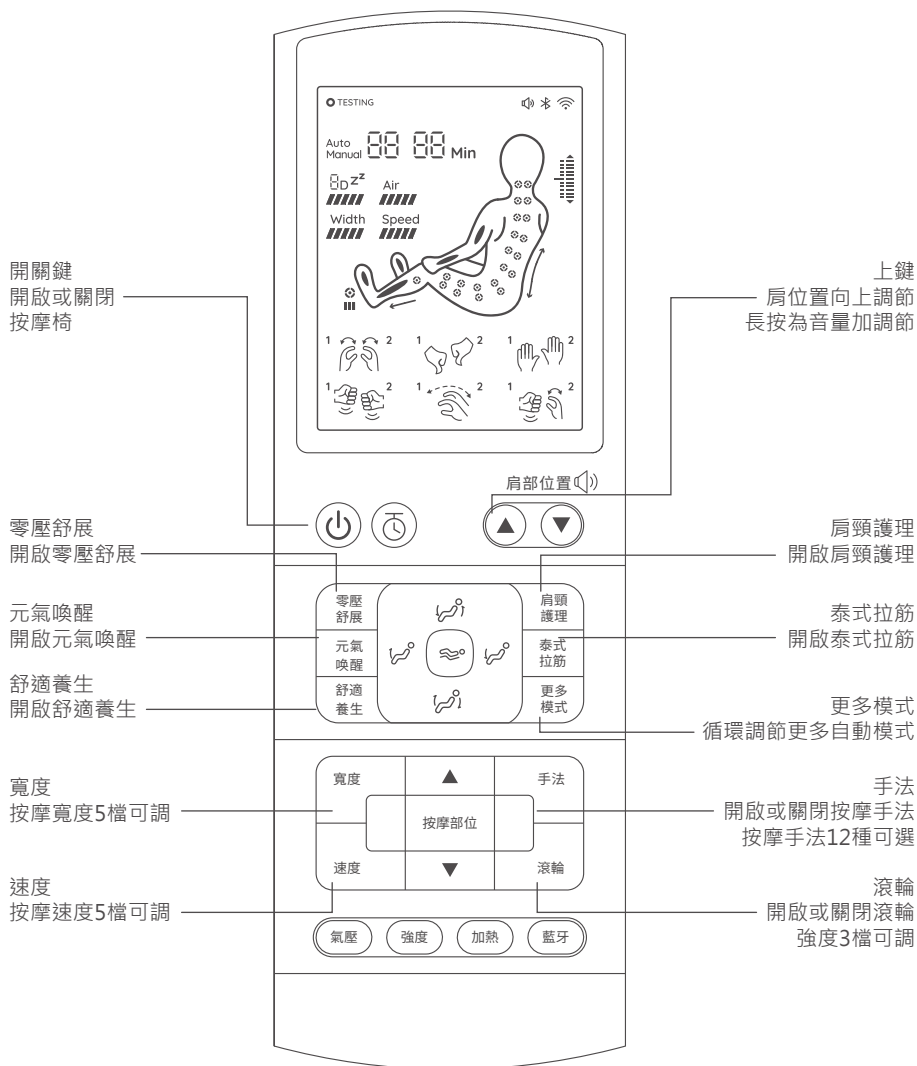


## 機件名稱及功能

### 手控器按鍵說明

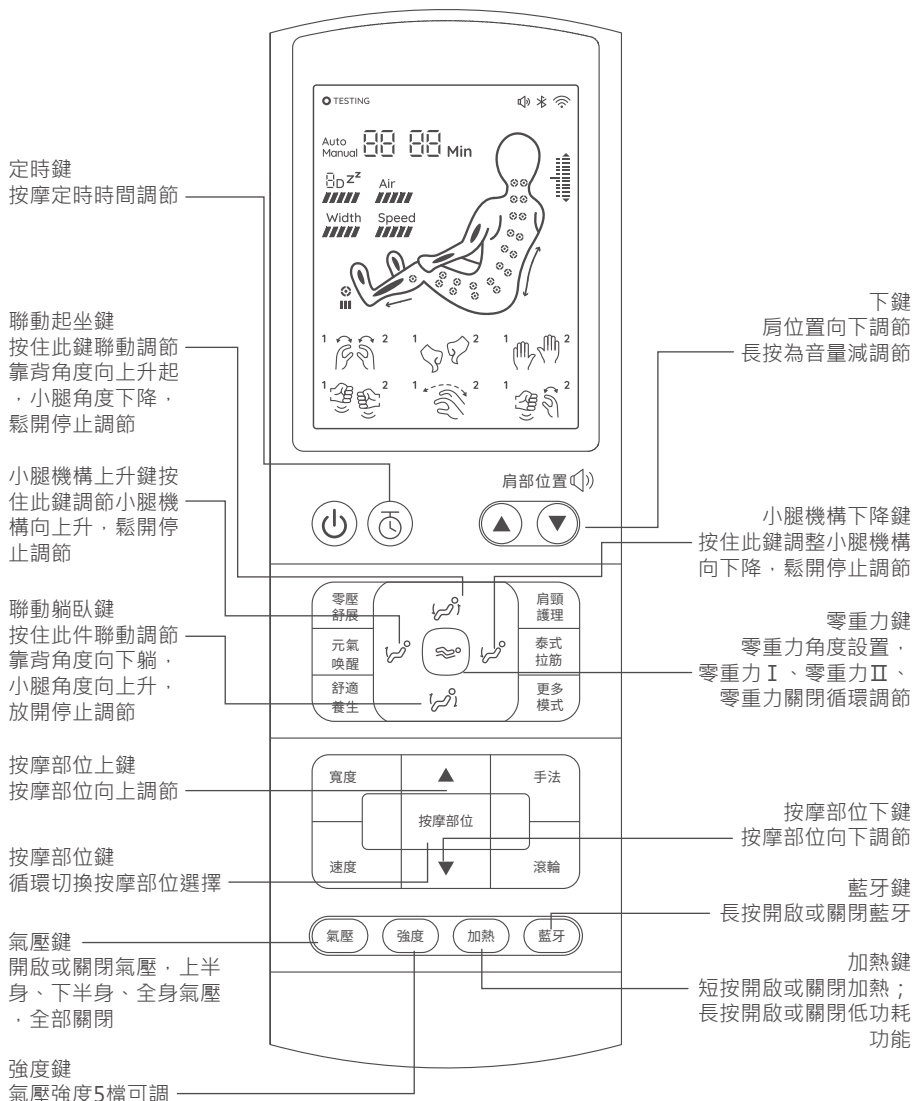

## 機件名稱及功能

### 扶手快捷按鍵說明

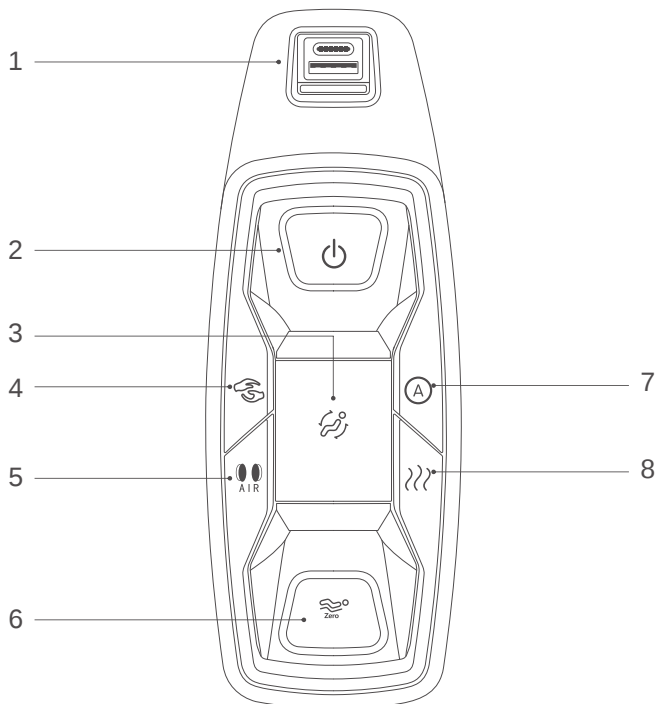


1. USB A+C充電插口: 為手機或其它電子設備提供充電。
2. 開關鍵: 長按此鍵3秒開啟或關閉按摩椅。開啟按摩以後，短按為暫停/運行。
3. 聯動升降鍵: 向前拔動一次並保持，坐姿上升，按摩椅立起來。向後拔動一次並保持，坐姿下降，按摩椅躺下來。向前快速拔動二次並保持，小腿下降。向後快速拔動二次並保持，小腿上升。鬆開則停止調節。
4. 手法鍵: 按此鍵循環切換按摩手法，包括無手法、揉捏(揉捏I~揉捏IV)、拍打(拍打I~拍打II)、揉捏拍打(揉捏拍打I~揉捏拍打IV)、指壓等12種按摩手法選擇。
5. 氣壓鍵: 按此鍵開啟或關閉氣壓功能。
6. 零重力鍵: 按此鍵循環切換按摩椅零重力角度調整（共有2檔設定角度可選）。
7. 自動程序鍵: 按此鍵循環切換自動按摩功能（共有18種自動按摩功能可選）。
8. 加熱鍵: 按此鍵開啟或關閉靠背加熱功能。

## 使用方法


### 一. 開始按摩

1. 按手控器「開關」鍵，開啟按摩椅

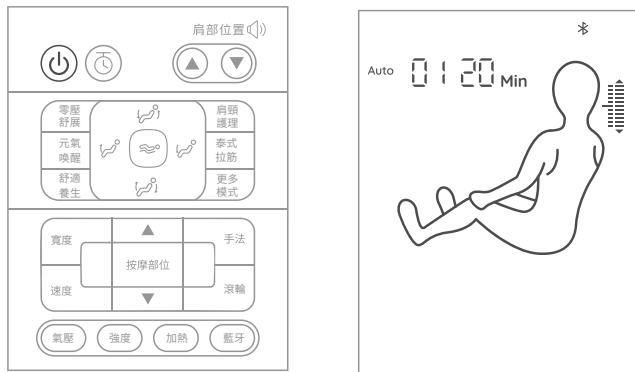

開機狀態示意圖


2. 開機後按摩椅將自動調整角度，調整好後即開始人體肩位置檢測，此時請保持身體及坐姿與按摩椅貼合。
3. 肩部位置微調，體型檢測完成後手控器或語音提示會提示用戶微調肩位置，如果按摩輪停在您的肩部位置，則不需要調整直接開始按摩，如果不在，請使用肩部位置“上鍵/音量加”鍵或“下鍵/音量減”鍵，將按摩輪調整到您的肩部位置然後開始按摩。如果超過10秒未操作則直接默認當前的按摩輪位置為肩部位置並開始按摩。注意：在開機或偵測的過程中按對應的按鍵可以切換預設的自動程式模式，再按一次可以跳過偵測，直接進入按摩功能。

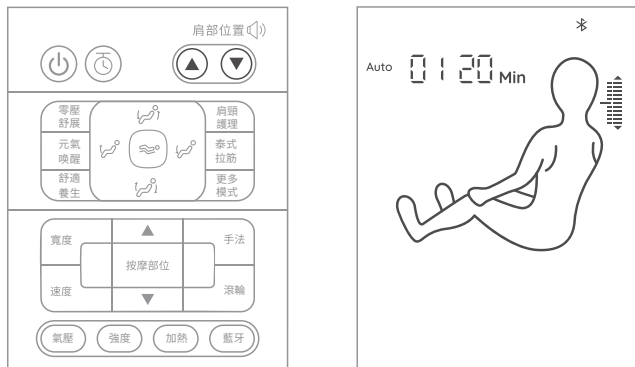


## 使用方法

### 二、自動程式（請在開機後使用該功能）

- (1) 自動程序選擇  
 (1.1) 選擇點選手控器自動程序按鍵區域，選擇自動程序開始按摩。  
 (1.2) 自動程式共有18種可選；其中5個特色自動程式有獨立按鍵，可以直接選擇；其它自動程序可透過「更多模式」鍵進行切換。  
 特色程序：零壓舒展、元氣喚醒、舒適養生、肩頸護理、泰式拉伸。  
 其它程序：中式推拿、疲勞恢復、海浪輕揉、舒筋活絡、腰部保健、腿足舒緩、總裁釋壓、女王纖體、白領專屬、禦宅充電、午間小憩、溫熱祛濕、安神助眠

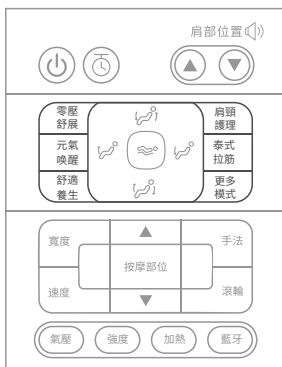

手控器自動程序區域示意圖

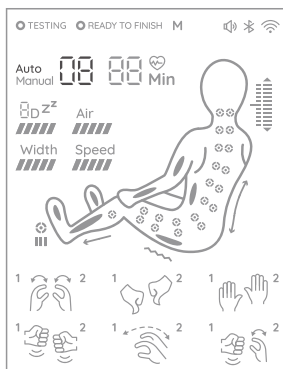

顯示屏自動功能示意圖

#### 自動程序介紹

| 功能   | 描述                                                                             | 顯示 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 零壓舒展 | 借助柔性導軌，使人的身姿角度更接近躺平，配合機芯對背部進行有效反弓形拉伸，真正實現零壓舒展，有效緩解腰肌酸痛，消除疲勞，達到較好的按摩體驗，舒緩身心的壓力。 | 01 |
| 元氣喚醒 | 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩腰部，肩頸部，對全身深度按摩，按摩力度較重，喚醒人體元氣，激發體能，適合受力較強的人群，比如運動員，起到賽前激發潛能的作用。  | 02 |
| 舒適養生 | 全身以氣壓按摩，搭配足底滾輪小腿搓揉按摩。適合老人和背部不受力的人群。按摩力度輕柔。                                     | 03 |


 使用方法

|      |                                                                                      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 肩頸護理 | 主要以揉捏、拉筋手法按摩頸肩部、推拿手法按摩上背部，再透過按壓肩井穴，緩解頸椎病，達到放鬆頸肩部肌肉的作用。按摩力度輕柔，適合辦公室電腦族及有頸椎疲勞。         | 04 |
| 泰式拉筋 | 主要以小腿、靠背電動推桿配合氣壓夾住人體腿部、手部和肩部再拉筋按摩，同時機芯頂背腰推拿，使人體處於泰式拉筋狀態適用於受力較大的人群，對含胸駝背有改善作用。按摩力度較強。 | 05 |

## 自動按摩（更多程序）

|      |                                                                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 中式推拿 | 主要以中醫推拿手法，對背部和腰部進行推拿，透過推拿按中式推拿，促進背腰血液循環，舒經通絡，緩解背腰淤堵。                                               | 06 |
| 疲勞恢復 | 主要以揉捏、拍打、指壓等按摩手法，透過對頸部、背腰、臀部，以及腿部的深度按壓，釋放身體的疲勞，讓身體得到更好的放鬆。                                         | 07 |
| 海浪輕揉 | 主要以全氣壓按摩為主，利用氣囊的揉捏和按壓交叉循環，促進血液循環，減輕各身體部位的疼痛，深度舒緩肌肉疲勞(備註：全氣壓按摩為主，氣壓動作豐富點)。                          | 08 |
| 舒筋活絡 | 主要以揉捏、拍打、指壓、推拿等按摩手法，配合氣壓夾住人身體腿部、手部和肩部再拉伸按摩，舒經通絡，促進血液循環，緩解體內淤堵。                                     | 09 |
| 腰部保健 | 主要以揉捏、拍打、推拿手法按摩腰部，同時機芯頂背腰推拿，緩解腰椎疼痛、再結合腰部恆溫熱敷配置，保持體感舒適的溫度，帶來溫潤的按摩體驗，按摩力度保持體感舒適的溫度，帶來溫潤的按摩體驗，按摩力度輕柔。 | 10 |
| 腿足舒緩 | 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩部和腰部，氣壓對腿足擠壓按摩，腿足按摩更舒緩。                                                            | 11 |


 使用方法

|      |                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 總裁釋壓 | 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩頸部及背腰部，透過深度按摩肩頸背腰，緩解疲勞，促進血液循環，釋放壓力。適合男性。按摩力度適中。                              | 12 |
| 女王纖體 | 主要以揉捏、指壓手法按摩肩頸部、腰部及臀部，透過按摩全身，達到放鬆身心、享受女王級的待遇。適用於女性。按摩力度輕柔。                                   | 13 |
| 白領專享 | 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩肩頸部及腰部，經由深度按摩，緩解肩頸酸痛、改善腰部肌肉酸脹，保養腰椎的作用，適用辦公室白領及久坐人群。按摩力度適中。                    | 14 |
| 御宅充電 | 主要以揉捏、拍打及指壓手法進行全身深度按摩，促進全身血液循環，預防血栓，適用久居家中、不愛出門的人群。按摩力度適輕柔。                                  | 15 |
| 午間小憩 | 主要以揉捏、拍打手法按摩背部及腰部，針對腎俞穴按摩後，提升午休質量，讓下午工作更有精神。適合上班族。按摩力度輕柔。                                    | 16 |
| 溫熱祛濕 | 主要以揉捏、拍打、指壓等按摩手法為主，對全身相關穴位進行深度按摩，讓刺激充分達到肌肉組織的深層，再結合熱敷功能，使局部有溫熱感，調理氣血，達到溫熱祛濕的效果。(備註：全身按摩配合熱敷) | 17 |
| 安神助眠 | 主要以揉捏、推拿手法按摩肩頸部和背腰部，針對風池穴和腎俞穴按摩後，提升睡眠質量，幫助睡眠。適合睡眠不好的人群。按摩力度輕柔。                               | 18 |

## 使用方法

### 三、手動程序（請在開機後使用該功能）


(1) 按摩手法：按手控器「手法」鍵，即可循環切換按摩手法。

(1.1) 手法：有無手法、揉捏（4種）、拍打（2種）、揉捏拍打（4種）、指壓等12種手法可選，按手法鍵循環切換12種手法。並在資訊界面顯示手法。

| 功能                                                                                            | 按摩輪調整   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 無手法                                                                                           | 寬度可調    | 5檔速度可調整<br>5檔寬度可調整 |
| 揉捏I          | 速度可調    |                    |
| 揉捏II         | 速度可調    |                    |
| 揉捏III(閃爍)    | 速度可調    |                    |
| 揉捏IV(閃爍)     | 速度可調    |                    |
| 拍打I          | 速度、寬度可調 |                    |
| 拍打II         | 速度、寬度可調 |                    |
| 揉捏拍打I        | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打II       | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打III(閃爍)  | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打IV(閃爍)   | 速度可調    |                    |
| 指壓          | 寬度可調    |                    |

(2) 按摩速度：按手控器「速度」鍵，即可進行按摩速度調整(速度共有1~5檔可調，1檔最慢~5檔最快)；速度需在以下按摩手法中使用：揉捏(揉捏I~揉捏IV)、拍打(拍打I~拍打II)、揉捏拍打(揉捏拍打I~揉捏拍打IV)。


(2.1) 信息界面速度顯示。
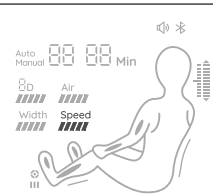
| 速度顯示                                                                                | 速度調節                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1檔<br> | 2檔<br> | 3檔<br> | 4檔<br> | 5檔<br> |

## 使用方法

(3) 按摩寬度：按手控器「寬度」鍵，即可進行按摩寬度調整(寬度共有1~5檔可調，1檔最窄~5檔最寬)，寬度需在以下按摩手法中使用：無手法、拍打、指壓。

(3.1) 資訊界面寬度顯示。
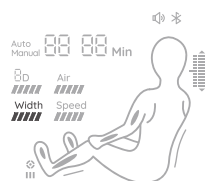
| 寬度顯示                                                                              | 寬度調節                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1檔</div> <div>2檔</div> <div>3檔</div> <div>4檔</div> <div>5檔</div> |

(4) 按摩部位：按手控器「按摩部位上」鍵或「按摩部位下」鍵，即可進行按摩部位上下調整。

(4.1) 按摩部位共有定點、局部、上背、下背、全背等5種可選。


| 功能                                                                                    | 描述        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 定點   | 定點位置定點按摩  | 在選擇定點和局部按摩手法時，可以在資訊界面狀態下透過手控器部位按鍵旁「上鍵」和「下鍵」調整按摩區域 |
| 局部   | 小範圍局部往返按摩 |                                                   |
| 全背   | 全背往返按摩    |                                                   |
| 上背   | 上背往返按摩    |                                                   |
| 下背  | 下背往返按摩    |                                                   |

(5) 氣壓按摩：按手控器「氣壓」鍵，即可進行氣壓按摩功能選擇。氣壓模式分別有「上半身、下半身、全身氣壓」三種氣壓模式選擇；全部關閉則關閉氣壓功能

| 氣壓顯示                                                                                         |                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上半身氣壓<br> | 下半身氣壓<br> | 全身氣壓<br> |


## 使用方法

- (6) 氣壓強度：按手控器「強度」鍵，即可進行氣壓強度調整(強度共有1~5檔可調，1檔最弱~5檔最強)。在氣壓功能開啟後才可進行氣壓強度調整。

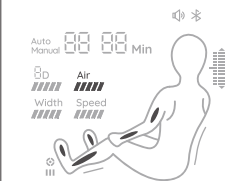
| 氣壓強度顯示                                                                            | 氣壓強度調節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1檔 </div> <div>2檔 </div> <div>3檔 </div> <div>4檔 </div> <div>5檔 </div> |

### 四、輔助功能（請在開機後使用該功能）

- (1) 加熱功能：短按手控器「加熱」鍵，開啟或關閉背部加熱功能。開啟加熱功能3分鐘後有溫感。
- (1.1) 資訊界面加熱顯示。
- (2) 低功耗：長按手控器「加熱」鍵，開啟或關閉低功耗功能，開啟低功耗功能後，在按摩椅關機後進入低功耗狀態，關閉所有功能，只能透過手控器電源按鍵開機。
- (2.1) 資訊界面低功耗顯示。

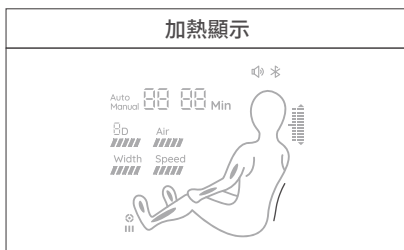


- (3) 足底滾輪：按手控器「滾輪」鍵，即可開啟或關閉足底滾輪功能；滾輪速度設有1~3檔可調，每按一次滾輪鍵，速度增加一檔；按第四次時則關閉足底滾輪功能，依序循環切換。
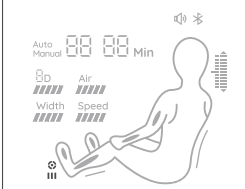
| 速度顯示                                                                                | 速度調節                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1檔 </div> <div>2檔 </div> <div>3檔 </div> |

## 使用方法

- (4) 音量調節：按手控器“肩部位置/音量上”鍵或“肩部位置/音量下”鍵，長按調節音量大小。
- (5) 藍牙：按手控器「藍牙」鍵，即可開啟或關閉藍牙功能。開啟藍牙功能後，即可將帶有藍牙功能的音源設備（如手機、MID平板電腦等）與按摩椅藍牙模組配對連接後，可把音源設備播放的音樂透過藍色牙無線傳送到按摩椅音響系統進行音樂播放。
- (5.1) 進入智慧型裝置主選單，開啟「設定」--選擇「藍牙」選項--開啟「藍牙」--藍牙自動「搜尋新的藍牙設備」進行搜尋。
- (5.2) 智慧型裝置將搜尋到對應的藍牙型號(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇「配對」即可完成配對。
- (5.3) 開啟智慧型裝置的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。

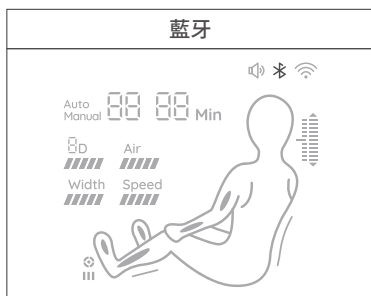

## 五、角度調整（請在開機後使用該功能）

### (1) 零重力

| 按鍵                                                                                         | 描述                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Zero | 按手控器上的「零重力」鍵，即可循環調整零重力角度（共有2檔設定角度可調）。每按一次按鍵切換一檔零重力角度，依序循環。 |

### (2) 全身角度

| 按鍵                                                                                  | 描述                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | 聯動下降鍵：按住此鍵靠背機構緩緩下降，同時腿部機構緩緩上升，釋放則停止靠背機構下降和腿部機構上升；在調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |
|  | 聯動上升鍵：按住此鍵靠背機構緩緩上升，同時腿部機構緩緩下降，釋放則停止靠背機構上升和腿部機構下降；在調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |

## 使用方法

### (3) 腿部機構角度

| 按鍵                                                                                | 描述                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 腿部機構下降鍵：按住此鍵腿部機構緩緩下降，釋放則停止下降；調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |
|  | 腿部機構上升鍵：按住此鍵腿部機構緩緩上升，釋放則停止上升；調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |

## 六、結束按摩

在按摩過程中：

- (1) 按手控器開關鍵，所有按摩功能關閉，按摩椅角度重設。
- (2) 長按扶手開關鍵，所有按摩功能關閉，按摩椅角度重設。
- (3) 定時時間結束，所有按摩功能關閉，按摩椅角度不重設。

### **溫馨提示**

手控器操作按摩椅方法結束。


 使用方法

## 七、藍牙APP連接按摩椅說明

- (1) 藍牙APP下載安裝：
- (1.1) 安卓(Android系統)下載方式：在Google Play ( 谷歌商店 ) 中搜尋「Maxcare massage chair」下載Android版本進行下載安裝，或掃描下方二維碼進行下載安裝，安裝成功後即可使用藍牙APP進行操作按摩椅。
- (1.2) 蘋果 ( iOS系統)下載方式：在App Store(蘋果應用商城)中搜尋「Maxcare massage chair」下載iOS版進行下載安裝，或掃描下方二維碼進行下載安裝，安裝成功後即可讓用藍牙APP進行操作按摩椅。



Maxcare massage chair



- (2) APP藍牙搜尋連線：APP安裝成功後，在智慧型裝置界面中選擇點選「Maxcare massage chair」圖標，開啟APP後將會自動跳躍至藍牙連接界面，同時APP自動搜尋到對應的裝置藍牙號(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，然後點選對應的設備藍牙號(並顯示已連接)，即可連接成功，連接成功後即可透過APP操作按摩椅。注意：在設備連接前必須開啟智慧型裝置系統的藍牙功能和位置訊息。



## 使用方法

- (3) APP藍牙名稱更換：若按摩椅放置的位置更換或藍牙名稱更換，都需依實際狀況進行重新連接設備；如下圖所示進入APP界面後選擇點選左側選單列里的「設定」按鈕，進行藍牙名稱更換。注意：在設備連接前必須開啟智慧型裝置系統的藍牙功能和位置資訊。



- (3.1) 如下圖所示進入設定界面後，選擇點選「裝置連接」按鈕，在彈跳窗界面中APP將會自動搜尋到對應的裝置藍牙號(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，再點選選擇對應的裝置藍牙號(並顯示已連線)，即可連接成功，設備連接成功後即可操作按摩椅。




 使用方法

## 八、藍牙APP控制按摩椅操作說明

- (1) 設備連線成功後，藍牙APP將自動跳轉至待機界面，如下圖所示選擇點選左下角選單列里的「開關」按鈕開啟按摩功能。
- (2) 開啟後，系統自動進入開機畫面、等待下一步操作。



- (3) 自動躺臥：按摩力度選擇後，系統將自動進入「自動躺臥」界面，按摩椅自動調節躺臥角度，等待其調整完成即可，若無需調整可直接點選「跳過」鍵，按摩椅將保持目前坐姿，並進入下一步力度選擇。

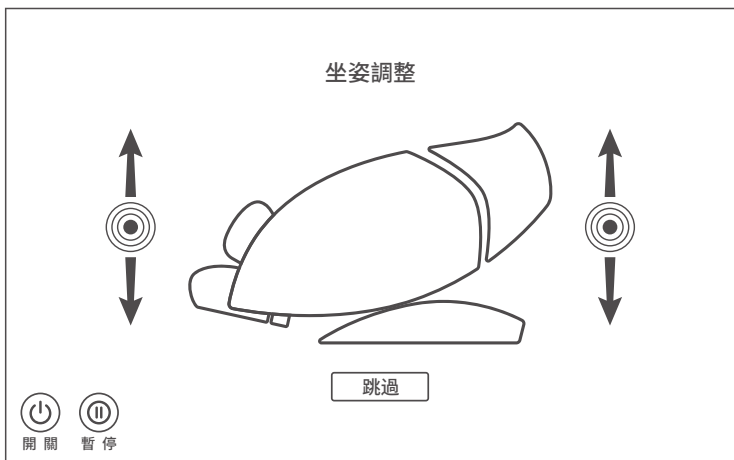

## 使用方法

- (4) 體型檢測：等待按摩椅自動躺臥調整後，系統將自動進入「體型檢測」界面，按摩椅自動檢測使用者體型，檢測完成後按摩球定位到肩部，若無需檢測可直接點選「跳過」鍵，系統預設體型並直接開始按摩，並進入肩位置調整界面。




- (5) 肩位置調整：等待體型偵測完成後，系統將自動進入「肩位置調整」界面後，若按摩輪停在您的肩部位置，則不需要進行調整，可直接點擊「確定」開始按摩；如果按摩輪不在您的肩部位置，點選向上「▲」鍵或「▼」向下鍵，將按摩輪調整到肩部位置(肩位置調整共有1-11檔可調)，調整完成後點選「確定」開始按摩。註：如果超過10秒未進行任何操作，系統將預設為目前按摩輪位置為您的肩部位置，直接開始按摩。




## 使用方法

(6) 待體型檢測或肩位置檢測完成後，進入主界面即可依照自己的需求選擇對應的按摩功能。

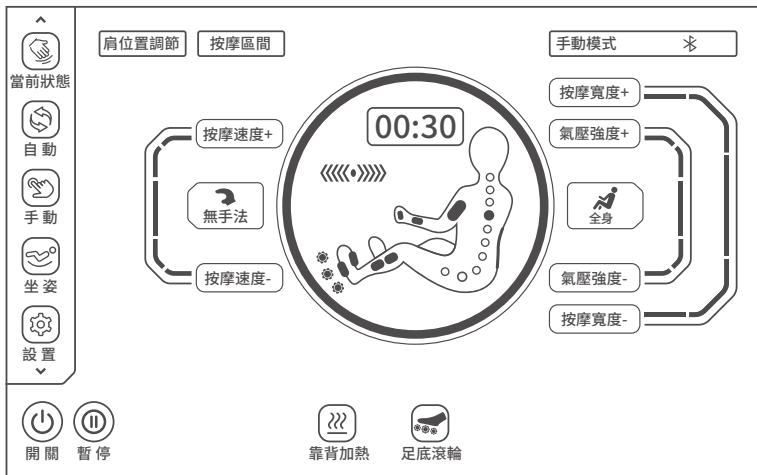


## 使用方法

### (7.1) 藍牙APP界面按鍵介紹

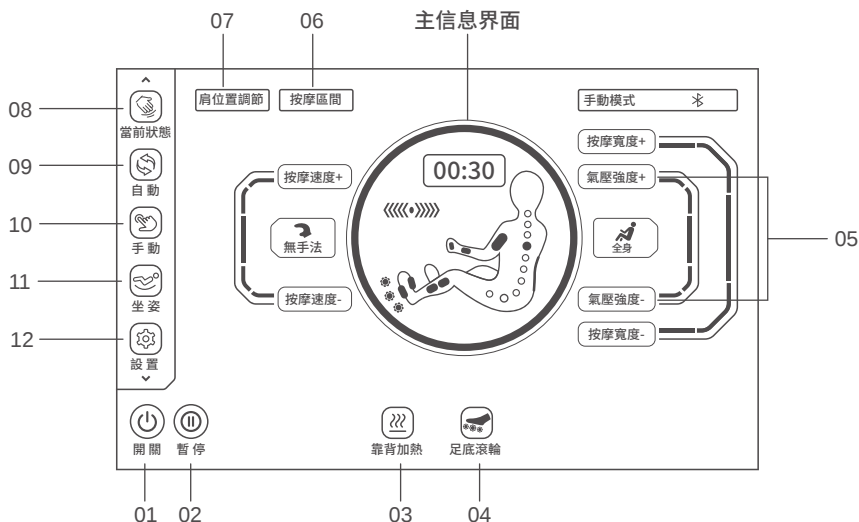

- 開關鍵**  
開啟或關閉按摩椅功能。
- 暫停鍵**  
暫停按摩或退出暫停按摩。
- 靠背加熱鍵**  
開啟或關閉靠背加熱功能。
- 足底滾輪鍵**  
開啟或關閉足底滾輪功能。
- 氣壓強度鍵**  
調節氣壓強度。
- 按摩區間鍵**  
選擇對應的部位按摩。
- 肩位置調節鍵**  
調節肩定位，確定按摩基準。
- 當前狀態鍵**  
進入查看目前按摩椅狀態。
- 自動功能菜單鍵**  
進入自動功能按摩選擇。
- 手動功能菜單鍵**  
進入手動設置按摩功能。
- 坐姿調整菜單鍵**  
進入坐姿調整界面選擇坐姿角度。
- 設置菜單鍵**  
進入設置選菜單界面。

# 使用方法

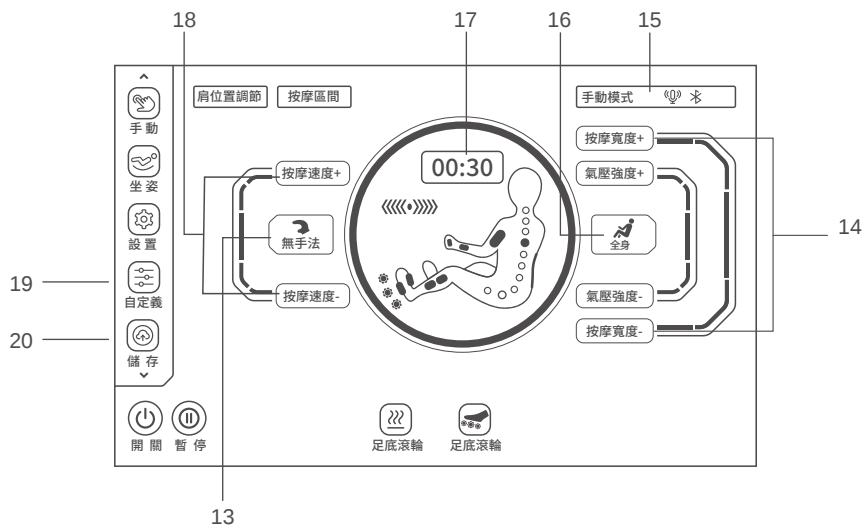

13. 按摩手法選擇鍵  
選擇按摩手法。
14. 按摩寬度鍵  
調節按摩寬度。
15. 狀態顯示欄  
顯示按摩程序狀態資訊。
16. 氣壓按摩選擇鍵  
選擇氣壓部位。

17. 時間調整菜單鍵  
調節按摩時間。
18. 按摩速度鍵  
調節按摩速度。
19. 自定義菜單鍵  
進入自定義界面。
20. 儲存菜單鍵  
進入儲存界面。

## 使用方法

### 九、自動功能（請在開機後使用該功能）

點擊左側菜單欄中的“自動”鍵（如下圖所示），進入自動功能界面，再據按摩需求選擇不同場景中的自動按摩功能。**注：每個自動功能名稱詳細介紹請見此說明書18-20頁內容。**

(1)自動功能共有18種可選，按四大類按摩場景分類。

(1.1)健康養護：零壓舒展、元氣喚醒、舒適養生、肩頸護理、泰式拉筋。

(1.2)場景應用：中式推拿、疲勞恢復、海浪輕揉、舒筋活絡、腰部護理。

(1.3)家庭專屬：腿足舒緩、總裁釋壓、女王纖體、白領專享、御宅充電。


(1.4)特色程序：午間小憩、溫熱祛濕、安神助眠。



自動功能選擇示意圖

### 十、手動模式（請在開機後使用該功能）

點擊左側菜單欄的“手動”鍵（如下圖所示），系統進入手動模式界面後，可根據按摩需求選擇相應的手動按摩功能進行按摩。

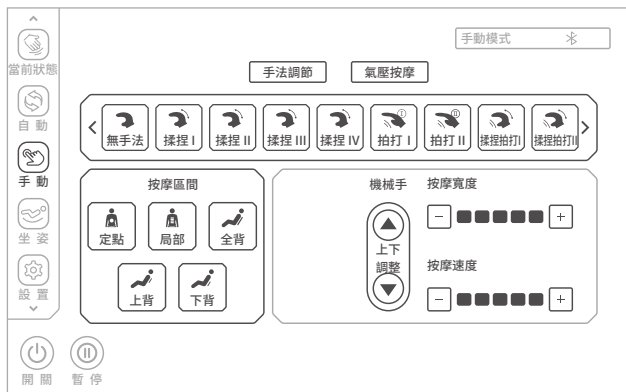


手動模式-手法選擇示意圖

## 使用方法

(1) 手動模式：進入手動模式界面後，如下圖所示手動按摩功能主要分為兩大類可選。

(1.1) 手法調節：按摩手法、按摩區間、機械手上下調節、按摩寬度、按摩速度。

(1.2) 氣壓按摩：全身、上半身、下半身模式及氣壓強度調節。

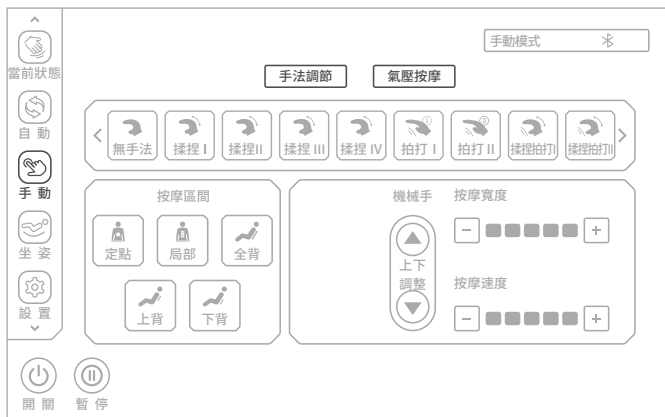

手動模式-手動按摩功能選擇示意圖


(1.1) 手法調節：進入手動模式界面後，如下圖所示點擊“手法調整”鍵，即可根據需求選擇手法調節按摩功能，包括按摩手法、按摩區間、機械手上下調節、按摩寬度、按摩速度等按摩功能。



手動模式-手法調節選擇示意圖

## 使用方法

(1.2)手法：進入上機芯按摩功能菜單後，如下圖所示，點擊“手法”鍵，即可進行手法按摩，包括無手法、揉捏(共4種手法，揉捏I~揉捏IV)、拍打（共2種手法，拍打I~拍打II）、揉捏拍打(共4種手法，揉捏拍打I~揉捏拍打IV)、指壓等12手法可選。（注：點擊手法調節菜單“向左箭頭”和“向右箭頭”按鈕可左右滾動切換顯示更多按摩手法）。

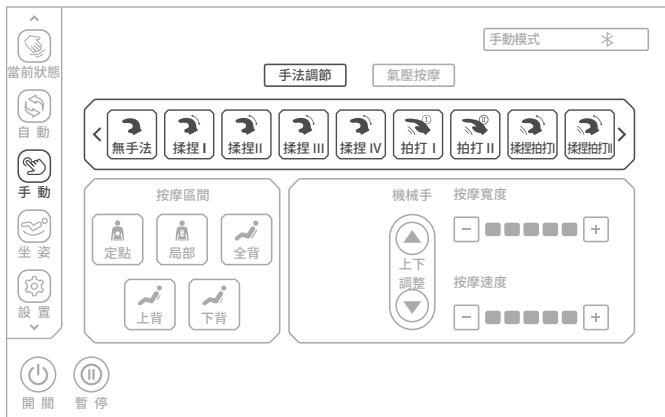


手動模式-手動按摩功能選擇示意圖

| 功能                                                                                          | 按摩輪調整   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 無手法        | 寬度可調    | 5檔速度可調整<br>5檔寬度可調整 |
| 揉捏I        | 寬度可調    |                    |
| 揉捏II       | 寬度可調    |                    |
| 揉捏III     | 寬度可調    |                    |
| 揉捏IV     | 寬度可調    |                    |
| 拍打I      | 速度、寬度可調 |                    |
| 拍打II     | 速度、寬度可調 |                    |
| 揉捏拍打I    | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打II   | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打III  | 速度可調    |                    |
| 揉捏拍打IV   | 速度可調    |                    |
| 指壓I      | 寬度可調    |                    |

## 使用方法


注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊“手法”鍵，然後在彈窗中選擇相應的手法圖標（如揉捏、拍打、指壓等）進行切換按摩手法。

(1.2.1) 手法快捷方式：此處功能是在手動模式下，當前狀態界面中切換按摩手法的快捷方式。

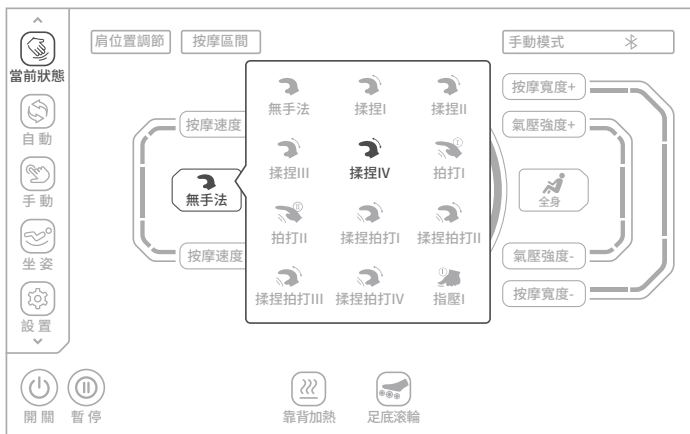

當前狀態-手法選擇示意圖

(1.2) 按摩區間：進入上機芯按摩功能菜單後，如下圖所示選擇“按摩區間”按鍵，即可進行區間按摩。包括定點、局部、全背、上背、下背等5種按摩區間可選，按摩區間菜單選擇相應的按摩區間進行按摩。

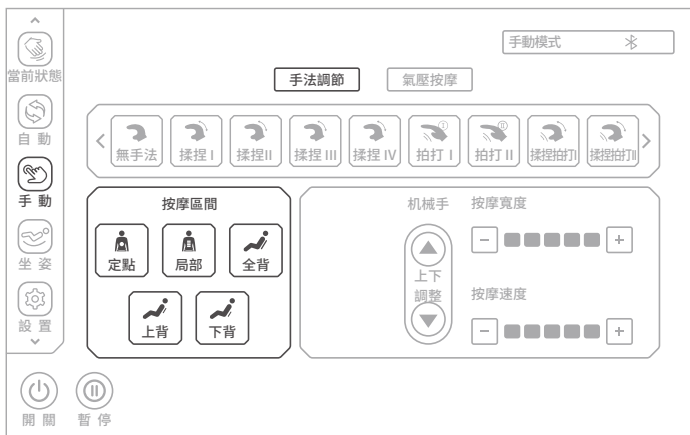


手動模式-按摩區間選擇示意圖


 使用方法

| 按鍵                                                                                | 描述        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 定點位置定點按摩  |
|  | 小範圍局部往返按摩 |
|  | 全背往返按摩    |
|  | 上背往返按摩    |
|  | 下背往返按摩    |

注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊“按摩區間”鍵，然後在彈窗中選擇相應的按摩區間圖標（如定點、局部、全背等）進行切換按摩區間。


(1.2.1)按摩區間快捷方式：此處功能是在手動模式下，當前狀態界面中切換按摩區間的快捷方式。

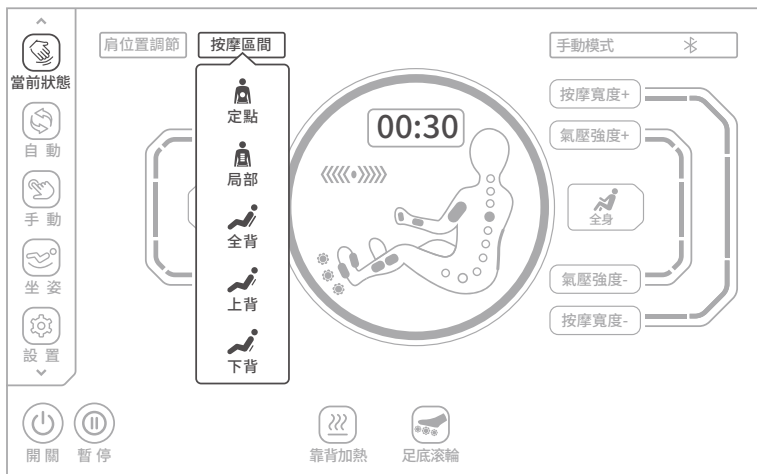

當前狀態-按摩區間選擇示意圖

## 使用方法

- (1.4) 機械手調節：進入上機芯按摩功能菜單後，如下圖所示選擇機械手 “▲” 鍵或 “▼” 鍵，即可進行按摩機械手上下位置調節。機械手調節需在手動模式的定點和局部按摩區間下進行機械手位置調節。

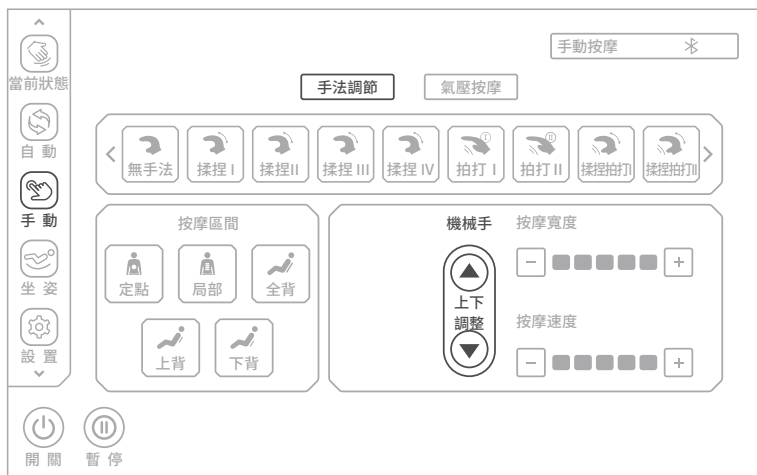


手動模式-機械手調節示意圖

| 按鍵 | 描述                        |
|----|---------------------------|
| ▲  | 按住上鍵機械手向上移動，鬆開按鍵機械手則停止上移。 |
| ▼  | 按住下鍵機械手向下移動，鬆開按鍵機械手則停止下移。 |

## 使用方法

- (1.5)按摩寬度：進入上機芯按摩功能菜單後，如下圖所示選擇按摩寬度加“+”鍵或“-”鍵，即可進行按摩寬度調節（寬度共有1~5檔可調，1檔最窄~5檔最寬）；寬度調節需在以下按摩手法中使用：無手法、拍打Ⅰ、拍打Ⅱ、指壓Ⅰ。用戶必須在選擇按摩手法或者按摩區間進入手動模式後才可以調整寬度。

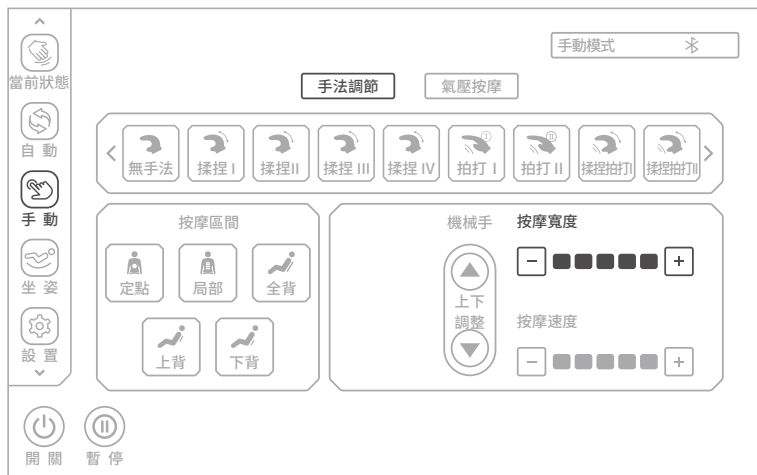

手動模式-按摩寬度示意圖

| 手動模式-按摩寬度調節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |      |      |
| 1檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 按鍵                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此鍵增寬按摩寬度，1-5檔寬度可調整 |
|  | 按此鍵縮窄按摩寬度，1-5檔寬度可調整 |

## 使用方法

注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊“按摩寬度+”鍵或“按摩寬度-”鍵，即可進行按摩寬度調節（寬度共有1~5檔可調，1檔最窄~5檔最寬）。

(1.5.1)按摩寬度快捷方式：此處功能是在手動模式下，當前狀態界面中切換按摩寬度的快捷方式。




當前狀態-按摩寬度示意圖

| 當前狀態-按摩寬度調節 |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| 1檔          | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 |

| 按鍵    | 描述                  |
|-------|---------------------|
| 按摩寬度+ | 按此鍵增寬按摩寬度，1-5檔寬度可調整 |
| 按摩寬度- | 按此鍵縮窄按摩寬度，1-5檔寬度可調整 |

## 使用方法

(1.6)按摩速度：進入上機芯按摩功能菜單後，如下圖所示選擇按摩速度加“+”鍵或者減“-”鍵，即可進行按摩速度調節（速度共有1~5檔可調，1檔最慢~5檔最快）；按摩手法停止時無法調節速度。用戶必須在選擇按摩手法或者按摩部位進入手動模式後才可以調整速度。

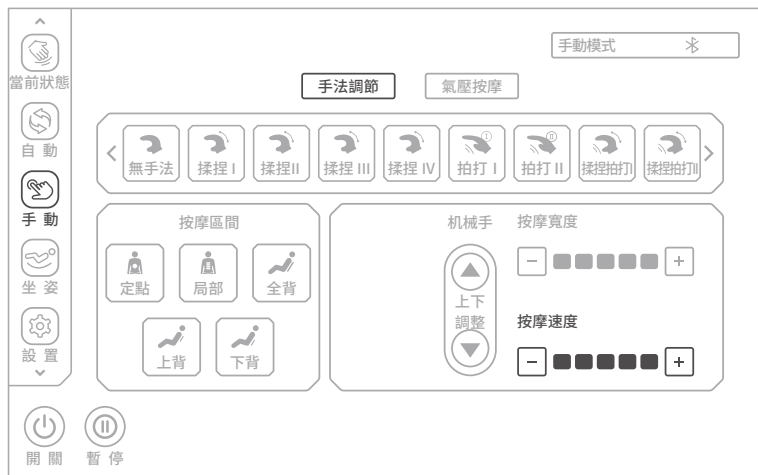

手動模式-按摩速度示意圖

| 手動模式-按摩速度調節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |      |      |
| 1檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5檔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 按鍵                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此鍵增快按摩速度，1-5檔速度可調整 |
|  | 按此鍵減慢按摩速度，1-5檔速度可調整 |

## 使用方法

注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊“按摩速度+”鍵或“按摩速度-”鍵，即可進行按摩速度調節（速度共有1~5檔可調，1檔最慢~5檔最快）。

(1.6.1)按摩強度快捷方式：此處功能是在手動模式下，當前狀態界面中切換按摩強度的快捷方式。



當前狀態-按摩速度示意圖

| 當前狀態-按摩速度調節                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1檔 |  2檔 |  3檔 |  4檔 |  5檔 |

| 按鍵                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此鍵增快按摩速度，1-5檔速度可調整 |
|  | 按此鍵減慢按摩速度，1-5檔速度可調整 |

## 使用方法

- (3)氣壓按摩：進入手動界面後，如下圖所示選擇“氣壓按摩”鍵，氣壓按摩包括全身、上半身、下半身、氣壓強度等按摩功能可選。
- (3.1)氣壓部位選擇：進入氣壓按摩菜單後，即可根據按摩需求選擇“全身、上半身、下半身”按鈕，開啟或關閉對應區域的氣壓按摩功能，全部關閉則關閉全部氣壓功能。




手動模式-氣壓按摩示意圖

| 按鍵                                                                                  | 描述                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 按此鍵開啟或關閉全身氣壓按摩功能  |
|  | 按此鍵開啟或關閉上半身氣壓按摩功能 |
|  | 按此鍵開啟或關閉下半身氣壓按摩功能 |

 使用方法


注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊界面中的氣壓按摩“圖標”鍵，然後在彈窗中選擇對應的氣壓按摩圖標（如全身、上半身、下半身）進行切換氣壓按摩。

(3.1.2) 氣壓按摩快捷方式：此處功能是在手動模式下，當前狀態界面中切換氣壓按摩的快捷方式

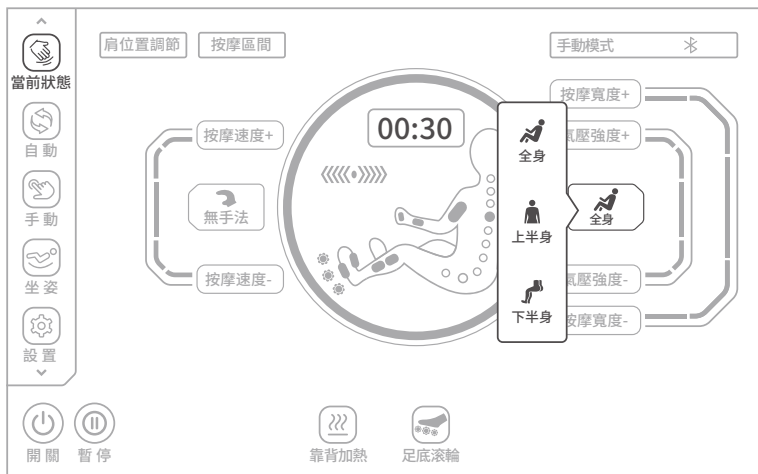

當前狀態-氣壓按摩示意圖

## 使用方法

(3.2)氣壓強度：進入氣壓按摩功能菜單後，如下圖所示在開啟對應區域的氣壓按摩功能後。再根據按摩需求選擇“氣壓強度+”或“氣壓強度-”鍵即可調節氣壓強度(強度共有1~5檔可調，1檔最弱~5檔最強)，逐檔增強或減弱氣壓強度。



手動模式-氣壓強度示意圖

| 手動模式氣壓強度調節                                                                              |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1檔 | <br>2檔 | <br>3檔 | <br>4檔 | <br>5檔 |

| 按鍵 | 描述                  |
|----|---------------------|
| +  | 按此鍵增加氣壓強度，1-5檔強度可調整 |
| -  | 按此鍵減弱氣壓強度，1-5檔強度可調整 |

## 使用方法

注：在按摩程序運行中，如下圖所示點擊屏幕左側“當前狀態”鍵，進入界面後點擊“氣壓強度+”鍵或“氣壓強度-”鍵，即可進行氣壓強度調節(強度共有1~5檔可調，1檔最弱~5檔最強)，逐檔增強或減弱氣壓強度。

(3.2.1)氣壓強度快捷方式：需先在手動界面中開啟對應按摩部位(如全身、上半身、下半身)的氣壓按摩功能，方可使用以上快捷調節方式。



當前狀態-氣壓強度示意圖


| 當前狀態-氣壓強度調節 |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| 1檔          | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 |

| 按鍵    | 描述                  |
|-------|---------------------|
| 氣壓強度+ | 按此鍵增加氣壓強度，1-5檔強度可調整 |
| 氣壓強度- | 按此鍵減弱氣壓強度，1-5檔強度可調整 |

## 使用方法

### 十一、坐姿調整

點擊左側菜單欄的“坐姿”鍵（如下圖所示），進入坐姿菜單後，根據按摩需求選擇坐姿角度調整，包括小腿上升、小腿下降、聯動上升、聯動下降、靠背上升、靠背下降、零重力Ⅰ、零重力Ⅱ等按摩功能。

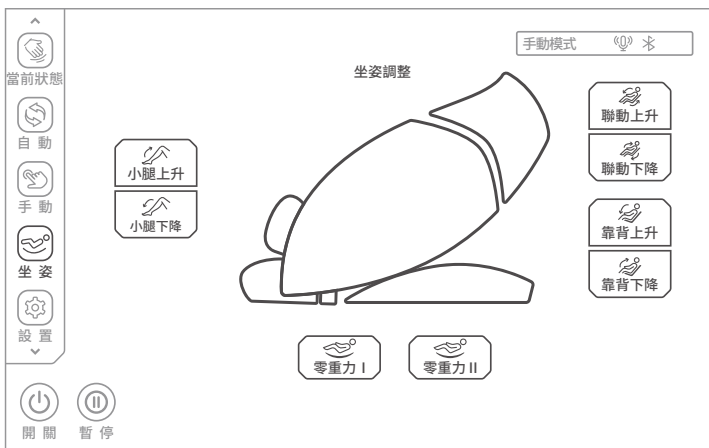

坐姿調整示意圖

#### (1) 零重力調整

| 按鍵                                                                                         | 描述                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br>零重力Ⅰ  | 零重力Ⅰ鍵：自動調整腿部機構和靠背機構位置到零重力Ⅰ位置。 |
| <br>零重力Ⅱ | 零重力Ⅱ鍵：自動調整腿部機構和靠背機構位置到零重力Ⅱ位置。 |

#### (2) 小腿升降角度調整

| 按鍵                                                                                          | 描述                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br>小腿上升 | 腿部機構上升鍵：按住此鍵腿部機構緩緩上升，釋放則停止上升，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |
| <br>小腿下降 | 腿部機構下降鍵：按住此鍵腿部機構緩緩下降，釋放則停止下降，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |

## 使用方法

### (3) 聯動升降角度調整

| 按鍵                                                                                        | 描述                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br>聯動上升 | 聯動上升鍵：按住此鍵靠背機構緩緩上升，同時腿部機構緩緩下降，釋放則停止靠背機構上升或腿部機構下降，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |
| <br>聯動下降 | 聯動下降鍵：按住此鍵靠背機構緩緩下降，同時腿部機構緩緩上升，釋放則停止靠背機構下降或腿部機構上升，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |

### (4) 靠背機構角度調整

| 按鍵                                                                                        | 描述                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>靠背上升 | 靠背機構上升鍵：按住此鍵靠背機構緩緩上升，釋放則停止，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |
| <br>靠背下降 | 靠背機構下降鍵：按住此鍵靠背機構緩緩下降，釋放則停止，調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。 |

## 十二、設置（請在開機後使用該功能）

點擊手控器屏幕左側菜單欄里的“設置”鍵（如下圖所示），系統將進入設置界面。

即可根據按摩需求選擇系統設置功能。

(1) 設置功能主要分為兩大類。

(1.1) 產品信息：產品型號、產品序列號、固件版本。

(1.2) 系統設置：藍牙、語音選擇等系統設置功能。

(1.3) 設備連接：按摩椅連接藍牙APP並配對成功後，即可通過手機進行操控。



## 使用方法

- (2)設備信息:進入設置界面後,如下圖所示即可查看產品型號、產品序列號、固件版本等信息顯示。



- (3)藍牙:進入設置界面後,如下圖所示點擊“藍牙”開關,開啟或關閉藍牙功能。開啟藍牙功能後,即可將帶有藍牙功能的音源設備(如手機、MID平板電腦等)與按摩椅藍牙模塊配對連接後,可把音源設備播放的音樂通過藍牙無線傳送到按摩椅音響系統進行音樂播放。
- (3.1)進入智能設備主菜單,打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- (3.2)智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*),點擊配對按鈕,如詢問是否與該設備配對,選擇“配對”即可完成配對。



## 使用方法

- (4) 語言選擇：進入設置界面後，再根據使用者的需求選擇不同的語言，默認語言為英文，可選擇中文。



- (5) 設備連接：若需要更改藍牙號或重新連接設備，進入設置界面後，如下圖所示點選「設備連接」鍵，在彈窗中系統將會自動搜尋附近的藍牙設備號，並清單中選擇按摩椅對應的藍牙號並完成APP配對。配對完成後即可透過手機控制按摩椅。



## 使用方法


### 十三、自定義（請在開機後使用該功能）

向上滑動手控器左側菜單欄，選擇點擊“自定義”鍵（位置如下圖所示），進入自定義界面後，根據按摩需求選擇自定義I或自定義II（以前設置過相應的自定義並保存過才能選擇）進行按摩。



自定義示意圖

點擊自定義I設置或自定義II設置，進入自定義設置界面，然後選中喜歡的按摩手法，選中後手法圖標高亮顯示，可選擇按摩手法、按摩區間、氣壓強度、按摩速度、氣壓按摩、按摩寬度、靠背加熱、足底滾輪等功能，然後點保存，即可將當前設置保存到自定義I和自定義II，保存成功後，立即並運行該自定義程序，下次可以直接點擊保存後的自定義程序進行按摩。

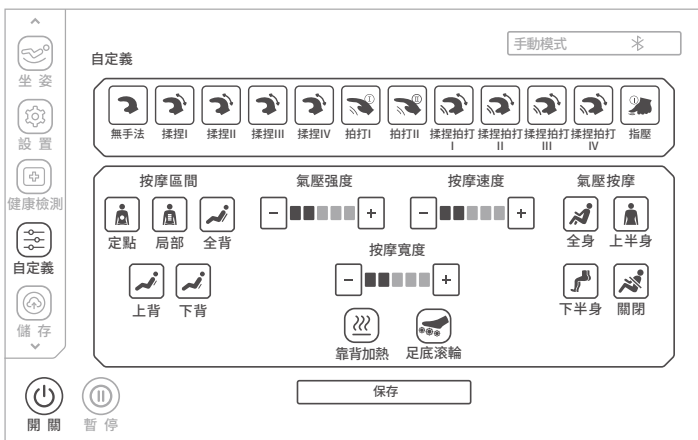

## 使用方法


### 十四、儲存（請在開機後使用該功能）

向上滑動手控器左側菜單欄，選擇點擊“存儲”鍵（如下圖所示），進入存儲選擇界面，即可根據按摩需求選擇存儲功能。

(1) 存儲功能主要分為“存儲、調用”兩大類；每一類各有三組模式選擇。




(2) 存儲：進入存儲界面後，如下圖所示點擊“存儲I、存儲II、存儲III”鍵中的任一種即可存儲正在運行的所有按摩程序（最多可存儲三套按摩程序）；包括自動功能、手動功能、氣壓模式及強度等按摩功能，以及按摩椅角度調節和其他按摩功能。

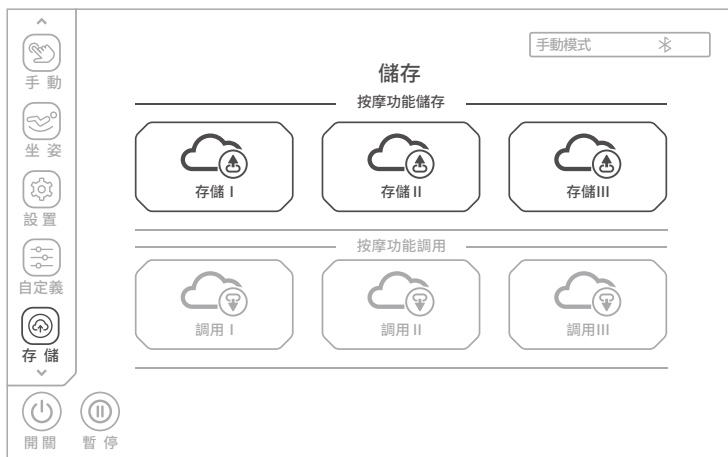


## 使用方法

- (3)調用：進入存儲界面後，如下圖所示點擊“調用I、調用II、調用III”鍵中的任一種即可調用已存儲的程序進行按摩；包括自動功能、手動功能、氣壓模式及強度等按摩功能，以及按摩椅角度調節和其他按摩功能。

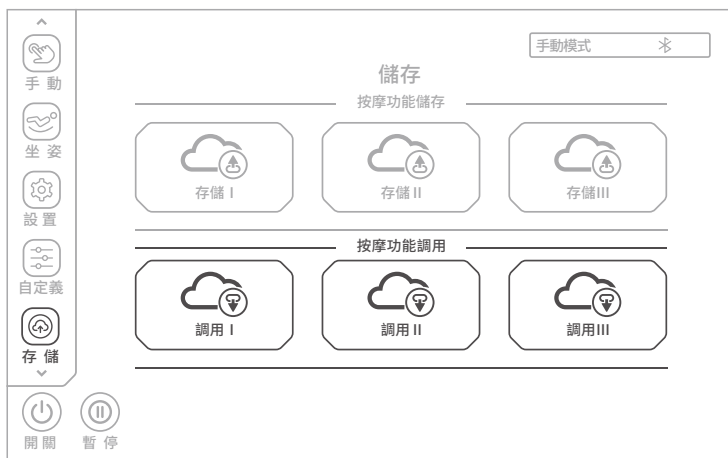

### 十五、其它功能（請在開機後使用該功能）

在顯示屏“當前狀態”界面中，如下圖所示可根據按摩需求選擇相應的按摩功能，包括靠背加熱、足底滾輪、時間調節、肩位置調節、按摩狀態顯示等按摩功能。

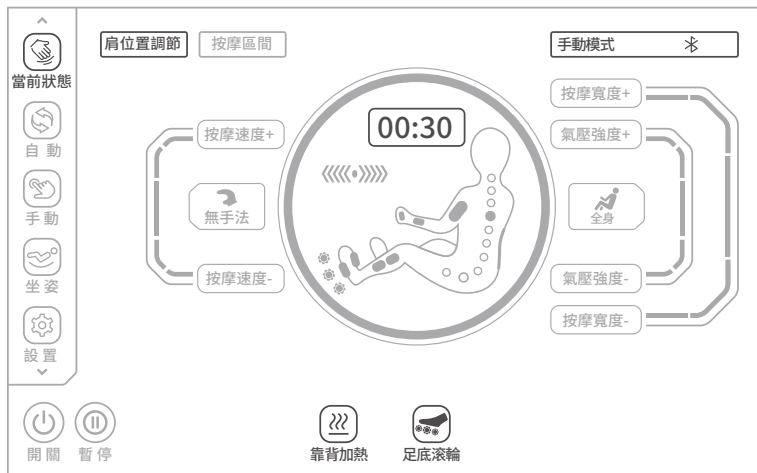


## 使用方法

- (1)暫停：按摩椅開機後按摩功能運行狀態下，按“暫停”鍵會進入暫停狀態，所有按摩功能停止，再次按下“暫停”鍵恢復之前的按摩狀態，暫停超過20分鐘自動關機。注意：在暫停狀態，除了關機其它功能一概不能使用。




- (2)靠背加熱：在“當前狀態”界面中，如下圖所示選擇“靠背加熱”鍵，開啟或關閉靠背加熱功能，開啟加熱功能3分鐘後有溫熱。

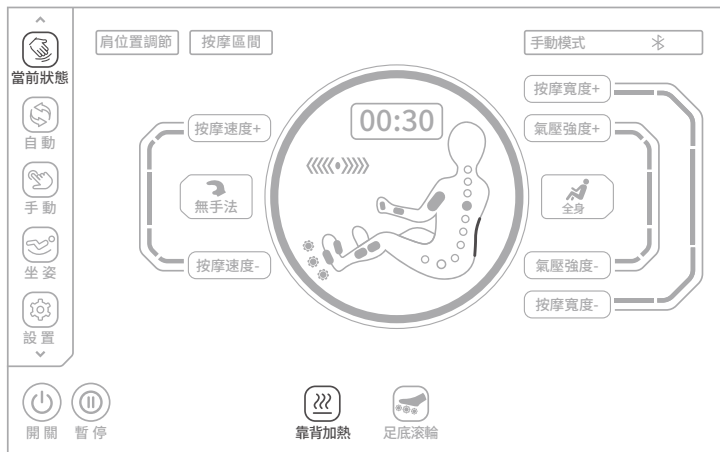


## 使用方法

- (3) 足底滾輪：在“當前狀態”界面中，如下圖所示選擇“足底滾輪”鍵，開啟或關閉足底滾輪按摩功能，滾輪速度設有1~3檔可調，每按一次足底滾輪鍵，速度增快一檔；按第四次時則關閉足底滾輪功能，依次循環切換。

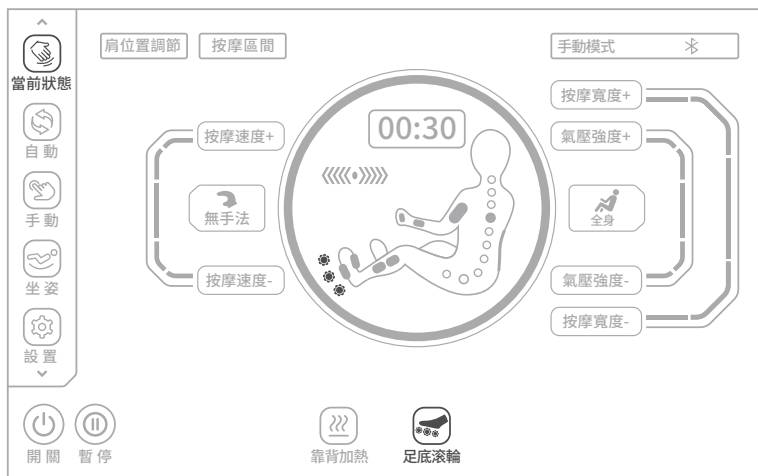


- (4) 肩位置調節：在“當前狀態”界面中，如下圖所示點擊“肩位置調節”鍵，在彈出菜單中按上、下箭頭按鈕，可調高或調低肩位置檔位，共11檔可調節。

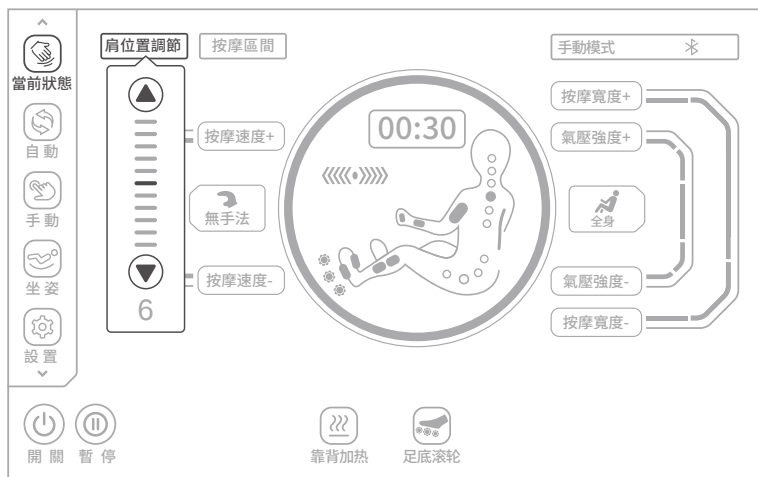

## 使用方法

- (5)時間調節：在“當前狀態”界面中，如下圖所示選擇按摩時間調節“00:30”鍵，在彈出菜單中按加、減箭頭按鈕，可增加或減少按摩時間。點擊“+”鍵，時間增加5分鐘，最大增加到40分鐘，點擊“-”鍵，時間減少5分鐘。

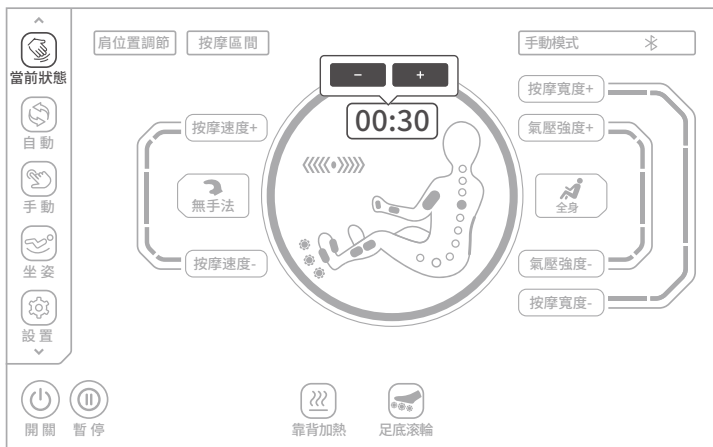

## 十六、結束按摩


在按摩過程中：

- (1)長按扶手開關鍵，所有按摩功能關閉，按摩椅角度覆位。
- (2)按藍牙APP界面開關鍵，所有按摩功能關閉，按摩椅角度覆位。
- (3)選擇按藍牙APP界面內按暫停鍵後再按開機鍵，所有按摩功能關閉，按摩椅角度覆位。
- (4)定時時間結束，所有按摩功能關閉，按摩椅角度不覆位。




 使用方法


切斷整機電源，附圖（整機電源切斷示意圖）。

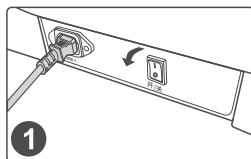

關閉電源開關(0 位置)

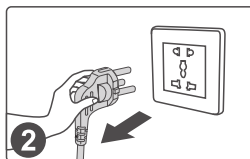

拔掉電源插頭示意圖

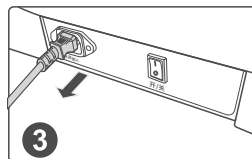

拔掉產品連接電源線

  
**溫馨提示**

藍牙APP操作按摩椅方式結束。

 產品的清潔、保養

## 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

## 保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。



注意

切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

## 溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
  - \* 有焦糊氣味。
  - \* 觸動導線後有時通電，有時斷電。
  - \* 電源線發熱。
  - \* 電源線是否破損。
  - \* 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

## PU合成皮革的保養及清潔

Pu合成皮革是由聚氨酯樹脂經塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的环境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。

### PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精，松節油，天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；
4. 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清潔；

### PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
2. 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
4. 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皺裂。

## 常見問題及處理方法

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及我們聯絡。

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現象      | 腿部或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嗒、嗒”音。                                                                |
| 可能原因及處理 | 出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。                                              |
| 現象      | 本機開啟後功能未運行或部分功能未運行。                                                                                 |
| 可能原因及處理 | 本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。       |
| 現象      | 本機在調整姿態時發出皮革摩擦聲。                                                                                    |
| 可能原因及處理 | 本產品整機採用了符合環保要求的高級抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相對運動處摩擦會產生正常的輕微響聲，屬正常現象。注意：如本機在運行時聽到織物或皮革撕裂聲，請立即停止使用，並尋求指定專業人員檢修。 |
| 現象      | 按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。                                                                                    |
| 可能原因及處理 | 如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將頭部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。                          |
| 現象      | 本機已受損。<br>電源線或電源插頭異常發熱。                                                                             |
| 可能原因及處理 | 為防止事故發生，請務必與授權服務中心聯系。                                                                               |

 產品技術與參數

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 產品名稱        | : 型動椅                                                  |
| 產品型號        | : MAX-Z05A2801                                         |
| 額定電壓        | : 220V~                                                |
| 額定頻率        | : 50Hz                                                 |
| 額定功率        | : 100W                                                 |
| 額定時間        | : 20分鐘                                                 |
| 噪 音         | : ≤60dB                                                |
| 產品毛重        | : 86.5kg                                               |
| 產品淨重        | : 73.5kg                                               |
| 產品尺寸 ( 豎立 ) | : L1405 x W755 x H1195mm                               |
| 產品尺寸 ( 伸展 ) | : L1665 x W755 x H945mm                                |
| 靠背最大承重      | : 95KG                                                 |
| 小腿架最大承重     | : 25KG                                                 |
| 安全結構        | : Class I                                              |
| 執行標準        | : GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ; GB/T 4706.10-2024 |




商標持有：美斯凱實業有限公司  
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)

# 型動椅

FLEXI CHAIR

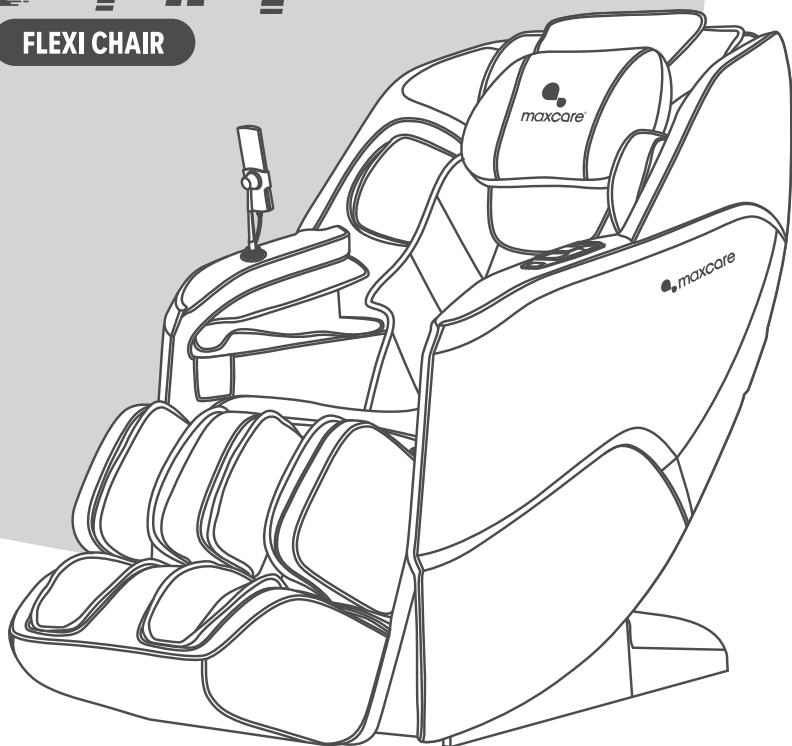

产品使用说明书

MAX-Z05A2801

  
maxcare®



## 企业介绍

maxcare® 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了maxcare® 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare® 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，maxcare® 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare® 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare® 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare® 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare® 将「无限关爱，源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

# 型動椅

## FLEXI CHAIR

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

### 目录

---

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 安全注意事项 .....    | P.01 - P.06 |
| 机件名称及功能 .....   | P.07 - P.11 |
| 使用方法 .....      | P.12 - P.52 |
| 产品的清洁、保养 .....  | P.53 - P.54 |
| 常见问题及处理方法 ..... | P.55        |
| 产品技术参数 .....    | P.56        |



## 安全注意事项



### 1. 重要安全警告

- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分，以免小腿架及靠背升降时造成意外。
- 在使用过程中、使其滑动时或机器移动时，请务必确认周围（产品的后、下部、前部及两旁）没有人或宠物，亦请确认无异物或宠物进入产品内，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 建议使用时间为20分钟。
- 使用前，请检查机件是否有破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



### 2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请将产品放置在平坦的地方使用。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



### 3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或者过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、脊椎滑落症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液迴圈障碍或各种皮肤感染等症者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。

## 安全注意事项

- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。

## 4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品20分钟内为宜。
- 产品下可放置一张垫子以防地板或地毯受损。
- 为安全起见，使用时让产品和其他人至少保持0.5米距离。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 请勿骑在产品扶手上，以免导致受伤或故障。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。

## 5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用乾布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与製造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 在不平整地面上勿使此产品滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。

## 6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 遥控器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此产品休息半小时后再使用。



注意



在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

## 安全注意事项


### 安装部件

#### 小腿安装说明

1. 将小腿的线和气管分别对应插入钢架组件前端插口上, 带有白色标识卡扣的气管接入白色气管插口, 另一未带有标识卡扣的气管接入黑色气管插口 (图1)。
2. 线对接完成后, 将钢架组件上的两侧小腿固定盖打开 (图2)。

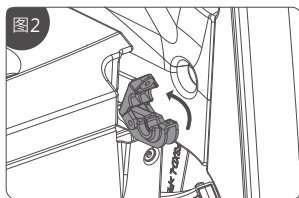
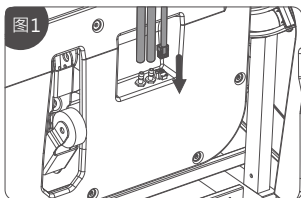


3. 将小腿抬起, 放入槽口中, 并盖上固定盖, 最后用2颗M4螺丝固定到位 (图3)。

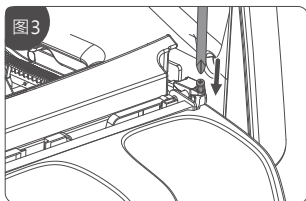



#### 手控器航空插安装说明

1. 非固定式航空插安装方式: 航空插(图4)与航空插(图5)的箭头标记对准后插紧, 再把螺母按顺时针方向锁紧。

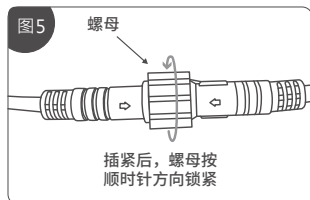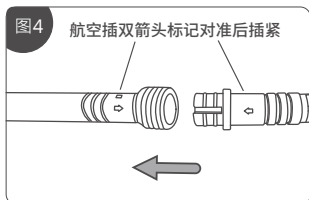

#### 手控器托架安装说明

1. 将托架组件支座旋钮上的螺纹与按摩椅扶手上的支座安装座的螺纹位置对应后(图1), 再顺时针旋转托架组件, 旋紧固定即可(图2)。

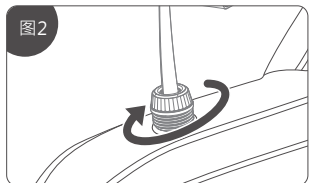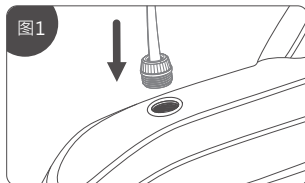



## 安全注意事项


### 安置按摩椅



#### 安装位置

确保足够空间以便按摩椅可以倾斜至少5.5cm。


勿将按摩椅放在阳光直射或高温环境。建议在按摩椅放置位置铺设软垫，以免在地板上形成压痕。

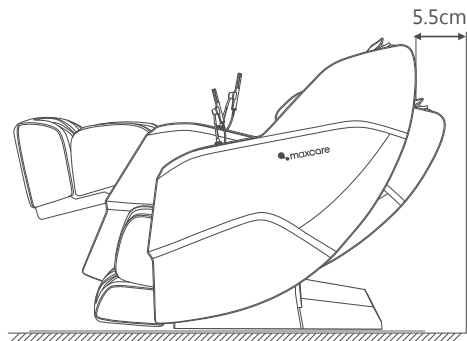

#### 产品移动说明

本机较重，移动时必须两人或以上合力搬动。

- 1.在地板或易受损地面移动时，请勿使用按摩椅脚轮，须抬起整机，以免破坏地面。
- 2.抬起移动及放下过程中，请人员小心，避免造成手足压伤或背腰损伤。

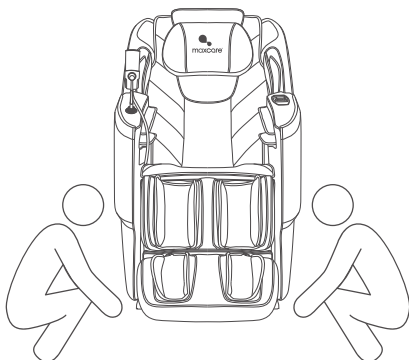



## 安全注意事项

### 安置按摩椅




#### 移动方法

使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式，将椅子向下后方倾倒约45°进行移动。

注意：下压幅度请勿太大，避免椅子完全倾倒导致产品损坏。


1. 移动前需正确关机，使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
2. 移动时产品上需空置，勿使人员、宠物或杂物停留在本产品上。
3. 使用脚轮移动切勿跨越高于2mm落差障碍或大于5mm间隙。
4. 使用脚轮移动产品时，不支持单次连续移动超过50米距离。请使产品缓慢匀速移动。

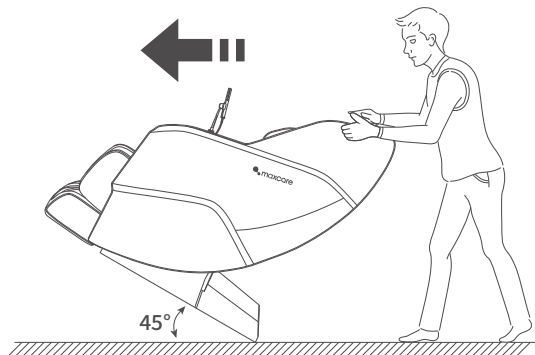

#### 头靠垫、靠背垫的拆装与使用方法

使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可依您的需求决定是否使用头靠垫（推荐让用头靠垫）。

靠背垫与靠背透过拉链连接（1），头靠垫与靠背垫透过拉链连接（2）。

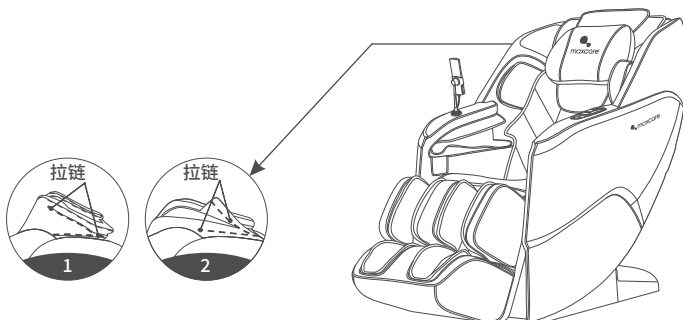


 安全注意事项

## 使用前


 检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。

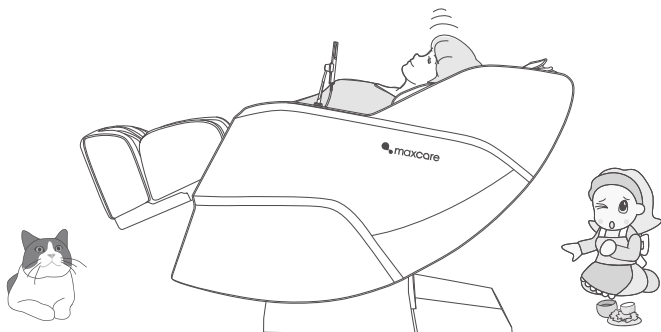
 确保本机缝隙间没有异物

按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。任何情况下勿使手、脚、头伸入小腿机构与机体之间区域，与扶手与太空舱之间区域。


任何情况下勿使手、脚、头陷入按摩区织物或皮革复盖面之后。

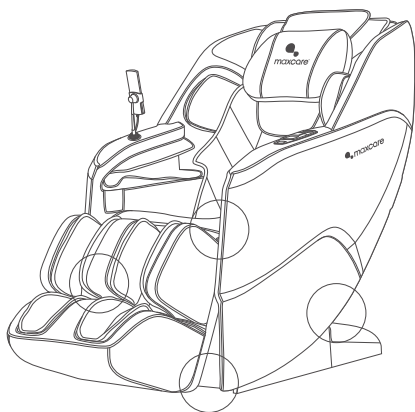

机件名称及功能

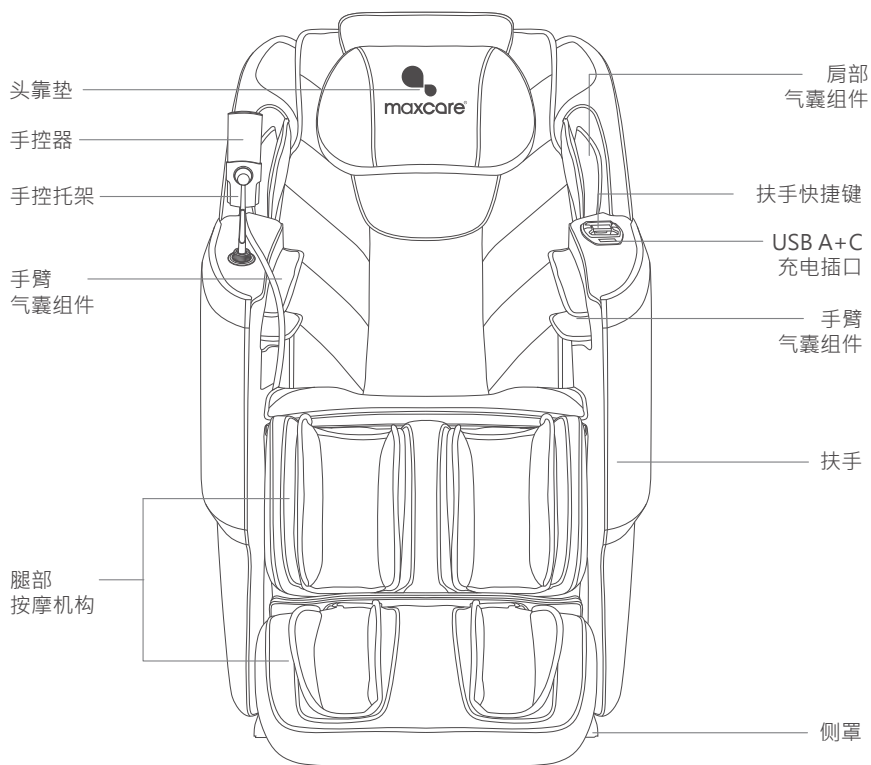


机件名称及功能

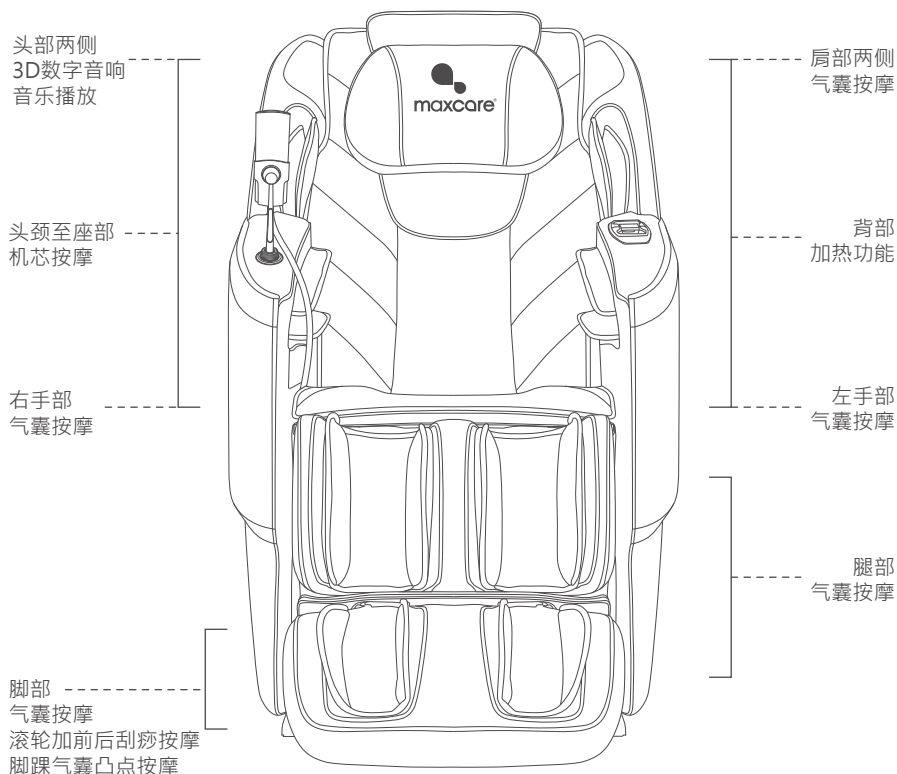


## 机件名称及功能

### 手控器按键说明

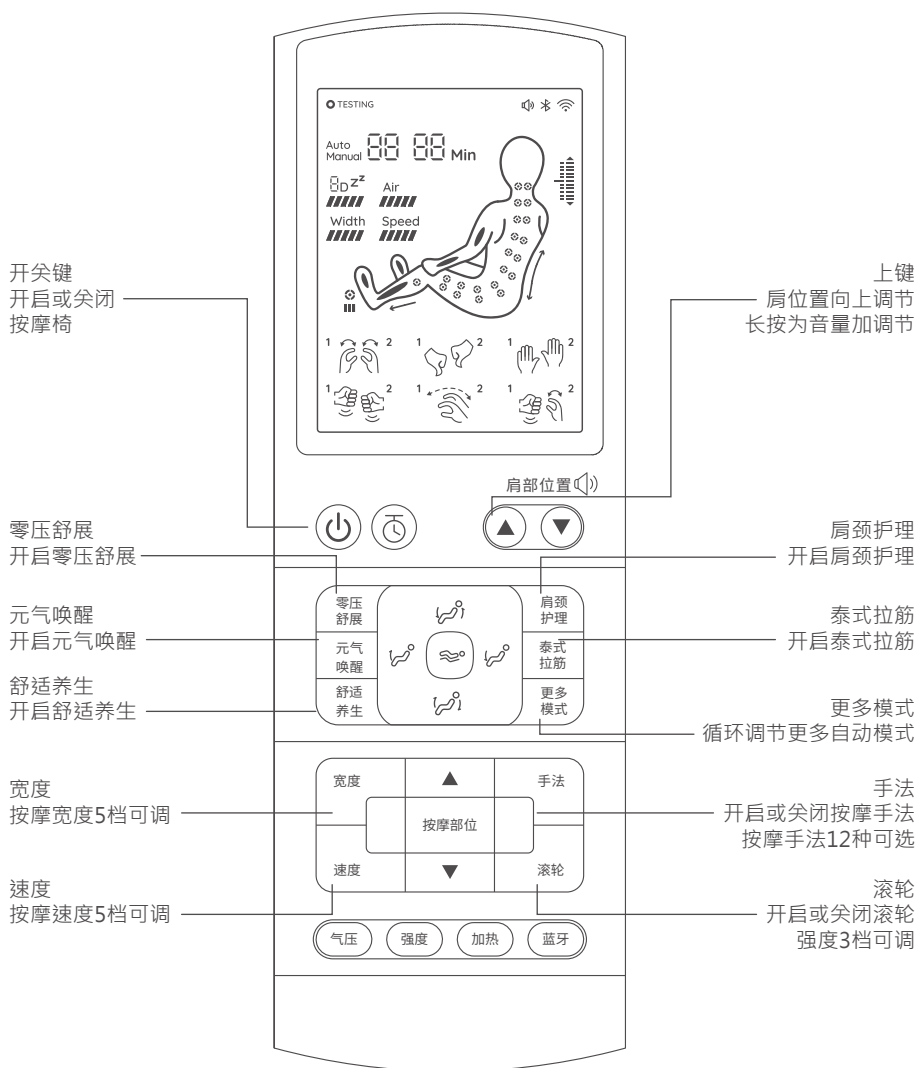


## 机件名称及功能

### 手控器按键说明

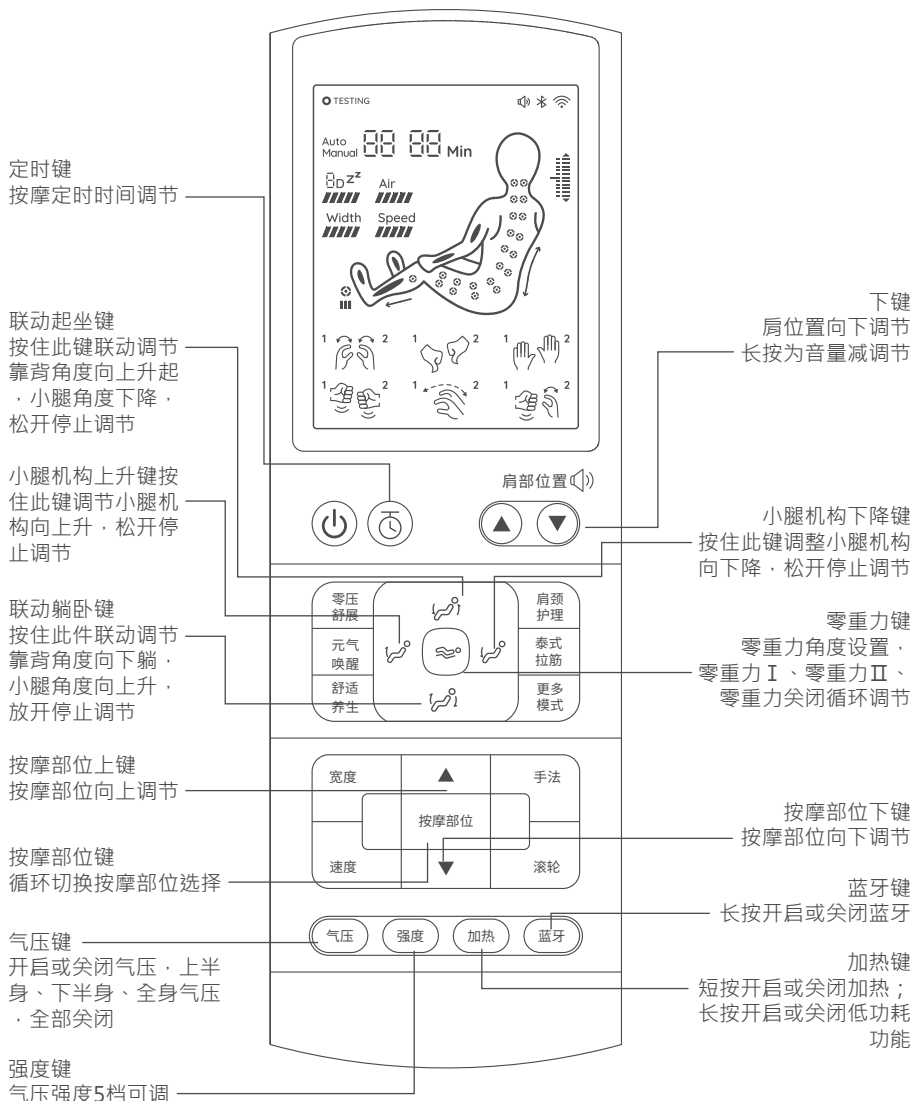


 机件名称及功能

## 扶手快捷按键说明


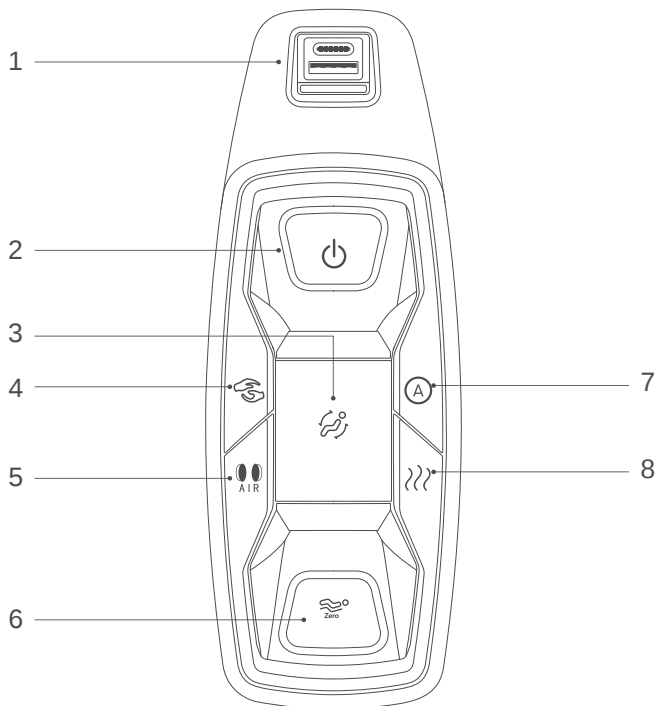


1. USB A+C充电插口: 为手机或其它电子设备提供充电。
2. 开关键: 长按此键3秒开启或关闭按摩椅。开启按摩以后, 短按为暂停/运行。
3. 联动升降键: 向前拨动一次并保持, 坐姿上升, 按摩椅立起来。向后拨动一次并保持, 坐姿下降, 按摩椅躺下来。向前快速拨动二次并保持, 小腿下降。向后快速拨动二次并保持, 小腿上升。松开则停止调节。
4. 手法键: 按此键循环切换按摩手法, 包括无手法、揉捏(揉捏I~揉捏IV)、拍打(拍打I~拍打II)、揉捏拍打(揉捏拍打I~揉捏拍打IV)、指压等12种按摩手法选择。
5. 气压键: 按此键开启或关闭气压功能。
6. 零重力键: 按此键循环切换按摩椅零重力角度调整(共有2档设定角度可选)。
7. 自动程序键: 按此键循环切换自动按摩功能(共有18种自动按摩功能可选)。
8. 加热键: 按此键开启或关闭靠背加热功能。

## 使用方法



### 一. 开始按摩

1. 按手控器「开关」键，开启按摩椅

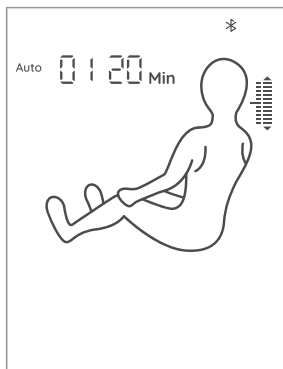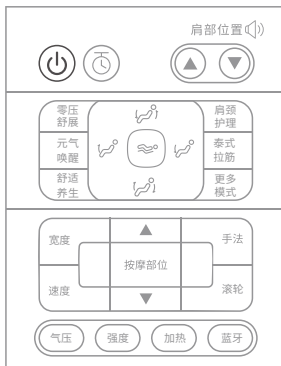

开机状态示意图


2. 开机后按摩椅将自动调整角度，调整好后即开始人体肩位置检测，此时请保持身体及坐姿与按摩椅贴合。
3. 肩部位置微调，体型检测完成后手控器或语音提示会提示用户微调肩位置，如果按摩轮停在您的肩部位置，则不需要调整直接开始按摩，如果不在，请使用肩部位置“上键/音量加”键或“下键/音量减”键，将按摩轮调整到您的肩部位置然后开始按摩。如果超过10秒未操作则直接默认当前的按摩轮位置为肩部位置并开始按摩。注意：在开机或侦测的过程中按对应的按键可以切换预设的自动程式模式，再按一次可以跳过侦测，直接进入按摩功能。

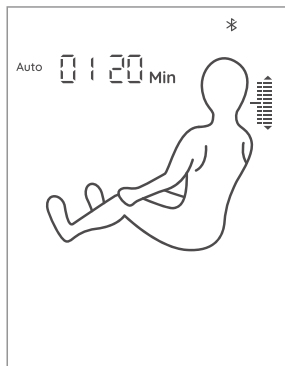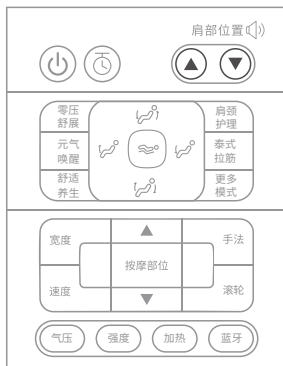


## 使用方法

### 二、自动程式（请在开机后使用该功能）

- (1) 自动程序选择  
 (1.1) 选择点选手控器自动程序按键区域，选择自动程序开始按摩。  
 (1.2) 自动程式共有18种可选；其中5个特色自动程式有独立按键，可以直接选择；其它自动程序可透过「更多模式」键进行切换。  
 特色程序：零压舒展、元气唤醒、舒适养生、肩颈护理、泰式拉伸。  
 其它程序：中式推拿、疲劳恢复、海浪轻揉、舒筋活络、腰部保健、腿足舒缓、总裁释压、女王纤体、白领专属、御宅充电、午间小憩、温热祛湿、安神助眠

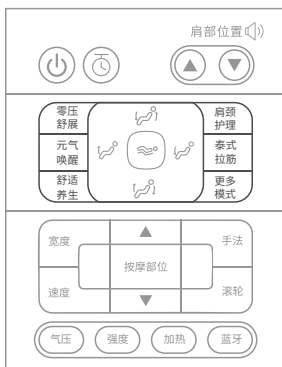

手控器自动程序区域示意图

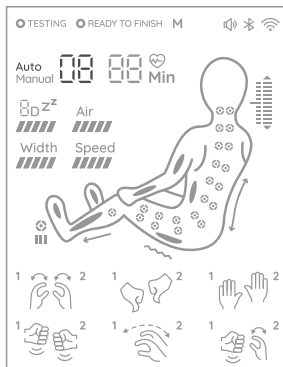

显示屏自动功能示意图

#### 自动程序介绍

| 功能   | 描述                                                                             | 显示 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 零压舒展 | 借助柔性导轨，使人的身姿角度更接近躺平，配合机芯对背部进行有效反弓形拉伸，真正实现零压舒展，有效缓解腰肌酸痛，消除疲劳，达到较好的按摩体验，舒缓身心的压力。 | 01 |
| 元气唤醒 | 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩腰部，肩颈部，对全身深度按摩，按摩力度较重，唤醒人体元气，激发体能，适合受力较强的人群，比如运动员，起到赛前激发潜能的作用。  | 02 |
| 舒适养生 | 全身以气压按摩，搭配足底滚轮小腿搓揉按摩。适合老人和背部不受力的人群。按摩力度轻柔。                                     | 03 |

 使用方法

|      |                                                                                      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 肩颈护理 | 主要以揉捏、拉筋手法按摩颈肩部、推拿手法按摩上背部，再透过按压肩井穴，缓解颈椎病，达到放松颈肩部肌肉的作用。按摩力度轻柔，适合办公室电脑族及有颈椎疲劳。         | 04 |
| 泰式拉筋 | 主要以小腿、靠背电动推杆配合气压夹住人体腿部、手部和肩部再拉筋按摩，同时机芯顶背腰推拿，使人体处于泰式拉筋状态适用于受力较大的人群，对含胸驼背有改善作用。按摩力度较强。 | 05 |

## 自动按摩（更多程序）

|      |                                                                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 中式推拿 | 主要以中医推拿手法，对背部和腰部进行推拿，透过推拿按中式推拿按摩，促进背腰血液循环，舒经通络，缓解背腰淤堵。                                             | 06 |
| 疲劳恢复 | 主要以揉捏、拍打、指压等按摩手法，透过对颈部、背腰、臀部，以及腿部的深度按压，释放身体的疲劳，让身体得到更好的放松。                                         | 07 |
| 海浪轻揉 | 主要以全气压按摩为主，利用气囊的揉捏和按压交叉循环，促进血液循环，减轻各身体部位的疼痛，深度舒缓肌肉疲劳(备注：全气压按摩为主，气压动作丰富点)。                          | 08 |
| 舒筋活络 | 主要以揉捏、拍打、指压、推拿等按摩手法，配合气压夹住人身体腿部、手部和肩部再拉伸按摩，舒经通络，促进血液循环，缓解体内淤堵。                                     | 09 |
| 腰部保健 | 主要以揉捏、拍打、推拿手法按摩腰部，同时机芯顶背腰推拿，缓解腰椎疼痛、再结合腰部恒温热敷配置，保持体感舒适的温度，带来温润的按摩体验，按摩力度保持体感舒适的温度，带来温润的按摩体验，按摩力度轻柔。 | 10 |
| 腿足舒缓 | 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩部和腰部，气压对腿足挤压按摩，腿足按摩更舒缓。                                                            | 11 |

 使用方法

|      |                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 总裁释压 | 主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩颈部及背腰部，透过深度按摩肩颈背腰，缓解疲劳，促进血液循环，释放压力。适合男性。按摩力度适中。                              | 12 |
| 女王纤体 | 主要以揉捏、指压手法按摩肩颈部、腰部及臀部，透过按摩全身，达到放松身心、享受女王级的待遇。适用于女性。按摩力度轻柔。                                   | 13 |
| 白领专享 | 主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩肩颈部及腰部，经由深度按摩，缓解肩颈酸痛、改善腰部肌肉酸胀，保养腰椎的作用，适用办公室白领及久坐人群。按摩力度适中。                    | 14 |
| 御宅充电 | 主要以揉捏、拍打及指压手法进行全身深度按摩，促进全身血液循环，预防血栓，适用久居家中、不爱出门的人群。按摩力度适轻柔。                                  | 15 |
| 午间小憩 | 主要以揉捏、拍打手法按摩背部及腰部，针对肾俞穴按摩后，提升午休质量，让下午工作更有精神。适合上班族。按摩力度轻柔。                                    | 16 |
| 温热祛湿 | 主要以揉捏、拍打、指压等按摩手法为主，对全身相关穴位进行深度按摩，让刺激充分达到肌肉组织的深层，再结合热敷功能，使局部有温热感，调理气血，达到温热祛湿的效果。(备注：全身按摩配合热敷) | 17 |
| 安神助眠 | 主要以揉捏、推拿手法按摩肩颈部和背腰部，针对风池穴和肾俞穴按摩后，提升睡眠质量，帮助睡眠。适合睡眠不好的人群。按摩力度轻柔。                               | 18 |

 使用方法

## 三、手动程序（请在开机后使用该功能）


(1) 按摩手法：按手控器「手法」键,即可循环切换按摩手法。

(1.1) 手法：有无手法、揉捏（4种）、拍打（2种）、揉捏拍打（4种）、指压等12种手法可选，按手法键循环切换12种手法。并在资讯界面显示手法。

| 功能          |                                                                                    | 按摩轮调整   |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 无手法         |                                                                                    | 宽度可调    | 5档速度可调整<br>5档宽度可调整 |
| 揉捏I         |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏II        |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏III(闪烁)   |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏IV(闪烁)    |   | 速度可调    |                    |
| 拍打I         |   | 速度、宽度可调 |                    |
| 拍打II        |   | 速度、宽度可调 |                    |
| 揉捏拍打I       |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打II      |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打III(闪烁) |   | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打IV(闪烁)  |   | 速度可调    |                    |
| 指压          |  | 宽度可调    |                    |

(2) 按摩速度：按手控器「速度」键，即可进行按摩速度调整(速度共有1~5档可调，1档最慢~5档最快)；速度需在以下按摩手法中使用：揉捏(揉捏I~揉捏IV)、拍打(拍打I~拍打II)、揉捏拍打(揉捏拍打I~揉捏拍打IV)。


(2.1) 信息界面速度显示。
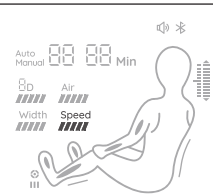
| 速度显示                                                                                | 速度调节 |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
|  | 1档   | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 |

## 使用方法

(3) 按摩宽度：按手控器「宽度」键，即可进行按摩宽度调整(宽度共有1~5档可调，1档最窄~5档最宽)，宽度需在以下按摩手法中使用：无手法、拍打、指压。

(3.1) 资讯界面宽度显示。
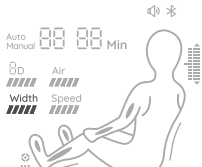
| 宽度显示                                                                              | 宽度调节                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1档</div> <div>2档</div> <div>3档</div> <div>4档</div> <div>5档</div> |

(4) 按摩部位：按手控器「按摩部位上」键或「按摩部位下」键，即可进行按摩部位上下调整。

(4.1) 按摩部位共有定点、局部、上背、下背、全背等5种可选。


| 功能                                                                                    | 描述        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 定点   | 定点位置定点按摩  | 在选择定点和局部按摩手法时，可以在资讯界面状态下透过手控器部位按键旁「上键」和「下键」调整按摩区域 |
| 局部   | 小范围局部往返按摩 |                                                   |
| 全背   | 全背往返按摩    |                                                   |
| 上背   | 上背往返按摩    |                                                   |
| 下背  | 下背往返按摩    |                                                   |

(5) 气压按摩：按手控器「气压」键，即可进行气压按摩功能选择。气压模式分别有「上半身、下半身、全身气压」三种气压模式选择；全部关闭则关闭气压功能

| 气压显示                                                                                         |                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上半身气压<br> | 下半身气压<br> | 全身气压<br> |


## 使用方法

- (6) 气压强度：按手控器「强度」键，即可进行气压强度调整(强度共有1~5档可调，1档最弱~5档最强)。在气压功能开启后才可进行气压强度调整。
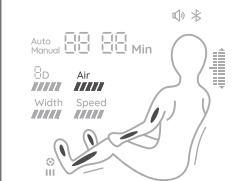
| 气压强度显示                                                                            | 气压强度调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1档 </div> <div>2档 </div> <div>3档 </div> <div>4档 </div> <div>5档 </div> |

### 四、辅助功能（请在开机后使用该功能）

- (1) 加热功能：短按手控器「加热」键，开启或关闭背部加热功能。开启加热功能3分钟后有温感。
- (1.1) 资讯界面加热显示。
- (2) 低功耗：长按手控器「加热」键，开启或关闭低功耗功能，开启低功耗功能后，在按摩椅关机后进入低功耗状态，关闭所有功能，只能透手控器电源按键开机。
- (2.1) 资讯界面低功耗显示。

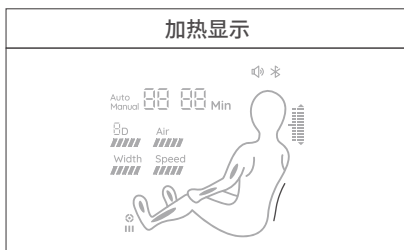


- (3) 足底滚轮：按手控器「滚轮」键，即可开启或关闭足底滚轮功能；滚轮速度设有1~3档可调，每按一次滚轮键，速度增加一档；按第四次时则关闭足底滚轮功能，依序循环切换。

| 速度显示                                                                                | 速度调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1档 <br/></div> <div>2档 <br/></div> <div>3档 <br/></div> |

## 使用方法

- (4) 音量调节：按手控器“肩部位置/音量上”键或“肩部位置/音量下”键，长按调节音量大小。
- (5) 蓝牙：按手控器「蓝牙」键，即可开启或关闭蓝牙功能。开启蓝牙功能后，即可将带有蓝牙功能的音源设备（如手机、MID平板电脑等）与按摩椅蓝牙模组配对连接后，可把音源设备播放的音乐透过蓝色牙无线传送到按摩椅音响系统进行音乐播放。
- (5.1) 进入智慧型装置主选单，开启「设定」--选择「蓝牙」选项--开启「蓝牙」--蓝牙自动「搜寻新的蓝牙设备」进行搜寻。
- (5.2) 智慧型装置将搜寻到对应的蓝牙型号(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择「配对」即可完成配对。
- (5.3) 开启智慧型装置的音乐播放器，选择歌曲进行播放。

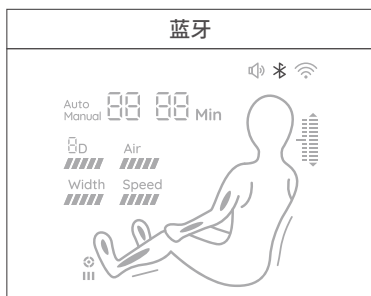

## 五、角度调整（请在开机后使用该功能）

### (1) 零重力

| 按键                                                                                         | 描述                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Zero | 按手控器上的「零重力」键，即可循环调整零重力角度（共有2档设定角度可调）。每按一次按键切换一档零重力角度，依序循环。 |

### (2) 全身角度

| 按键                                                                                  | 描述                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | 联动下降键：按住此键靠背机构缓缓下降，同时腿部机构缓缓上升，释放则停止靠背机构下降和腿部机构上升；在调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |
|  | 联动上升键：按住此键靠背机构缓缓上升，同时腿部机构缓缓下降，释放则停止靠背机构上升和腿部机构下降；在调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |



## 使用方法

## (3) 腿部机构角度

| 按键                                                                                | 描述                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 腿部机构下降键：按住此键腿部机构缓缓下降，释放则停止下降；调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |
|  | 腿部机构上升键：按住此键腿部机构缓缓上升，释放则停止上升；调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |

## 六、结束按摩

在按摩过程中：

- (1) 按手控器开关键，所有按摩功能关闭，按摩椅角度重设。
- (2) 长按扶手开关键，所有按摩功能关闭，按摩椅角度重设。
- (3) 定时时间结束，所有按摩功能关闭，按摩椅角度不重设。

  
温馨提示

手控器操作按摩椅方法结束。

 使用方法

## 七、蓝牙APP连接按摩椅说明

- (1) 蓝牙APP下载安装：
- (1.1) 安卓(Android系统)下载方式：在Google Play (谷歌商店) 中搜寻「Maxcare massage chair」下载Android版本进行下载安装，或扫描下方二维码进行下载安装，安装成功后即可使用蓝牙APP进行操作按摩椅。
- (1.2) 苹果 (iOS系统)下载方式：在App Store(苹果应用商城)中搜寻「Maxcare massage chair」下载iOS版进行下载安装，或扫描下方二维码进行下载安装，安装成功后即可让用蓝牙APP进行操作按摩椅。



Maxcare massage chair



- (2) APP蓝牙搜寻连线：APP安装成功后，在智慧型装置界面中选择点选「Maxcare massage chair」图标，开启APP后将会自动跳跃至蓝牙连接界面，同时APP自动搜寻到对应的装置蓝牙号(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，然后点选对应的设备蓝牙号(并显示已连接)，即可连接成功，连接成功后即可透过APP操作按摩椅。注意：在设备连接前必须开启智慧型装置系统的蓝牙功能和位置讯息。



## 使用方法

- (3) APP蓝牙名称更换：若按摩椅放置的位置更换或蓝牙名称更换，都需依实际状况进行重新连接设备；如下图所示进入APP界面后选择点选左侧选单列里的「设定」按钮,进行蓝牙名称更换。注意：在设备连接前必须开启智慧型装置系统的蓝牙功能和位置资讯。



- (3.1) 如下图所示进入设定界面后,选择点选「装置连接」按钮，在弹跳窗界面中APP将会自动搜寻到对应的装置蓝牙号(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*)，再点选选择对应的装置蓝牙号(并显示已连线)，即可连接成功，设备连接成功后即可操作按摩椅。




 使用方法

## 八、蓝牙APP控制按摩椅操作说明

- (1) 设备连线成功后，蓝牙APP将自动跳转至待机界面，如下图所示选择点选左下角选单列里的「开关」按钮开启按摩功能。
- (2) 开启后，系统自动进入开机画面、等待下一步操作。



- (3) 自动躺卧：按摩力度选择后，系统将自动进入「自动躺卧」界面，按摩椅自动调节躺卧角度，等待其调整完成即可，若无需调整可直接点选「跳过」键，按摩椅将保持目前坐姿，并进入下一步力度选择。

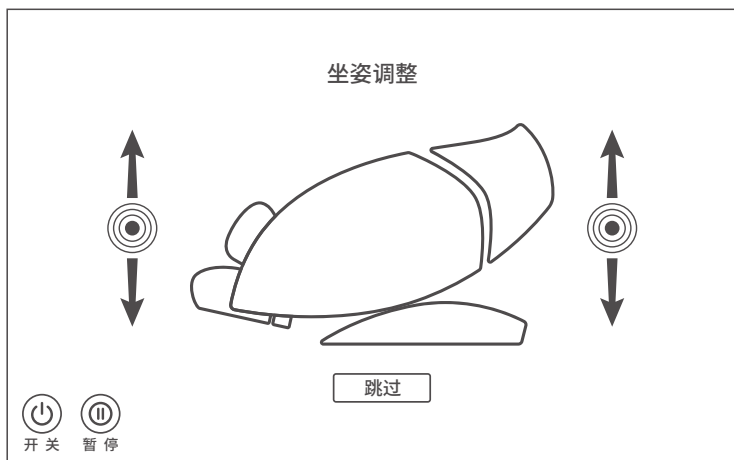

## 使用方法

- (4) 体型检测：等待按摩椅自动躺卧调整后，系统将自动进入「体型检测」界面，按摩椅自动检测使用者体型，检测完成后按摩球定位到肩部，若无需检测可直接点选「跳过」键，系统预设体型并直接开始按摩，并进入肩位置调整界面。




- (5) 肩位置调整：等待体型检测完成后，系统将自动进入「肩位置调整」界面后，若按摩轮停在您的肩部位置，则不需要进行调整，可直接点击「确定」开始按摩；如果按摩轮不在您的肩部位置，点选向上「▲」键或「▼」向下键，将按摩轮调整到肩部位置(肩位置调整共有1-11档可调)，调整完成后点选「确定」开始按摩。註：如果超过10秒未进行任何操作，系统将预设为目前按摩轮位置为您的肩部位置，直接开始按摩。




## 使用方法

(6) 待体型检测或肩位置检测完成后，进入主界面即可依照自己的需求选择对应的按摩功能。

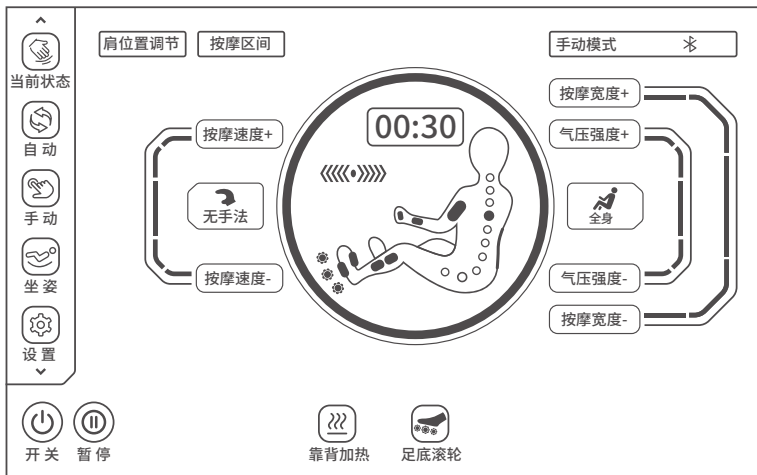


## 使用方法

### (7.1) 蓝牙APP界面按键介绍

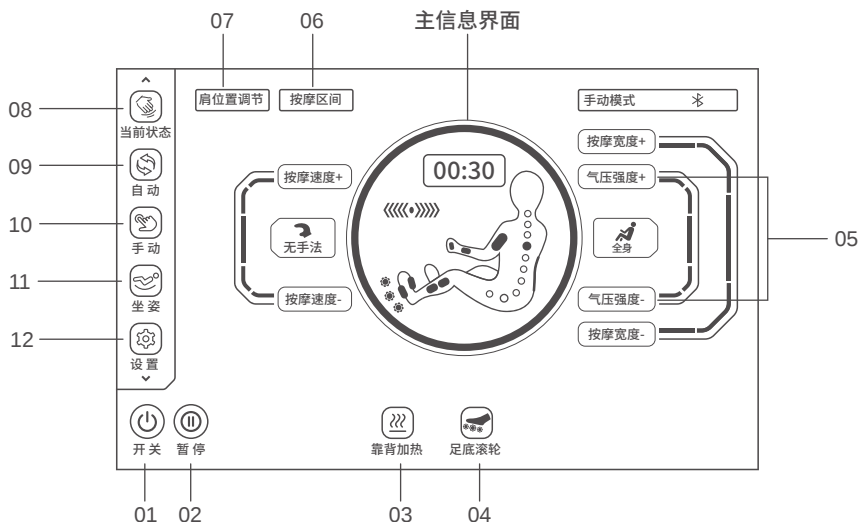

- 1. 开关键**  
开启或关闭按摩椅功能。
- 2. 暂停键**  
暂停按摩或退出暂停按摩。
- 3. 靠背加热键**  
开启或关闭靠背加热功能。
- 4. 足底滚轮键**  
开启或关闭足底滚轮功能。
- 5. 气压强度键**  
调节气压强度。
- 6. 按摩区间键**  
选择对应的部位按摩。
- 7. 肩位置调节键**  
调节肩定位，确定按摩基准。
- 8. 当前状态键**  
进入查看目前按摩椅状态。
- 9. 自动功能菜单键**  
进入自动功能按摩选择。
- 10. 手动功能菜单键**  
进入手动设置按摩功能。
- 11. 坐姿调整菜单键**  
进入坐姿调整界面选择坐姿角度。
- 12. 设置菜单键**  
进入设置选菜界面。

# 使用方法

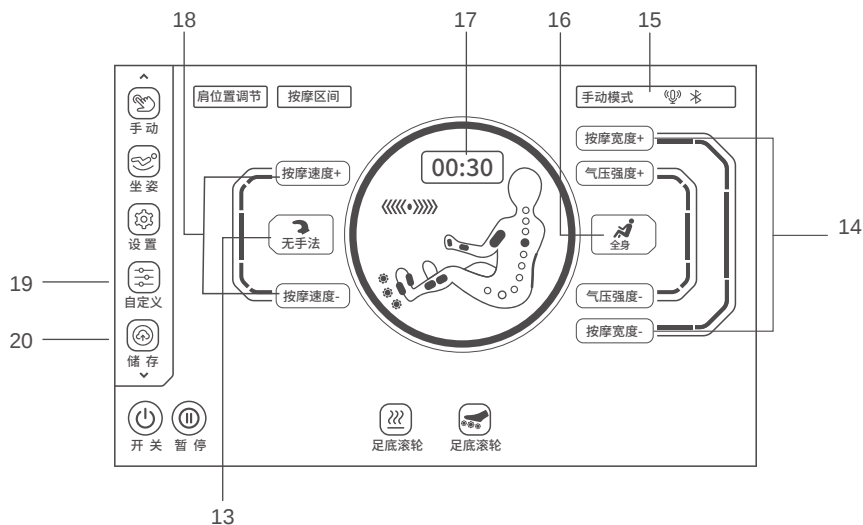

13. 按摩手法选择键

选择按摩手法。

14. 按摩宽度键

调节按摩宽度。

15. 状态显示栏

显示按摩程序状态资讯。

16. 气压按摩选择键

选择气压部位。

17. 时间调整菜单键

调节按摩时间。

18. 按摩速度键

调节按摩速度。

19. 自定义菜单键

进入自定义界面。

20. 储存菜单键

进入储存界面。

## 使用方法

### 九、自动功能（请在开机后使用该功能）

点击左侧菜单栏中的“自动”键（如下图所示），进入自动功能界面，再据按摩需求选择不同场景中的自动按摩功能。注：每个自动功能名称详细介绍请见此说明书18-20页内容。

(1)自动功能共有18种可选，按四大类按摩场景分类。

(1.1)健康养护：零压舒展、元气唤醒、舒适养生、肩颈护理、泰式拉筋。

(1.2)场景应用：中式推拿、疲劳恢复、海浪轻揉、舒筋活络、腰部护理。

(1.3)家庭专属：腿足舒缓、总裁释压、女王纤体、白领专享、御宅充电。


(1.4)特色程序：午间小憩、温热祛湿、安神助眠。



自动功能选择示意图

### 十、手动模式（请在开机后使用该功能）

点击左侧菜单栏的“手动”键（如下图所示），系统进入手动模式界面后，可根据按摩需求选择相应的手动按摩功能进行按摩。

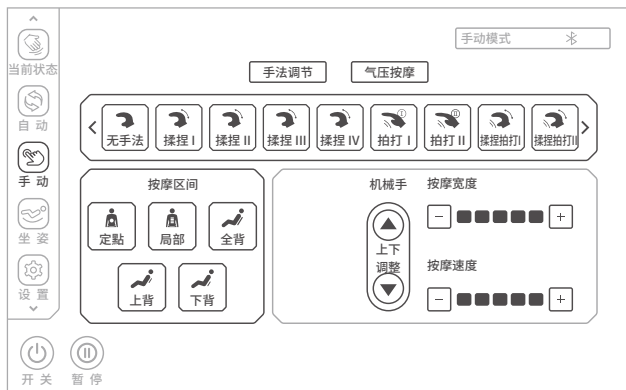

手动模式-手法选择示意图

## 使用方法

(1)手动模式：进入手动模式界面后，如下图所示手动按摩功能主要分为两大类可选。


(1.1)手法调节：按摩手法、按摩区间、机械手上下调节、按摩宽度、按摩速度。

(1.2)气压按摩：全身、上半身、下半身模式及气压强度调节。



手动模式-手动按摩功能选择示意图


(1.1)手法调节：进入手动模式界面后，如下图所示点击“手法调整”键，即可根据需求选择手法调节按摩功能，包括按摩手法、按摩区间、机械手上下调节、按摩宽度、按摩速度等按摩功能。

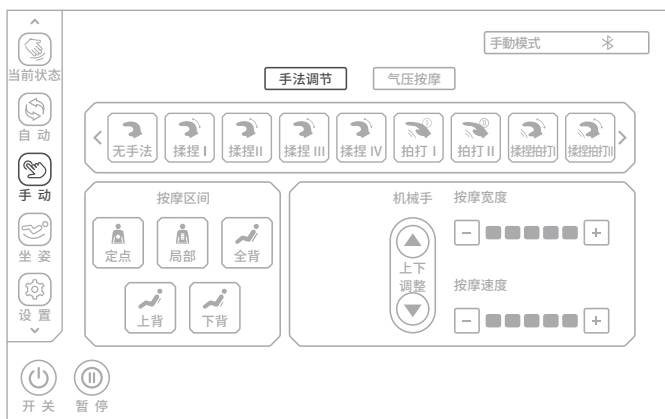

手动模式-手法调节选择示意图

## 使用方法

(1.2)手法：进入上机芯按摩功能菜单后，如下图所示，点击“手法”键，即可进行手法按摩，包括无手法、揉捏(共4种手法，揉捏I~揉捏IV)、拍打（共2种手法，拍打I~拍打II）、揉捏拍打(共4种手法，揉捏拍打I~揉捏拍打IV)、指压等12手法可选。（注：点击手法调节菜单“向左箭头”和“向右箭头”按钮可左右滚动切换显示更多按摩手法）。

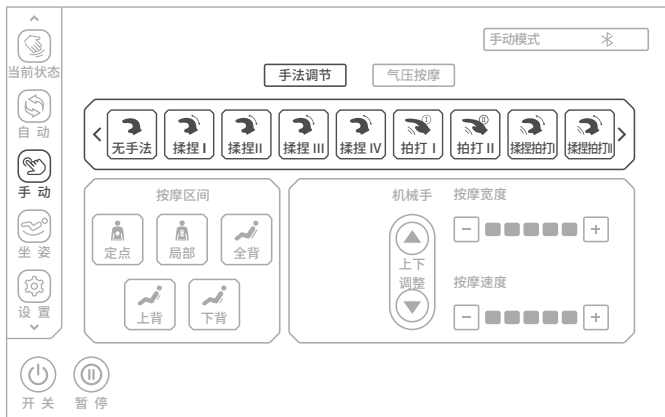


手动模式-手动按摩功能选择示意图

| 功能                                                                                          | 按摩轮调整   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 无手法        | 宽度可调    | 5档速度可调整<br>5档宽度可调整 |
| 揉捏I        | 宽度可调    |                    |
| 揉捏II       | 宽度可调    |                    |
| 揉捏III     | 宽度可调    |                    |
| 揉捏IV     | 宽度可调    |                    |
| 拍打I      | 速度、宽度可调 |                    |
| 拍打II     | 速度、宽度可调 |                    |
| 揉捏拍打I    | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打II   | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打III  | 速度可调    |                    |
| 揉捏拍打IV   | 速度可调    |                    |
| 指压I      | 宽度可调    |                    |

## 使用方法


注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击“手法”键，然后在弹窗中选择相应的手法图标（如揉捏、拍打、指压等）进行切换按摩手法。

(1.2.1)手法快捷方式：此处功能是在手动模式下，当前状态界面中切换按摩手法的快捷方式。

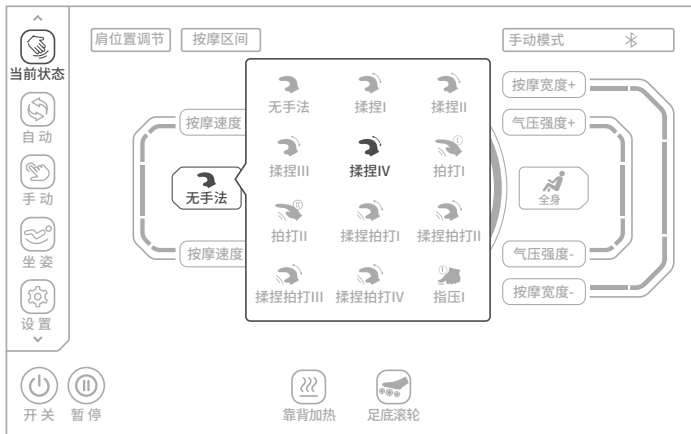

当前状态-手法选择示意图

(1.2)按摩区间：进入上机芯按摩功能菜单后，如下图所示选择“按摩区间”按键，即可进行区间按摩。包括定点、局部、全背、上背、下背等5种按摩区间可选，按摩区间菜单选择相应的按摩区间进行按摩。

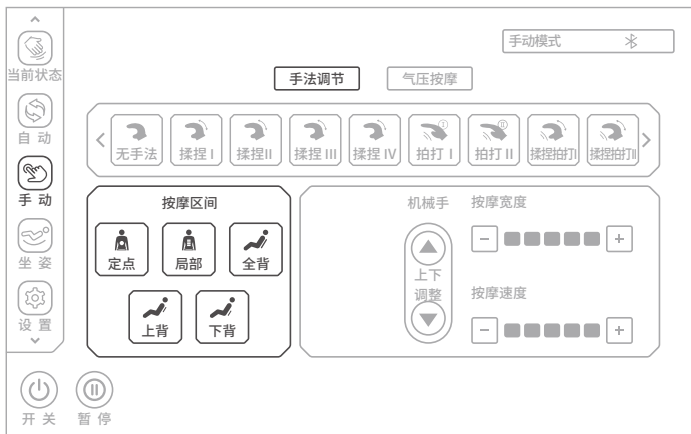


手动模式-按摩区间选择示意图


 使用方法

| 按键                                                                                | 描述        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 定点位置定点按摩  |
|  | 小范围局部往返按摩 |
|  | 全背往返按摩    |
|  | 上背往返按摩    |
|  | 下背往返按摩    |

注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击“按摩区间”键，然后在弹窗中选择相应的按摩区间图标（如定点、局部、全背等）进行切换按摩区间。


(1.2.1)按摩区间快捷方式：此处功能是在手动模式下，当前状态界面中切换按摩区间的快捷方式。

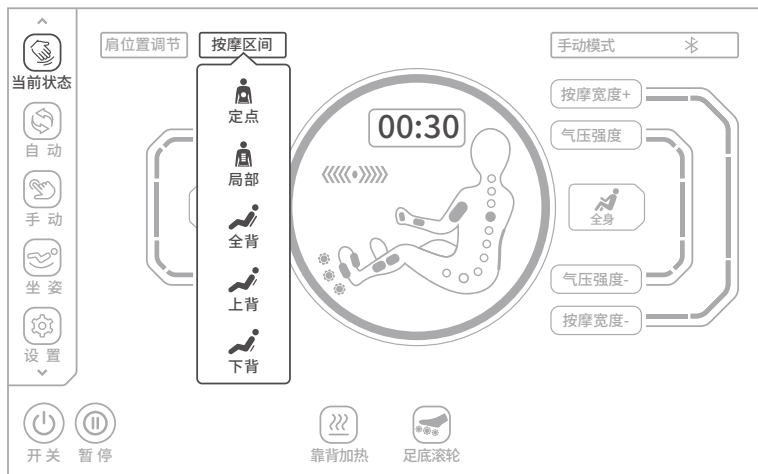

当前状态-按摩区间选择示意图

## 使用方法

(1.4)机械手调节：进入上机芯按摩功能菜单后，如下图所示选择机械手“▲”键或“▼”键，即可进行按摩机械手上下位置调节。机械手调节需在手动模式的定点和局部按摩区间下进行机械手位置调节。

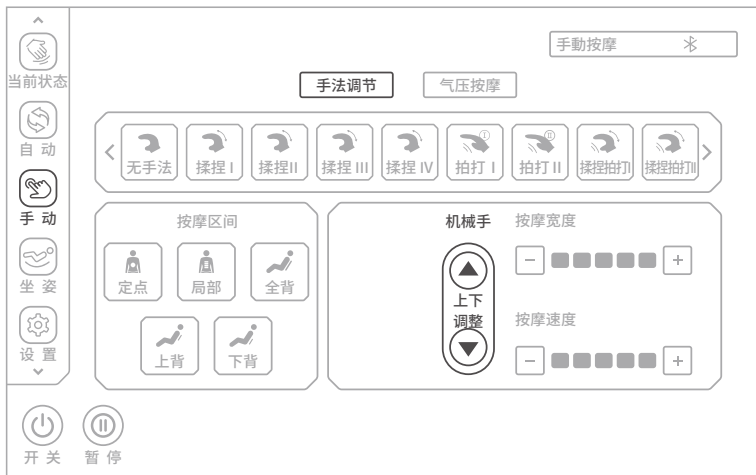


手动模式-机械手调节示意图

| 按键 | 描述                        |
|----|---------------------------|
| ▲  | 按住上键机械手向上移动，松开按键机械手则停止上移。 |
| ▼  | 按住下键机械手向下移动，松开按键机械手则停止下移。 |

## 使用方法

(1.5)按摩宽度：进入上机芯按摩功能菜单后，如下图所示选择按摩宽度加“+”键或“-”键，即可进行按摩宽度调节（宽度共有1~5档可调，1档最窄~5档最宽）；宽度调节需在以下按摩手法中使用：无手法、拍打Ⅰ、拍打Ⅱ、指压Ⅰ。用户必须在选择按摩手法或者按摩区间进入手动模式后才可以调整宽度。

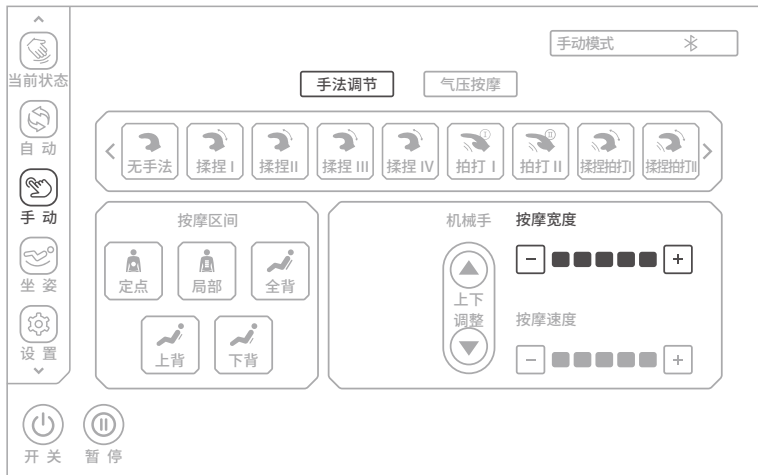

手动模式-按摩宽度示意图


| 手动模式-按摩宽度调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |      |      |
| 1档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5档                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 按键                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此键增宽按摩宽度，1-5档宽度可调整 |
|  | 按此键增宽按摩宽度，1-5档宽度可调整 |

## 使用方法

注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击“按摩宽度+”键或“按摩宽度-”键，即可进行按摩宽度调节（宽度共有1~5档可调，1档最窄~5档最宽）。

(1.5.1)按摩宽度快捷方式：此处功能是在手动模式下，当前状态界面中切换按摩宽度的快捷方式。

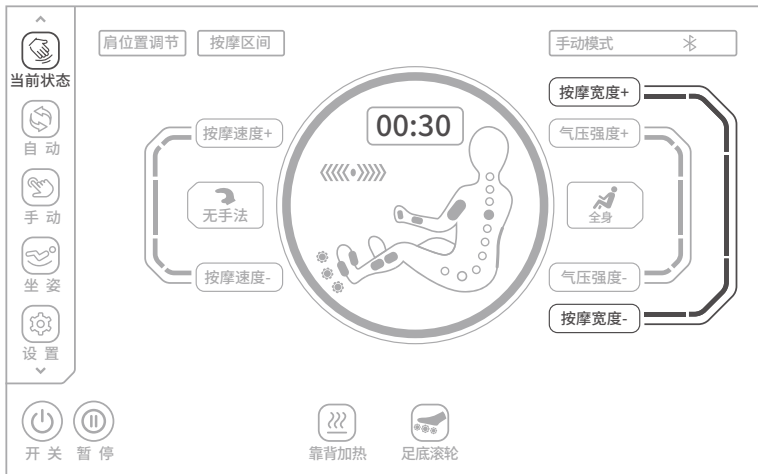


当前状态-按摩宽度示意图

| 当前状态-按摩宽度调节 |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| 1档          | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 |

| 按键    | 描述                  |
|-------|---------------------|
| 按摩宽度+ | 按此键增宽按摩宽度，1-5档宽度可调整 |
| 按摩宽度- | 按此键缩窄按摩宽度，1-5档宽度可调整 |

## 使用方法

(1.6)按摩速度：进入上机芯按摩功能菜单后，如下图所示选择按摩速度加“+”键或者减“-”键，即可进行按摩速度调节（速度共有1~5档可调，1档最慢~5档最快）；按摩手法停止时无法调节速度。用户必须在选择按摩手法或者按摩部位进入手动模式后才可以调整速度。

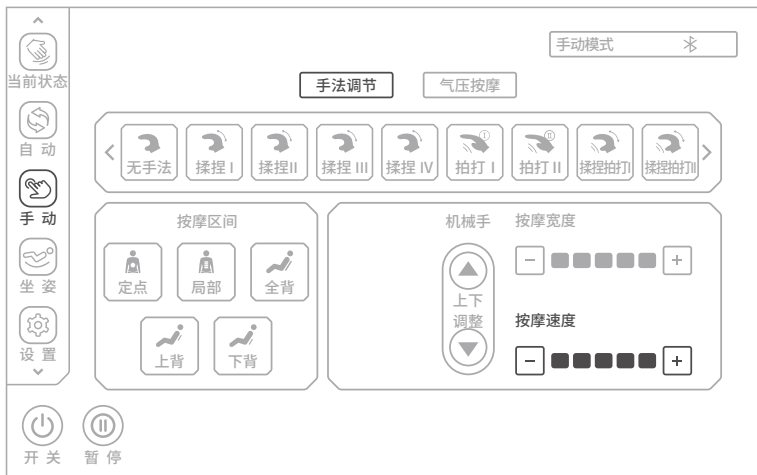

手动模式-按摩速度示意图


| 手动模式-按摩速度调节                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1档                                                                                 | 2档                                                                                 | 3档                                                                                 | 4档                                                                                 | 5档                                                                                 |

| 按键                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此键增快按摩速度，1-5档速度可调整 |
|  | 按此键减慢按摩速度，1-5档速度可调整 |

## 使用方法

注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击“按摩速度+”键或“按摩速度-”键，即可进行按摩速度调节（速度共有1~5档可调，1档最慢~5档最快）。

(1.6.1)按摩强度快捷方式：此处功能是在手动模式下，当前状态界面中切换按摩强度的快捷方式。

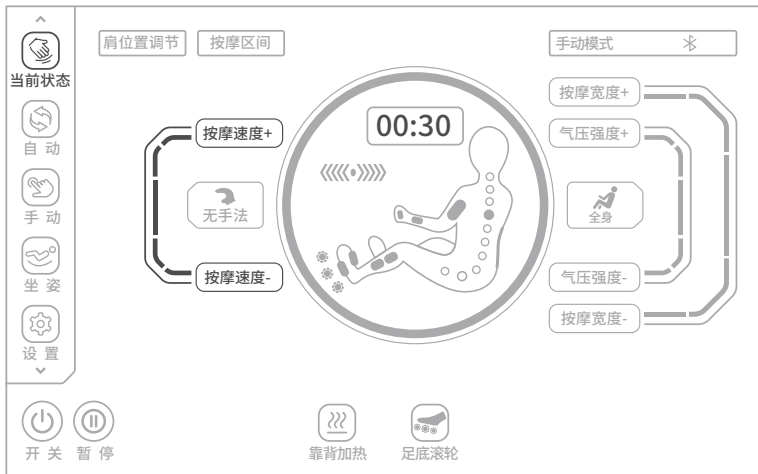

当前状态-按摩速度示意图

| 当前状态-按摩速度调节                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1档                                                                                 | 2档                                                                                 | 3档                                                                                 | 4档                                                                                 | 5档                                                                                 |

| 按键                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此键增快按摩速度，1-5档速度可调整 |
|  | 按此键减慢按摩速度，1-5档速度可调整 |

## 使用方法


- (3) 气压按摩：进入手动界面后，如下图所示选择“气压按摩”键，气压按摩包括全身、上半身、下半身、气压强度等按摩功能可选。
- (3.1) 气压部位选择：进入气压按摩菜单后，即可根据按摩需求选择“全身、上半身、下半身”按钮，开启或关闭对应区域的气压按摩功能，全部关闭则关闭全部气压功能。



手动模式-气压按摩示意图


| 按键                                                                                  | 描述                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 按此键开启或关闭全身气压按摩功能  |
|  | 按此键开启或关闭上半身气压按摩功能 |
|  | 按此键开启或关闭下半身气压按摩功能 |

## 使用方法

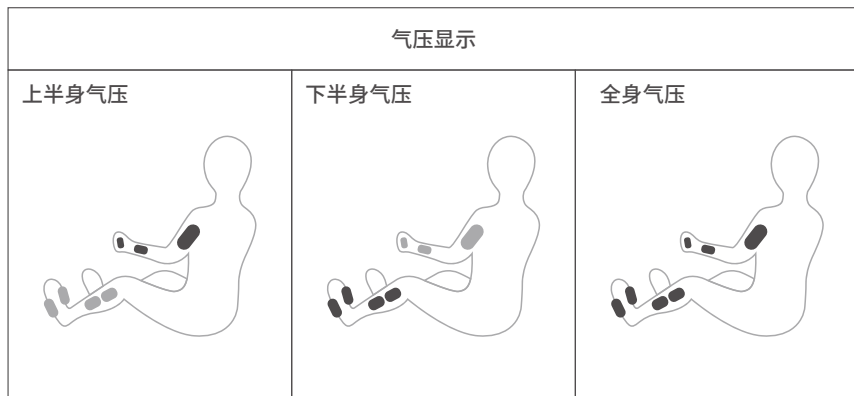

注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击界面中的气压按摩“图标”键，然后在弹窗中选择对应的气压按摩图标（如全身、上半身、下半身）进行切换气压按摩。

(3.1.2) 气压按摩快捷方式：此处功能是在手动模式下，当前状态界面中切换气压按摩的快捷方式

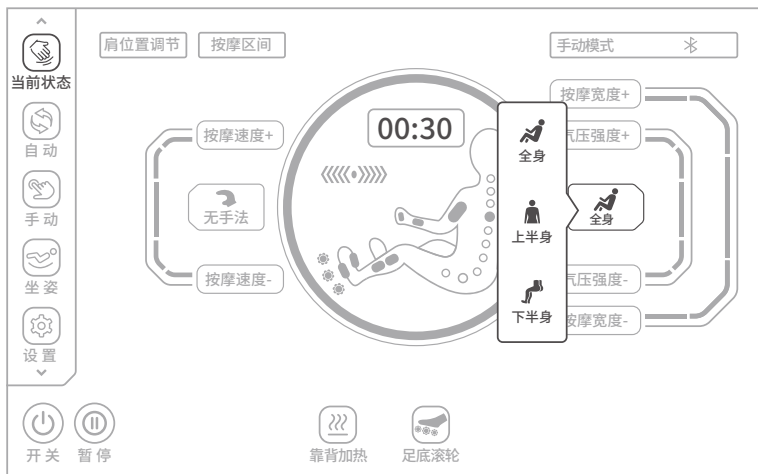

当前状态-气压按摩示意图

## 使用方法

(3.2)气压强度：进入气压按摩功能菜单后，如下图所示在开启对应区域的气压按摩功能后。再根据按摩需求选择“气压强度+”或“气压强度-”键即可调节气压强度(强度共有1~5档可调，1档最弱~5档最强)，逐档增强或减弱气压强度。



手动模式-气压强度示意图

| 手动模式气压强度调节                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1档                                                                                | 2档                                                                                | 3档                                                                                | 4档                                                                                | 5档                                                                                |

| 按键                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此键增加气压强度，1-5档强度可调整 |
|  | 按此键减弱气压强度，1-5档强度可调整 |

## 使用方法


注：在按摩程序运行中，如下图所示点击屏幕左侧“当前状态”键，进入界面后点击“气压强度+”键或“气压强度-”键，即可进行气压强度调节(强度共有1~5档可调，1档最弱~5档最强)，逐级增强或减弱气压强度。

(3.2.1)气压强度快捷方式：需先在手动界面中开启对应按摩部位(如全身、上半身、下半身)的气压按摩功能，方可使用以上快捷调节方式。



当前状态-气压强度示意图


| 当前状态-气压强度调节                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1档                                                                                 | 2档                                                                                 | 3档                                                                                 | 4档                                                                                 | 5档                                                                                 |
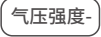
| 按键                                                                                  | 描述                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 按此键增加气压强度，1-5档强度可调整 |
|  | 按此键减弱气压强度，1-5档强度可调整 |

## 使用方法

### 十一、坐姿调整

点击左侧菜单栏的“坐姿”键（如下图所示），进入坐姿菜单后，根据按摩需求选择坐姿角度调整，包括小腿上升、小腿下降、联动上升、联动下降、靠背上升、靠背下降、零重力Ⅰ、零重力Ⅱ等按摩功能。

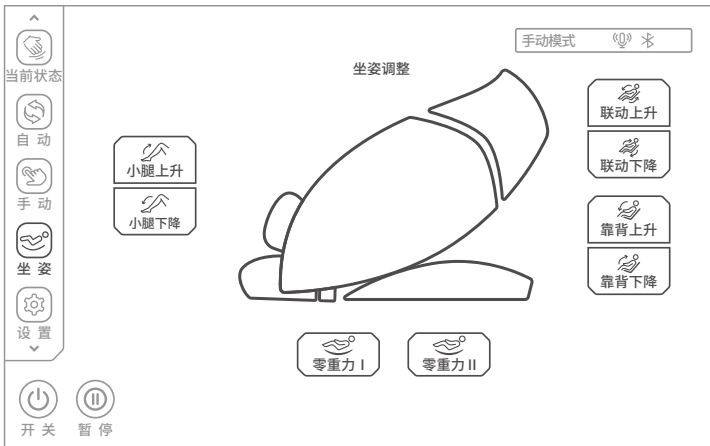

坐姿调整示意图

#### (1) 零重力调整

| 按键                                                                                         | 描述                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br>零重力Ⅰ  | 零重力Ⅰ键：自动调整腿部机构和靠背机构位置到零重力Ⅰ位置。 |
| <br>零重力Ⅱ | 零重力Ⅱ键：自动调整腿部机构和靠背机构位置到零重力Ⅱ位置。 |

#### (2) 小腿升降角度调整

| 按键                                                                                          | 描述                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br>小腿上升 | 腿部机构上升键：按住此键腿部机构缓缓上升，释放则停止上升，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |
| <br>小腿下降 | 腿部机构下降键：按住此键腿部机构缓缓下降，释放则停止下降，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |

## 使用方法

### (3)联动升降角度调整

| 按键                                                                                        | 描述                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br>联动上升 | 联动上升键：按住此键靠背机构缓缓上升，同时腿部机构缓缓下降，释放则停止靠背机构上升或腿部机构下降，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |
| <br>联动下降 | 联动下降键：按住此键靠背机构缓缓下降，同时腿部机构缓缓上升，释放则停止靠背机构下降或腿部机构上升，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |

### (4)靠背机构角度调整

| 按键                                                                                        | 描述                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>靠背上升 | 靠背机构上升键：按住此键靠背机构缓缓上升，释放则停止，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |
| <br>靠背下降 | 靠背机构下降键：按住此键靠背机构缓缓下降，释放则停止，调节到极限位置时候会停止调节并且发出“滴滴”提示音。 |

## 十二、设置（请在开机后使用该功能）

点击手控器屏幕左侧菜单栏里的“设置”键（如下图所示），系统将进入设置界面。

即可根据按摩需求选择系统设置功能。

(1)设置功能主要分为两大类。

(1.1)产品信息：产品型号、产品序列号、固件版本。

(1.2)系统设置：蓝牙、语音选择等系统设置功能。

(1.3)设备连接：按摩椅连接蓝牙APP并配对成功后，即可通过手机进行操控。



## 使用方法

- (2)设备信息:进入设置界面后,如下图所示即可查看产品型号、产品序列号、固件版本等信息显示。



- (3)蓝牙:进入设置界面后,如下图所示点击“蓝牙”开关,开启或关闭蓝牙功能。开启蓝牙功能后,即可将带有蓝牙功能的音源设备(如手机、MID平板电脑等)与按摩椅蓝牙模块配对连接后,可把音源设备播放的音乐通过蓝牙无线传送到按摩椅音响系统进行音乐播放。

- (3.1)进入智能设备主菜单,打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。

- (3.2)智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(如MAX-Z05A2801-\*\*\*\*),点击配对按钮,如询问是否与该设备配对,选择“配对”即可完成配对。



## 使用方法

- (4) 语言选择：进入设置界面后,再根据使用者的需求选择不同的语言,默认语言为英文，可选择中文。



- (5) 设备连接：若需要更改蓝牙号或重新连接设备，进入设置界面后，如下图所示点选「设备连接」键，在弹窗中系统将会自动搜寻附近的蓝牙设备号，并清单中选择按摩椅对应的蓝牙号并完成APP配对。配对完成后即可透过手机控制按摩椅。



## 使用方法


### 十三、自定义（请在开机后使用该功能）

向上滑动手控器左侧菜单栏，选择点击“自定义”键（位置如下图所示），进入自定义界面后，根据按摩需求选择自定义I或自定义II（以前设置过相应的自定义并保存过才能选择）进行按摩。



自定义示意图

点击自定义I设置或自定义II设置，进入自定义设置界面，然后选中喜欢的按摩手法，选中后手法图标高亮显示，可选择按摩手法、按摩区间、气压强度、按摩速度、气压按摩、按摩宽度、靠背加热、足底滚轮等功能，然后点保存，即可将当前设置保存到自定义I和自定义II，保存成功后，立即并运行该自定义程序，下次可以直接点击保存后的自定义程序进行按摩。

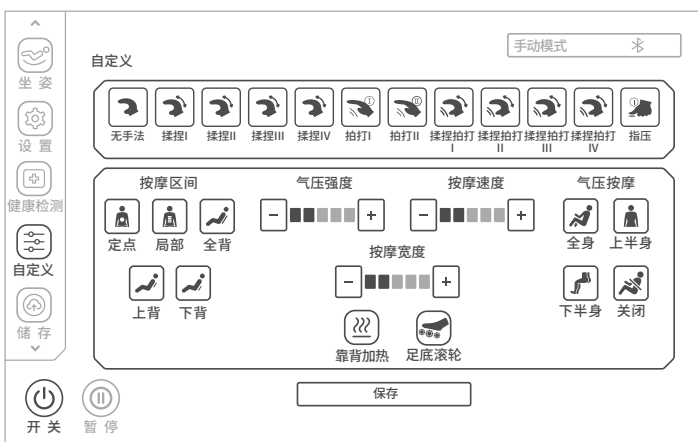

## 使用方法


### 十四、储存（请在开机后使用该功能）

向上滑动手控器左侧菜单栏，选择点击“存储”键（如下图所示），进入存储选择界面，即可根据按摩需求选择存储功能。

(1) 存储功能主要分为“存储、调用”两大类；每一类各有三组模式选择。




(2) 存储：进入存储界面后，如下图所示点击“存储I、存储II、存储III”键中的任何一种即可存储正在运行的所有按摩程序（最多可存储三套按摩程序）；包括自动功能、手动功能、气压模式及强度等按摩功能，以及按摩椅角度调节和其他按摩功能。

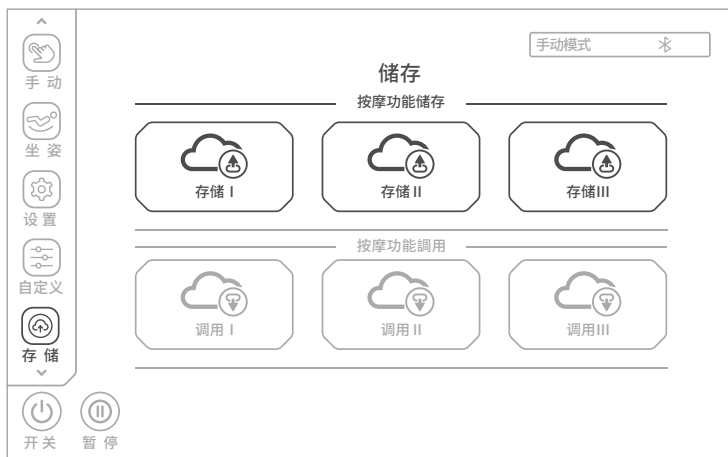


## 使用方法

- (3)调用：进入存储界面后，如下图所示点击“调用I、调用II、调用III”键中的任一种即可调用已存储的程序进行按摩；包括自动功能、手动功能、气压模式及强度等按摩功能，以及按摩椅角度调节和其他按摩功能。

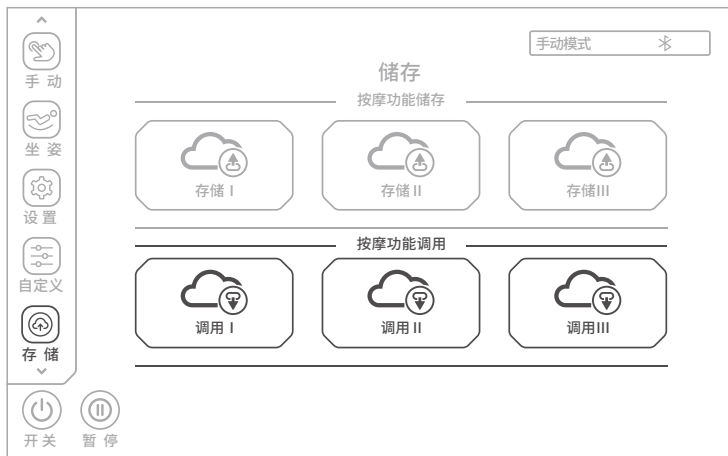

### 十五、其它功能（请在开机后使用该功能）

在显示屏“当前状态”界面中，如下图所示可根据按摩需求选择相应的按摩功能，包括靠背加热、足底滚轮、时间调节、肩位置调节、按摩状态显示等按摩功能。

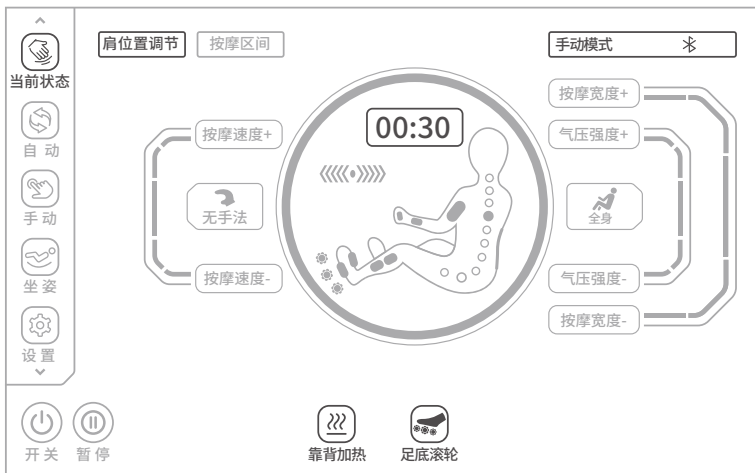


## 使用方法

- (1) 暂停：按摩椅开机后按摩功能运行状态下，按“暂停”键会进入暂停状态，所有按摩功能停止，再次按下“暂停”键恢复之前的按摩状态，暂停超过20分钟自动关机。注意：在暂停状态，除了关机其它功能一概不能使用。




- (2) 靠背加热：在“当前状态”界面中，如下图所示选择“靠背加热”键，开启或关闭靠背加热功能，开启加热功能3分钟后有温热。

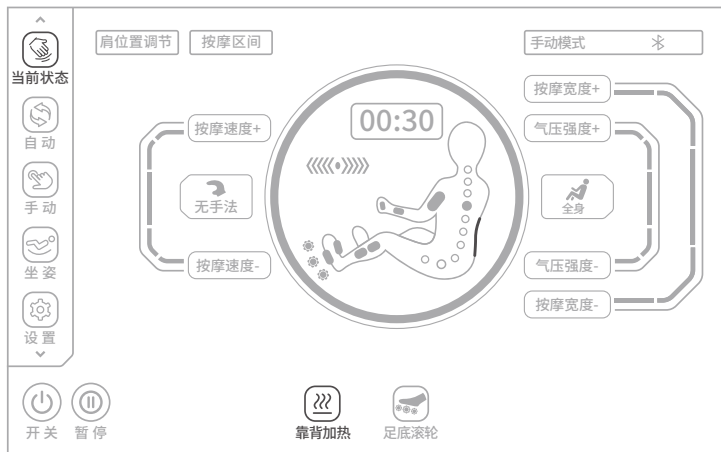


## 使用方法

- (3) 足底滚轮：在“当前状态”界面中，如下图所示选择“足底滚轮”键，开启或关闭足底滚轮按摩功能，滚轮速度设有1~3档可调，每按一次足底滚轮键，速度增快一档；按第四次时则关闭足底滚轮功能，依次循环切换。

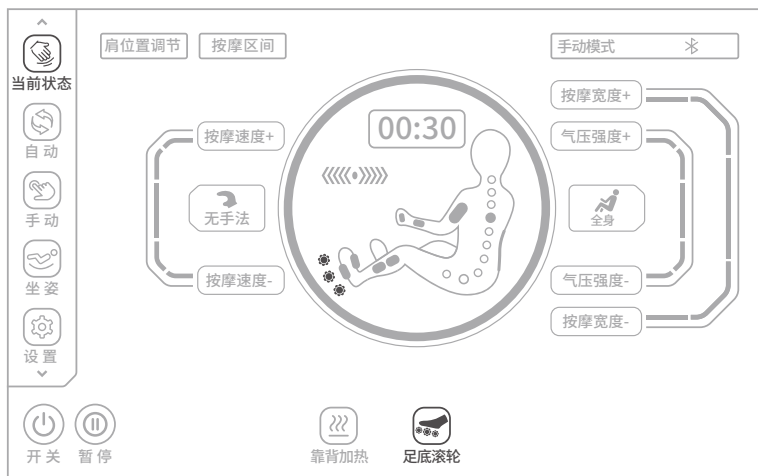


- (4) 肩位置调节：在“当前状态”界面中，如下图所示点击“肩位置调节”键，在弹出菜单中按下、下箭头按钮，可调高或调低肩位置档位，共11档可调节。

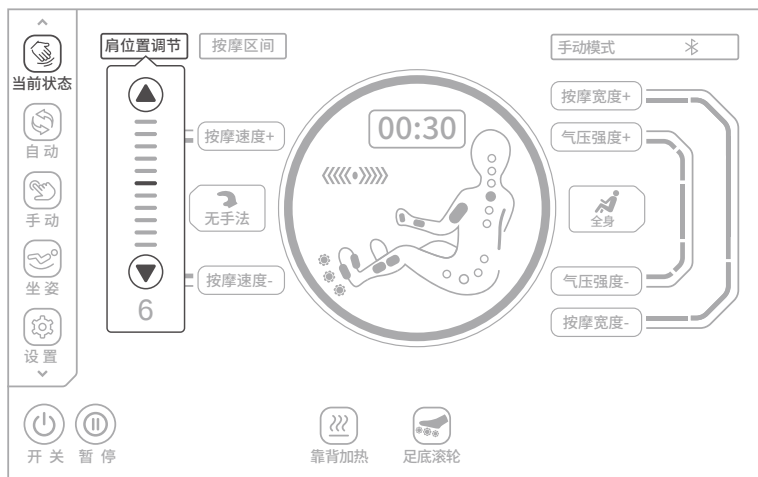

## 使用方法


- (5)时间调节：在“当前状态”界面中，如下图所示选择按摩时间调节“00:30”键，在弹出菜单中按加、减箭头按钮，可增加或减少按摩时间。点击“+”键，时间增加5分钟，最大增加到40分钟，点击“-”键，时间减少5分钟。

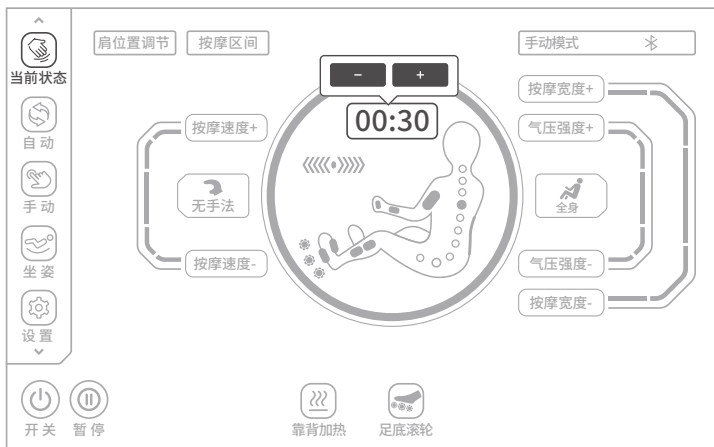

## 十六、结束按摩


在按摩过程中:

- (1)长按扶手开关键，所有按摩功能关闭，按摩椅角度复位。
- (2)按蓝牙APP界面开关键，所有按摩功能关闭，按摩椅角度复位。
- (3)选择按蓝牙APP界面内按暂停键后再按关机键，所有按摩功能关闭，按摩椅角度复位。
- (4)定时时间结束，所有按摩功能关闭，按摩椅角度不复位。

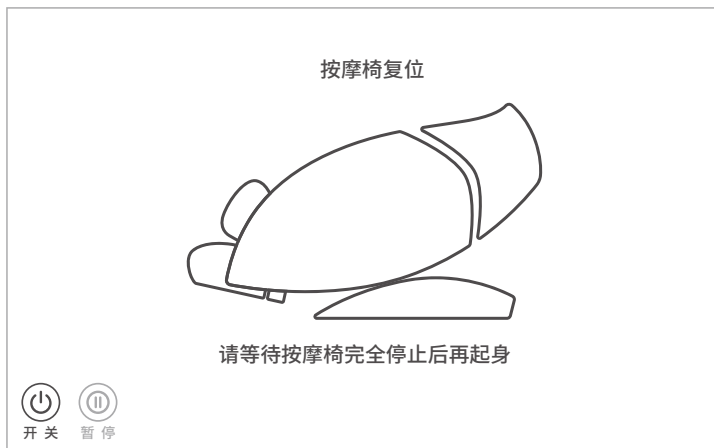


## ⚙️ 使用方法


切断整机电源，附图（整机电源切断示意图）。

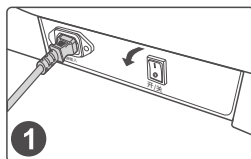

关闭电源开关(0 位置)

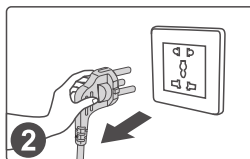

拔掉电源插头示意图

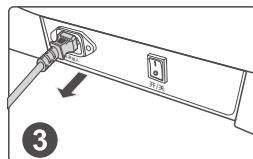

拔掉产品连接电源线

### **i** 温馨提示

蓝牙APP操作按摩椅方式结束。

 产品的清洁、保养

## 清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

## 保养

- 确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩 (请自行购买) 套住产品，防止落入灰尘。



注意

切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

## 温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
  - \* 有焦糊气味。
  - \* 触动导线后有时通电，有时断电。
  - \* 电源线发热。
  - \* 电源线是否破损。
  - \* 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

## PU合成皮革的保养及清洁

Pu合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘乾、熟成而製成。它与真皮相比较有较好的耐酸硷、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

### PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸硷值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境清洁剂清洁PU表面；
4. 对于较髒的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；

### PU合成皮革的保养方法与注意事项：

1. 要保证居室内的通风，过于乾燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用硷性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而硷性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。

## ❓ 常见问题及处理方法

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及我们联络。

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现象      | 腿部或靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。                                                                |
| 可能原因及处理 | 出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。                                              |
| 现象      | 本机开启后功能未运行或部分功能未运行。                                                                                 |
| 可能原因及处理 | 本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在20分钟后自动关机。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。       |
| 现象      | 本机在调整姿态时发出皮革摩擦声。                                                                                    |
| 可能原因及处理 | 本产品整机采用了符合环保要求的高级抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相对运动处摩擦会产生正常的轻微响声，属正常现象。注意：如本机在运行时听到织物或皮革撕裂声，请立即停止使用，并寻求指定专业人员检修。 |
| 现象      | 按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。                                                                                    |
| 可能原因及处理 | 如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。                          |
| 现象      | 本机已受损。<br>电源线或电源插头异常发热。                                                                             |
| 可能原因及处理 | 为防止事故发生，请务必与授权服务中心联系。                                                                               |

 产品技术与参数

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 产品名称        | : 型动椅                                                  |
| 产品型号        | : MAX-Z05A2801                                         |
| 额定电压        | : 220V~                                                |
| 额定频率        | : 50Hz                                                 |
| 额定功率        | : 100W                                                 |
| 额定时间        | : 20分钟                                                 |
| 噪 音         | : ≤60dB                                                |
| 产品毛重        | : 86.5kg                                               |
| 产品淨重        | : 73.5kg                                               |
| 产品尺寸 ( 竖立 ) | : L1405 x W755 x H1195mm                               |
| 产品尺寸 ( 伸展 ) | : L1665 x W755 x H945mm                                |
| 靠背最大承重      | : 95KG                                                 |
| 小腿架最大承重     | : 25KG                                                 |
| 安全结构        | : Class I                                              |
| 执行标准        | : GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ; GB/T 4706.10-2024 |




商標持有：美斯凱實業有限公司  
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)

# 型動椅

FLEXI CHAIR

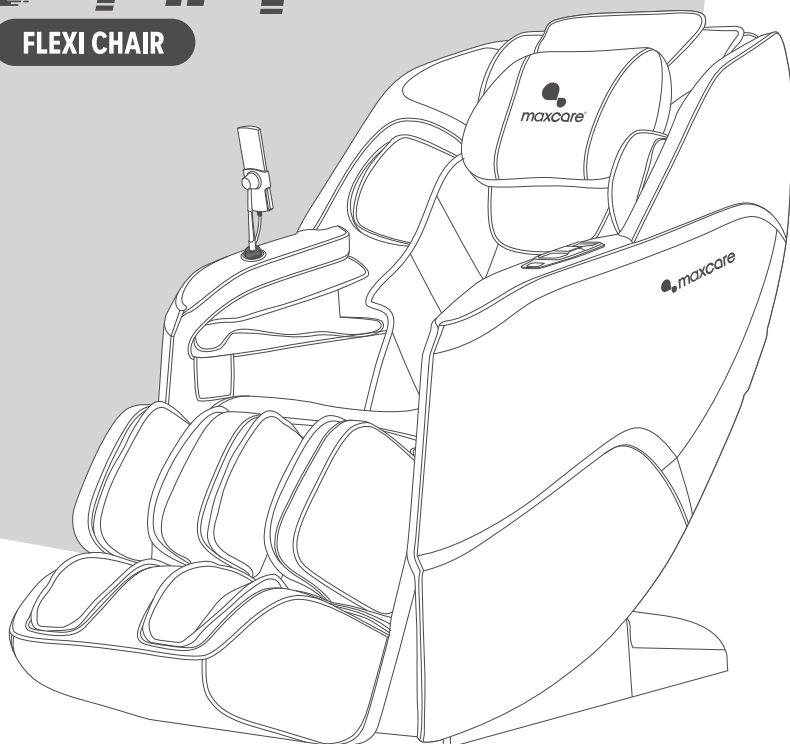

User Manual

MAX-Z05A2801





## COMPANY PROFILE

After two decades of experience in the health industry, **maxcare** founder utilized his knowledge and expertise in massage therapy from an Asian-Pacific perspective to establish our brand - **maxcare**. Our massage therapy business was expanded to Hong Kong in 2012 and is conferred 2017 Hong Kong Top Brand Award. Based in Hong Kong, we are specializing in design & innovation, manufacturing, and retailing of massage and healthcare products.

Believing in the value of 'Technology improves our quality of life' and 'Caring for your family', **maxcare** has been innovating highly qualified products with international patents. Besides, **maxcare** products fulfill various international safety standards, namely EU CE Mark, US UL/ETL Mark, Germany GS Mark, TUV certification, and China CCC Mark.

Motivated by our value, **maxcare** founder has been leading us to be one of the most competitive brands in Hong Kong health industry. **maxcare** applies the contemporary fashion design – neat and modern – on the mechanical engineering of massage chairs. To deliver our value and offer incredible massage experience and healthcare solution to the public, **maxcare** devotes to the innovation, design, manufacturing the top-notch family massage products. By integrating the company philosophy –Spirit of Healthy Life - into our products, **maxcare** brings health to everyone.

# 型動椅

## FLEXI CHAIR

Thank you for purchasing **maxcare**'s products. Before using the product, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product.

This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

### CONTENT

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Safety Precautions              | P.01 - P.06 |
| Name and Function of Components | P.07 - P.11 |
| How to Use                      | P.12 - P.52 |
| Cleaning and Maintenance        | P.53 - P.54 |
| FAQs and Solutions              | P.55        |
| Technical Specifications        | P.56        |



## Safety Precautions



### 1. Important safety warning

- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- Keep children and pets away from the movable parts of this product to avoid accidents caused by the up-and down-ward movement of the calf rest and back cover.
- When in use, sliding or transporting, please ensure that there are no people or pets nearby (the back, bottom, front and sides of the product), and that no foreign objects or pets inside the product, to avoid accidents.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Do not use unauthorized accessories.
- Do not use this product outdoors.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- Please check if any part of this products is damaged before use. If so, please do not use it and contact us for repair.
- Please do not use it if the cover is broken or damaged.
- Please do not use it if the shell or surface is damaged.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use it if drunk or feeling unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Please do not adjust to the maximum intensity at the beginning of the massage to avoid possible injury.
- Please do not keep sharp objects in pockets when use.
- Keep the plug clean from needles, rubbish or water.
- If the power cord is damaged, do not attempt to change on your own. Please contact us for repair for safety reasons.



### 2. Environment for usage

- Please do not use it in a moist environment such as bathrooms.
- Please do not use it when there is a drastic change in temperature.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use it where there is not enough space or not good ventilation.
- Please switch off the power and unplug the machine after use.
- Please do not use it when surrounding temperature is up to 40°C.
- Please do not use it when surrounding temperature is below 5°C. The lubricant can thicken quickly and increase the friction between parts.
- Turn off and pull out the plug during thunderstorms.
- Place the product on a flat surface.
- Do not use outdoors.
- Do not place it near fire or directly under the sun.
- When moved from a low-temperature storage to a warm environment, the moisture inside the machine may affect, or damage, its functionality. Please rest the product within room temperature for 1 hour before use.



### 3. People who have the below symptoms, please consult a doctor before use



## Safety Precautions

- Pregnant women or women that are in menses period.
- People who got injured or skin diseases.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised are not allowed to use this machine.
- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell.
- The appliance has heating function. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- People who are receiving medical treatment, especially those who are physically unfit.
- People who have open wounds.
- People who aim for recovery.



## 4. Safety

- Please do not place heavy objects on this product.
- Do not use other therapy devices while using this product.
- This product is not to be used for medical treatment purpose.
- Only one person at a time.
- Recommended usage time of this product is 20 minutes/ session.
- It is possible to place a mat underneath the machine to avoid damage to the floor.
- For safety reason, maintain a minimum of 0.5m between the product and others when use.
- Check if the voltage is suitable to the specification of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not allow water to get into the product, to avoid electric shock or damage to this product.
- Do not pull or drag the power cord when unplugging. Please be gentle.
- Do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Do not use wet cloths to clean the electric parts such as the switch and plug.
- Be away from this product during power cut to prevent injury in case power resumes suddenly.
- Stop using this product if there appears any irregularity, and please contact us immediately.
- Stop using this product if it causes discomfort, and please consult a doctor.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by us in order to avoid a hazard.
- Do not ride on the handle to avoid injury or malfunction.
- Keep the power cord away from hot or moving objects.
- Please cut off power and pull out plug before moving.
- If the product is found damaged, broken, suffering from power leakage, or with exposed parts, please stop using it.



## 5. Maintenance

- This product should be maintained by us, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please always turn off the main power after use.
- Do not use this product if the socket is loose.
- If this product is to be left idle for long, please tie up the power cords and keep it in dry and dustless environment.
- Do not keep this product at a high temperature or near fire. Do not keep under direct sunlight.
- Please clean this product with dry cloths. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, no special maintenance required.
- Do not point sharp objects at this product.
- Do not roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; do not keep it continuously running for long.



## 6. Solution of ordinary malfunctions

- It is normal if the motor makes noises during operation.
- If the remote control can't work normally, please check the plug and socket if they are connected, and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the power will automatically go off. If this product works continuously for too long, the temperature control will automatically turn off the machine, if so, please allow a 30-minute break before resuming.



**CAUTION**

Please make sure all the power is cut off before moving.  
The power cord and all other cables should be disconnected.





## Safety Precautions


### Installation parts

#### Calf mechanism installation instructions

1. Insert the leg wire and air pipes into the respective front ports of the steel frame assembly.  
The air pipe with the white-marked clip connects to the white pipe connector. The other air pipe without a marked clip connects to the black pipe connector (Figure 1).
2. After completing the connection, open the calf securing caps on both sides of the steel frame assembly (Figure 2).

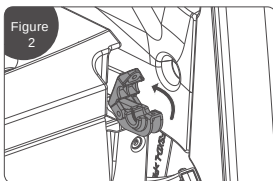
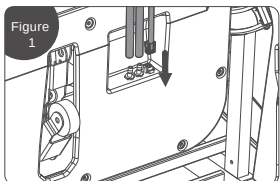


3. Raise the calf section, place it into the slot, cover it with the securing caps, and finally fasten it in place with two M4 screws (Figure 3).

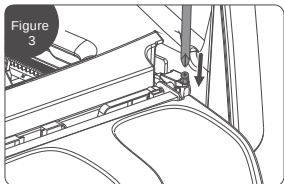



#### Installation instructions for the aviation plug of the manual controller

Non fixed aviation plug installation method: Align the arrow marks of the aviation plug (Figure 1) and the aviation plug (Figure 2), then tighten them, and then lock the nut clockwise.

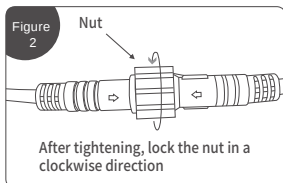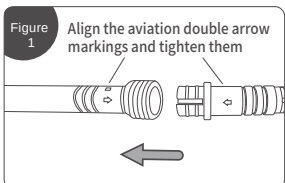

#### Remote control holder installation instruction

Align the threads on the bracket assembly support knob with the corresponding thread position of the bracket mount on the armrest (Figure 1), turn clockwise and tighten to secure (Figure 2)

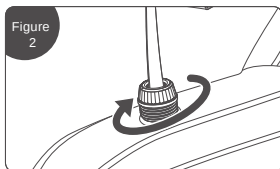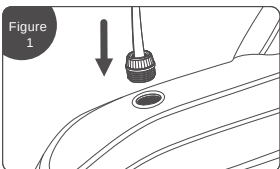



## Safety Precautions


### Place massage chair



#### Installation placement

**Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 5.5 cm.**


Do not expose the massage chair to direct sunlight or high-temperature environments (e.g., in front of heating devices). Place it in an area where it can avoid heat and direct sunlight. For long-term use in a fixed location, it is recommended to place a soft cushion underneath. The cushion should be large enough to cover the area where the chair and footrest touch the floor.

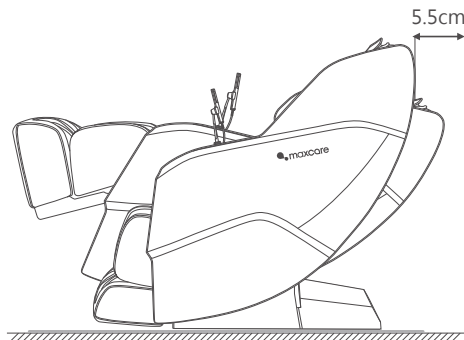

#### Product lift instruction

**Two-person lifting required due to product weight.**

1. Please lift the massage chair when moving it on delicate surfaces, such as wooden floors.
2. When moving on similar surfaces, lifting is recommended to avoid damaging the casters. Be cautious when lowering the chair into the designated position to avoid and or foot injuries. Do not release the chair until it is completely flat. To prevent floor damage, it is recommended to place a mat or protective covering on the floor.

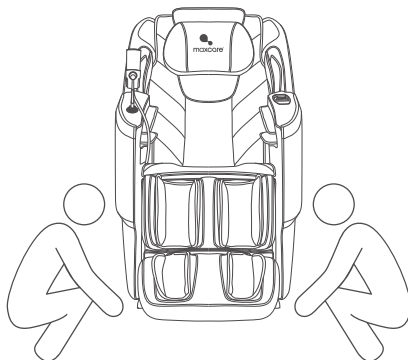



## Safety Precautions

### Place massage chair




#### Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Tilt the chair backward approximately  $45^{\circ}$  as shown in the diagram to move it.


**NOTE:** Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, ensure the massage chair is properly powered off, with both the backrest and calf sections fully reset, and the power supply disconnected.
2. The chair should remain empty during movement; no people, pets, or objects should be on it.
3. Do not move the chair over obstacles higher than 2mm or gaps wider than 5mm.
4. When moving the chair using the casters, avoid continuous movement over distances greater than 50 meters. If necessary, move the chair slowly and at a steady pace.

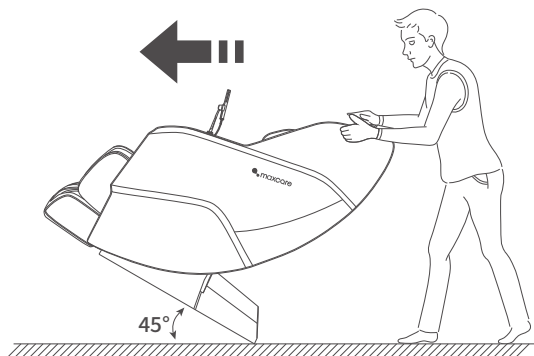

#### How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

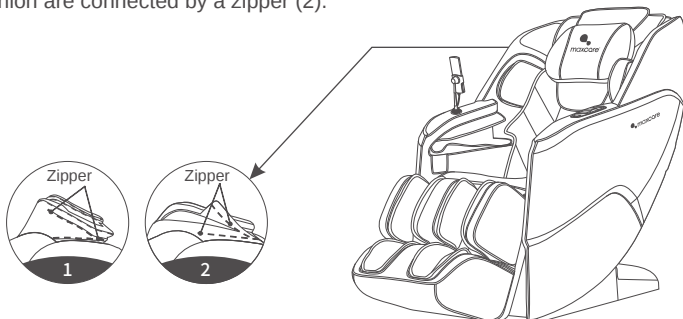




## Safety Precautions

### Before use




#### Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

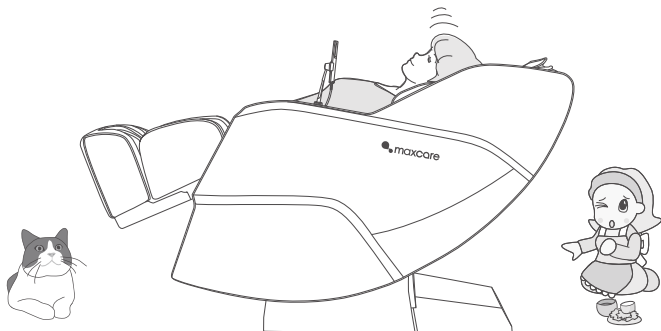


#### Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc. Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule. Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

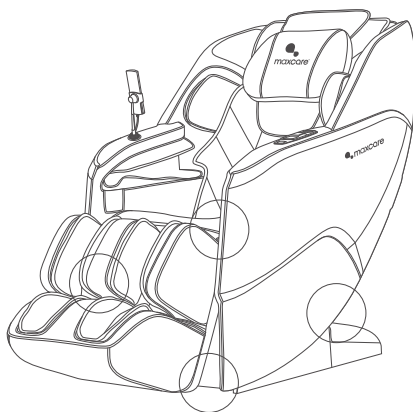


## Name and Function of Components

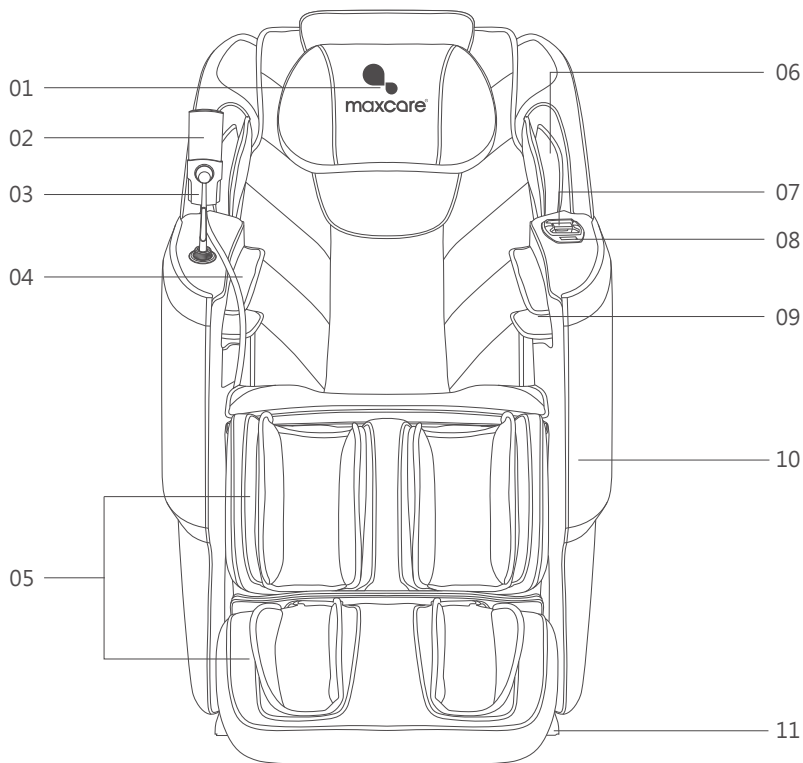

- 01.Head Cushion
- 02.Remote Control
- 03.Remote Control Holder
- 04.Armrest: Airbags Assembly
- 05.Leg: Massage Mechanism
- 06.Shoulder: Airbags Assembly

- 07.Armrest Shortcut Button
- 08.USB / Type-C Charging Port
- 09.Arm: Airbag Assembly
- 10.Armrest
- 11.Side Cover

## Name and Function of Components

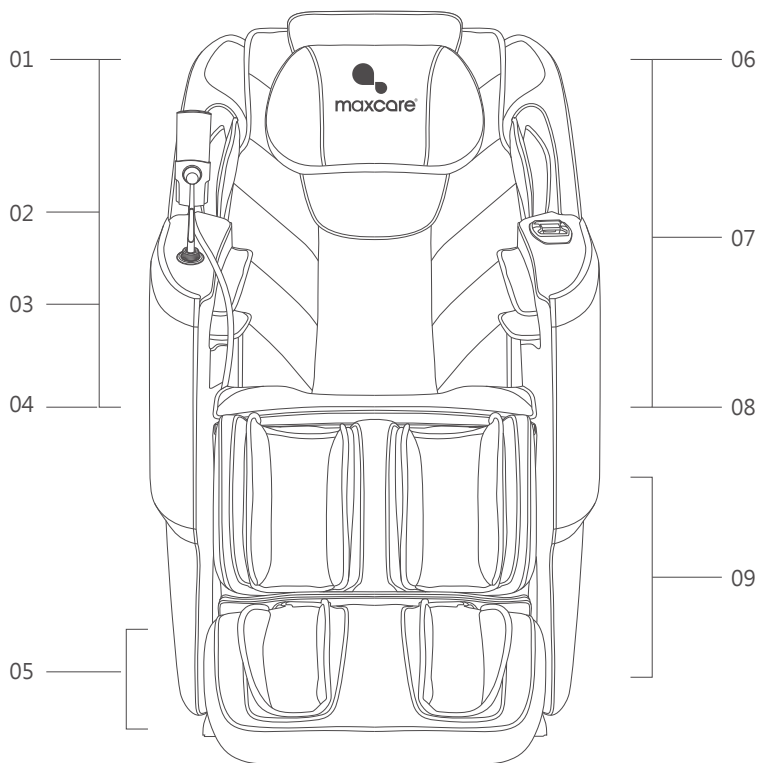

### 01.Head Sides

- 3D Digital Audio
- Music Playback

### 02.Shoulder Sides

- Air Massage

### 03.Head&Neck to Seat

- Manipulator Massage

### 04.Right Armrest

- Air Massage

### 05.Foot

- Air Massage
- Rollers + front and back scraping massage
- Ankle Airbag Lump Massage

### 06.Left Head Side

- Voice Control
- Built-in voice-activated microphone

### 07.Back

- Heating Function

### 08.Left Armrest

- Air Massage


### 09.Leg

- Air Massage



## Name and Function of Components

### Remote controller keys instruction

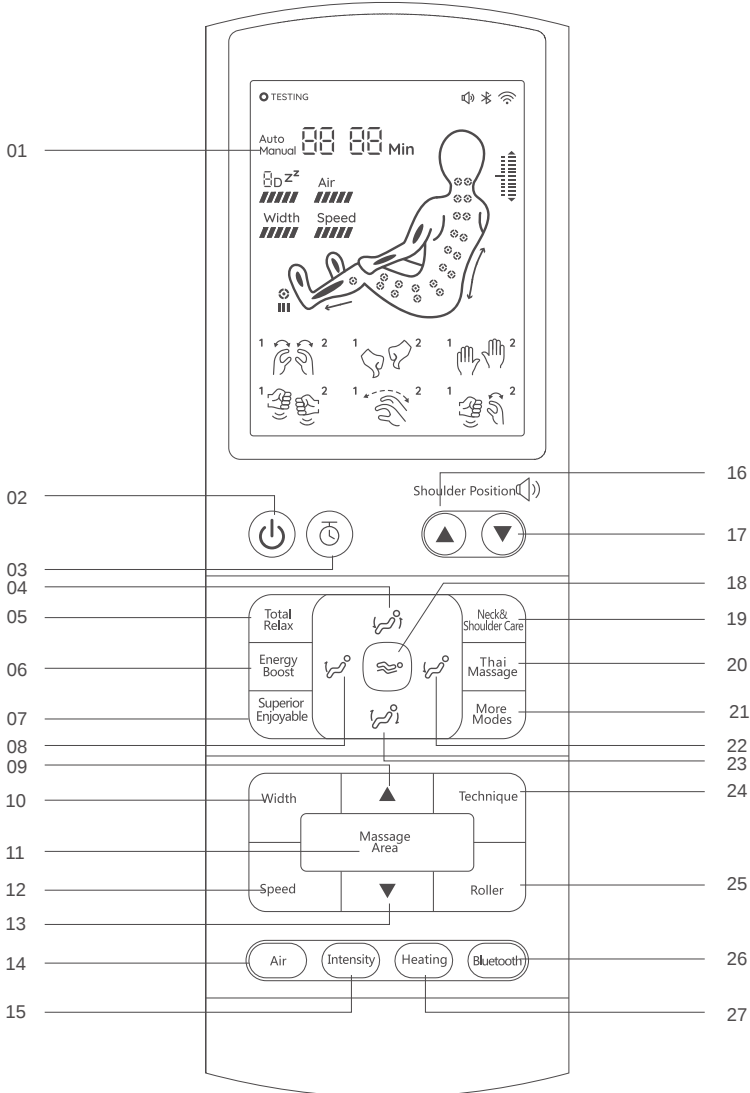




## Name and Function of Components

### Remote controller keys instruction

- 01.Display: liquid crystal display which can display the massage function in running state.
- 02.Power key: Turn the massage chair on or off.
- 03.Timer key: Massage Timer Adjustment
- 04.Linkd Sit-Up Key: Press and hold this button to link the adjustment of the backrest angle upwards, and the calf angle downwards, release to stop the adjustment.
- 05.Total Relax key: Active Total Relax massage program.
- 06.Energy Boost key: Active Energy Boost massage program.
- 07.Superior Enjoyable key: Active Superior Enjoyable massage program.
- 08.Calf Upward key: Press and hold this button to adjust the calf section upwards, release to stop the adjustment.
- 09.Massage Up Key: Adjust the massage area upwards
- 10.Width key: Massage width is adjustable in 5 levels.
- 11.Area key: Cycle switching massage area selection.
- 12.Speed key: Massage speed is adjustable in 5 levels.
- 13.Massage Down Key: Adjust the massage area downwards.
- 14.Air key: Turn air massage on or off. Cycle through Upper / Lower / Full / Off.
- 15.Ait Intensity key: Air massage intensity is adjustable in 5 levels.
- 16.Shoulder / Volume Up Key: Adjust shoulder position upwards. Long press for volume up adjustment.
- 17.Shoulder / Volume Down Key: Adjust shoulder position downwards. Long press for volume down adjustment.
- 18.Zero-Gravity key: Zero-Gravity angle adjustment. Cycle through Zero I / Zero II / Off.
- 19.Neck & Shoulder Care key: Active Neck & Shoulder Care massage program.
- 20.Thai Massage key: Active Thai Massage massage program.
- 21.More Auto key: Cycle through more auto massage program.
- 22.Calf Downward key: Press and hold this button to adjust the calf section downwards, release to stop the adjustment.
- 23.Linkd Reclining Key: Press and hold this button to link the adjustment of the backrest angle downwards, and the calf angle upwards, release to stop the adjustment.
- 24.Technique key: Turn on or off the massage technique.12 massage techniques available
- 25.Roller key: Turn on or off the massage rollers. Massage intensity is adjustable in 3 levels.
- 26.Bluetooth key: Long press to turn on or off the Bluetooth.
- 27.Heat key: Short press

## Name and Function of Components

### Armrest shortcut key description


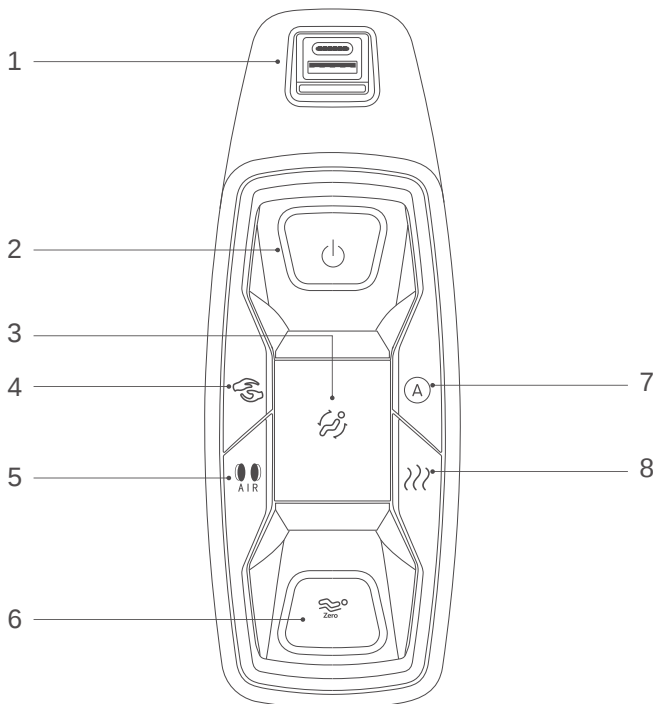


- 01.USB / Type-C Charging Port: Provides charging for mobile phones or other devices.
- 02.Power Button: Long press this button for 3 seconds to turn on or off the massage chair. After turning on the massage, short press for pause/run.
- 03.Linkage Lift Key: Pull forward once and hold to raise the seat position and lift the massage chair upright. Pull backward once and hold to lower the seat position and recline the massage chair. Pull forward twice quickly and hold to lower the calf section. Pull backward twice quickly and hold to raise the calf section. Release to stop adjustment.
- 04.Massage Technique Key: Press this button to cycle through the massage techniques, including no technique, kneading (Kneading I-Kneading IV), tapping (Tapping I-Tapping II), knead&tap (Knead&Tap I-Knead&Tap IV) and Shiatsu, total in 12 massage techniques to choose from.
- 05.Air Pressure Key: Press to turn the air pressure function on or off.
- 06.Zero-gravity Key: Press this button to cycle through the massage chair's zero-gravity angle adjustment (2 setting angles are available).
- 07.Auto Massage Key: Press this button to cycle through the auto massage functions (18 kinds of auto-massage functions are available).
- 08.Heating Key: Press this button to turn on or off the back heating function.



## How to Use

### I. Start massage

1. Massage Techniques: Press the "Power" button on the remote control to cycle through the massage techniques.

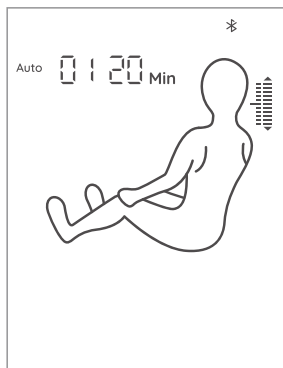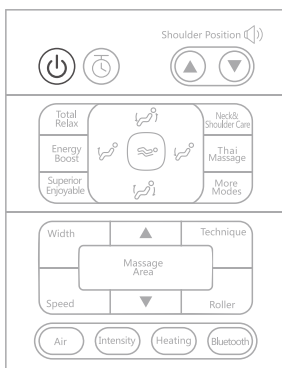

2. After switching on the massage chair will automatically adjust the angle, after adjustment will start human shoulder position detection, at this time, please keep the body and sitting posture and massage chair fit.
3. Shoulder position fine-tuning, after body type detection is completed, the hand controller or voice prompts will prompt the user to fine-tune the shoulder position, if the massage wheel stops at your shoulder position, there is no need to adjust and directly start massage, if not, please use the shoulder position of the "up key / volume up" key or "down key / volume down" key to adjust the massage wheel to your shoulder position and then start the massage. If it is not operated for more than 10 seconds then it will directly default the current massage wheel position as shoulder position and start massaging. Note: Pressing the corresponding key during power on or detection can switch the default automatic programme mode, and pressing it again can skip the detection and enter the massage directly.

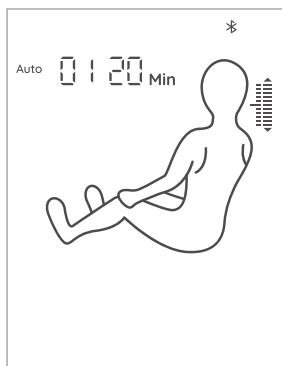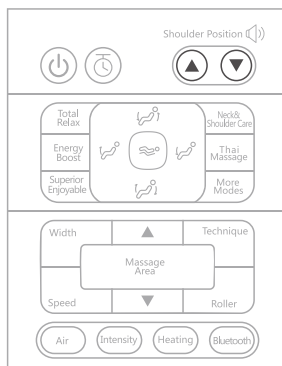


## How to Use

### II. Automatic program (please use this function after the chair is turned on)

- (1) Automatic programs selection
  - (1.1) Select click on the remote controller auto program button area to select the auto program to start the massage.
  - (1.2) There are a total of 18 automatic programs; 5 featured automatic programs have independent buttons and can be selected directly, and the other automatic programs are switched by the "More Modes" button.

Featured programs: Total Relax, Energy Boost, Superior Enjoyable,  
Neck & Shoulder Care, Thai Massage

More Programs: Chinese Massage, Fatigue Recovery, Gentle Waves Rub,  
Meridian Treatment, Waist Care, Leg & foot Relieve, President Cosy,  
Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge, Lunch Break,  
Warming and detox, Sweet Dream.

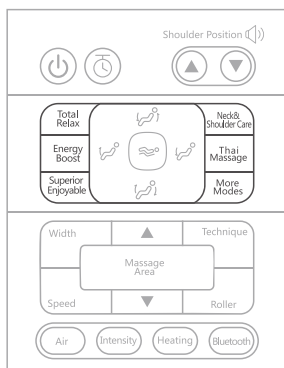

| Function           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Display |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Total Relax        | With the aid of flexible guide rails, let the body posture angle closer to lying flat; with the effective anti-arch stretching of movement to the back, achieve zero pressure stretching, effectively relieve lumbar muscle pain, and eliminate fatigue, thus to get a better massage experience, relieve the stress on the body and mind. | 01      |
| Energy Boost       | Deeply massage the whole body by means of kneading, tapping and Shiatsu techniques, to wake up the vitality of the human body and stimulate the energy.                                                                                                                                                                                    | 02      |
| Superior Enjoyable | Apply air massage on the whole body, with the foot roller and calf kneading massage. Calf stretching function is canceled, suitable for the elderly and people suffering stress on back. The massage intensity is gentle.                                                                                                                  | 03      |



## How to Use

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Neck & Shoulder Care | Massage the neck and shoulders by means of kneading and stretching techniques mainly, and also the upper back by medical massage, and then press the Jianjing acupoint to relieve cervical spondylosis and achieve the effect of relaxing the muscles of the neck and shoulders. Massage intensity is gentle, suitable for people working in office and suffering from cervical fatigue.                | 04 |
| Thai Massage         | Mainly use calf and backrest electric push rod to clamp legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage, while the movement holds against the back and waist for medical massage, so that the body is in the Thai stretching state. It is suitable for people under high stress to improve their head-down on chest and humpback. Massage intensity is strong. | 05 |

### More modes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Chinese Massage    | By means of Traditional Chinese medicine massage technique mainly, apply massage on the back and waist so as to promote the blood circulation of the back and waist, soothe the meridians and relieve the blockage of the back and waist through massage. It is suitable for people with back and waist pain, and lumbar muscle strain. Massage intensity is gentle. | 06 |
| Fatigue Recovery   | Apply deep pressure on the neck, back and waist, buttocks, and legs by means of kneading, patting, finger pressing techniques mainly to relieve the fatigue on body, allowing the body to better relax.                                                                                                                                                              | 07 |
| Gentle Waves Rub   | Apply full air massage mainly, with the use of airbags for cross circulation of kneading and pressure, so as to promote blood circulation, alleviate pain in various body parts, and deeply relieve muscle fatigue. (Remarks: full air massage mainly, with frequent air massage action)                                                                             | 08 |
| Meridian Treatment | By means of kneading, patting, finger pressing and medical massage techniques mainly, clamp the legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage to soothe the meridians, promote blood circulation, relieve blockages in the body.                                                                                          | 09 |
| Waist Care         | Massage the waist by kneading, kneading&tapping, tapping, and then perform 4D massage of the waist                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |



## How to Use

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Leg & foot<br>Relieve | Massage the shoulders and waist by means of kneading, tapping, kneading and tapping mainly, apply air massage on the calves and feet for squeezing massage, allowing more soothing calf and foot massage.                                                                                                                                                                                                                       | 11 |
| President<br>Cosy     | Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading, tapping, kneading and tapping mainly, to relieve fatigue, promote blood circulation, and release stress by such deep massage. It is suitable for men, and the massage intensity is moderate.                                                                                                                                                                  | 12 |
| Keep Fit              | Massage the shoulders, neck, waist and hips by means of kneading and Shiatsu techniques, through the massage on the whole body, to relax the body and mind, and enjoy the queen-level treatment. It is suitable for women. Massage intensity is gentle.                                                                                                                                                                         | 13 |
| Office<br>Regimen     | Massage the shoulders, neck and waist by means of kneading, tapping, kneading and tapping techniques mainly, to relieve shoulder and neck pain, improve lumbar muscle soreness and maintain lumbar spine through such deep massage. It is suitable for office white-collar and sedentary people.                                                                                                                                | 14 |
| Health<br>Recharge    | Deeply massage the whole body by means of kneading, tapping and Shiatsu techniques, to promote blood circulation throughout the body and prevent blood clots. It is suitable for people who live at home for a long time and do not like to go out, and the massage intensity is moderately gentle.                                                                                                                             | 15 |
| Lunch<br>Break        | Massage the back and waist by means of kneading and tapping techniques, and press the Shenyu acupoint, to improve the quality of lunch break, so that the user is more energetic in afternoon work.                                                                                                                                                                                                                             | 16 |
| Warming<br>and detox  | Deeply massage the whole body by pressing related acupoints by means of kneading, patting, finger pressing and other massage techniques, to let the stimulation fully reach the deep layer of muscle tissue, feel warm locally combined with the function of hot compress, and regulate the Qi and blood in a bid to achieve the effect of warmth and damp expelling. (Note: the whole body massage together with hot compress) | 17 |
| Sweet<br>Dream        | Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading and medical massage techniques, and press the acupoints of Fengchi and Shenyu, to improve the sleep quality and help sleep. It is suitable for people suffering from poor sleep, and the massage intensity is gentle.                                                                                                                                          | 18 |



## How to Use

### III. Automatic program (Please use this function after power on)


- (1) Massage Techniques: Press the “Technique” button on the remote control to cycle through the massage techniques.
- (1.1) Techniques include none, Knead (4 techniques), Tap (2 techniques), Knead&Tap (4 techniques), Shiatsu(1 techniques) a total of 12 techniques are available. Press the “Technique” button to cycle through all 12 techniques. And display the technique on the interface.

| Function                                                                                                   | Massage roller adjustment         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stop                                                                                                       | The width and be adjusted.        |
| Knead I                   | The speed and be adjusted.        |
| Knead II                  | The speed and be adjusted.        |
| Knead III (flashing)      | The speed and be adjusted.        |
| Knead IV (flashing)       | The speed and be adjusted.        |
| Tap I                     | The speed, width and be adjusted. |
| Tap II                    | The speed, width and be adjusted. |
| Knead&Tap I               | The speed and be adjusted.        |
| Knead&Tap II              | The speed and be adjusted.        |
| Knead&Tap III (flashing)  | The speed and be adjusted.        |
| Knead&Tap IV (flashing)   | The speed and be adjusted.        |
| Shiatsu                   | The width and be adjusted.        |

5 speed levels adjustable  
5 width levels adjustable

- (2) Massage Speed: Press the “Speed” button on the remote control to adjust the massage speed (in a total 5 levels adjustable, level 1 is the slowest, level 5 is the fastest). Speed adjustment should be applied to the following massage techniques: Knead (Knead I - Knead IV), Tap (Tap I - Tap II), Knead&Tap (Knead&Tap I - Knead&Tap IV).

- (2.1). Speed displayed on the interface.
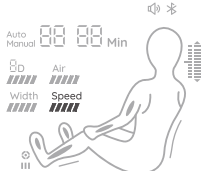
| Speed Display                                                                       | Speed Adjustment                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <div> <div>level 1</div> <div>level 2</div> <div>level 3</div> <div>level 4</div> <div>level 5</div> </div> |



## How to Use

- (3) **Massage Width:** Press the “Width” button on the remote control to adjust the massage width (in a total of 5 levels adjustable, level 1 is the narrowest, level 5 is the widest). Width adjustment should be applied to the following massage techniques: Stop, Tap(Tap I-Tap II), Shiatsu
- (3.1) Width displayed on the interface.

| Width Display | Width Adjustment                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|               | <div>level 1      level 2      level 3      level 4      level 5</div> |

- (4) **Massage Area:** Press the “Up” or “Down” button for massage area on the remote control to adjust it.
- (4.1) There are 5 massage areas to choose from: Spot / Part / Full Back./ Upper Back / Lower Back.

| Function                                                                                  | Description                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spot     | Fixed-point massage at fixed-point position. | When selecting fixed-point and local massage techniques, the massage area can be adjusted through the "up key" and "down key" next to the massage mechanism key of the remote controller under the status of information interface. |
| Partial  | Small-scope local massage back and forth.    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Full     | Full back massage back and forth.            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Upper    | Upper back massage back and forth.           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lower    | Lower back massage back and forth.           |                                                                                                                                                                                                                                     |

- (5) **Air Massage:** Press the “Air” button on the remote control to select the air massage function. There are 3 options for air massage: Upper, Lower, Full Body. “Off” to turn off the air massage function.

| Air pressure displayed       |                              |                                  |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Upper Air Massage</b><br> | <b>Lower Air Massage</b><br> | <b>Full Body Air Massage</b><br> |





## How to Use

- (6) **Air Massage Intensity:** Press the “Intensity” button on the remote control to adjust the air massage intensity (in a total 5 levels adjustable, level 1 is the weakest, level 5 is the strongest). The air massage intensity can only be adjustable after activating the air massage function.

| Air Intensity Display | Air massage Intensity Adjustment                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       | <div>level 1      level 2      level 3      level 4      level 5</div> |

## IV. Other Function (please use this function after the chair is turned on)

- (1) **Heating:** Short press the “Heat” button on the remote control to turn on or off the back heating function. There is a noticeable warmth after activating the heating function for 3 minutes.
- (1.1) Heating displayed on the interface.
- (2) **Low-Power mode:** Long press the “Heat” button on the remote control to turn on or off the Low-Power mode. After activating the low-power mode, the massage chair enters a low-power state when powered off, turning off all functions. It can only be turned on using the power button on the remote control
- (2.1) 2.1.Low-Power displayed on the interface.

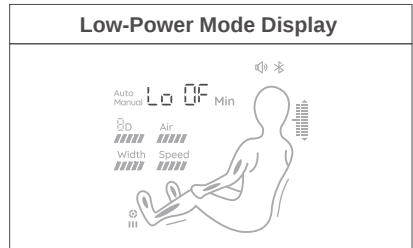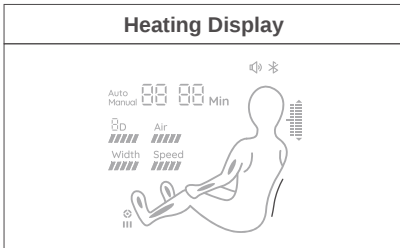


- (3) **Sole Roller:** Press the “Roller” button on the remote control to turn on or off the sole roller function. The rollers speed is adjustable in 1 to 3 level. Each press of the roller button increases the speed by one level. Pressing it a fourth time turns off the sole roller function, cycling through the options in sequence.

| Speed Display | Speed Adjustment                             |
|---------------|----------------------------------------------|
|               | <div>level 1      level 2      level 3</div> |



## How to Use

- (4) Volume Adjustment: Long press the "Shoulder / Volume Up" or "Shoulder / Volume Down Key" button for shoulder position adjustment on the remote control to adjust the background music volume.
- (5) Bluetooth: Press the "BT" button on the remote control to turn on or off the Bluetooth function. After activating the Bluetooth function, you can pair and connect Bluetooth-enabled audio devices (such as smartphones, MID tablets, etc.) with the massage chair's Bluetooth module. This allows music played on the audio device to be wirelessly transmitted by Bluetooth to the massage chair's sound system for playback.
- (5.1) Enter the main menu of your smart device, open "Settings" → select the "Bluetooth" option → turn on the "Bluetooth" → Bluetooth will automatically "search for new Bluetooth devices".
- (5.2) The smart device will detect the corresponding Bluetooth model (e.g., MAX-Z05A2801-\*\*\*\*). Tap the pair button; If prompted whether to pair with this device, select "Pair" to complete the pairing process.
- (5.3) Open the music player on your smart device and select a song to play.

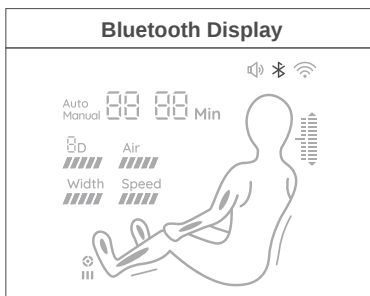

## V. Angle adjustment (please use this function after the chair is turned on)

### (1) Zero-gravity display

| Function | Description                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Zero | Press the "Zero" button on the remote control to cycle through the zero gravity angle options (2 angle options available). Each press switches to the next angle in the cycle. |

### (3) Whole body angle

| Function | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Linkage descending key: press and hold this key, the backrest mechanism slowly descends while the leg mechanism slowly rises, release it to stop the backrest mechanism from descending and the leg mechanism from rising; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "drip drip" sound.     |
|          | Linkage Rise Key: Press and hold this key, the backrest mechanism rises slowly and the leg mechanism falls slowly at the same time, release it to stop the backrest mechanism from rising and the leg mechanism from falling, and it will stop adjusting when it reaches the limit position and emit a "drip drip" sound. |

## How to Use

### (3) Leg mechanism angle

| Function                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Leg mechanism descending key: press and hold this key the leg mechanism slowly descending, release it to stop descending; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "drip drip" sound. |
|  | Leg mechanism rising key: press and hold this key the leg mechanism rises slowly, release it to stop rising; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "drip drip" sound.              |

## VI. End the massage

During the massage session:

- (1) Press the "power" button on the remote control to turn off all massage functions and
- (2) reset the massage chair to its default angle.
- (3) press the armrest power key, all massage functions are closed, massage chair angle reset.

When the timer ends, all massage functions will turn off, but the massage chair will not reset to its default angle.

### **Warm Reminder**

The touchscreen hand controller operation for the massage chair has ended.

## How to Use

### VII. Instructions for connecting the massage Chair via Bluetooth APP


- (1) 1. Bluetooth APP download and install:
  - (1.1) 1.1. Android (Android system) download method: Search "Maxcare massage chair" in Google Play (Google Store) to download and install the Android version, or scan the QR code below to download and install. After successful installation, you can use
  - (1.2) the Bluetooth APP to operate the massage chair.
  - 1.2. Apple (iOS system) download method: Search "Maxcare massage chair" in the App Store (Apple App Store) to download and install the Android version, or scan the QR code below to download and install. After successful installation, you can use the Bluetooth APP to operate the massage chair.



Maxcare massage chair




- (2) APP Bluetooth search connection: After the APP is successfully installed, click the "Maxcare massage chair" icon in the smart device interface. After opening the "Maxcare massage chair" APP, it will automatically jump to the Bluetooth connection interface. At the same time, the APP will automatically search for the corresponding device Bluetooth number (such as MAX-Z05A2801-\*\*\*\*), then click on the corresponding device Bluetooth number (and displays connected), then the connection is successful. After the connection is successful, you can operate the massage chair through the APP. Note: The Bluetooth function and location information of the smart device system must be turned on before the device is connected.

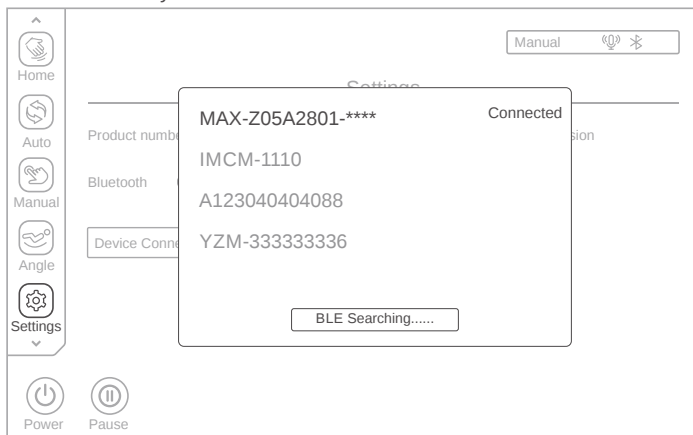


## How to Use

- (3) APP Bluetooth name change: If the location of the massage chair is changed or the Bluetooth name is changed, you need to reconnect the device according to the actual situation; after entering the APP interface as shown below, select and click the "Setting" key in the left menu bar, and then select "Device connection" key to connect the device. Note: The Bluetooth function and location information of the smart device system must be turned on before the device is connected.

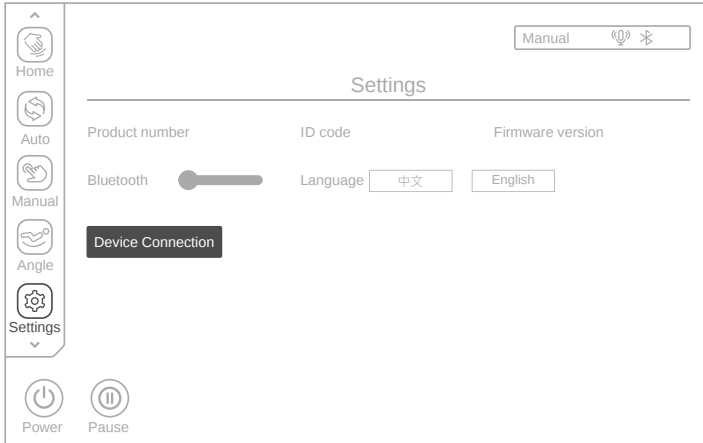


- (3.1) After entering the setting interface as shown below, select and click the "Device connection" key. In the pop-up window interface, the APP will automatically search for the corresponding device Bluetooth number (such as MAX-Z05A2801-\*\*\*\*), and then click to select the corresponding device Bluetooth number ( and displays connected), then the connection is successful. After the device is successfully connected, the massage chair can be operated.

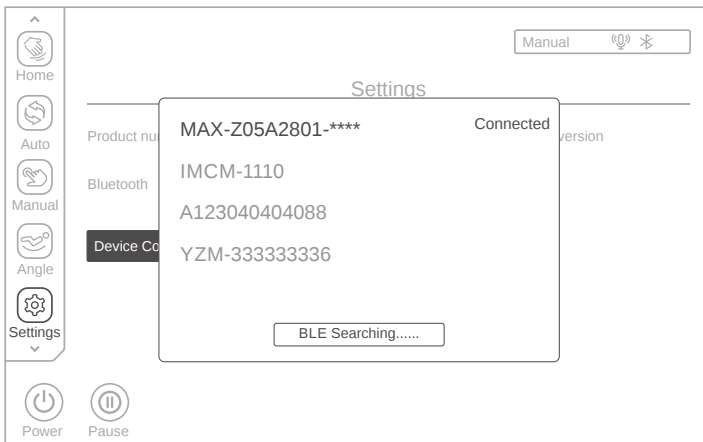


## How to Use

### VIII. Instructions for operating the massage chair via the Bluetooth APP

- (1) After the device is successfully connected, the Bluetooth APP will automatically redirect to the standby interface. As shown in the figure below, select and click the "Power" key in the lower-left corner of the menu bar to enable the massage function.
- (2) After enabling, the system will automatically enter the interface to display the startup screen and wait for the next operation.

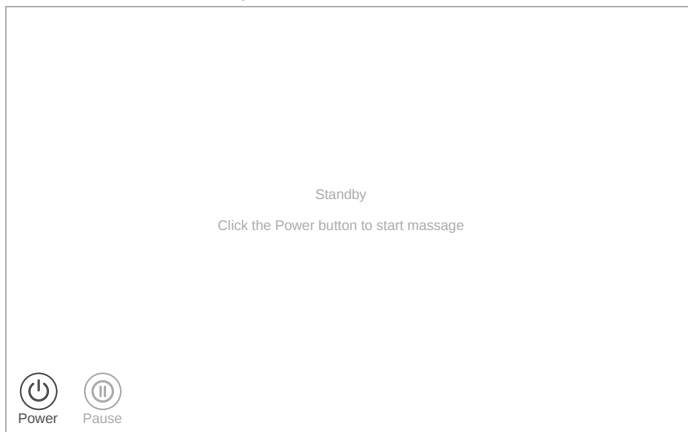


- (3) Auto Lying Down: After the massage intensity is selected, the system will automatically enter the "Angle adjustment" interface. The massage chair will automatically adjust the lying Angle. Just wait for the adjustment to complete. If no adjustment is needed, you can directly click the "Skip" key. The massage chair will maintain the current sitting position and proceed to the next step of intensity selection.

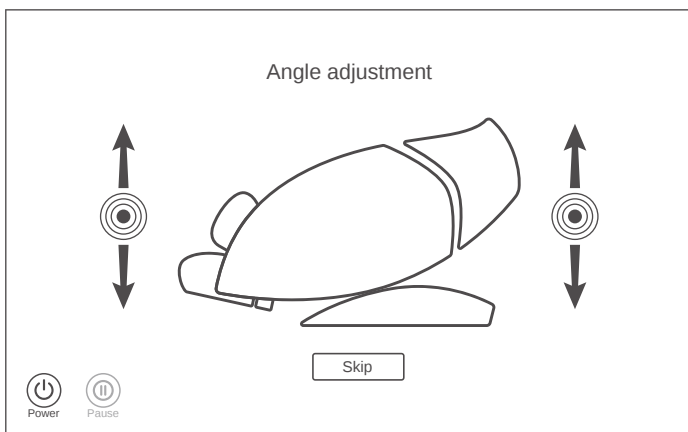



 How to Use

- (4) **Body Sensing Progress:** After the massage chair automatically reclining and adjusting, the system will automatically enter the "Body sensing" interface. The massage chair will automatically detect the user's body shape. After the detection is completed, the mechanism will be positioned at the shoulder. If no detection is needed, you can directly click the "Skip" key. The system will default the body shape and start the massage directly, and then enter the shoulder position adjustment interface.

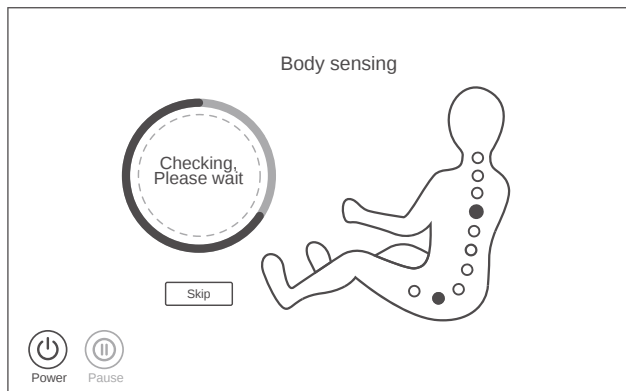


- (5) **Shoulder Position Adjustment:** After the system enters the "Shoulder Position Adjustment" interface, a voice broadcast will prompt you to manually make fine adjustments to the shoulder position. If the mechanism stops at your shoulder position, no adjustment is needed. You can directly click "OK" to start the massage. If the massage mechanism is not at your shoulder position, click the up "▲" key or the down "▼" key to adjust the mechanism to your shoulder position (there are 1 to 11 adjustable shoulder positions). After the adjustment is completed, click "OK" to start the massage.

Note: If no operation is performed within 10 seconds, the system will default the current mechanism position to your shoulder position and start the massage directly.

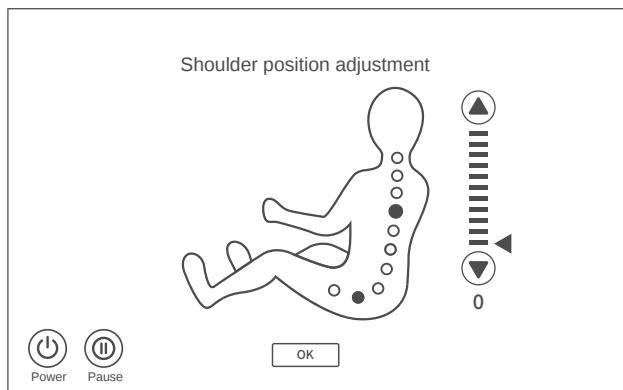


## How to Use

- (6) After the body shape detection or shoulder position detection is completed, you can enter the main interface and select the corresponding massage function according to your own needs.

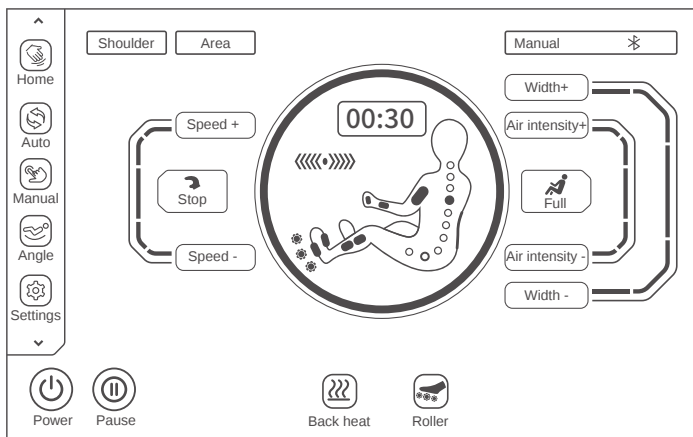


## How to Use

### (7.1) Remote controller keys instruction

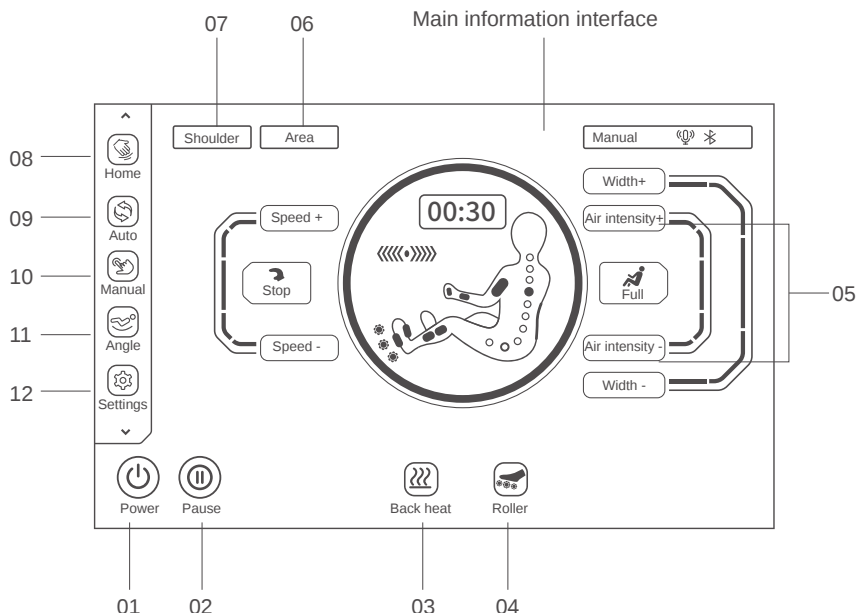

01. On/off key: Enable or disable the massage chair function
02. Pause key: Pause The massage or exit from pause massage
03. Back heat key: Turn the Back heat function on/of
04. Roller key: Enable or disable the sole roller function
05. Air pressure strength key: Adjust air pressure intensity massage function.
06. Massage areal key: Select the appropriate area for massage
07. Shoulder position adjustment key: Regulate shoulder position and confirm massage criterion.
08. Current status key: Enter to view current massage chair status
09. Auto function menu key: Enter the Auto massage function interface
10. Manual function menu key: Enter the Manual massage function interface
11. Angle function menu key: Enter the Angle adjustment interface to select sitting posture angle.
12. Setting menu key: Enter the setting menu interface

## How to Use

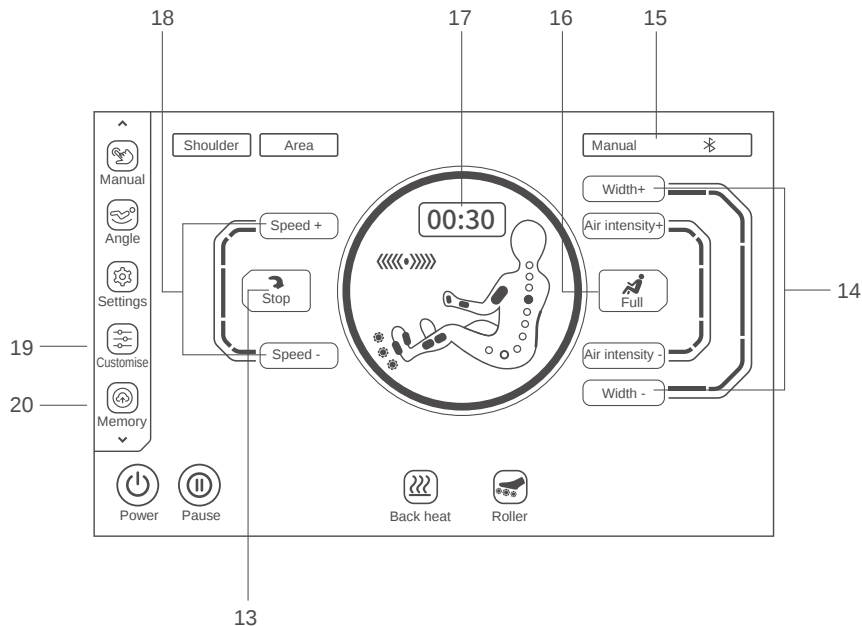

13. Massage technique selection key: Select the massage technique
14. Massage width key: Adjust the massage width.
15. Status display bar key: Display the massage program status information.
16. Air massage selection key: Select air position.
17. Time adjustment menu key: Adjust the massage time.
18. Massage speed key: Adjust the massage speed.
19. Customise keys: Enter the customise interface.
20. Memory key: Enter the memory interface

## How to Use

### IX. Automatic program (please use this function after the chair is turned on)

Click the "Auto" key on the left menu bar (as shown in the figure below) to enter the automatic function interface. Then, select the automatic massage function according to the massage needs in different scenarios.


1. There are 18 automatic functions to choose from, classified into four major massage scenarios.

1.1. AI Intelligent: Total Relax, Energy Boost, Superior Enjoyable, Neck & Shoulder Care, Thai Massage

1.2. Scenario application: Chinese Massage, Fatigue Recovery, Gentle Waves Rub, Meridian Treatment, Waist Care

1.3. Exclusive for Family: Leg & foot Relieve, President Cosy, Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge,

1.4. Overall Relaxation: Lunch Break, Warming and detox, Sweet Dream.

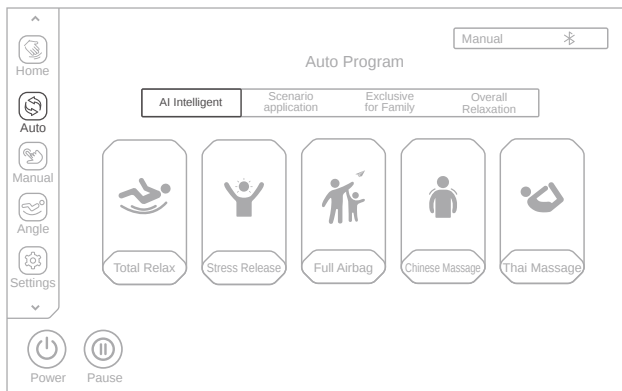


**Note:** For detailed description of each automatic function name, please refer to pages 18-20 of this manual.

Schematic diagram of automatic massage program selection

### X. Remote program (please use this function after the equipment is turned on)


Click the "Manual" button on the left menu bar (as shown below). After the system enters the manual mode interface, you can select the corresponding manual massage function according to your massage needs.

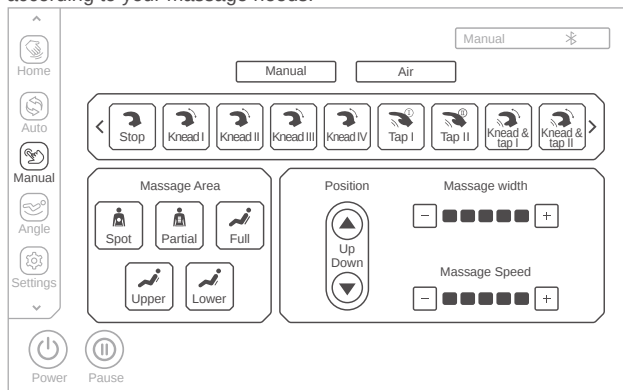

Manual mode - Manual massage schematic diagram


## How to Use

- (1) Manual mode: After entering the manual mode interface, as shown in the following figure, the manual massage function is mainly divided into 2 categories to choose from.
  - (1.1) Manual: Massage technique, Massage area, Mechanism up/down adjustment, Massage width, Massage speed
  - (1.2) Air massage: Full, Upper, Lower modes and air pressure intensity adjustment

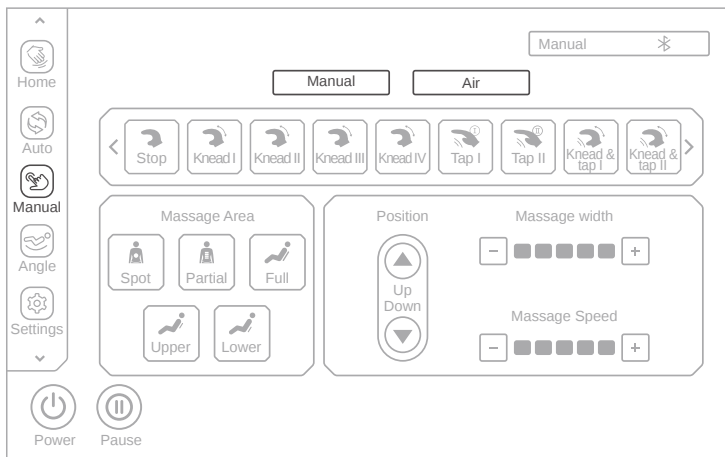

Manual mode - Schematic diagram of manual function selection

- (2) Manual: After entering the manual mode interface, As shown in the figure below, click the "Manual" button, and you can select the Manual massage function according to your needs, including Massage techniques, Massage area, Massage hand up and down adjustment, Massage width, Massage speed and other massage functions.

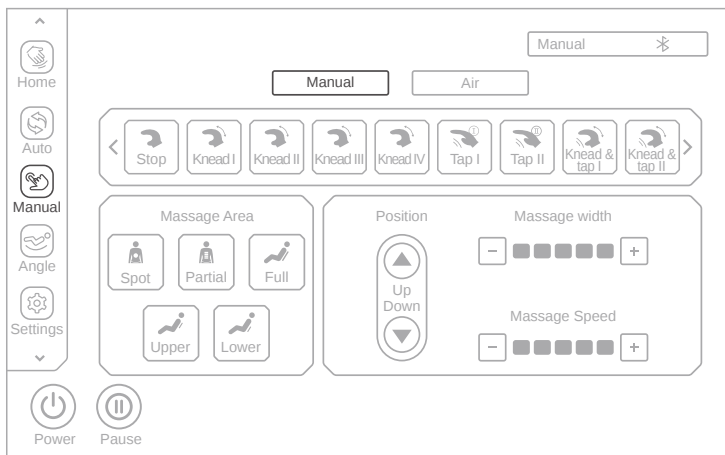


Manual mode - Manual selection diagram



## How to Use

- (2.1) Technique: After entering the Manual massage function menu, as shown in the figure below, click the Technique "icon" key to perform technique massage, including Stop, Knead (4 techniques, Knead I - Knead IV), Tap (2 techniques, Tap I - Tap II), Knead&Tap (4 techniques, Knead&Tap I - Knead&Tap IV), Shiatsu, etc., with a total of 18 techniques available. (Note: Click the "Left Arrow" and "Right Arrow" keys in the technique adjustment menu to scroll left and right to display more massage techniques).

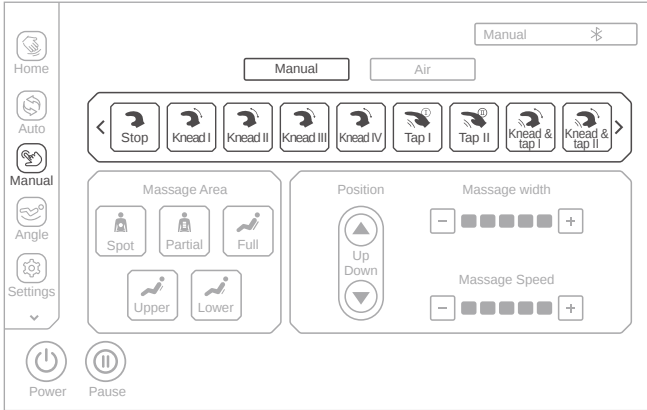

Manual mode - Manual Schematic diagram of technique selection

| Function      | Message roller adjustment |                                   |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Stop          |                           | The width can be adjusted.        |
| Knead I       |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead II      |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead III     |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead IV      |                           | The speed can be adjusted.        |
| Tap I         |                           | The speed, width can be adjusted. |
| Tap II        |                           | The speed, width can be adjusted. |
| Knead&Tap I   |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead&Tap II  |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead&Tap III |                           | The speed can be adjusted.        |
| Knead&Tap IV  |                           | The speed can be adjusted.        |
| Shiatsu       |                           | The speed can be adjusted.        |

5 speed levels  
adjustable


5 width levels  
adjustable



## How to Use


Note: During the massage program running, as shown in the figure below, click the "Home" key on the left side of the screen, enter the interface and click the Technique "icon" key, then select the corresponding technique icon (such as kneading, tapping, shiatsu, etc.) in the pop-up window to switch massage techniques.

- (1.1.1) Message shortcut method: This feature allows for quick switching between massage techniques in manual mode within the current state interface; please refer to the illustration provided.

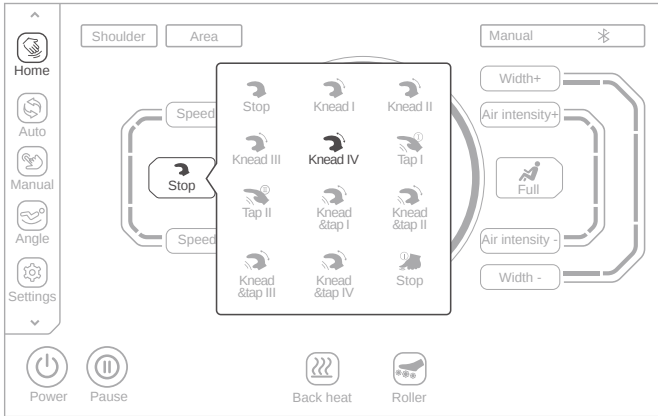

Home interface - Schematic diagram of Manual selection

- (2.2) Message Area: After entering the Manual massage function menu, as shown in the figure below, select the "Message Area" key to perform area massage. It includes 5 massage areas: Spot, Partial, Full, Upper, Lower. Select the corresponding massage area in the massage range menu for massage.

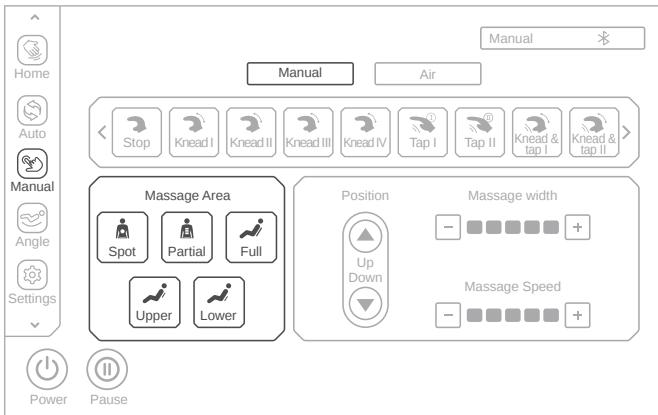


Manual mode - Schematic diagram of Manual massage area selection

## How to Use

| Key                                                                               | Description                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Fixed-point massage at fixed-point position. |
|  | Small-scope local massage back and forth.    |
|  | Full back massage back and forth.            |
|  | Upper back massage back and forth.           |
|  | Lower back massage back and forth.           |

Note: During the massage program running, as shown in the figure below, click the "Home" key on the left side of the screen, enter the interface and click the "Area" key, then select the corresponding massage area icon (such as fixed point, partial, full back, etc.) in the popup window to switch massage areas.


(2.2.1) Massage Area Shortcut: This function is a shortcut to switch massage areas in the current status interface in manual mode.

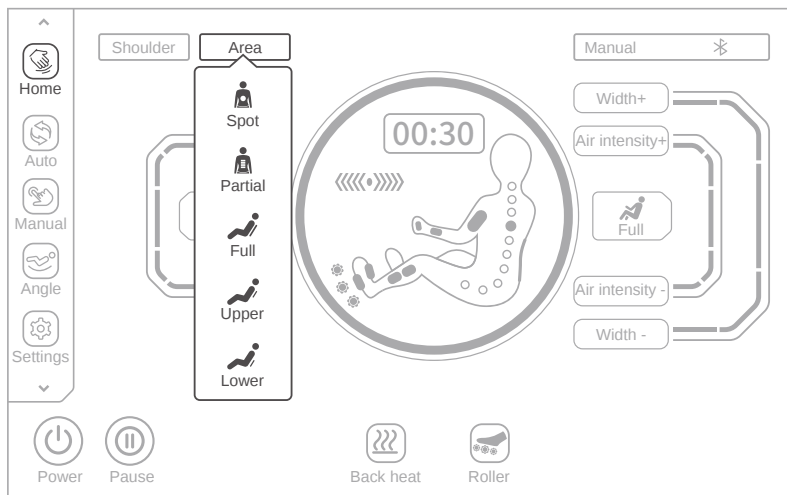

Home interface - Schematic diagram of massage area selection

## How to Use

(2.3) Message Hand Adjustment: After entering the Manual message function menu, as shown in the figure below, select the message hand "▲" or "▼" key to adjust the up and down position of the message hand. The message hand adjustment needs to be performed under the fixed point and partial message area in manual mode.

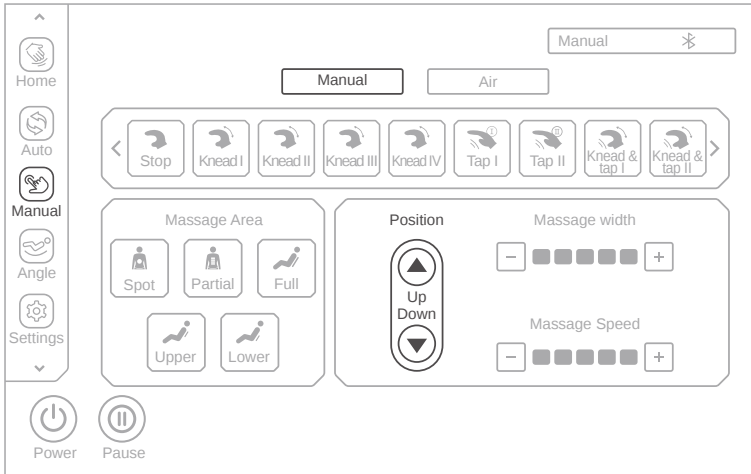


Manual mode - Schematic diagram of Manual position adjustment

| Key | Description                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲   | Hold the up key, the massage hand will move up, release it, the massage hand will be stop to moving up.       |
| ▼   | Hold the down key, the massage hand will move down, release it, the massage hand will be stop to moving down. |



## How to Use

- 2.4. Massage Width: After entering the Manual massage function menu, as shown in the figure below, select the massage width "+" or "-" key to adjust the massage width (Width is adjustable from levels 1 to 5, with level 1 being the narrowest, and level 5 being the widest). width adjustment can be used in the following massage techniques: Stop, Tap I, Tap II, shiatsu. Users must select a massage technique or massage area to enter manual mode before they can adjust the width.

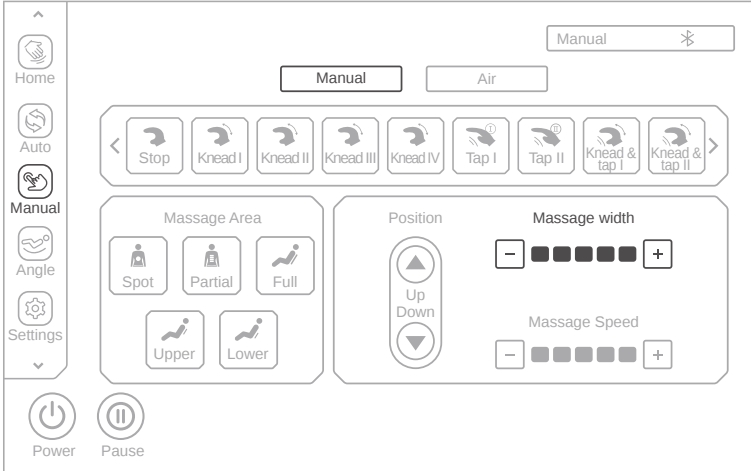

Manual mode - Schematic diagram of Manual massage width

| Manual mode - Schematic diagram of Manual massage width adjustment |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                    |         |         |         |         |
| Level 1                                                            | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |


| Key | Description                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | Press this key to increase massage width which is adjustable from 1 to 5. |
|     | Press this key to decrease massage width which is adjustable from 1 to 5. |



## How to Use

Note: During the operation of the massage program, as shown in the figure below, click the "Home" key on the left side of the screen, enter the interface, and then click the "Width+" or "Width-" key to adjust the massage width(Width is adjustable from levels 1 to 5, with level 1 being the narrowest, and level 5 being the widest)..

(2.4.1)Massage Width Shortcut: This function serves as a shortcut to switch Massage Width in the current status Width under manual mode.

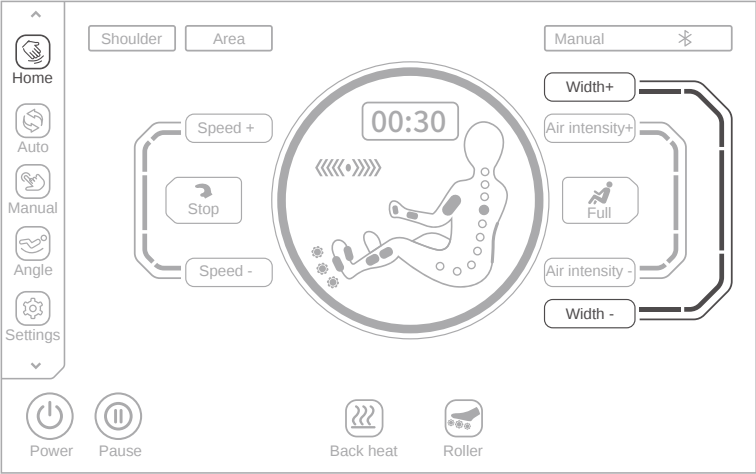

Home interface - Schematic diagram of Massage Width


| Home interface - Massage Width adjustment                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Level 1 | <br>Level 2 | <br>Level 3 | <br>Level 4 | <br>Level 5 |

| Key                                                                                 | Description                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Press this key to widen the massage width, the width can be adjusted from 1 to 5 levels.      |
|  | Press this key to narrow the massage width, and the width can be adjusted from 1 to 5 levels. |



## How to Use

- (2.5) Message Speed: After entering the Manual message function menu, as shown in the figure below, select the message speed "+" or "-" key to adjust the message speed (Speed is adjustable from levels 1 to 5, with level 1 being the slowest, and level 5 being the fastest). the speed cannot be adjusted when the massage technique is stopped. Users must select a massage technique or massage area to enter manual mode before they can adjust the speed.

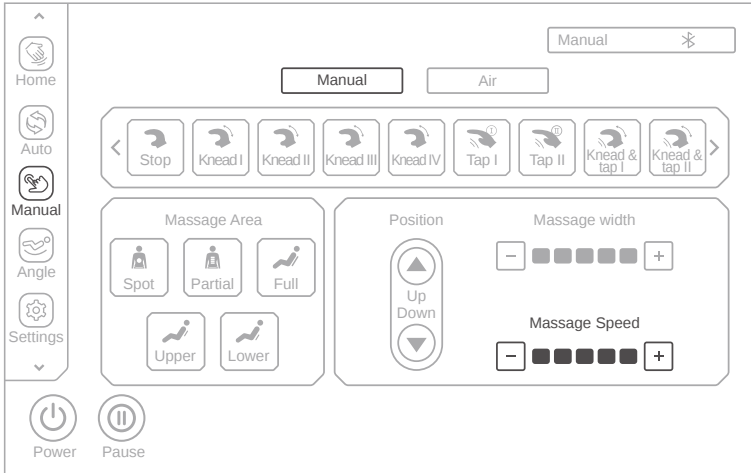

Manual mode - Schematic diagram of Manual message speed

| Manual mode - Schematic diagram of Manual message speed adjustment |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                    |         |         |         |         |
| Level 1                                                            | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |


| Key | Description                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | Press this key to increase message speed which is adjustable from 1 to 5. |
|     | Press this key to decrease message speed which is adjustable from 1 to 5. |



## How to Use

Note: During the operation of the massage program, as shown in the figure below, click the "Home" key on the left side of the screen, enter the interface, and then click the "Speed+" or "Speed-" key to adjust the massage speed (Speed is adjustable from levels 1 to 5, with level 1 being the slowest, and level 5 being the fastest).

(2.5.1) Massage Intensity Shortcut: This function serves as a shortcut to switch massage intensity in the current status interface under manual mode.

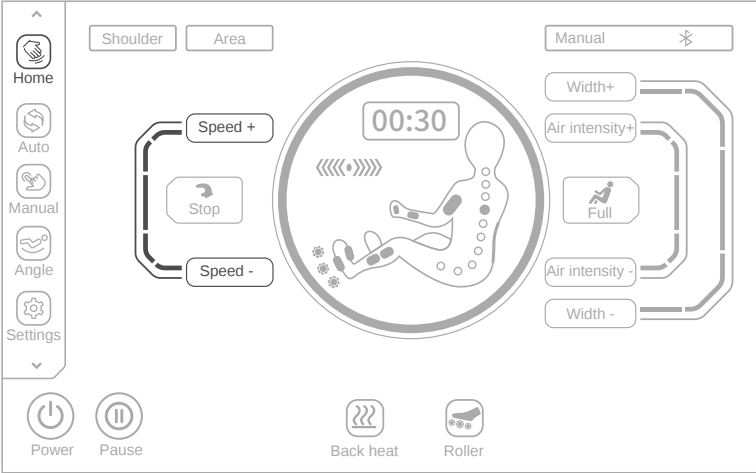

Home interface - Schematic diagram of Massage Speed


| Home interface - Massage Speed adjustment                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Level 1 | <br>Level 2 | <br>Level 3 | <br>Level 4 | <br>Level 5 |

| Key                                                                                 | Description                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Press this key to increase massage speed which is adjustable from 1 to 5. |
|  | Press this key to decrease massage speed which is adjustable from 1 to 5. |



## How to Use


- (3) Air massage: After entering the manual mode interface, As shown in the figure below, click the "Air" button, to select the corresponding air pressure massage function according to your massage needs. Including full body, upper body, lower body air pressure mode, and air pressure intensity adjustment.
- (3.1) Air pressure area selection: After entering the Air menu, you can select the "Full, Upper body, Lower body" buttons, according to your massage needs to turn on or off the air pressure massage function of the corresponding area. If you turn off all, all air pressure functions will be turned off.

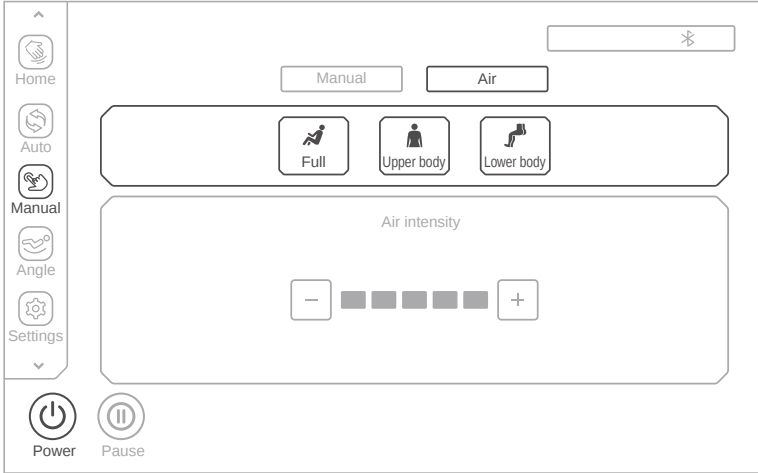


Manual program - Schematic diagram of air massage

| Key | Description                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | Press this key to enable or disable the whole body air massage function. |
|     | Press this key to enable or disable the upper body air massage function. |
|     | Press this key to enable or disable the lower body air massage function. |

## How to Use

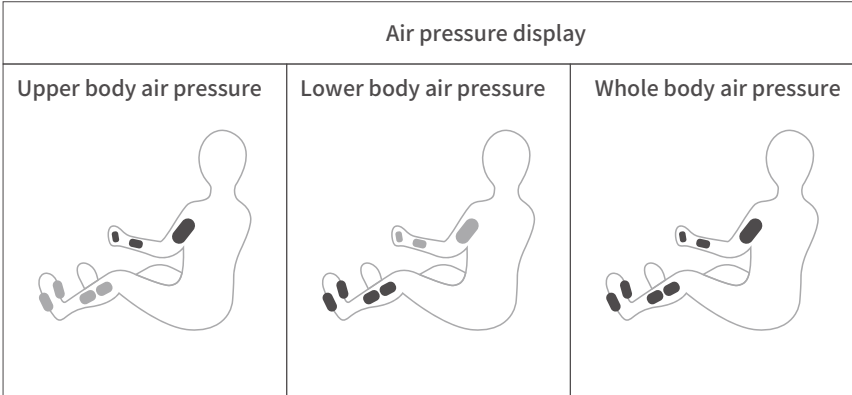

Note: When the massage program is running, click the "Home" button on the left side of the screen as shown in the figure below, click the air pressure "icon" button after entering the interface, and then select the corresponding air pressure massage icon (such as Full, Upper, Lower) in the pop-up window to switch to air pressure massage area.  
(2.1.2) Air pressure massage shortcut: The function here is a shortcut to switch to air pressure massage in the Home interface in manual mode.

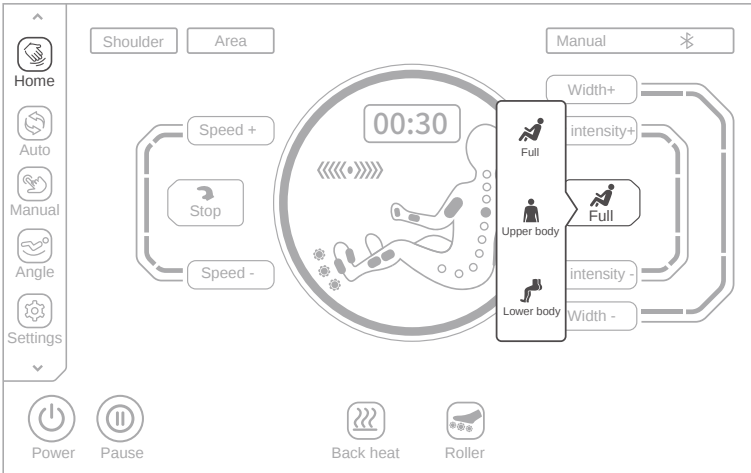

Home interface - Schematic diagram of air massage



## How to Use

(3.2)Air pressure intensity: After entering the air pressure massage function menu, turn on the air pressure massage function of the corresponding area as shown in the figure below. to massage needs, increasing or decreasing the air pressure intensity step by step.(Intensity is adjustable from levels 1 to 5, with level 1 being the weakest, and level 5 being the strongest.)



Manual mode - Schematic diagram of air massage

| Manual mode - Air intensity adjustment |         |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                        |         |         |         |         |
| Level 1                                | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |


| Key | Description                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | Press this key to increase the air intensity which is adjustable from 1 to -5. |
|     | Press this key to increase the air intensity which is adjustable from 1 to -5. |



## How to Use

Note: When the massage program is running, click the "Home" button on the left side of the screen as shown in the figure below, and then click the "Air intensity+" or "Air intensity-" button to adjust the air pressure intensity, to increase or decrease the air pressure intensity step by step. The intensity can be adjusted from 1 to 5 levels, level 1 represents the weakest intensity, and level 5 represents the strongest intensity.

(3.2.1) Air pressure intensity shortcut: You must first turn on the air pressure massage function for the corresponding massage area (such as full body, upper body, lower body) in the manual interface before you can use the above shortcut adjustment method.

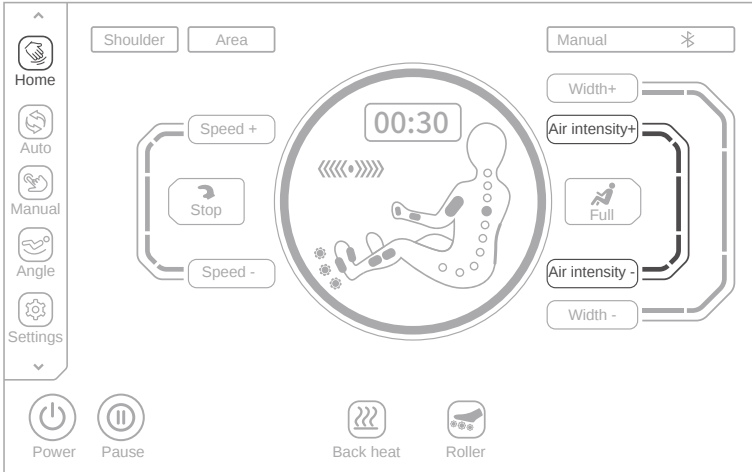

Home interface - Schematic diagram of Air intensity

| Home interface - Air intensity adjustment |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Level 1                                   | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |


| Key            | Description                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Air intensity+ | Press this key to increase the air intensity which is adjustable from 1 to -5. |
| Air intensity- | Press this key to decrease the air intensity which is adjustable from 1 to -5. |



## How to Use

### XI. Seat adjustment

Click the "Angle" key on the left menu bar (as shown in the figure below) to enter the Angle menu. According to the massage needs, select the sitting angle adjustment, including Foot shorten, Foot extend, Leg up, Leg down, Whole up, Whole down, Back up, Back down, Zero I, Zero II.

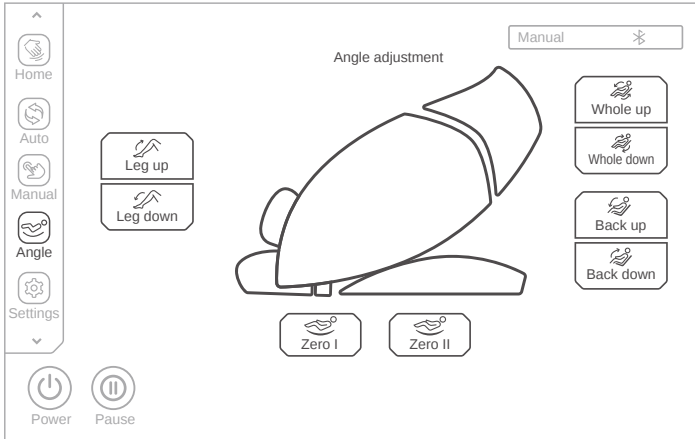

Schematic diagram of sitting posture adjustment

#### 1. Zero-gravity adjustment

| Key                                                                                           | Description                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Zero 1   | Zero-gravity I key: automatically adjust the position of leg unit and backrest unit to zero-gravity I position.   |
| <br>Zero 2 | Zero-gravity II key: automatically adjust the position of leg unit and backrest unit to zero-gravity II position. |

#### 2. Leg unit extension/shortening adjustment

| Key                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Leg up   | Leg unit Up key: press and hold this key to slowly raise the leg unit, and release it to stop rising; after the leg unit rising action is completed, the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position.       |
| <br>Leg down | Leg unit Down key: press and hold this key to slowly lower the leg unit, and release it to stop lowering; after the leg unit lowering action is completed, the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. |



## How to Use

### 3.Backrest unit angular adjustment

| Key                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Back up   | Backrest unit Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit and release it to stop rising. the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position.     |
| <br>Back down | Backrest unit Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit and release it to stop lowering. the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. |

### 4. Linkage lifting Angle adjustment

| Key                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Whole up   | Linkage Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit while slowly lowering the leg unit, and release it to stop raising the backrest unit or lowering the leg unit; after the linkage rising action is completed, the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. Linkage Rise action is completed, the leg unit will automatically detect the Calf length       |
| <br>Whole down | Linkage Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit while slowly raising the leg unit, and release it to stop lowering the backrest unit or raising the leg unit; after the linkage lowering action is completed, the adjustment will stop and a "drip" sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. Linkage Decline action is completed, the leg unit will automatically detect the Calf length |

## XII. Setting (please use this function after the equipment is turned on)


Click the "Settings" button in the menu bar on the left side of the remote control screen (as shown below), and the system will enter the settings interface. You can then select system settings functions according to your massage needs.

(1)The settings function is mainly divided into 3 categories

(1.1)Product information: Product model, ID code, Firmware version.


(1.2)System settings: Bluetooth, language selection and other system settings functions.

(1.3)Device connection: After the massage chair is connected to the Bluetooth APP and successfully paired, it can be operated through a mobile phone.

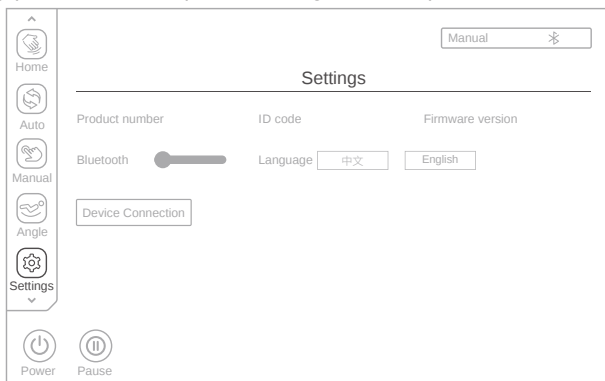


## How to Use

- (2) Device Information: After entering the settings interface, as shown in the image, you can view Product model, ID code, Firmware version show the information of current device.

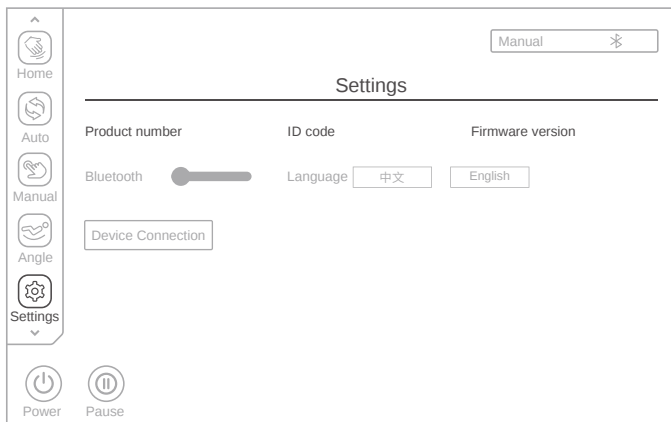


- (3) Bluetooth: After entering the settings interface, as shown in the figure below, Click "Bluetooth" switch button to enable or disable the Bluetooth feature. After you turn on the Bluetooth function, you can connect the audio device with Bluetooth to the massage chair. (such as mobile phone, MID tablet, etc.) with the Bluetooth module of the massage chair, the music played by the sound source device can be wirelessly transmitted to the sound system of the massage chair through Bluetooth for music playing.

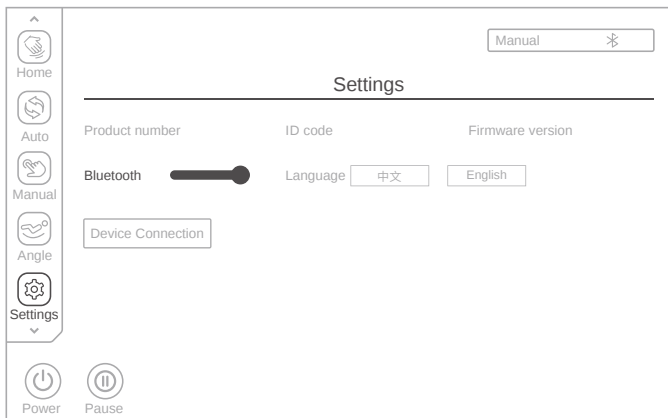


- (3.1) Enter the smart device main menu. Open "Settings" and select the "Bluetooth" option. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
- (3.2) The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. MAX-Z05A2801-\*\*\*\*). Click the "Match" button. If you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
- (3.3) Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

## How to Use

- (4) Language selection: After entering the settings interface, as shown in the figure below, choose different languages according to the user's needs. The default language is English, and Chinese can be selected.

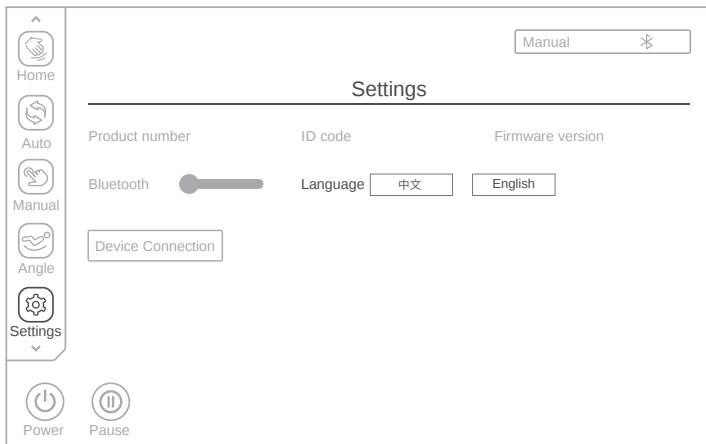


- (5) Device Connection: If you need to change the Bluetooth number or reconnect the device, enter the settings interface and click the "Device Connection" key as shown in the figure below. In the pop-up window, the system will automatically search for nearby Bluetooth device numbers, select the Bluetooth number corresponding to the massage chair from the list, and complete the APP matching. After pairing, you can control the massage chair through your phone.

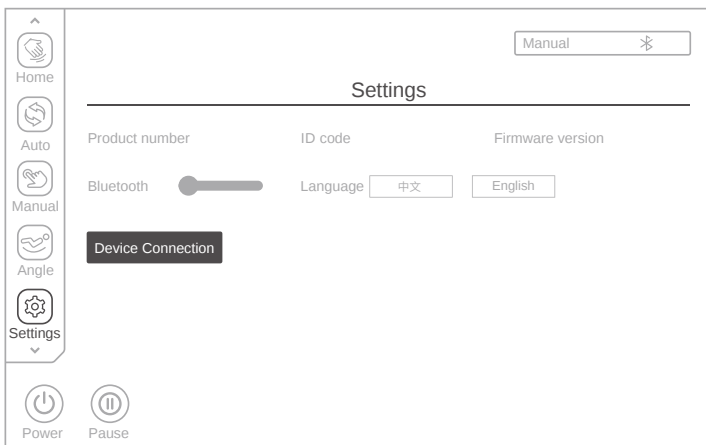

## How to Use


### XIII. Custom (please use this function after the equipment is turned on)

Swipe up on the left menu bar of the manual controller and select the "Custom" key (as shown in the figure below). After entering the Custom menu, interface and select either Custom I or Custom II (only if the corresponding custom has been previously set and saved) for massage.

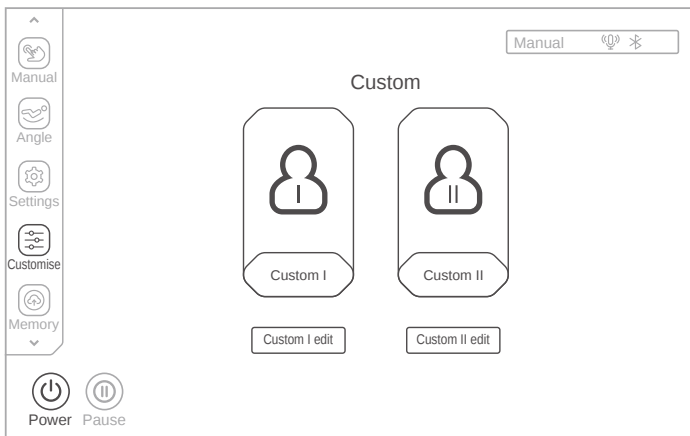

Schematic diagram of Custom

Click Custom I Setting or Custom II Setting to enter the Custom Setting interface, then select the preferred massage technique whose icon will be highlighted after selection, and select the massage interval, 4D intensity, air massage, massage width, massage speed, air intensity, back heating, calf kneading and other functions, then click Save to save the current settings as Custom I and Custom II. After the settings are saved successfully, the custom program will be immediately available and can be used for the next massage by clicking the saved custom program.

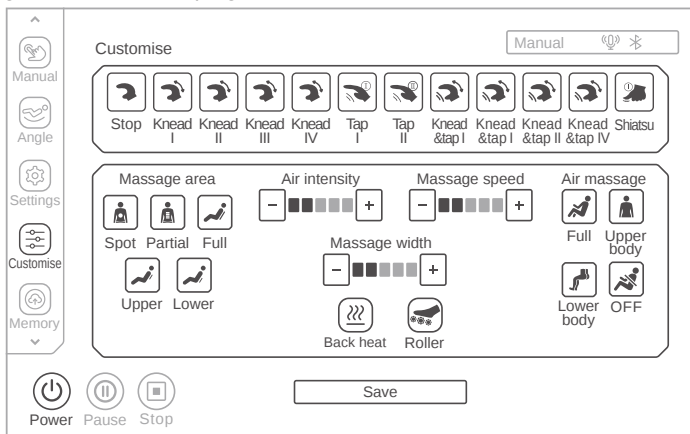


## How to Use


### XIV. Custom (please use this function after the equipment is turned on)

Swipe up the menu bar on the left side of the display screen, click the "Memory" button (as shown below). to enter the memory selection interface, where you can select the memory function according to your massage needs.

(1) The memory function is mainly divided into two categories: "Save" and "Use". Each category has three groups of mode selections.

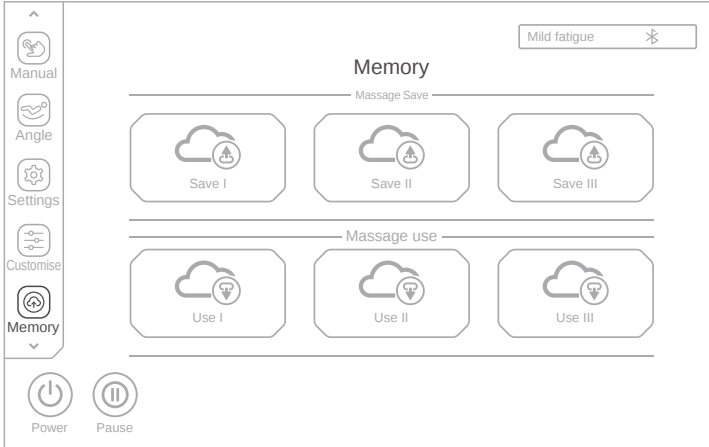


(2) Message Save: After entering the memory interface, click any of the "Save I, Save II, Save III" buttons as shown in the figure below to save all the massage programs in operation (up to three sets of massage programs can be stored); including automatic function, manual function, air pressure mode and intensity massage functions, as well as massage chair angle adjustment and other massage functions.

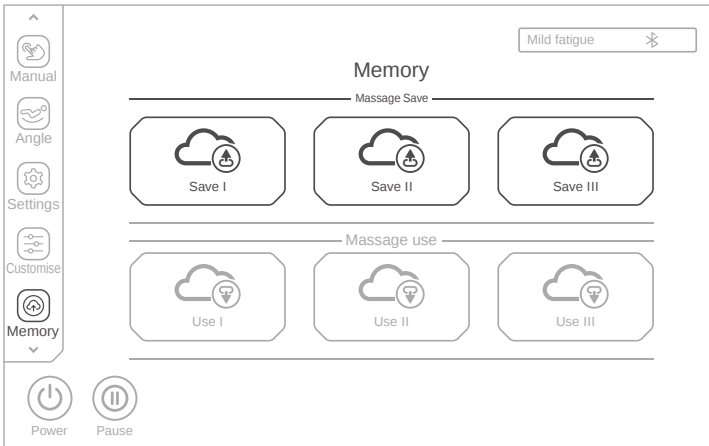


## How to Use

- (3) Message Use: After entering the storage interface, click any of the “Use I, Use II, Use III” buttons as shown in the figure below to use the stored program for message; including automatic function, manual function, air pressure mode and intensity massage functions, as well as massage chair angle adjustment and other massage functions.

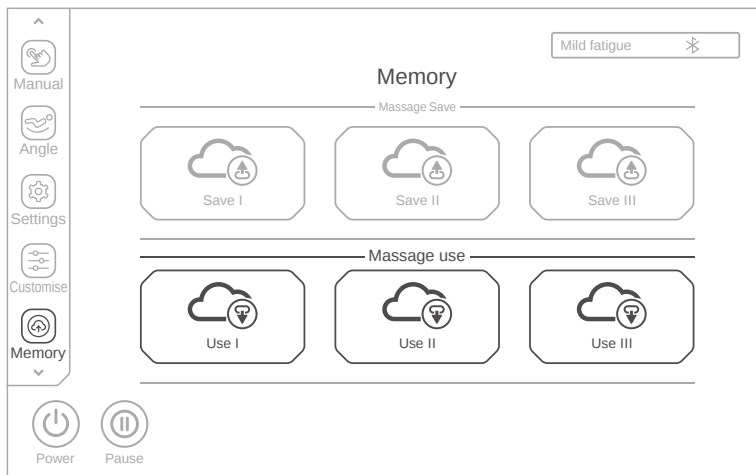


## XV. Other functions (please use this function after the chair is turned on)

On the "Home" interface of the display screen, as shown in the figure below, you can select the corresponding massage functions based on your needs. These functions include Pause, Back heat, Roller, Time adjustment, Shoulder position adjustment, Massage range selection, and display of massage status or techniques.

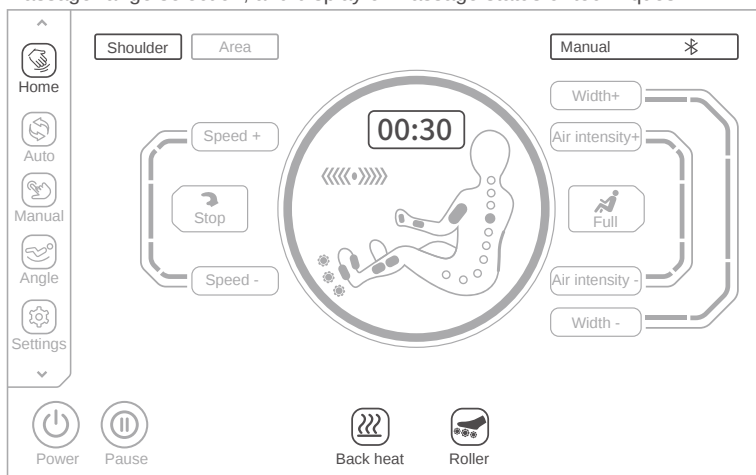


## How to Use

- (1) Press: After the massage chair is powered on and operating, press the “pause” key to enter the pause state, then all massage functions will be suspended, and press the “pause” key again to resume the previous massage state. Note: In the pause state, all functions do not work except shutdown.

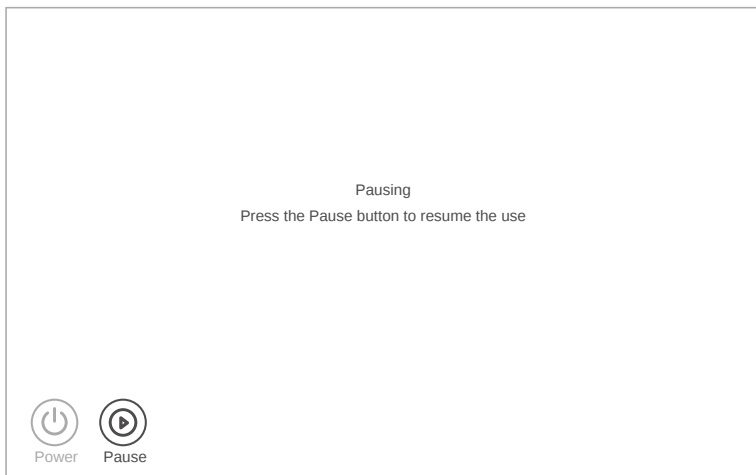


- (2) Back heat: On the "Home" interface, as shown in the figure below, select the "Back heat" key to turn the shawl heating function on or off. The heating function will generate warmth 3 minutes after being activated.

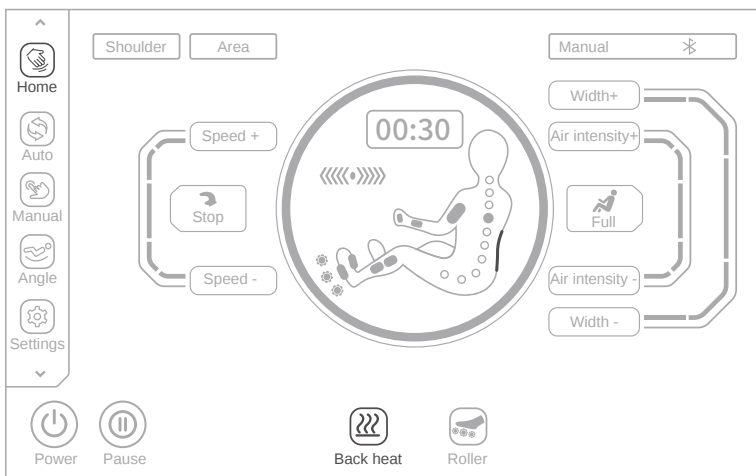




## How to Use

- (3) **Foot Rollers:** On the "Home" interface, as shown in the figure below, select the "Foot Rollers" key to turn the Foot Rollers function on or off. The roller speed can be adjusted from (level 1 to level 3). Each press of the foot roller key increases the speed by one level; pressing it a fourth time will turn off the foot roller function, and the options will cycle through accordingly.

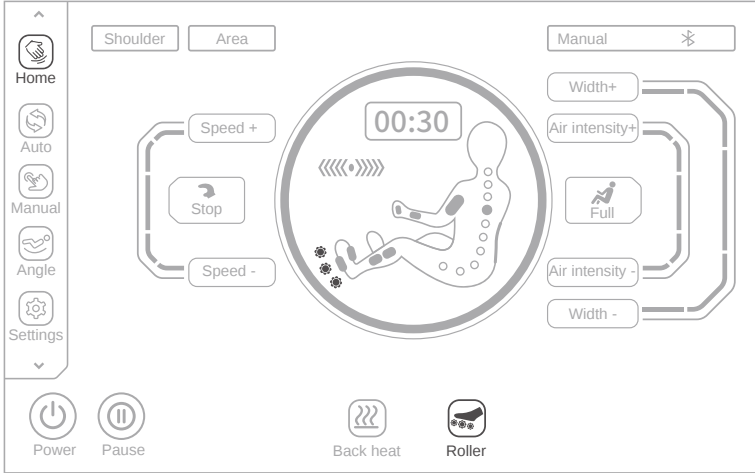


- (4) **Shoulder Position Adjustment:** On the "Home" interface, as shown in the figure below, select the "Shoulder" key, and press the up and down arrow buttons in the pop-up menu to adjust the shoulder position, with a total of 11 adjustable levels.

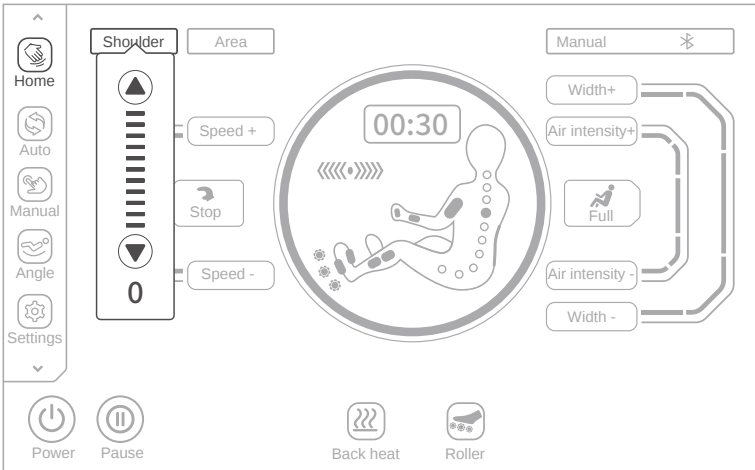

## How to Use

- (5) Message time adjustment: On the "Home" interface, as shown in the figure below, select the message time adjustment key "00:30", press the plus and minus arrow head button in the pop-up menu, you can increase or decrease the massage time. Click the key "+", the time increased by 5 minutes, the maximum increase to 40 minutes. Click the key "-", the time decreased by 5 minutes.

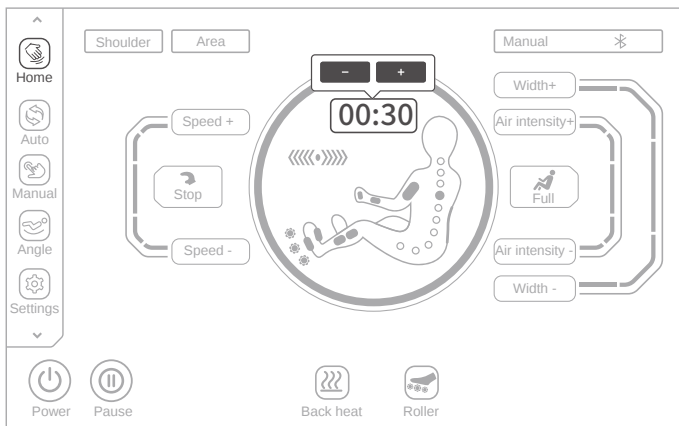


## How to Use


### XVI. End massage

During the massage:


- (1) Long press the power button on the armrest to turn off all massage functions and reset the massage chair angle.
- (2) Press the ON/OFF key on the Bluetooth APP interface, all massage functions stop, and the angle of the massage chair will be return to original position.
- (3) Press the PAUSE key on the Bluetooth APP interface then press the ON/OFF button, all massage functions are stop, and the angle of the massage chair will be return to original position.
- (4) When the timer ends, all massage functions will turn off, but the massage chair will not reset to its default angle.

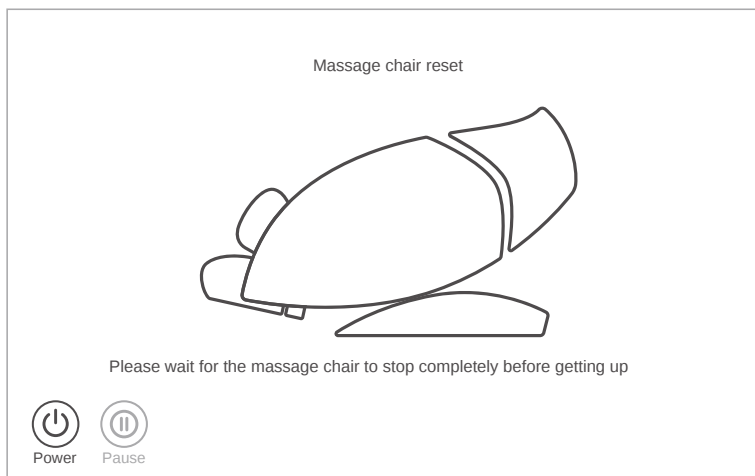


Cut off the whole machine power supply, as shown in the figure (Schematic diagram of power switch position of the whole machine).

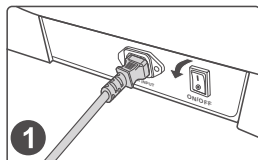

1 Turn off the power switch ("0" position)

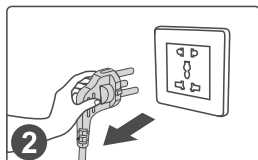

2 Schematic diagram of pulling out the power plug

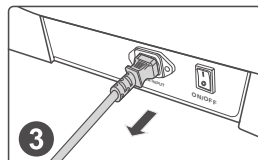

3 Remove the product connection power cord

 **Cleaning and Maintenance****Cleaning**

- Before cleaning, please make sure the switch has been turned off and the power plug has been disconnected from the socket.
- Use soft cloths to clean the surface of product and control panel.

**CAUTION**

- Do not pull the plug from the socket with wet hands.
- Please do not rinse the product. Avoid water/ liquids from getting into the product.
- Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the product, otherwise, the color of product will fade, and the internal parts may be corrupted or broken.
- Do not disassemble the product when it is humid. Simply let it dry.

**Maintenance**

- Make sure that the plug has been disconnected from the socket before maintenance.
- Keep the product clean and away from high-temperature/ humid areas, or any environment with volatile gases.
- If this product is to be left idle for long, properly cover it with a dust cover (self-purchase).

**CAUTION**

- Please keep the product away from direct sunlight, or high temperature, to avoid fading or product damage.

**Kindly reminding**

- If the product is used through the year, please check conditions as below:
  - \* Burnt smell.
  - \* Unstable power supply after contact with the power cord.
  - \* Power cord heating up.
  - \* Power cords damage.
  - \* Other abnormalities.

**CAUTION**

- If above mentioned happens, please stop using the product.
- Switch off the power supply, pull out the plug, and contact us.
- Do not disassemble the product by yourself.



## Maintenance and Cleaning of PU Leather

PU leather is made by the coating and drying of polyurethane. Compared with genuine leather, PU leather is more resistant to tear, heat and sunlight. Depending on its nature and chemical substances, however, it should be kept away from many dusty, high/low-temperature, humid environment, under direct sunlight or places with corrosive substance. Otherwise, the leather could tear, quickening aging and hydrolysis.



### Cleaning

1. Please do not use organic reagent or grease solution, especially strong solvent, e.g. alcohol, turpentine and thinner, to clean the surface of the PU leather. Otherwise it will corrode the surface.
2. Please do not use water or washing powder to clean the surface of the PU leather. Otherwise there will be cracks.
3. When cleaning the surface of the PU leather, choose a cleaning agent that has a pH value of between 5~7, no dentifrice, and is harmless to the environment.
4. For dirty PU surface, apply egg whites to the surface using a piece of soft cloth. Avoid using a brush for cleaning.



### Maintenance

1. Keep a good ventilation indoor, overly dry or humid environment can accelerate the aging of leather
2. Please keep the product away from direct sunlight or air vent, otherwise the leather will be hardened. Direct sunlight will also cause fading.
3. People are generally sweatier in summer. The holes on the surface of the leather will absorb sweat. While heat and high humidity prompt the chemical reaction between certain substances in sweat and the leather, and hence, causes smell. Please clean the surface more often with a piece of lightly wet cloth.
4. Please do not use alkaline cleaning agents on the leather. It will adversely affect the elasticity of the leather and lead to cracks as a result.

## ? FAQs and Solutions

The following symptoms do not indicate malfunction. Please check the below phenomenon to find out the solution before contact customer services department. If the problem still cannot be solved, please do not dismantle or repair the product. You should stop using it and contact us immediately.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fault</b>    | When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Solution</b> | Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fault</b>    | The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Solution</b> | After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.                         |
| <b>Fault</b>    | The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Solution</b> | This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance. |
| <b>Fault</b>    | The massage wheel did not reach the shoulders or neck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Solution</b> | If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.                                                                                                                         |
| <b>Fault</b>    | The unit is damaged.<br>The power cord or power plug is abnormally hot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Solution</b> | To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Product Specifications

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product Name                   | : Flexi Chair                                             |
| Product Model                  | : MAX-Z05A2801                                            |
| Rated Voltage                  | : 220V~ 50Hz                                              |
| Rated Power                    | : 100W                                                    |
| Rated Time                     | : 20minutes                                               |
| Noise                          | : ≤60dB                                                   |
| Product Gross Weight           | : 86.5kg                                                  |
| Product Net Weight             | : 73.5kg                                                  |
| Product Size (Erected)         | : L1405 x W755 x H1195mm                                  |
| Product Size (Stretched out)   | : L1665 x W755 x H945mm                                   |
| Back Max. Loading Capacity     | : 95KG                                                    |
| Leg rest Max. Loading Capacity | : 25KG                                                    |
| Safety structure               | : Class I                                                 |
| Compliance                     | : GB 44246-2024 ; GB/T 4706.1-2024 ;<br>GB/T 4706.10-2024 |



商標持有：美斯凱實業有限公司  
Trademark holder: Maxcare Industrial Limited

客戶服務熱線 Customer Service Hotline :  
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383  
中國 China - (86) 400 882-1883

[www.maxcareonlineshop.com](http://www.maxcareonlineshop.com)